


Manual de usuario

LS-78D2MAXSB

Instrumento de SPA para el hogar

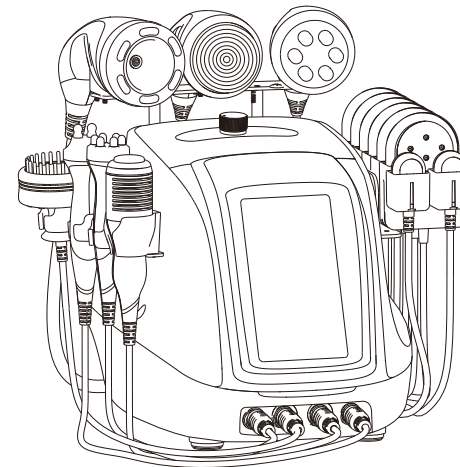

Gracias por comprar nuestro producto.

- lea atentamente este Manual de usuario para obtener información sobre cómo utilizar el dispositivo de forma correcta y segura.
- después de leer el contenido, asegúrese de mantener este Manual de usuario en un lugar accesible.
- asegúrese de incluir este Manual de usuario si va a transferir la propiedad del dispositivo a otra persona.

Índice de contenidos

Precauciones de seguridad	1
Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener precaución al utilizar este instrumento	2
Introducción	2
Interfaz de trabajo	3
Parámetros técnicos	6
Precauciones de uso	7
Limpieza y mantenimiento de máquinas	8
FAQs	8
Problemas y soluciones	12
Orientaciones operativas	14
Garantía y asistencia posventa	17

Precauciones de seguridad

- 1.Por favor, lea atentamente este manual antes de su uso para familiarizarse con el uso de este instrumento y la tecnología relacionada.
- 2.El instrumento de belleza es un instrumento electrónico de alta precisión, por lo que debe almacenarse adecuadamente. No lo guarde en un lugar húmedo, expuesto a la luz solar directa o cerca de materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
- 3.Utilice siempre los accesorios designados proporcionados o recomendados por el fabricante original para garantizar el rendimiento del instrumento dentro de su vida útil normal.
- 4.No coloque el instrumento cerca de fuentes de calor intenso, ya que esto puede afectar a su vida útil y rendimiento.
- 5.Evite utilizar el aparato en los ojos, la tiroides, la paratiroides, los testículos, el abdomen de las mujeres embarazadas y los marcapasos.
- 6.El aparato no debe ser utilizado por pacientes sin la autorización de un médico.
- 7.Durante la operación, la parte operativa debe permanecer húmeda, y evitar la operación sobre la piel seca.
- 8.Por favor, apague el instrumento cuando no esté en uso, y asegúrese de apagar la alimentación general del instrumento antes de salir después del uso diario para garantizar la seguridad del instrumento.
- 9.Si está tomando otros medicamentos para adelgazar, se recomienda dejar de tomar el medicamento durante 1-2 meses antes de utilizar el instrumento, de lo contrario el curso del tratamiento debe ser extendido.
- 10.Limpie el instrumento con una toallita húmeda después de la operación para garantizar la limpieza y la higiene, y prolongar su vida útil.

Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener precaución al utilizar este instrumento

Please consult a doctor or a professional before using the instrument. The details are as follows:


1. Those who are pregnant or lactating.
2. Those with heart disease or who are equipped with pacemakers.
3. Those whose wounds have not healed and who are recovering from the operation.
4. Those with epilepsy, severe diabetes and hyperthyroidism.
5. Those with a malignant tumor, hemophilia, or severe bleeding.
6. Those with skin diseases and infectious diseases.
7. Use with caution for those who are allergic to electric currents.
8. Those who have a cesarean section within half a year or those who have an abortion within 3 months or natural delivery within 2 months can not use this machine.
9. Do not use around body implants, such as metal, plastic, silicon and so on.

Introducción

Esta máquina de belleza 9 en 1 cuenta con la tecnología de moldeado corporal más popular y segura para ayudarle a completar la transformación de su cuerpo. Resuelve los problemas de la piel y del cuerpo para los amantes de la belleza. Este equipo no requiere inyecciones, medicamentos ni operaciones, por lo que no tiene efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato.

Interfaz de trabajo



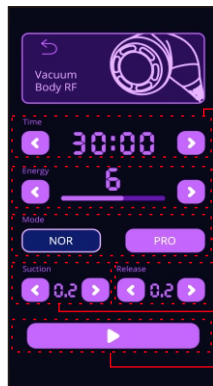

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)

Ajuste de energía
(1-9 niveles)


Ajuste del modo
NOR: La luz infrarroja está siempre
encendida

PRO: La luz infrarroja se enciende
cuando toca la piel

Ajuste del tiempo de liberación

Ajuste del tiempo de aspiración

Inicio/Pausa

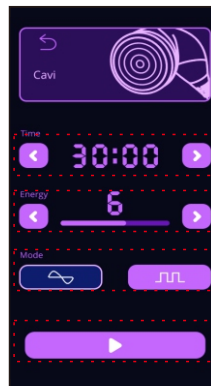

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)


Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo

Continuous: Trabajo continuo

Intermittent: Funcionamiento intermitente

Inicio/Pausa

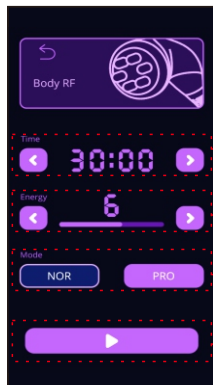


Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)

Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo
NOR: La luz infrarroja está siempre
encendida

PRO: La luz infrarroja se enciende
cuando toca la piel

Inicio/Pausa

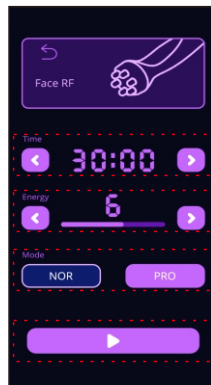

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)


Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo

NOR: La luz infrarroja está siempre
encendida

PRO: La luz infrarroja se enciende
cuando toca la piel

Inicio/Pausa

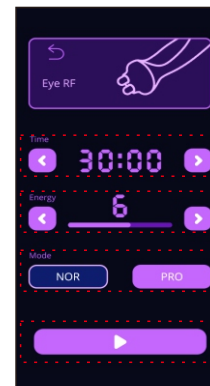

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)


Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo

NOR: La luz infrarroja está
siempre encendida

PRO: La luz infrarroja se
enciende cuando toca la piel

Inicio/Pausa

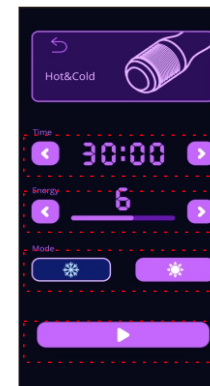

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)


Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo

Cold: Frio

Hot: Caliente

Inicio/Pausa

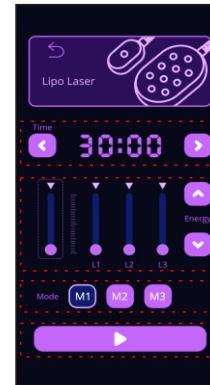

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)

Ajuste de energía
(1-9 niveles)


Ajuste del modo

M1: Funcionamiento continuo

M2: Parpadeo a frecuencia media

M3: Parpadeo a frecuencia rápida

Inicio/Pausa

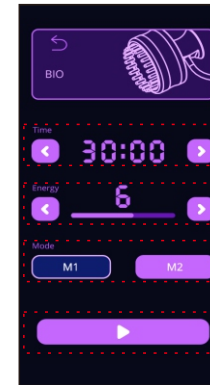

Ajuste de tiempo
(0-60 minutos)

Ajuste de energía
(1-9 niveles)

Ajuste del modo

M1: Frecuencia media

M2: Frecuencia rápida

Inicio/Pausa

Parámetros técnicos

	Alimentación Entrada: AC110V-240V		Peso neto: 7.7kg		
	Poder: 78W	Peso bruto: 8.5kg			
	Dimensión: 16.3" x 15" x 14.7"				
	Potencia de entrada: 78W				
	Frecuencia: 40KHZ		Frecuencia: 1MHZ	Flujo de aire: 10LPM	
	Poder: 30W		Poder: 78W	Nivel de ruido: < 60 dB (a 30 cm)	
			Vacío: -55cmHg		
	Frecuencia: 1MHZ		Frecuencia: 1MHZ		Frecuencia: 1MHZ
	Poder: 68W		Poder: 57W		Poder: 32W
	Poder: 20W		Longitud de onda: 635nm ~ 650nm		
	Frío: 32~39.2°F		Poder: 5mw		
	Caliente: 113°F				
	Frecuencia: 62.5Hz		Poder: 20W		
	Colores: Rojo, azul, verde, morado, naranja, turquesa, blanco				

Precauciones de uso ⚠

- 1.Utilice una clavija de toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente del aparato está correctamente conectada antes de cada operación.
- 2.Asegúrese de que el voltaje del aparato es el adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos que el usuario añada un regulador de voltaje con la potencia adecuada entre la red eléctrica y el instrumento.
- 3.Antes del tratamiento, retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar situaciones inesperadas e influir en el efecto curativo.
- 4.Utilice el aparato o entrene a los operadores del mismo siguiendo estrictamente las instrucciones del manual del usuario.Cuando se toman otros medicamentos para adelgazar, se recomienda dejar de tomarlos durante 1 o 2 meses antes del tratamiento. Se recomienda prolongar el tratamiento si desea perder peso inmediatamente.
- 5.No utilice el aparato con el estómago vacío. Después de una comida completa, espere al menos 1 hora antes de iniciar un tratamiento de pérdida de peso.
- 6.Al utilizarlo, el aparato debe tocar completamente la piel para evitar un calor desigual.
7. Empiece por el nivel de energía más bajo y aumentelo lentamente.
- 8.El mango de 40K no debe utilizarse en la cabeza, el pecho, el corazón y la espalda.
- 9.Si la succión se ajusta a un nivel demasiado alto accidentalmente durante el tratamiento, debe detener el tratamiento inmediatamente y restablecer el nivel de energía.
- 10.Es importante instalar algodón filtrante cuando se utiliza un mango de presión negativa, de lo contrario la materia extraña inhalada puede bloquear el mango.

Limpieza y mantenimiento de máquinas

1. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico cuando no utilice la máquina y guárdela en un lugar seco, fresco y ventilado.
2. Elimina el gel y las impurezas de la superficie del mango, límpialo con una toalla húmeda o con alcohol al 75% para limpiarlo y desinfectarlo, después utiliza una toalla seca para absorber el exceso de agua y mantener el mango seco.
3. La toalla húmeda debe evitar tocar la salida de aire del martillo en frío y caliente para no dañar el mango.
4. Cuando limpie el mango de vacío y radiofrecuencia, retire el filtro de algodón para evitar la proliferación de bacterias.
5. Después de limpiar la máquina, cúbrala con un paño para el polvo o una envoltura de plástico y, antes del siguiente uso, esterilice de nuevo el mango.
6. La eliminación de polvo en el interior de la máquina debe ser operado por profesionales, y está prohibido desmontar la máquina para la limpieza sin permiso.

FAQs

1. En cuánto tiempo puedo empezar a ver los resultados del tratamiento de radiofrecuencia?
R: Normalmente, podrá ver los resultados del tratamiento ese mismo día de la intervención o en el plazo de una semana. El tejido de colágeno de la piel se calienta y luego se contrae, y obviamente se nota la sensación de que la piel se tensa. Dado que la radiofrecuencia actúa estimulando el tejido subcutáneo para promover la regeneración del colágeno, cuanto más se realice el tratamiento, más notables serán los efectos.

2. La RF es perjudicial para la piel?
R: No, el tratamiento de RF es una operación no quirúrgica. Estimula la regeneración de colágeno en el fondo de la piel y potencia el metabolismo, por lo que no daña la piel. El enrojecimiento local y el calor son las condiciones normales de la circulación sanguínea acelerada, que se aliviará después de un momento. Así que no hay necesidad de preocuparse por eso.

3. Cuánto dura el tratamiento reafirmante corporal?
R: Una sesión de tratamiento dura 60 minutos. Combinando tecnología e instrumentación profesional, se pueden lograr resultados notables.

4. Qué funciones tiene este instrumento?
R: Tiene las funciones de disolver la grasa y moldear el cuerpo, reafirmar y levantar la piel y antienvjecimiento. Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo. En términos de cuidado facial, puede formar el contorno de la cara, aliviar las arrugas y la piel flácida. En términos de cuidado del cuerpo, puede reducir la grasa regional y construir una curva en forma de S, y promover el metabolismo y la desintoxicación de todo el cuerpo. Mientras tanto, también puede mejorar las funciones de las vísceras y resolver problemas de sub-salud.

5. Cuál es mejor en términos de pérdida de peso, la liposucción o esta máquina?
R: El principio de la liposucción es aspirar el exceso de grasa de una parte del cuerpo mediante succión a presión negativa para conseguir el propósito de perder peso rápidamente. Es un tratamiento quirúrgico que requiere anestesia y por lo tanto existe el período de recuperación, que tiene riesgos a pesar de sus resultados inmediatos. Sin embargo, nuestro instrumento no tiene riesgos ni efectos secundarios. No sólo puede ayudarle a reducir la grasa, sino también a estimular la regeneración del colágeno para levantar y tensar la piel. También puede construir curvas perfectas levantando la piel y acentuando el encanto sexual de la mujer.

6. Recuperaré peso después de la operación?
R: No, el ultrasonido trabaja para disolver la grasa para reducir el peso, y los usuarios no son propensos a recuperar su peso. Porque lo que se disuelve mediante el tratamiento ultrasónico es grasa, no agua. La grasa necesita un período de tiempo más largo para acumularse, por lo que normalmente la gente no recuperará el peso.

7. Necesito estar a dieta?
R: No es necesario que esté a dieta, pero sí que preste atención a lo que come. Porque la radiofrecuencia y el tratamiento ultrasónico trabajan para disolver la grasa y acelerar el metabolismo. Es mejor evitar comer alimentos picantes, aceitosos o fritos por si afectan al metabolismo regular. Un entrenamiento adecuado para sudar ayuda en el proceso de metabolización de la grasa. De esta manera, los resultados serán más notables.

8.Tiene el tratamiento de RF efectos secundarios en el cuerpo?

R: No, el tratamiento de belleza con RF no es invasivo y es uno de los métodos más eficaces y seguros para eliminar las arrugas y moldear el cuerpo. En general, no aparecen efectos secundarios. Un pequeño número de personas puede experimentar enrojecimiento o hinchazón transitorios que desaparecerán al cabo de unas horas. Las personas con piel seca pueden experimentar atrofia tras el tratamiento, que desaparecerá al cabo de tres días porque la regeneración de colágeno hará que la piel se rellene, aunque el calor de la RF puede causar pérdida de humedad en la piel. En general, no hay efectos secundarios para la salud de las personas.loss in the skin. Overall, there are no side effects on people's health.

9.Se puede realizar el tratamiento con ultrasonidos en todas las partes del cuerpo?

R: No, el tratamiento con ultrasonidos actúa rompiendo las células grasas, por lo que la grasa se libera de las células y luego se metaboliza a través del sistema linfático. Por lo tanto, su potencia es muy elevada. El corazón es sensible a las ondas sonoras de alta frecuencia, ya que es un órgano hueco. Tras ser vibrado por las ondas sonoras, el corazón reflejará las ondas debido a la diferente transmisión de las ondas sonoras por el tejido muscular y la sangre en el corazón. Esta fuerza puede separar las válvulas del músculo cardíaco. Si utiliza el instrumento en los ojos, puede provocar un desprendimiento de retina, por lo que el tratamiento con ultrasonidos no debe realizarse en las zonas de los ojos y el corazón. (no en las zonas de la cintura, espalda y pecho).

10.El tratamiento con ultrasonidos tiene efectos secundarios en el cuerpo humano?

R: No, el tratamiento de belleza ultrasónico es un programa no quirúrgico y no invasivo sin anestesia. Se basa en el ultrasonido (onda de sonido mecánico) - para disolver la grasa a través de la cavitación - ultrasonido enfoque. Y los resultados son aplastar la grasa - disolver la grasa - reafirmar la piel y esculpir el cuerpo respectivamente. Sólo actúa sobre las células grasas de baja densidad, pero deja intactos los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos, por lo que no tiene efectos secundarios en el cuerpo humano. Es probable que se produzcan ligeros acúfenos durante el tratamiento, lo cual entra dentro de lo normal. Así que no hay que preocuparse por eso.

11.Por qué se produce el tinnitus?

R: Es porque el ultrasonido viene con una vibración de alta frecuencia, que podría ir hasta 20kHz. Penetra en capas de grasa de la piel de 20 mm de profundidad a través de la focalización de ultrasonidos. Los ultrasonidos de alta intensidad pueden provocar una fricción de alta velocidad entre las células grasas, lo que puede calentarlas y disolverlas. Y durante el proceso, se puede producir sonido, por lo que el cliente tendrá la sensación de tinnitus.

12.Qué es el colágeno?

R: El colágeno es un tipo de sustancia biológica macromolecular, una especie de proteína fibrosa blanca, opaca y no ramificada. Puede complementar los nutrientes que necesitan todas las capas de la piel, mejorar la actividad del colágeno en la piel, retener la humedad, nutrir la piel, retrasar el envejecimiento, aliviar la relajación facial, proporcionar nutrientes para el cabello, etc. El colágeno es un nutriente que el cuerpo humano debe reponer para retrasar el envejecimiento. Con el crecimiento de la edad, el colágeno se perderá gradualmente. En el caso de las mujeres, el colágeno comenzará a disminuir a los 20 años. A los 25 años, la pérdida de colágeno alcanzará su punto máximo. A los 40 años, el contenido de colágeno es menos de la mitad del que se tenía a los 18 años. Es la pérdida de colágeno y agua lo que causa las arrugas en el rostro de las personas mayores. La rotura de las fibras de colágeno y de las fibras elásticas hará que el tejido cutáneo se oxide, se atrofie y se colapse. La piel estará seca, arrugada, flácida y poco elástica. Por lo tanto, para retrasar el envejecimiento, debe haber mucho colágeno.

13.Cómo funciona la terapia de vacío?

R: El vacío puede causar congestión capilar, y estimular las células para aumentar la vitalidad. La succión y la liberación de presión durante la operación pueden hacer que los poros locales continúen abriéndose y cerrándose, lo que puede promover la respiración de la piel, aumentar la cantidad de oxígeno de la piel y acelerar la eliminación de residuos. Por lo tanto, consigue los efectos de promover la circulación del qi y la sangre, disipar el frío y la humedad, drenar los meridianos y colaterales, eliminar toxinas, disipar el calor, etc.

14.Habrà un rebote a través de la disolución de grasa con láser?

R: Normalmente no. El número de células adiposas en el cuerpo es fijo, que no verá un cambio en la edad adulta. El aumento de peso se debe al aumento del volumen de células adiposas. El tratamiento de disolución de grasa con láser destruirá la estructura de grasa localizada y, a continuación, reducirá el volumen de grasa. Hay que admitir que el hecho poco frecuente de volver a engordar no significa que no se vuelva a ver. En general, mientras la dieta sea razonable y se eviten los atracones, no se experimentará un aumento de peso.

Problemas y soluciones


Problema	Causa Motivo	Solución
1.No se puede arrancar la máquina?	→ La conexión del cable de alimentación es inestable	→ Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente con una fuente de alimentación normal.
	→ Fusible suelto o quemado	→ Cambie el fusible de la parte posterior del aparato y vuelva a ponerlo en marcha.
2.La máquina deja de funcionar y no se puede reiniciar	→ Inestabilidad de la tensión o funcionamiento prolongado por fusible fundido	→ Sustituya el fusible, espere 5 minutos y reinicie la máquina.
3.La máquina puede encenderse, pero la pantalla muestra un mensaje erróneo	→ Error de carga de datos	→ 1. Por favor, apague esta máquina, desenchufe el cable de alimentación, espere un minuto para conectar la fuente de alimentación y reinicie la máquina2. Si el método anterior no puede resolver el problema, por favor póngase en contacto con el distribuidor de instrumentos para reemplazar la máquina

Problema	Causa Motivo	Solución
4.No hay salida de RF de la máquina	→ El asa está mal conectada	→ Compruebe si el enchufe que conecta el asa y el cuerpo de la máquina está bien conectado.
	→ La zona de tratamiento no está limpia (la grasa o los productos de aceites esenciales pueden hacer que el mango entre mal en contacto con el cuerpo humano)	→ Limpie la zona de tratamiento y aplique gel.
	→ El mango de radiofrecuencia no está bien conectado al cuerpo	→ Asegúrese de que todos los polos del mango de radiofrecuencia están en contacto con la piel durante el uso.
5.La máquina no tiene succión o tiene una succión débil	→ El filtro no está instalado correctamente o los accesorios de envejecimiento	→ 1. Compruebe si el filtro se ha instalado correctamente. Compruebe también si el anillo de goma del filtro está instalado correctamente o si está envejecido. 2. Compruebe si el botón de control de aspiración situado en el lateral de la máquina está en el nivel más alto.
	→ El mango bloqueado	→ Póngase en contacto con el distribuidor del instrumento para sustituir el asa.


Problema	Causa Motivo	Solución
6.El mango 40K no funciona	→ El diseño mudo de la empuñadura hace que el usuario malinterprete que no funciona	→ Consulte el método de prueba de la empuñadura 40K para comprobar si la empuñadura funciona con normalidad.
	→ No utiliza gel de masaje ni productos para el cuidado de la piel no especificados para el instrumento	→ Utilice un gel de masaje especializado para el tratamiento 40K.
	→ La intensidad del masaje es suave	→ Aumente adecuadamente la intensidad del masaje.

Orientaciones operativas


Cara (Paso1:  10mins > Paso2:  8mins > Paso3:  5mins

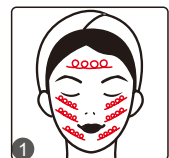





> Paso4:  20mins

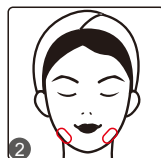


Eye (Step1:  10mins)

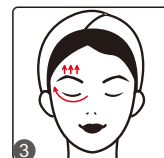





Brazo (Paso1:  15mins > Paso2:  15mins > Paso3:  15mins)

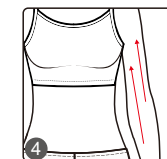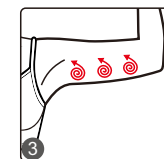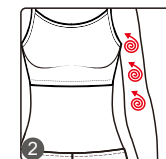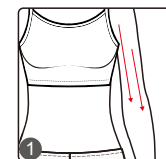


> Paso4:  15mins

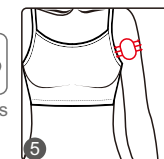







Ventre (Paso1:  15mins > Paso2:  15mins > Paso3:  15mins)

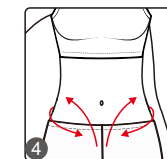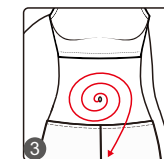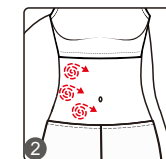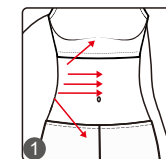

> Paso4:  15mins

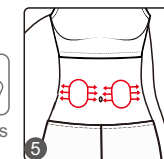








Espalda (Paso1:  15mins > Paso2:  15mins)

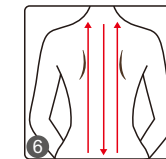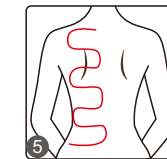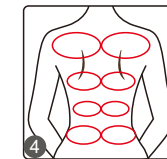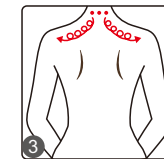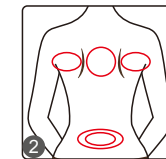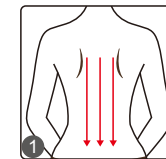

Pierna (Paso1: > Paso2:)

20mins

20mins

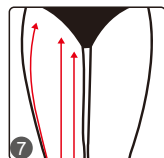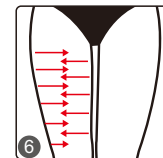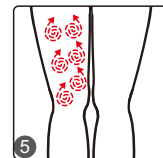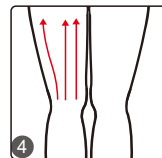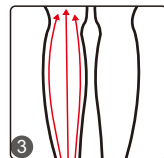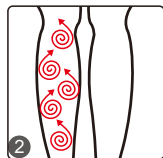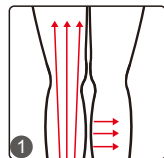

> Paso3:



20mins



Garantía y asistencia posventa

- Proporciona 30 días de devolución y sustitución gratuitas a partir de la fecha de compra.
- Garantía de un año para la unidad principal y de 3 meses para las sondas sondas, filtro y pantalla (a partir de la fecha de compra).

Producto
Nombre: Inicio SPA Instrumento
Producto
Modelo: LS-78D2MAXSB
Producción
Fecha:
Inspección
de calidad:

PASS