

# Instrumento de belleza multicolor

Manual de instrucciones



SPA Anti-Aging - Energía Temporal Instrumento de belleza de 7 colores

Manual de instrucciones

# Componentes del producto



Cuerpo principal


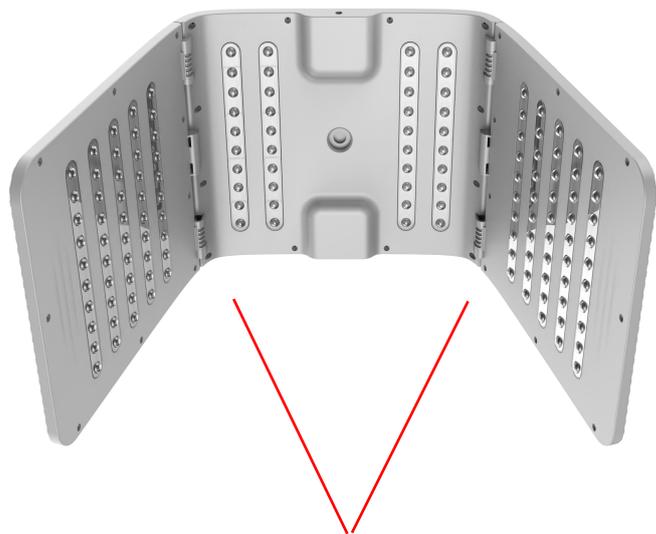


Lámina de LED




Gafas protectoras

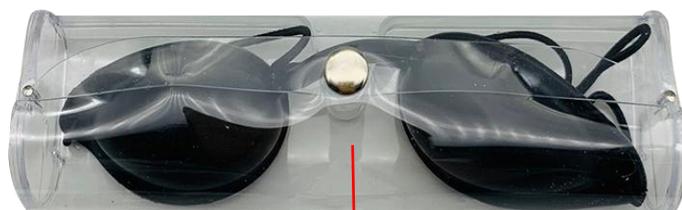

Adaptador  
de corriente

# Vista previa del diseño

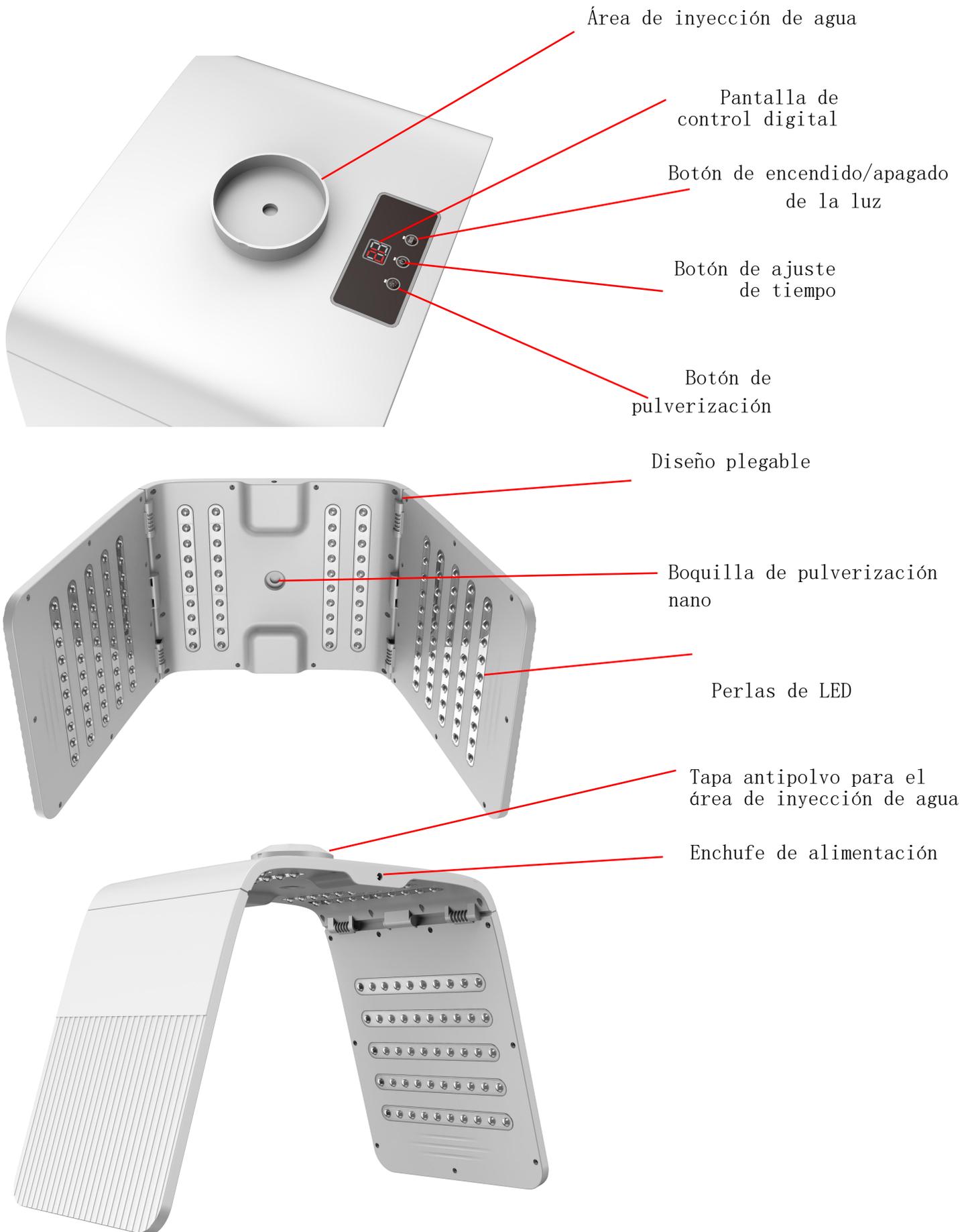

# Introducción a la operación

Ilustración de uso:



1. Inicio: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Un tono confirmará el "modo de inicio".

2. Apagado: Mantenga presionado el botón de apagado durante 3 segundos. Un tono confirmará el "modo de apagado".



1.) El funcionamiento de la fuente de luz es el siguiente:

**【a】** Luz roja: Presione el botón de selección de luz. Un tono confirmará la activación.

**【b】** Luz verde: Presione el botón de selección de luz. Un zumbido confirmará la activación.

**【c】** Luz azul: Presione el botón de selección de luz. Un tono confirmará la activación.

**【d】** Luz naranja: Presione el botón de selección de luz. Un zumbido confirmará la activación.

**【e】** Luz púrpura: Presione el botón de selección de luz. Un tono confirmará la activación.

**【f】** Luz cian: Presione el botón de selección de luz. Un tono confirmará la activación.

**【g】** Luz blanca: Presione el botón de selección de luz. Un tono confirmará la activación.

**【h】** Ciclo de 7 colores: Presione el botón de selección de luz. Un zumbido confirmará la activación.

2.) Configuración del tiempo  Seleccione la luz deseada antes de ajustar el tiempo, Tiempo mínimo: 5 minutos | Tiempo máximo: 60 minutos.

3.) Función de pulverización fría  Presione el botón para activar la pulverización. Tres modos disponibles: [Bajo, Medio, Alto].

4.) Tras seleccionar el modo de velocidad del pulverizador, pulse este botón  para configurar el tiempo de uso. El tiempo mínimo es de 5 minutos y el máximo, de 60 minutos.

**Nota:** Este equipo opera mediante botones físicos. Cada pulsación emitirá un sonido de confirmación ("clic"). Prohibido golpear o presionar con fuerza excesiva.

# Principio de funcionamiento de las luces LED

Luz Roja [RED]  
profundamente en la piel  
de 1-6mm de profundidad



Luz Verde [GREEN]  
0.5-2 mm en la piel



Luz Amarilla  
[YELLOW] 1-2 mm en  
la piel



Luz Azul [BLUE] 1  
mm en la piel



Luz Naranja [ORANGE] 600  
nm de longitud de onda




Luz Púrpura  
[PURPLE] 1-2 mm en  
la piel




Luz blanca:  
Efecto de calcio profundo



## Efecto visible con uso continuo

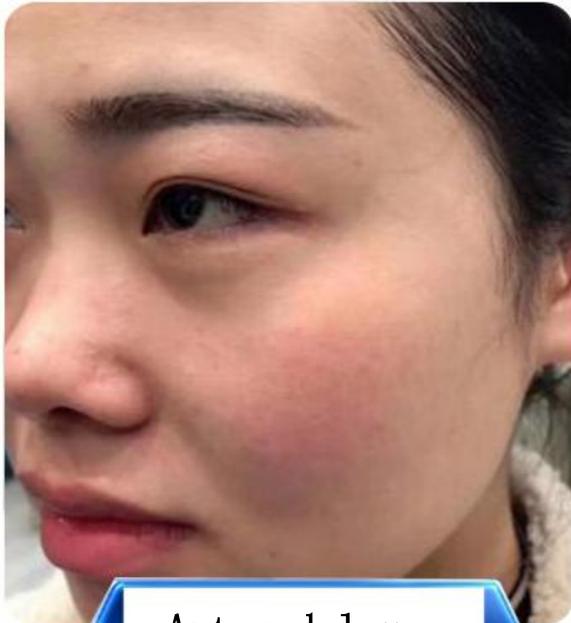

Antes del uso

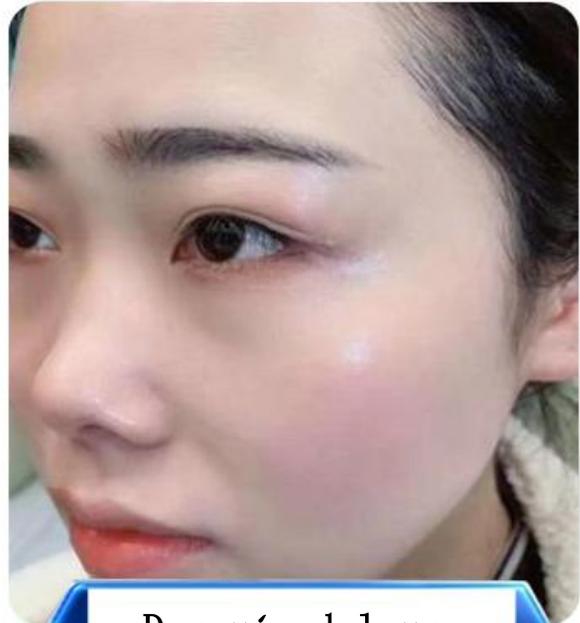

Después del uso

Vertido: el efecto del producto varía de persona a persona

Nota: Este producto es un electrodoméstico cosmético. No está diseñado para diagnóstico médico, ni sustituye fármacos, dispositivos médicos o terapias comerciales.

## Parámetros técnicos

Nombre del producto	Instrumento de belleza multicolor
Luces LED	140 unidades
Material	ABS + perlas LED
Peso neto	Rojo, verde, azul, naranja, púrpura, cian, blanco
Diseño	Plegable
Peso bruto	Aprox. [Incluir valor]
Voltaje de entrada	DC 12V
Potencia nominal	10W

Fabricante: Guangzhou Beimei Beauty Equipment Co. Ltd

Dirección: 3er piso, Chengjun Xia, Xihua Road, Distrito Baiyun, Guangzhou, Guangdong, China.

# Instrucciones para un uso seguro

1. Durante el uso de esta máquina, mantenga un horario regular de trabajo y descanso, realice ejercicio adecuado, lleve una dieta ligera evitando alimentos picantes o estimulantes, mantenga un estado de ánimo alegre y beba más de 1/3 de agua. Se recomienda complementar con alimentos ricos en vitamina C, E y calcio, o suplementos alimenticios apropiados.
2. Especialmente la luz azul, ya que puede dañar la vista. Al iluminar el rostro, se recomienda usar gafas de sol o comprar una máscara ocular opaca como accesorio.
3. Los pacientes con enfermedades cutáneas alérgicas deben realizar una prueba en una zona pequeña y discreta de la piel antes de usar el instrumento en áreas más grandes, siempre que no se presente ninguna reacción alérgica.
4. Si el producto causa molestias, se debe suspender su uso de inmediato. Al reiniciar, siga el principio de irradiación en períodos cortos y múltiples veces, hasta que el cuerpo se adapte gradualmente y pueda usarse normalmente.
5. La máquina debe colocarse en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No debe exponerse directamente a la luz solar, ambientes húmedos o de alta temperatura, ni a entornos con álcalis fuertes, ácidos fuertes, oxidantes potentes o mucho polvo. No vierta agua sobre el instrumento.
6. Al usar esta máquina, manténgala a cierta distancia de otros electrodomésticos, lejos de interferencias magnéticas de alta intensidad y productos inflamables o explosivos [gasolina, diesel, fuegos artificiales, etc.].
7. No use reactivos químicos fuertes de ácido o álcali para limpiarla. Las zonas con hendiduras pueden limpiarse con un cepillo suave.
8. No golpee, deje caer, arroje o maltrate la máquina. Está prohibido colocar cualquier objeto sobre ella [incluyendo, pero no limitado a teléfonos móviles, tarjetas bancarias u otros objetos magnéticos].
9. Para menores de edad y personas sin capacidad de percepción autónoma o expresión, se recomienda usar el dispositivo con la asistencia de un cuidador con capacidad operativa y perceptiva normal.
10. Se prohíbe el uso de accesorios no oficiales. No se permite modificar o desarmar la máquina por cuenta propia. Lo anterior no está cubierto por la garantía.
11. Está prohibido desmontar o modificar la máquina, incluso por ingenieros o técnicos no designados por la empresa. Para evitar daños a los componentes electrónicos y la carcasa del producto, los daños causados por manipulaciones no autorizadas no están cubiertos por la garantía, y cualquier lesión causada será responsabilidad de la parte involucrada.
12. Debido al diseño ergonómico y estético de la máquina, su estructura interna de ensamblaje es relativamente compleja. Solo instituciones profesionales o técnicos que hayan recibido capacitación oficial y obtengan autorización escrita tienen calificación para desmontar y realizar mantenimiento.

# Precauciones de uso

1. Mujeres embarazadas tienen prohibido el uso..
2. Personas con insuficiencia cardiopulmonar severa tienen prohibido usarlo
3. Piel altamente alérgica o con enfermedades cutáneas.
4. Prohibido usar en estado de ebriedad, con mucha hambre, demasiado lleno, sed extremo o fatiga extrema.
5. Prohibido para personas sin autonomía, percepción o capacidad de expresión.
6. Uso con precaución en portadores de stents coronarios, bypass o prótesis subcutáneas de silicona.

## Tarjeta de garantía

Nombre del producto:	Modelo:
Nombre del cliente:	Fecha de compra:
Teléfono:	Dirección:
Punto de venta:	

## Alcance de la Garantía

Estimado cliente: gracias por su compra y uso. Para disfrutar del servicio postventa perfecto y el apoyo, proporcione el producto de forma gratuita durante un año después de la compra (excluyendo los consumibles)

**The following is not covered by the warranty:**

Sin consentimiento, el usuario desmonta y repara en privado,

Otros daños no causados por la resistencia (como inundaciones, rayos, terremotos, voltaje anormal); Fallas causadas por extracción de agua, erosión, humedad, etc.

Después de comprar el producto, se produjeron averías y daños causados por otros tipos de factores humanos.

# Registro de mantenimiento y sugerencias

Sección de opiniones del cliente

Sugerencias:

Causa:

Maintenance status rating bar

Sugerencias:

causa: