


# Manual del usuario

MS-13H2

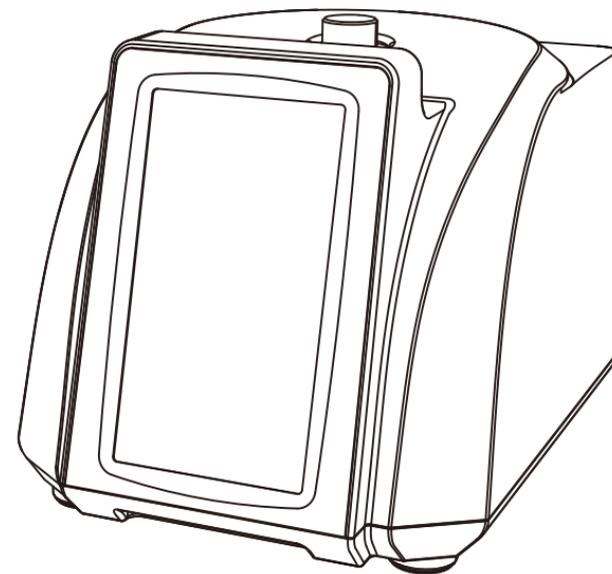

## Contenido

Precauciones de seguridad .....	1
Contraindicaciones .....	2
Descripción general .....	2
Introducción a la interfaz .....	2
Instrucciones de uso .....	4
Especificaciones técnicas .....	5
Precauciones de uso .....	6
Mantenimiento y limpieza .....	6
Preguntas frecuentes .....	7
Preguntas y respuestas .....	8
Guía de funcionamiento .....	9
Garantía y soporte técnico .....	9

## Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. Este instrumento es un dispositivo electrónico de alta precisión que requiere un almacenamiento adecuado. Evite almacenarlo en condiciones de humedad, luz solar directa o cerca de materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado o recomendado por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.
4. No exponga el instrumento a altas temperaturas, ya que esto podría afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el instrumento sobre la tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben abstenerse de utilizar este instrumento a menos que cuenten con la autorización de su médico.
7. Asegúrese de aplicar el instrumento sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente toma medicamentos para la adiposidad, suspenda su uso durante 1 o 2 meses antes de usar este instrumento. De lo contrario, podría prolongarse el tratamiento.
10. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del instrumento, esterilícelo con solución salina.

## Contraindicaciones


**Antes de usar este instrumento, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:**

1. Mujeres embarazadas o lactantes.
2. Personas con cardiopatías o marcapasos.
3. Personas con heridas sin cicatrizar o en recuperación de una cirugía.
4. Personas con epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragias.
6. Personas con enfermedades de la piel o infecciosas.
7. Las personas que se hayan sometido a una cesárea en los últimos seis meses, a un aborto espontáneo en los últimos tres meses o a un parto natural en los últimos dos meses deben abstenerse de utilizar este instrumento.
8. Personas que se hayan sometido a cirugía plástica o que tengan implantes u objetos metálicos en la zona a tratar en los últimos tres meses.

## Overview


El Realzador de Glúteos al Vacío utiliza la tecnología más avanzada y segura para ayudarte a conseguir la figura deseada. Es la solución perfecta para quienes buscan mejorar su figura sin inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Este dispositivo de uso externo ofrece mejoras notables día tras día.

## Introducción a la interfaz

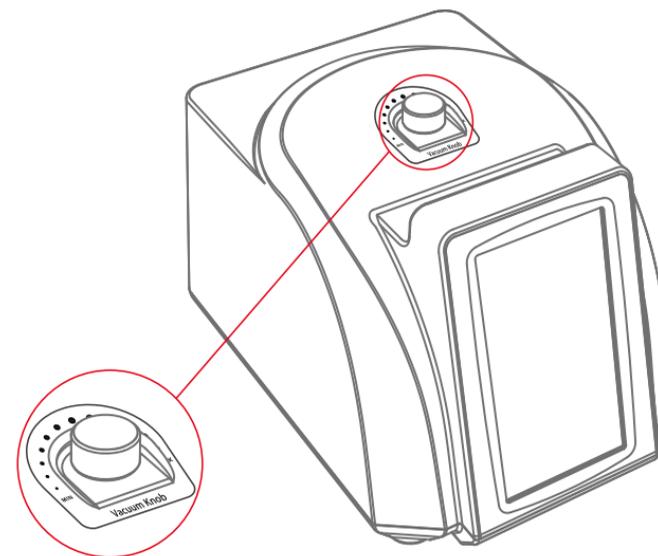


Perilla para control de succión

## Interfaz de bienvenida

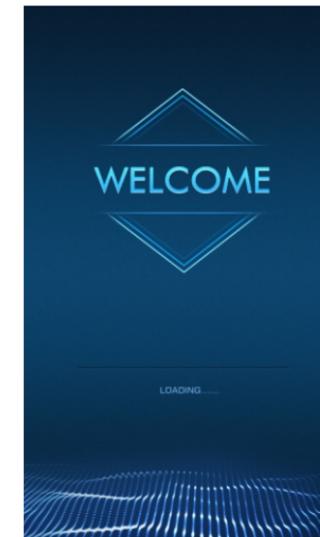

## Interfaz principal

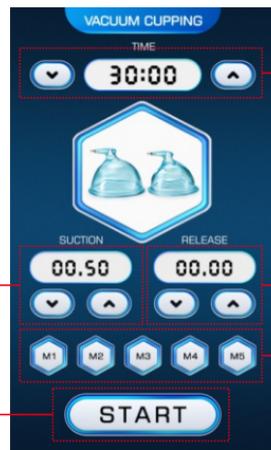

Visualización de tiempo y botones de configuración (0 - 60 minutos)

Visualización del tiempo de succión y botones de configuración (rango: 0,5 - 15)


Visualización del tiempo de liberación y botones de configuración (rango: 0 - 9)

Botón de INICIO/PARADA

Selección de modo:  
 M1: Solo succión.  
 M2: 3 segundos de succión seguidos de 1 segundo de liberación.  
 M3: 5 segundos de succión seguidos de 1 segundo de liberación.  
 M4: 7 segundos de succión seguidos de 1 segundo de liberación.  
 M5: 9 segundos de succión seguidos de 1 segundo de liberación.

## Instrucciones de uso

### Cómo reemplazar el filtro de algodón

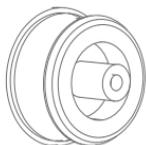


Abra la entrada girando la tapa, inserte un filtro de algodón y luego vuelva a colocar y asegurar la tapa girándola en el sentido de las agujas del reloj.

## Cómo conectar la manguera



Cómo conectar la manguera en forma de Y:  
 Conecte un extremo de la manguera a la entrada de la unidad principal y los otros dos extremos con dos copas.  
 (Si solo necesita una copa para el tratamiento, haga un nudo en el extremo libre. Desátelo si necesita dos copas).

## Instrucciones de la taza

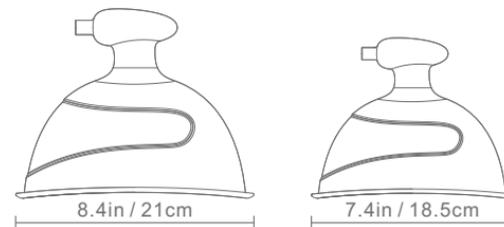

Seleccione la copa adecuada en función del tamaño de los glúteos.

## Especificación técnica

	Entrada de alimentación: CA 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz	Peso neto: 4,9 kg
		Peso bruto: 6,1 kg
Dimensiones: 33,5 x 22 x 20,6 cm		
Potencia de entrada: 20 W		

	Potencia sin carga: 19,8 W	Flujo de aire: 10 LPM
	Potencia con carga: 20 W	Nivel de ruido: <65db (a 30 cm de distancia)
	Vacío: 73 kPa	

## Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para usar el instrumento y capacitar al operador.
2. Antes de usar el instrumento, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea el adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y adecuada entre la red eléctrica y el instrumento.
4. Retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar accidentes o afectar los efectos del tratamiento.
5. No utilice el dispositivo con el abdomen vacío y comience el tratamiento 1 hora después de comer.
6. Comience siempre con la intensidad de succión más baja.

## Maintenance & Cleaning

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el instrumento en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Para limpiar las copas, límpielas suavemente con una toallita húmeda o solución salina para

desinfectarlas y séquelas bien con una toalla limpia.

3. Después de limpiar el instrumento, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango por razones de higiene.

4. Está estrictamente prohibido desmontar el instrumento e intentar limpiar el interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

## FAQ

### 1. Are there any adverse effects linked to vacuum butt enlargement treatment?

A: No, there are no side effects at all. Vacuum butt enlargement therapy is entirely based on physical massage, suction, and release under negative pressure. With the integration of multiple advanced technologies, it provides users with immediate effects without any side effects or rebound effects.

### 2. How does negative pressure aid in detoxification during treatment?

A: Negative pressure can stimulate capillary congestion and boost cellular vitality. The alternation of negative pressure promotes the opening and closing of pores in the targeted area, improving skin breathing, increasing oxygen uptake, and aiding in the elimination of wastes. In summary, this treatment promotes Qi and circulation, dispels dampness and cold, clears meridians, detoxifies, and purges heat.

## Preguntas y respuestas

Preguntar	Causa	Respuesta
No se pudo encender el instrumento.	→ El cable de alimentación está desconectado de la toma de pared.	→ Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado a la toma de pared y asegúrese de que la toma funciona.
	→ El fusible está suelto o quemado.	→ Reemplace el fusible en la parte posterior del instrumento y reinícielo.
Ausencia de succión o succión débil de la copa.	→ La manguera no está bien sujeta.	→ Asegúrese de que la manguera esté bien sujeta a la unidad principal.
	→ La tapa de entrada está suelta o el anillo de goma del interior está roto o falta.	→ Asegure firmemente la tapa en la entrada o reemplace el anillo de goma en el interior.
	→ Comprueba si has fijado la perilla.	→ Ajuste la perilla.

## Guía de operación

### Tratamiento de aumento de glúteos al vacío



**(Paso 1: 20 minutos)**

Ajustes de parámetros

Tiempo de trabajo recomendado: 20 minutos.

Tiempo de succión recomendado: 6.0

Tiempo de liberación recomendado: 2.5

Ajuste la intensidad de la succión según la resistencia individual.

Producto necesario: crema de masaje

## Garantía y soporte

Ofrecemos una garantía de un año y una política de devolución y reemplazo de tres meses a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto: Realizador de glúteos al vacío

Modelo del producto: MS-13H2

Inspección de calidad: \_\_\_\_\_

