


Manual de usuario

MS-54D1S

Instrumento de SPA para el hogar

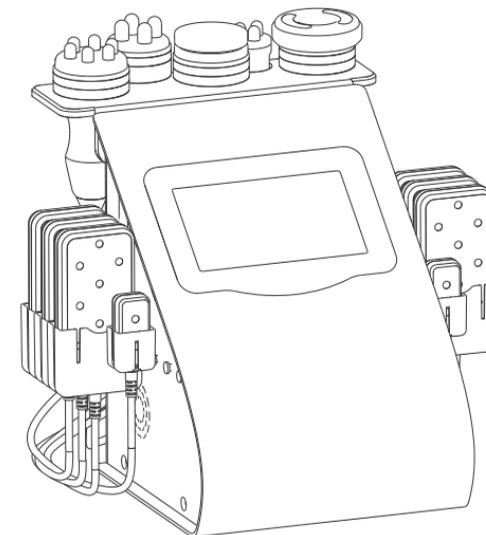

Gracias por adquirir nuestro producto.

- Lea atentamente este Manual del usuario para obtener información sobre cómo utilizar el dispositivo de forma adecuada y segura.
- Después de leer el contenido de este documento, asegúrese de guardar este Manual del usuario en un lugar accesible.
- Asegúrese de incluir este Manual del usuario si va a transferir la propiedad del dispositivo a otra persona.

Table of contents

Precauciones de seguridad	1
Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener cuidado al utilizar este instrumento	2
Introducción	2
Interfaz de trabajo	3
Parámetros técnicos	5
Precauciones de uso	6
Limpieza y mantenimiento de máquinas	7
FAQs	7
Problemas y soluciones	10
Orientación operativa	12
Garantía y soporte postventa	15

Precauciones de seguridad

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo para familiarizarse con el uso de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. El instrumento de belleza es un instrumento electrónico de alta precisión, por lo que debe almacenarse adecuadamente. No lo guarde en un lugar húmedo, expuesto a la luz solar directa o cerca de materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre los accesorios designados proporcionados o recomendados por el fabricante original para garantizar el rendimiento del instrumento dentro de su vida útil normal.
4. No coloque el instrumento cerca de fuentes de calor intensas, ya que esto puede afectar su vida útil y rendimiento.
5. Evite utilizar el dispositivo en los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas y los marcapasos.
6. El instrumento no está diseñado para que lo utilicen pacientes a menos que tengan el permiso de un médico.
7. Durante la operación, la parte operativa debe permanecer húmeda y evite operar sobre la piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no lo utilice y asegúrese de apagarlo antes de dejarlo después de usarlo diariamente para garantizar la seguridad del instrumento.
9. Si está tomando otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomarlos durante 1 o 2 meses antes de usar el instrumento; de lo contrario, deberá prolongar el tratamiento.
10. Limpie el instrumento con una toallita húmeda después de su uso para garantizar la limpieza e higiene y prolongar su vida útil.

Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener cuidado al utilizar este instrumento

Consulte a un médico o profesional antes de utilizar el instrumento. Los detalles son los siguientes:

1. Aquellas personas que estén embarazadas o en período de lactancia.
2. Aquellas personas con enfermedades cardíacas o que estén equipadas con marcapasos.
3. Aquellas personas cuyas heridas no hayan sanado y que se estén recuperando de la operación.
4. Aquellas personas con epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Aquellas personas con un tumor maligno, hemofilia o hemorragia grave.
6. Aquellas personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Utilícelo con precaución en personas alérgicas a las corrientes eléctricas.
8. Aquellas personas que hayan tenido una cesárea en los últimos seis meses o que hayan tenido un aborto en los últimos tres meses o un parto natural en los últimos dos meses no pueden utilizar esta máquina.
9. No utilice implantes corporales, como metal, plástico, silicona, etc.

Introducción

Esta máquina de belleza 6 en 1 cuenta con la tecnología de modelado corporal más popular y segura para ayudarte a completar la transformación de tu cuerpo. Resuelve tanto los problemas de la piel como los del cuerpo de los amantes de la belleza. Este equipo no requiere inyecciones, medicamentos ni operaciones, por lo que no tiene efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato.

Interfaz de trabajo



Mode Setting						
A	Trabajo continuo	Trabajo continuo	La luz infrarroja siempre está encendida			
B	Parpadea a una frecuencia lenta	Trabajo intermitente	La luz infrarroja se enciende cuando toca la piel	La luz infrarroja se enciende cuando toca la piel	La luz infrarroja se enciende cuando toca la piel	La luz infrarroja se enciende cuando toca la piel
C	Parpadeo a frecuencia media	/	/	/	/	/
D	Parpadea a una frecuencia rápida	/	/	/	/	/



Perilla para ajuste de succión de vacío

Parámetros técnicos

	Entrada de fuente de alimentación: AC110V-240V		Peso neto: 6.2kg	
	Fuerza: 75W		Peso bruto: 7.9kg	
	Dimensiones: 25.9x24x33cm (10.2x9.44x13inch)			
	Potencia de entrada: 75W			
	Frecuencia: 40KHZ		Frecuencia: 1MHZ	Flujo de aire: 10LPM
	Fuerza: 30W		Fuerza: 75W	Nivel de ruido: <65dB(a 30 cm de distancia)
	Frecuencia: 1MHZ		Frecuencia: 1MHZ	
	Fuerza: 67W		Fuerza: 57W	Fuerza: 35W
	Longitud de onda: 635nm ~ 650nm			
	Fuerza: 5mw			

Precauciones de uso

1. Utilice una clavija de conexión a tierra y asegúrese de que la toma de corriente del dispositivo esté correctamente conectada antes de cada operación.
2. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos que el usuario agregue un regulador de voltaje con una potencia equivalente entre la red eléctrica y el instrumento.
3. Antes del tratamiento, retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar condiciones inesperadas que influyan en el efecto curativo.
4. Utilice el dispositivo o capacite a los operadores del dispositivo siguiendo estrictamente las instrucciones del manual del usuario. Si toma otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomarlos durante 1 o 2 meses antes del tratamiento. Se recomienda extender el tratamiento si desea perder peso inmediatamente.
5. No utilice el instrumento con el estómago vacío. Después de una comida completa, espere al menos 1 hora antes de un tratamiento para bajar de peso.
6. Al operar, el instrumento debe tocar completamente la piel para evitar un calor desigual.
7. Comience desde el nivel de energía más bajo y aumente lentamente.
8. El mango de 40K no debe usarse en la cabeza, el pecho, los senos, el corazón ni la espalda.
9. Si la succión se establece en un nivel demasiado alto accidentalmente durante el tratamiento, debe detener el tratamiento inmediatamente y restablecer el nivel de energía.
10. Es importante instalar un filtro de algodón cuando se usa un mango de presión negativa, de lo contrario, la materia extraña inhalada puede bloquear el mango.

Machine cleaning and maintenance

1. Asegúrese de cortar la fuente de alimentación cuando no utilice la máquina y guárdela en un área seca, fresca y ventilada.
2. Quite el gel y las impurezas de la superficie del mango, limpie la superficie del mango con una toalla húmeda o alcohol al 75% para limpiar y desinfectar, luego use una toalla seca para absorber el exceso de agua para mantener el mango seco.
3. Al limpiar el mango de la aspiradora y RF, retire el filtro de algodón para evitar el crecimiento de bacterias.
4. Después de limpiar la máquina, cúbrala con un paño para el polvo o una envoltura de plástico y, antes del próximo uso, esterilice el mango nuevamente.
5. La eliminación de polvo dentro de la máquina debe ser operada por profesionales, y está prohibido desmontar la máquina para limpiarla sin permiso.

FAQs

1. ¿Cuánto tiempo puedo empezar a ver los resultados del tratamiento de RF?
R: Normalmente, puedes ver los resultados del tratamiento el mismo día que te haces la operación o en una semana. El tejido de colágeno de la piel se calienta y luego se contrae, y puedes sentir claramente la sensación de que la piel se tensa. Debido a que la RF funciona para estimular el tejido subcutáneo para promover la regeneración del colágeno, cuanto más te sometas al tratamiento, más notorios serán los efectos.
2. ¿La RF es dañina para la piel?
R: No, el tratamiento de RF es una operación no quirúrgica. Estimula la regeneración de colágeno en la base de la piel y estimula el metabolismo, por lo que no daña la piel. El enrojecimiento y el calor locales son condiciones normales de la circulación sanguínea acelerada, que se aliviarán después de un momento, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso.
3. ¿Cuánto dura el tratamiento reafirmante corporal?
R: Una sesión de tratamiento dura 60 minutos. Combinando tecnología e instrumentación profesionales, se pueden lograr resultados notables.

4. ¿Qué funciones tiene este instrumento?

R: Tiene las funciones de disolver la grasa y dar forma al cuerpo, reafirmar y levantar la piel y antienvjecimiento. Puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo. En cuanto al cuidado facial, puede dar forma al contorno del rostro, aliviar las arrugas y la piel flácida. En cuanto al cuidado corporal, puede reducir la grasa regional y crear una curva en forma de S, y promover el metabolismo y la desintoxicación de todo el cuerpo. Mientras tanto, también puede mejorar las funciones de las vísceras y resolver problemas de salud secundarios.

5. ¿Cuál es mejor en términos de pérdida de peso, la liposucción o esta máquina?

R: El principio de la liposucción es succionar el exceso de grasa en una parte del cuerpo a través de succión con presión negativa para lograr el propósito de una rápida pérdida de peso. Es un tratamiento quirúrgico que requiere anestesia y, por lo tanto, existe un período de recuperación, que tiene riesgos a pesar de sus resultados inmediatos. Sin embargo, nuestro instrumento está libre de riesgos y no tiene efectos secundarios. No solo puede ayudarlo a reducir la grasa, sino que también estimula la regeneración del colágeno para levantar y tensar la piel. También puede crear curvas perfectas al levantar la piel y acentuar el encanto sexual de las mujeres.

6. ¿Recuperaré peso después de la operación?

R: No, el ultrasonido funciona para disolver la grasa para reducir el peso y los usuarios no son propensos a recuperar su peso. Porque lo que se disuelve a través del tratamiento ultrasónico es grasa, no agua. La grasa necesita un período de tiempo más largo para acumularse, por lo que normalmente las personas no recuperarán el peso.

7. ¿Necesito estar a dieta?

R: No necesita estar a dieta, pero debe prestar atención a lo que come. Porque la radiofrecuencia y el tratamiento ultrasónico funcionan para disolver la grasa y acelerar el metabolismo. Es mejor evitar comer alimentos picantes, grasosos o fritos en caso de que afecten el metabolismo regular. Un entrenamiento adecuado para sudar ayuda con el proceso de metabolismo de la grasa. De esa manera, los resultados serán más notorios.

8. ¿El tratamiento de RF tiene efectos secundarios en el cuerpo?

R: No, el tratamiento de belleza por radiofrecuencia no es invasivo y es uno de los métodos más eficaces y seguros para eliminar las arrugas y dar forma al cuerpo. En general, no aparecen efectos secundarios. Un pequeño número de personas puede experimentar enrojecimiento o hinchazón transitorios que desaparecerán después de unas horas. Las personas con piel seca pueden experimentar atrofia después del tratamiento, que desaparecerá después de tres días porque la regeneración del colágeno hará que la piel se vuelva más tersa, aunque el calor de la radiofrecuencia puede provocar la pérdida de humedad en la piel. En general, no hay efectos secundarios en la salud de las personas.

9. ¿Se puede realizar un tratamiento con ultrasonido en cualquier parte del cuerpo?

R: No, el tratamiento con ultrasonido funciona para romper las células grasas, por lo que la grasa se libera de las células y luego se metaboliza a través del sistema linfático. Por lo tanto, su potencia es muy alta. El corazón es sensible a las ondas sonoras de alta frecuencia, ya que es un órgano hueco. Después de ser vibrado por las ondas sonoras, el corazón reflejará las ondas debido a la diferente transmisión de las ondas sonoras por el tejido muscular y la sangre en el corazón. Esta fuerza puede alejar las válvulas del músculo cardíaco. Si usa el instrumento en los ojos, puede provocar un desprendimiento de retina, por lo que el tratamiento con ultrasonido no debe realizarse en las áreas de los ojos y el corazón (ni en las áreas de la cintura, la espalda y el pecho).

10. ¿El tratamiento con ultrasonido tiene efectos secundarios en el cuerpo humano?

R: No, el tratamiento de belleza con ultrasonido es un programa no quirúrgico y no invasivo sin anestesia. Se basa en ultrasonidos (ondas sonoras mecánicas) para disolver la grasa a través de la cavitación (enfoque de ultrasonidos). Y los resultados son la destrucción de la grasa, la disolución de la grasa, la reafirmación de la piel y la remodelación corporal respectivamente. Solo se dirige a las células grasas de baja densidad, pero deja intactos los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos, y por lo tanto no tiene efectos secundarios en el cuerpo humano. Probablemente se produzca un ligero tinnitus durante el tratamiento, que está dentro del rango normal. Así que no hay necesidad de preocuparse por eso.

11. ¿Por qué se produce el tinnitus?

R: Es porque el ultrasonido viene con una vibración de alta frecuencia, que puede llegar hasta los 20 kHz. Penetra en capas de grasa de la piel de 20 mm de profundidad a través del enfoque de ultrasonido. El ultrasonido altamente intensificado puede causar fricción a alta velocidad entre las células grasas, lo que puede calentarlas y disolverlas. Y durante el proceso, se puede producir un sonido para que el cliente tenga la sensación de tinnitus.

12. ¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es un tipo de sustancia macromolecular biológica, un tipo de proteína fibrosa blanca, opaca y no ramificada. Puede complementar los nutrientes que necesitan todas las capas de la piel, mejorar la actividad del colágeno en la piel, retener la humedad, nutrir la piel, retrasar el envejecimiento, aliviar la relajación facial, proporcionar nutrientes para el cabello, etc. El colágeno es un nutriente que el cuerpo humano debe reponer para retrasar el envejecimiento. Con el aumento de la edad, el colágeno se perderá gradualmente. En las mujeres, el colágeno comenzará a disminuir a la edad de 20 años. A la edad de 25 años, la pérdida de colágeno alcanzará su punto máximo. A la edad de 40 años, el contenido de colágeno es menos de la mitad del que se tiene a la edad de 18 años. Es la pérdida de colágeno y agua lo que causa las arrugas en el rostro de las personas mayores. La rotura de las fibras de colágeno y las fibras elásticas hará que el tejido cutáneo se oxide, se atrofie y se colapse. La piel estará seca, arrugada, flácida y sin elasticidad. Por lo tanto, para retrasar el envejecimiento, debe haber mucho colágeno.

13. ¿Cómo funciona la terapia de vacío?

R: El vacío puede causar congestión capilar y estimular las células para aumentar la vitalidad. La succión y liberación de presión durante la operación puede hacer que los poros locales continúen abriéndose y cerrándose, lo que puede promover la respiración de la piel, aumentar la cantidad de oxígeno de la piel y acelerar la eliminación de desechos. Por lo tanto, logra los efectos de promover el qi y la circulación sanguínea, disipar el frío y la humedad, dragar meridianos y colaterales, limpiar toxinas, disipar el calor, etc.

14. ¿Habrá un rebote a través de la disolución de grasa con láser?

R: Normalmente no. La cantidad de células adiposas en el cuerpo es fija, lo que no verá un cambio en la edad adulta. El aumento de peso se debe al aumento del volumen de células adiposas. El tratamiento de disolución de grasa con láser destruirá la estructura de grasa localizada y luego reducirá el volumen de grasa. Es cierto que la rara ocurrencia de recuperar peso no significa que no se vuelva a ver. En general, siempre que la dieta sea razonable y se eviten los atracones, no se experimentará aumento de peso.


Problemas y soluciones

Problema	Razón Causada	Solución
1. ¿No se puede iniciar la máquina?	→ La conexión del cable de alimentación es inestable → Fusible suelto o quemado	→ Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma con una fuente de alimentación normal. → Reemplace el fusible en la parte posterior del instrumento y reinicie la máquina.
2. La máquina dejó de funcionar y no se puede reiniciar	→ La inestabilidad del voltaje o el funcionamiento a largo plazo provocaron que se quemara el fusible	→ Reemplace el fusible, espere 5 minutos y reinicie la máquina.
3. La máquina se puede encender, pero la pantalla muestra un mensaje erróneo	→ Error al cargar datos	→ 1. Apague la máquina, desconecte el cable de alimentación, espere un minuto para conectar la fuente de alimentación y reinicie la máquina. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, comuníquese con el distribuidor del instrumento para reemplazar la máquina.


Problema	Razón Causada	Solución
4.No hay salida de RF de la máquina	→ El mango está conectado incorrectamente	→ Compruebe si el enchufe que conecta el mango y el cuerpo de la máquina está bien conectado.
	→ El área de tratamiento no está limpia (los productos con grasa o aceites esenciales pueden hacer que el mango entre en mal contacto con el cuerpo humano)	→ Limpie el área de tratamiento y aplique gel.
	→ El mango de RF no se conecta firmemente al cuerpo humano	→ Asegúrese de que cada polar del mango RF esté en contacto firme con la piel durante su uso.
5.La máquina no tiene succión o tiene una succión débil	→ El filtro no está instalado correctamente o los accesorios están envejeciendo.	→ 1.Compruebe si el filtro está instalado correctamente. Compruebe también si el anillo de goma del filtro está instalado correctamente o si está desgastado. 2.Compruebe si la perilla de control de succión en el lateral de la máquina está configurada en el nivel más alto.
	→ El mango está bloqueado	→ Comuníquese con el distribuidor del instrumento para reemplazar el mango.

Problema	Razón Causada	Solución
6. El mango 40K no funciona	→ El diseño silencioso del mango hace que el usuario comprenda erróneamente que no funciona.	→ Consulte el método de prueba del mango de 40K para verificar si el mango funciona normalmente.
	→ No usé gel de masaje ni utilicé productos para el cuidado de la piel no especificados para el instrumento.	→ Utilice un gel de masaje de tratamiento especializado de 40K.
	→ La intensidad del masaje es suave.	→ Aumente la intensidad del masaje adecuadamente.


Operational guidance

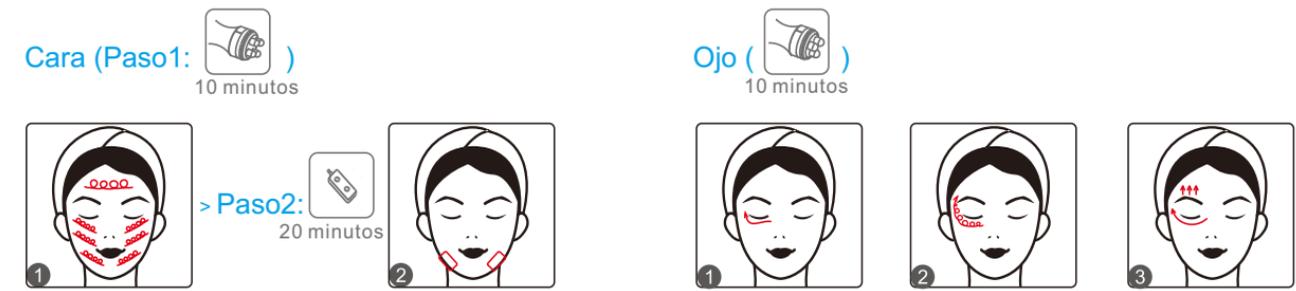


Brazo (Paso1:  > Paso2:  > Paso3: )
 15 minutos 15 minutos 15 minutos

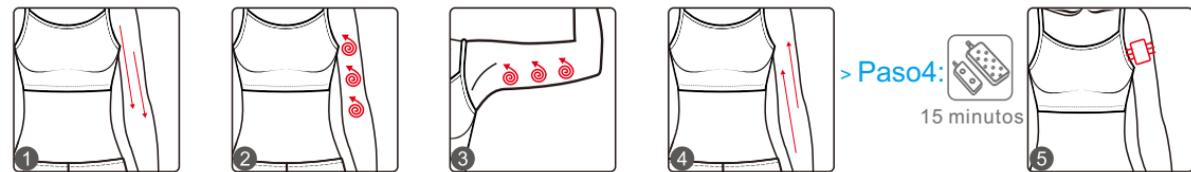


Vientre (Paso1:  > Paso2:  > Paso3: )
 15 minutos 15 minutos 15 minutos

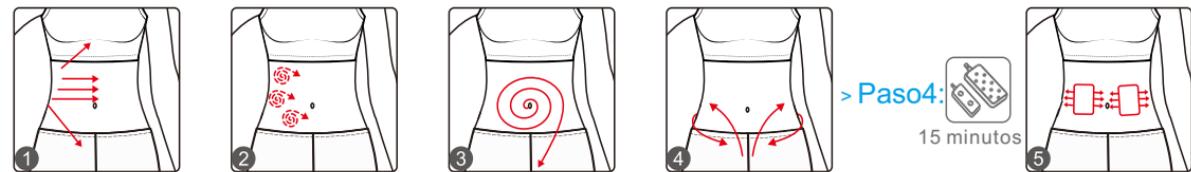

Espalda (Paso1:  > Paso2: )
 15 minutos 15 minutos

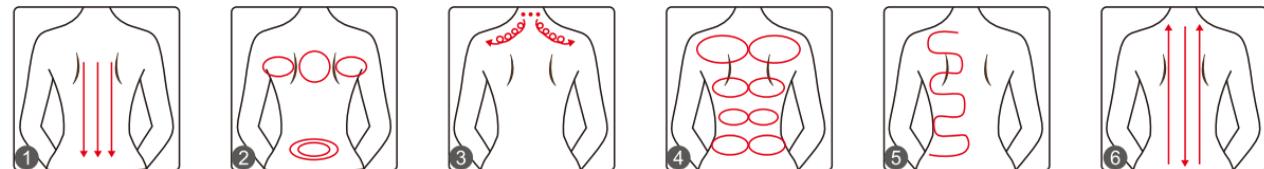

Pierna (Paso1:  > Paso2: )
 20 minutos 20 minutos

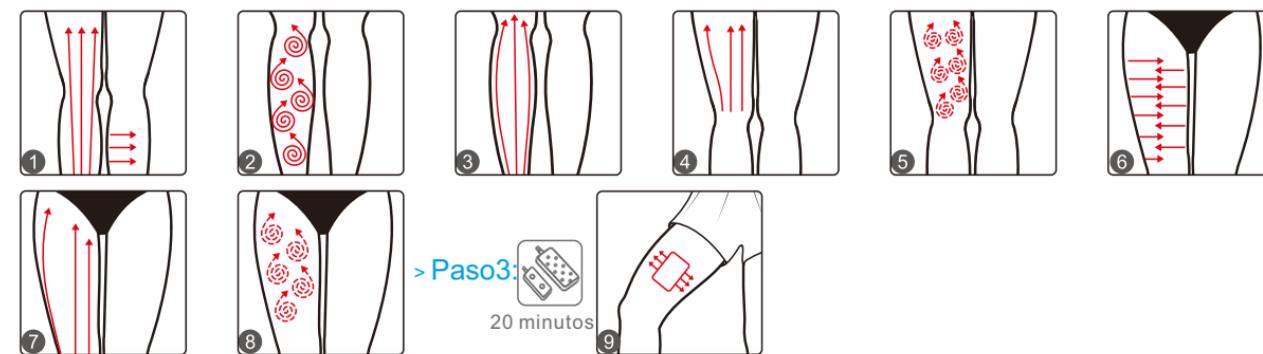

Garantía y soporte postventa

- Ofrecemos 30 días de devolución y reemplazo gratuitos a partir de la fecha de compra.
- Ofrecemos una garantía de un año para la unidad principal y una garantía de 3 meses para las sondas, el filtro y la pantalla (a partir de la fecha de compra).

Producto Instrumento de SPA
Nombre: _____

Producto Modelo: MS-54D1S
Modelo: _____

Producción
Fecha: _____

Inspección
de calidad: _____

