



## Información básica del instrumento

### ■ Principio de funcionamiento:

El motor de alta velocidad incorporado impulsa la rueda excéntrica, que realiza un movimiento circular, generando fuerza centrífuga. Esta fuerza, al girar en sentido excéntrico, genera vibración centrífuga, que se transmite al cabezal de forma eficiente y duradera. El cabezal se utiliza con diversas técnicas de masaje, como masajes corporales, exfoliación, rehabilitación, ejercicios musculares, fitness, modelado corporal, etc.

### ■ Lugares aplicables:

Salones de belleza, Centros de salud, Grandes clubes, Gimnasios, Gimnasios, Escuelas, Familias, Particulares.

### ■ Características del instrumento:

1. Vibración física potente y cómoda, con menos efectos secundarios.
2. 2. Cinco tipos de masaje diferentes, adecuados para todo el cuerpo o zonas específicas.
3. Amplio alcance de aplicación y público objetivo.

## Instrucciones para el uso de instrumentos

1. 1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato.
2. 2. Este instrumento es solo auxiliar; se recomienda combinarlo con una dieta equilibrada y ejercicio adecuado para obtener mejores resultados.
3. 3. No utilice este instrumento para reducir la grasa de la cara, el cuello ni la cabeza.
4. 4. No utilice este instrumento en la columna vertebral ni en incisiones quirúrgicas.
5. 5. Los pacientes con enfermedades cardíacas o cardiopatías cerebrovasculares deben usarlo con precaución.
6. 6. Deje de usar el instrumento si experimenta irritación en la piel después de usarlo (la picazón y el entumecimiento iniciales son reacciones normales) y espere a que la piel se normalice. Luego, úselo.
7. 7. Las mujeres que acaban de dar a luz no pueden usarlo inmediatamente, sino solo después de recuperar su salud prenatal.
8. Las zonas de masaje deben estar separadas por una capa de algodón o seda; no deben entrar en contacto directo con la piel.

## **Funciones principales del instrumento**

### **1. Ayuda a defecar y limpiar el estómago**

El masaje vibratorio puede masajear eficazmente los puntos de acupuntura relevantes, fortalecer el peristaltismo gastrointestinal, mejorar y regular eficazmente el estreñimiento y descargar los desechos gastrointestinales.

### **2. Ayuda a perder peso y moldear el cuerpo**

El masaje vibratorio aeróbico completo puede ayudar a lograr una rápida pérdida de peso y reducir considerablemente el exceso de peso en brazos, espalda, caderas, cintura y otras partes del cuerpo. Reduce las marcas del embarazo, los patrones, la piel en barril y otros fenómenos, previene las irregularidades de la piel causadas por la obesidad y restaura la elasticidad de los músculos y la piel. Consigue una piel firme y estiliza tu figura .

### **3. Relaja tus músculos**

El masaje vibratorio corporal ejercita eficazmente los músculos, relaja la tensión muscular, elimina la fatiga y relaja todo el cuerpo. Usar este dispositivo después del ejercicio acelera la descomposición del ácido láctico y alivia las molestias.

### **4. Aumentar la circulación**


Con la edad, el revestimiento de los vasos sanguíneos acumula sustancias nocivas como colesterol, grasa y calcio, lo que provoca mala circulación sanguínea, enfermedades coronarias, coágulos sanguíneos, trombosis cerebral y otros trastornos cerebrovasculares. El masaje terapéutico puede acelerar el flujo sanguíneo, dilatar los vasos sanguíneos y eliminar toxinas del cuerpo mediante la circulación, mejorar la constitución corporal, aliviar la fatiga nerviosa, liberar la presión y mejorar la calidad del sueño.

### **5. Acondicionamiento de rehabilitación**

Alivia el dolor articular, mantiene la movilidad articular y reduce el edema articular. Ayuda a mejorar la rigidez de piernas causada por el reumatismo y el desequilibrio al caminar en personas mayores, causado por no caminar durante mucho tiempo. Ayuda eficazmente a regular la tensión y el endurecimiento muscular. Ayuda a reducir los síntomas de dolor abdominal después de la inyección.

# Figuras de la posición del instrumento

1、Estereograma del instrumento (frontal) 2、Estereograma del instrumento (posterior) 3、Panel del instrumento

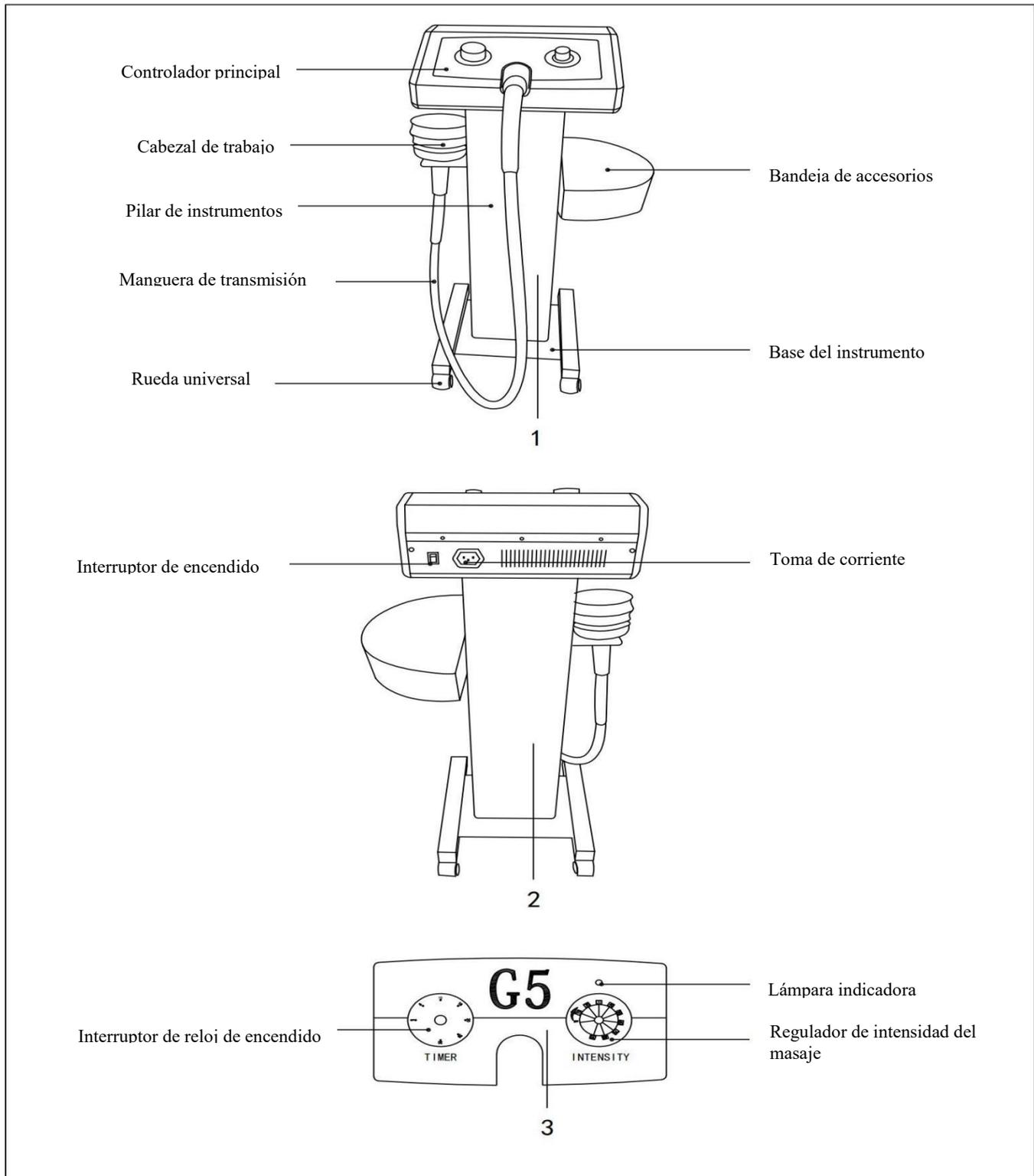

# Introducción y sugerencias de uso del masaje taus

Nombre	Imagen	Piezas aplicables
Masaje cilíndrico de dedos tau		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sitios de dolor</li> <li>● Sitios de grasa dura</li> </ul>
Masaje hemisférico tau		<p>Más musculoso como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abdomen, espalda, brazos Glúteos, muslos,</li> <li>● Hombros y cuello</li> </ul>
Masaje tau multipunto		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zonas ásperas y arrugadas</li> </ul>
Esponja de masaje U-Soft tau		<p>Punto de acupuntura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Incluyendo la cabeza, los hombros y el cuello, Cuerpo, pecho y plantas de los pies.</li> </ul>
Esponja de masaje redonda y suave tau		<p>Al realizar la terapia, utilice desechables película higiénica : (p. ej. envoltura de plástico)</p>

# G5 Vertical Vibration Massage Instrument

# User Manual


Imagen	Funciones principales	Consejos de intensidad	Consejos de tiempo Para cada uso	Consejos para el periodo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cabeza, pecho y pies</li> <li>● Relajar la tensión muscular</li> <li>● Aliviar la fatiga corporal</li> <li>● Ablandar las grasas duras</li> </ul>	30-60 nivel	15-20 minutos	10-15 días
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ejercitar los músculos</li> <li>● Eliminar la grasa dura</li> <li>● Mantener la flexibilidad articular</li> <li>● Mejorar la circulación sanguínea</li> <li>● Aumentar el metabolismo</li> </ul>	30-90 nivel	15-20 minutos	15-20 días
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Eliminar arrugas</li> <li>● Eliminar las grasas blandas</li> <li>● Restaura la elasticidad de la piel</li> <li>● Construye un cuerpo con forma de S</li> </ul>	30-80 nivel	15-20 minutos	15-20 días
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Construye un cuerpo con forma de S</li> </ul>	Hombros, Cuello y Cuerpo 20-60 nivel	10-15 minutos	7-10 días
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aliviar el nervio</li> <li>● Mejorar la inmunidad</li> <li>● Relaja cuerpo y mente</li> </ul>	Cabeza, pecho y pies 10-40 nivel	10-15 minutos	7-10 días

## Operation Steps


1. 1. Consulte el diagrama de instalación (página 12) y monte el host, el soporte y la bandeja de accesorios.
2. 2. Cuelgue el cabezal de vibración en el soporte.
3. 3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente del instrumento y, a continuación, conecte la fuente de alimentación.
- 4. Preparaciones antes de operar el instrumento:**
  - (1) (1) Primero, realice ejercicios de calentamiento o sauna para relajar ligeramente los músculos de todo el cuerpo.
  - (2) (2) Aplique un poco de aceite de masaje o talco en el cuerpo para facilitar la aplicación del masaje.
  - (3) Al principio, se debe seleccionar un masaje suave.  
**(Cada tau de masaje se puede reemplazar según sea necesario)**
  - (4) Separar la piel con una capa de film plástico, tela de algodón o seda, el propósito es no dejar que el masajeador entre en contacto directo con la piel.
5. Después de los preparativos anteriores, encienda el interruptor de encendido.
6. Sujete el cabezal de trabajo con ambas manos y levántelo con la mano.
7. Encienda el interruptor del reloj y ajuste la hora deseada.
8. Abra el regulador de intensidad y ajuste la intensidad de masaje requerida.
9. Al principio, es recomendable usar las manos vacías para ayudar a estirar o empujar los músculos y así colaborar con el movimiento del masajeador. El movimiento debe ser lento.
10. Después del masaje, apague el interruptor de encendido y el regulador de intensidad
11. Mantenga el instrumento y sus accesorios a tiempo.

## Visualización de métodos de operación

Método de operación correcto

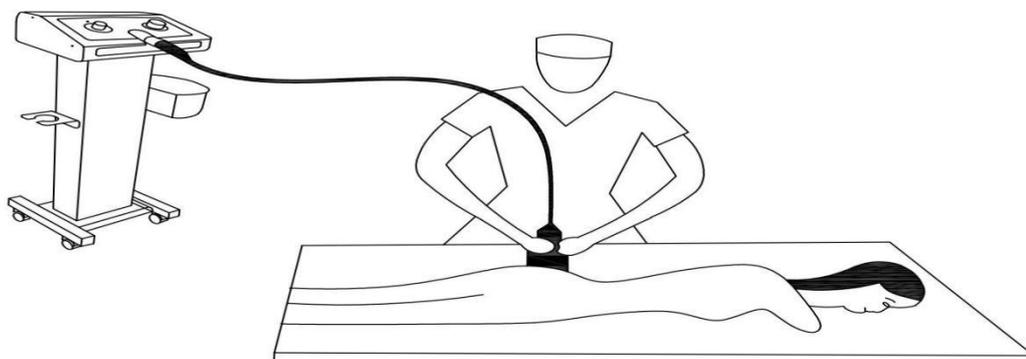

Métodos de operación incorrectos

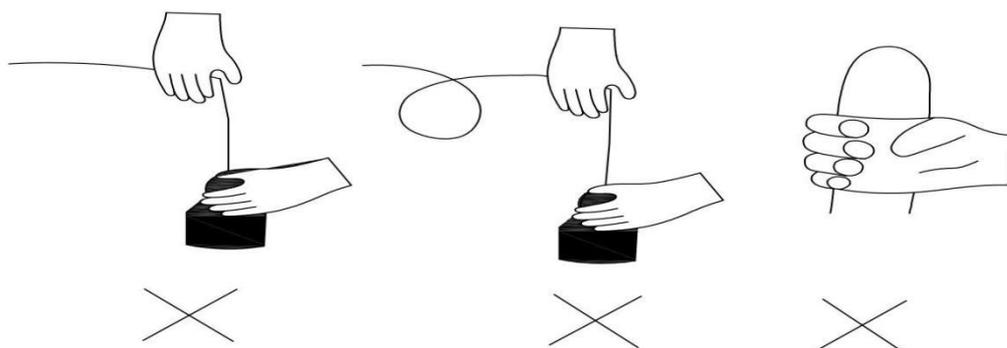

### Nota:

1. Asegúrese de usarlo correctamente (como se muestra en la imagen de arriba).
2. Si el ángulo de flexión de la manguera no es inferior a 100 grados, no presione la manguera con las manos.
3. Si el eje blando se rompe debido a un uso incorrecto, la garantía no cubre esta función.

## Precauciones de uso

1. Este instrumento es solo para uso en interiores y debe almacenarse en un lugar seco y ventilado.
2. El cabezal de vibración centrífuga no debe desmontarse sin autorización.
3. No es necesario añadir aceite al eje giratorio ni al instrumento. Los ejes giratorios están sellados y autolubricados.
4. Limpie el instrumento y los accesorios con un paño seco o una toalla escurrida; no los moje.
5. Desconecte el cable de alimentación después de usarlo para garantizar su seguridad.
6. Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por uno especial.
7. No se suba ni se siente sobre el instrumento.
8. No encienda el instrumento si la preparación no es correcta, ya que esto aumentará la abrasión del masaje.
9. La intensidad debe ajustarse lentamente según el rango de tolerancia de los huéspedes, no directamente al máximo.
10. No utilice el instrumento una hora antes ni una hora después de las comidas.
11. El cabezal de masaje no debe usarse directamente sobre la piel, ya que es muy sensible. Tras el contacto directo con la piel, puede causar picazón, enrojecimiento y otros problemas, por lo que debe usarse después de aplicar una capa de algodón, seda o plástico.
12. Después de cada masaje, beba un vaso de agua para estimular el metabolismo.
13. Después del masaje, realice ejercicio ligero, ya sea en interiores o al aire libre, ya que esto afectará sus efectos.
14. Puede experimentar picazón, entumecimiento y otras sensaciones después de usar este producto; estas son reacciones normales, no alergias cutáneas. Este tipo de picazón puede desaparecer gradualmente con un masaje completo, que posteriormente le proporcionará una sensación de calor y calor, gracias a la circulación sanguínea.
15. El masaje debe realizarse según las diferentes partes del cuerpo. Una zona debe tratarse continuamente durante más de una semana. La siguiente terapia solo puede continuar después de que haya surtido efecto.
16. Utilice el instrumento siguiendo estrictamente las instrucciones de uso. Está prohibido utilizar el instrumento con frecuencia y ajustarlo a una intensidad alta, de lo contrario provocará daños mecánicos en los músculos, huesos, vísceras, útero, etc. humanos.

## Tabúes de uso

1. 1. Prohibido su uso a mujeres embarazadas o en período menstrual.
2. 2. Los niños deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto; está prohibido su uso en bebés.
3. 3. No lo use en pacientes que no se hayan recuperado de una cirugía o que estén gravemente enfermos.
4. 4. Prohibido su uso a pacientes con insuficiencia cardíaca (enfermedad cardíaca, infarto de miocardio, marcapasos).
5. 5. Pacientes con infección bronquial o parenquimatosa pulmonar deben usarlo con precaución.
6. 6. Está prohibido su uso en personas con síntomas de hipoxia pulmonar transitoria, tuberculosis pulmonar, neumotórax, enfermedad de la pared torácica e infección de la pared torácica.
7. 7. Está prohibido su uso en pacientes con varices o intolerancia a la vibración.
8. 8. Pacientes con tumores malignos causados por trombosis venosa profunda.
9. 9. Está contraindicado en pacientes con tromboflebitis y linfangitis. 10. Evite su uso en zonas con inflamación cutánea aguda o excesiva, daño cutáneo o lesiones malignas.
10. Se prohíbe su uso en zonas infectadas, zonas de sangrado o zonas con riesgo de sangrado.

## Parámetros técnicos


Nombre del producto	Instrumento de masaje vibratorio vertical G5
Voltaje nominal	AC110V-240V
Potencia nominal	≤50W
Frecuencia nominal	50-60Hz
Máxima potencia	100W
Tiempo de trabajo	≤30minutos
Intensidad de vibración	10-90 niveles (ajustables)
Frecuencia de velocidad de rotación	600 rpm-3000 rpm
Ruido de funcionamiento	< 60dB

## Lista de paquetes

Nombre	Unidad	Cantidad	Observaciones
Controlador de instrumentos	(colocar)	1	Con una manguera suave
Pilar del instrumento	(colocar)	1	
Base del instrumento	(colocar)	1	Con rueda universal
Cabezal de trabajo	(colocar)	1	
Masaje cilíndrico de dedos tau	(colocar)	1	
Masaje hemisférico tau	(colocar)	1	
Masaje tau multipunto	(colocar)	1	
Esponja de masaje U-Soft tau	(colocar)	1	
Esponja de masaje redonda y suave tau	(colocar)	1	
Bandeja de accesorios	(colocar)	1	
Soporte para cabezal de trabajo	(colocar)	1	
Cable de alimentación	(colocar)	1	
Herramientas de instalación	(colocar)	1	
Manual de usuario en inglés	(colocar)	1	

## Attached:

Diagrama esquemático del conjunto del instrumento:

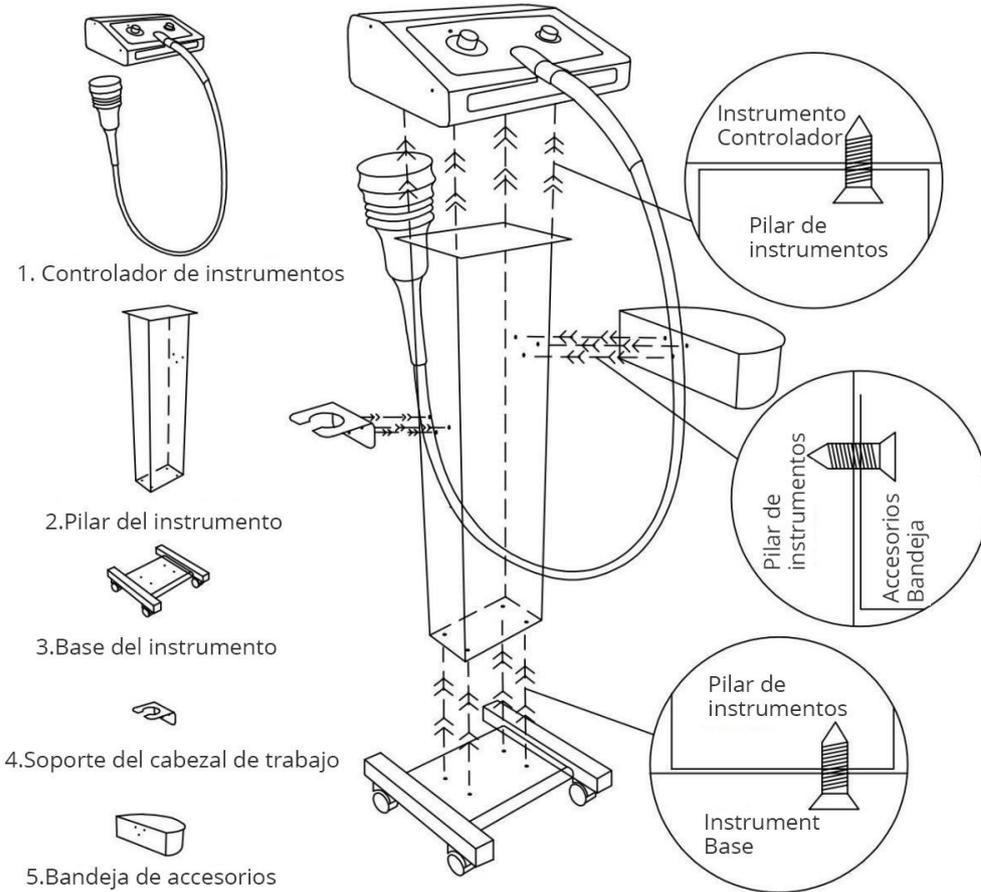

**1** Abra el paquete como se muestra:



**2** Según el diagrama esquemático de montaje, primero instale la base del pilar, como se muestra:

**3**



En segundo lugar, instale el controlador del instrumento. Luego, instale el soporte y la bandeja. Todas las instalaciones están terminadas, como se muestra: