

Instrumento de desintoxicación linfática para

User Manual



- Muchas gracias por su compra;
- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usar y, después de leerlas, cuídelas para consultarlas en el futuro.
- El instrumento de belleza se basa en la premisa del cuidado saludable de la piel y está diseñado para la belleza, y está prohibido su uso y venta para el tratamiento

Introducción y función

Esta máquina, con control por microcomputadora, es fácil de usar y no solo es ideal para salones de belleza, ya sea para dietas especiales o desintoxicación. También es adecuada para mareos, dolores de cabeza, neurastenia, colesterol alto, dolor de cintura y piernas causado por trastornos del sistema nervioso, sanguíneo, digestivo y de las secreciones. También es adecuada para diversas causas de estreñimiento, como estrés mental, psicosis y menopausia. Es una máquina multifuncional de excelencia que alivia la presión de las personas, proporciona seguridad y bienestar a la familia, y es un producto imprescindible. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar este producto y las instrucciones de uso.

1. (1) Desempeña un papel en el sistema circulatorio interno del cuerpo humano: se dirige principalmente a dicho sistema. Este sistema incluye la circulación sanguínea, el sistema linfático y los fluidos tisulares, entre otros. El traje espacial se ajusta firmemente al abdomen, muslo y pantorrilla del usuario en la bolsa de aire. Cada ciclo de 16 segundos (inflado y desinflado) activa el sistema circulatorio interno. El cuerpo produce los siguientes efectos:

2. Sistema circulatorio linfático: promueve la circulación sanguínea, especialmente la capilar, acelera la circulación sanguínea, el sistema linfático y la circulación e intercambio de fluidos tisulares, lo que facilita la eliminación de desechos y toxinas en la sangre, consume y elimina las células grasas adheridas a la pared vascular, tiene una excelente función preventiva y de cuidado de la salud para la aterosclerosis y la hiperlipidemia. Debido al estancamiento de la circulación sanguínea y la falta de oxígeno, causa mareos, dolor de cabeza, resfriado en las extremidades, venas varicosas, etc., y tiene un mejor efecto sobre ellos, lo que puede purificar completamente el sistema circulatorio.

3. Sistema linfático: el sistema linfático produce linfocitos que filtran objetos extraños, toxinas ingeridas y producen anticuerpos, y desempeña funciones hematopoyéticas e inmunitarias. Es uno de los sistemas de prevención de epidemias humanas. La presión regular acelera el reflujo linfático y estimula los vasos linfáticos. La generación de un gran número de linfocitos acelera el flujo linfático, sanguíneo y el intercambio de fluidos tisulares, y los nutrientes regresan a la sangre a través de estos fluidos.

Toxina fagocítica. El exceso de nutrientes en la sangre y el fluido tisular, junto con la grasa disociada, se consume y descompone rápidamente.


4. Fluido tisular: Establece la circulación del fluido tisular, facilitando el suministro de nutrientes a la sangre y concentrando una gran cantidad de desechos, toxinas y grasa en estado libre para que los linfocitos la absorban. Estos desechos, toxinas y exceso de agua son excretados por el sistema metabólico. Por lo tanto, la prevención de la obesidad celular en tejidos edematosos ha mejorado significativamente. (2) Mayor papel en el metabolismo humano: la actividad del sistema circulatorio y la purificación de fluidos corporales aumentan el metabolismo. Mientras tanto, con el ritmo del masaje de presión y vibración, la peristalsis digestiva acelerada se vuelve muy activa, eliminando el exceso de nutrientes, la grasa, el exceso de humedad y los desechos metabólicos a través de la orina. Por lo tanto, se utiliza para diversas causas de estreñimiento y para tratar la obesidad interna (como la barriga cervecera).


(3) Función del tejido adiposo subcutáneo y el tejido muscular: La aplicación de la máquina según el principio de la medicina tradicional china, el masaje une partes del ritmo, de modo que el tejido muscular genera consumo aeróbico estático y descompone la grasa y el músculo. Su exclusivo vibrador de alta frecuencia, fijado a la bolsa de aire en el abdomen, muslos y pantorrillas, a una frecuencia de vibración estándar de cinco mil revoluciones por minuto, alivia la fatiga y relaja los músculos. El estado inflado, al aplicarse en el sitio, produce una potente fuerza de resonancia que actúa directamente sobre la grasa subcutánea profunda, desprendiéndola y descomponiéndola rápidamente. Además, cuenta con un oscilador portátil independiente con un masaje coloidal prominente en el cuello, las plantas de los pies y otras partes del cuerpo, lo que alivia dolores y alivia la fatiga. El tratamiento interno y externo del cuerpo mediante el aparato acondiciona el cuerpo, lo que permite adelgazar, desintoxicar y mejorar la salud. Tanto dentro como fuera de la atención primaria, después de que las personas se sientan llenas de energía y sin cansancio, es la mejor opción para una pérdida de peso saludable.

Características

1. Nuestros paquetes abdominales utilizan tecnología avanzada de soldadura ultrasónica para garantizar la sutura hermética de cada bolsa de aire.
2. Un tubo digital de gran tamaño actúa sincronizadamente en cada modo de operación, lo que facilita su manejo, comodidad y un control claro. La tecnología digital permite seleccionar fácilmente entre los modos ligero, pesado, rápido y lento.
3. 16 grupos de cámaras cerca de las partes del cuerpo, logrando una doble eficacia. Se puede operar simultáneamente para uso local o sistémico, individual o doble.

Gráfico de panel

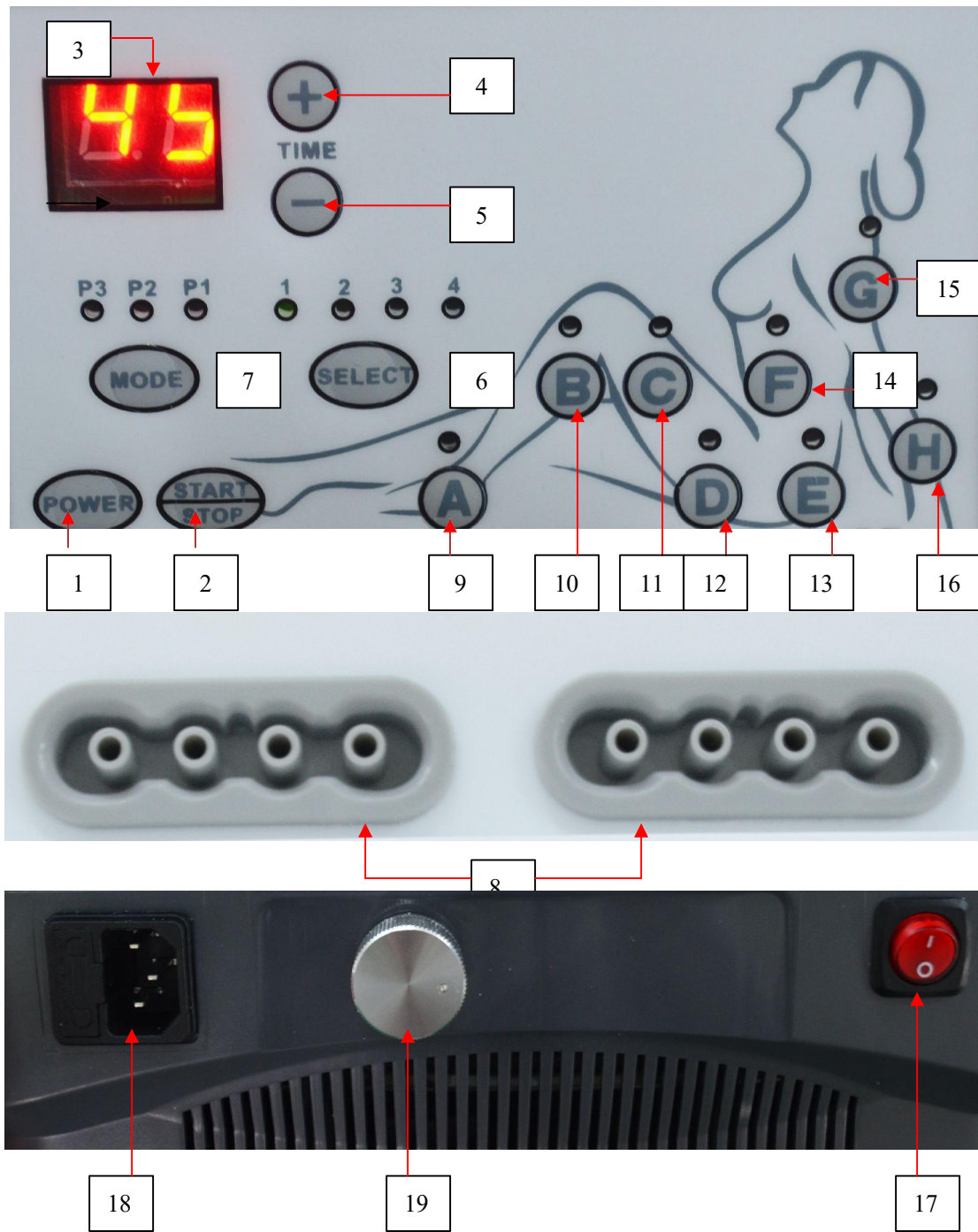

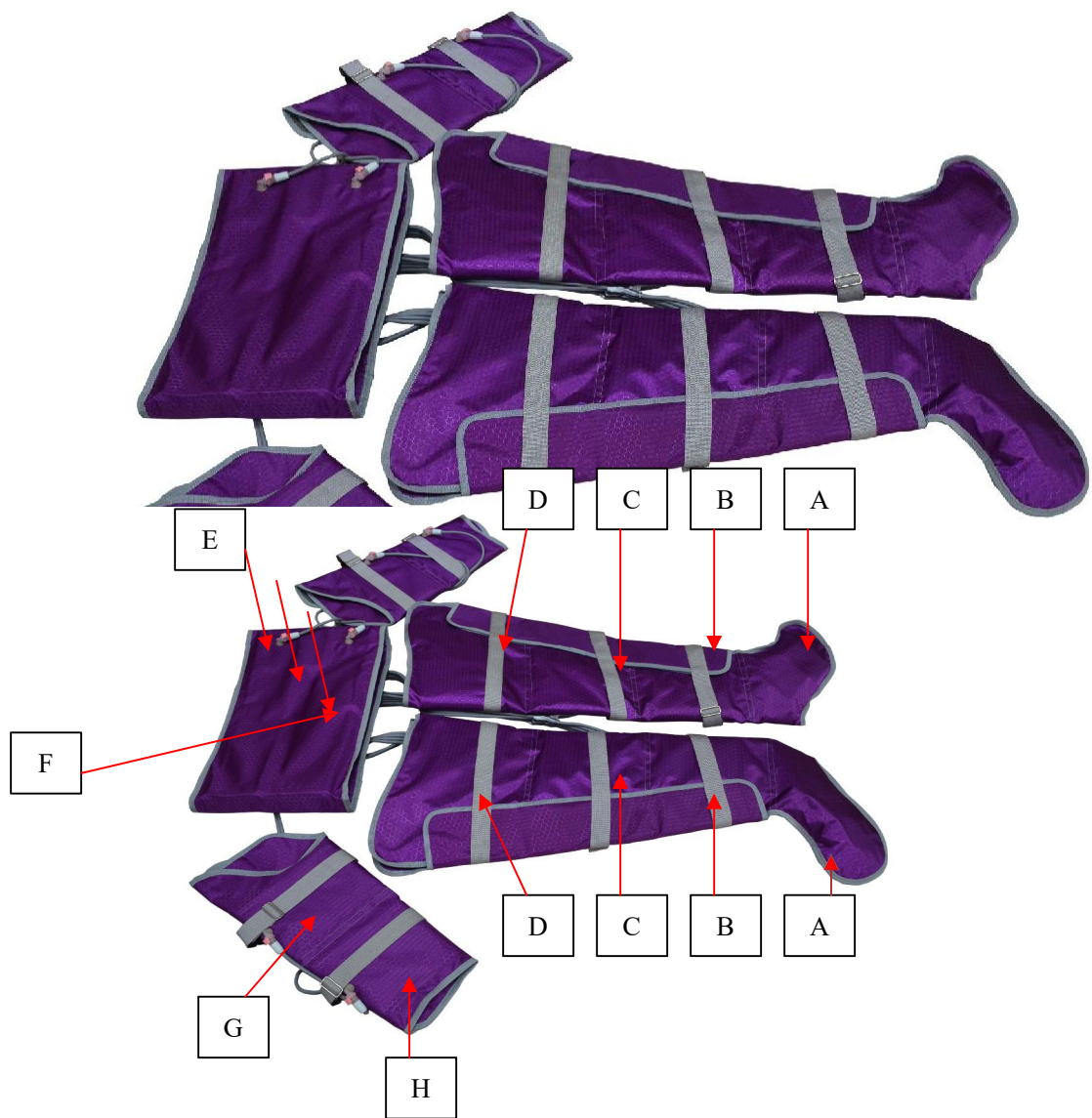


-
- 1. Interruptor de encendido**
 - 2. Botón de inicio/parada**
 - 3. Pantalla del temporizador**
 - 4. Aumento del tiempo**
 - 5. Reducción del tiempo**
 - 6. Ajuste de la intensidad del inflado**
 - 7. Modos de inflado**
 - 8. Salidas de inflado**
 - 9. Botón de inflado del pie**
 - 10. Botón de inflado de la pantorrilla**
 - 11. Botón de inflado de la rodilla**
 - 12. Botón de inflado del muslo**
 - 13. Botón de inflado del hipogastrio**
 - 14. Botón de inflado del epigastrio**
 - 15. Botón de inflado del brazo**
 - 16. Botón de inflado de la axila**
 - 17. Botón de inflado del interruptor principal**
 - 18. Toma de corriente**
 - 19. Válvula de ajuste de la presión de aire**

La imagen a continuación (A, B, C, D, E, F, G y H) coincide con la etiqueta de las partes del cuerpo en el panel principal.


Instrucciones del interruptor de llave

- 1) **Interruptor de encendido (POWER):**  Interruptor de alimentación principal en el panel de control.
- 2) **Botón de inicio/parada :**  Controlar la máquina para arrancar y parar.
- 3) **Pantalla del temporizador:** La máquina establece las horas de trabajo; ajusta el tiempo según la necesidad del usuario; el tiempo predeterminado del sistema es de 45 minutos..
- 4) **Botón para aumentar el tiempo:**  El tiempo aumentará un minuto con cada pulsación, el máximo es 60 minutos.
- 5) **Botón de reducción de tiempo:**  El tiempo se reducirá un minuto con cada pulsación.
- 6) **Ajuste de la intensidad del inflado de aire:** Dividir en modos 1, 2, 3, 4.

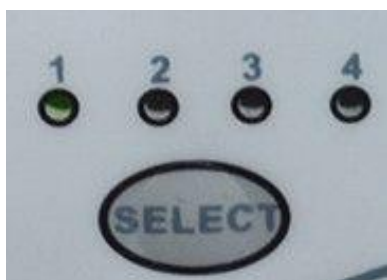

Mode	Tiempo de inflado (segundos)
1	10 s
2	15 s
3	20 s
4	25 s

- 7) **Modos de inflado del aire:** Dividir en modos P1\P2\P3.

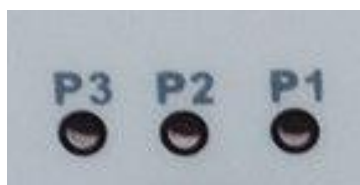

Modo P1: Modo inflable predeterminado. Inflado desde ambos extremos hacia el centro.


La máquina se inflará desde los pies (A) y la mano (H), mientras que desde B y G hasta el centro.

Modo P2: Modo inflable predeterminado. Inflado desde el centro hacia ambos extremos. La máquina se infla desde el abdomen (E&F) hacia ambos

extremos.

Modo P3: Modos seleccionables: inflado completo o parcial. Para inflar todo el cuerpo, presione los botones de las partes inflables A a H, respectivamente; se iluminarán los indicadores LED correspondientes. Para inflar parcialmente, presione los botones de las partes especificadas; se iluminará el indicador de las partes inflables (como se muestra en la imagen).

8) Esquema de conexión del enchufe de salida de aire

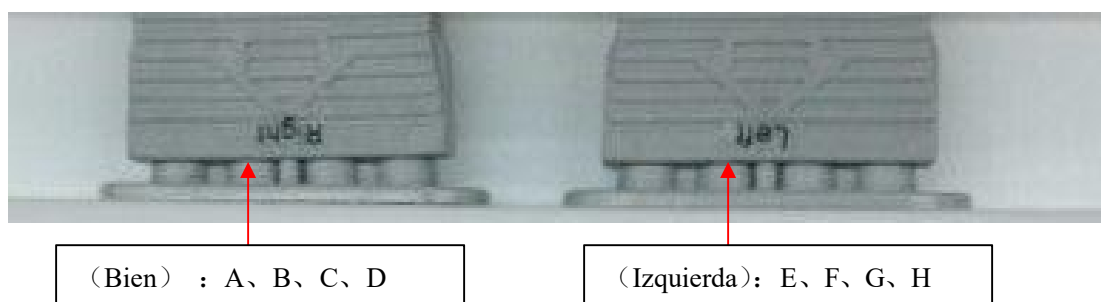

Nota: Al conectar a la interfaz del instrumento, conéctelo siguiendo la dirección indicada en la etiqueta (o la dirección de la flecha). De lo contrario, la máquina no se inflará correctamente según lo indica el panel. Mientras tanto, la bolsa inflable (E, F, G, H) de la parte superior del cuerpo debe conectarse al enchufe (derecha), las otras A, B, C, D deben conectarse al enchufe (izquierda).

9) Esquema de conexión del tubo de salida de aire

la salida de inflado de aire 1 corresponde a la parte de los pies, por lo que el tubo de conexión de salida 1 se conecta al airbag correspondiente a los pies.

El tubo de conexión es un tubo de bifurcación que se divide en dos y cuatro salidas de aire. El usuario solo necesita conectar los cuatro puertos de salida a las cuatro interfaces del airbag de pie (Nota: cada airbag de pie tiene cuatro interfaces inflables: A, B, C y D).

La salida de inflado de aire 2 Corresponde al airbag de brazo y abdomen. El tubo de conexión también es un tubo de bifurcación que se divide en dos y cuatro salidas de aire. El usuario solo necesita conectar los cuatro puertos de salida a las cuatro interfaces del airbag de brazo y abdomen.

Instrucciones de funcionamiento del instrumento

Conecte los tubos inflables y los cables de conexión de calefacción al host correctamente. Conecte la alimentación, presione el interruptor de encendido y el instrumento entrará en modo de espera. A continuación, presione el  interruptor de encendido en el panel para que el instrumento entre en funcionamiento. El tiempo predeterminado es de 45 minutos (el tiempo se puede ajustar libremente, MSB 60 minutos; generalmente se recomienda usar el tiempo predeterminado de 45 minutos).

1. La máquina se divide en modo totalmente automático (según el modo de programación predeterminado del instrumento) y modo manual (según el modo seleccionado por el usuario). El modo automático y el modo manual se distinguen por las siguientes operaciones:

Modo automático: Al iniciar el instrumento, presione el botón de Inicio/Detención para que el sistema entre en modo automático. En este modo, el instrumento cambia de modelo cada 15 minutos. En este momento, el instrumento comienza a funcionar durante 15 minutos desde el modo P1, inflando desde ambos extremos hacia el centro. Después de 15 minutos, cambia automáticamente al modo P2, inflando desde el centro hacia ambos extremos. Después de otros 15 minutos, cambia automáticamente al modo P3. El inflado predeterminado es de cuerpo completo, inflando individualmente de 1 a 8 partes inflables y luego todas juntas de 1 a 8 partes. En el modo P3, si necesita inflar selectivamente, presione el botón de Inicio/Detención; todas las luces de las partes inflables se iluminarán. Al presionar el botón correspondiente a las partes infladas que no necesita, las luces se apagarán, lo que indica que el sitio debe detener el inflado.

Modo manual: Al iniciar el instrumento, seleccione el modo de inflado (P1 \ P2 \ P3) y, a continuación, presione el botón de Inicio/Detención para que el sistema entre en modo manual. En este modo, el instrumento funcionará según el modo seleccionado por el usuario.

Principio de funcionamiento

La máquina de desintoxicación linfática se conoce como el "limpiador" del cuerpo humano, principalmente dentro del sistema circulatorio. El reciclaje interno incluye: el sistema circulatorio sanguíneo, el sistema circulatorio linfático y el líquido tisular, etc. El aire que se infla mediante la bolsa de aire mantiene la circulación linfática del abdomen, brazos y piernas del paciente inflada y desinflada durante un período determinado, acelerando el ciclo del sistema circulatorio para lograr la desintoxicación y la regulación endocrina.

Características de la función

- 1.1. Modelado corporal, pérdida de peso, descomposición y eliminación de grasa persistente.
- 2.2. Desintoxicación neumática: elimina la fatiga, alivia el estrés y el dolor muscular.
- 3.3. Promueve la circulación sanguínea y mejora el metabolismo.
- 4.4. Mejora el sistema linfático y la piel flácida. El drenaje linfático con presión de aire para adelgazar promueve el flujo normal de la linfa a través del instrumento y la eliminación de desechos del cuerpo. A diferencia de la vibración del parche anterior, el instrumento utiliza la presión de la bolsa de aire y el movimiento de la grasa superficial. Los esteticistas utilizan técnicas básicas, además de la ayuda del instrumento con drenaje linfático especializado, circulación, masaje, rotación y tracción para acelerar la circulación y la excreción linfática, manteniéndola limpia y facilitando la eliminación de desechos. El masaje de aire natural suave con ondas de gas no causa ningún daño ni malestar, al mismo tiempo que la presión unilateral de la bolsa de aire equivale a 50 kg de peso, actuando sobre el abdomen durante 30 minutos, equivalente a 150 abdominales.

Efecto de la fisioterapia

5. Mejora la salud de los hombros, la columna cervical y la columna lumbar.
6. Mejora la película de potencial celular y retrasa el envejecimiento de los órganos (como riñones y trastornos gastrointestinales).
7. Masaje mamario: tratamiento de la hiperplasia lobulillar.
8. Elimina el estreñimiento.
9. Adelgazamiento (para mejorar la obesidad localizada).

Precauciones 1

Durante la operación, además de la tecla de ajuste de intensidad disponible para ajustar el nivel de presión, también, dependiendo de las partes del cuerpo expuestas a la presión, ajuste adecuadamente la tensión de las partes del airbag para ajustar el tamaño de la presión. El cuidado contra el abdomen debe dirigirse a él, de modo que las partes inflables del airbag abdominal estén en el abdomen y el airbag baje lo más posible, ajustando la posición abdominal para evitar que el airbag comprima directamente el corazón y cause molestias al cliente. Los clientes necesitan un masaje de espalda, con las partes inflables ubicadas en la cintura. Los airbags de los muslos deben estar cerca de los muslos para estimular la linfa del surco abdominal.

5.Precauciones 2

- 6.1. Los clientes deben quitarse todos los objetos metálicos antes de usar la máquina. El nivel de presión y la talla de la ropa se ajustan libremente según las necesidades del cliente.
- 7.2. No se recomienda el uso de esta máquina a mujeres embarazadas ni a personas con molestias. No se debe usar la máquina para fines de cuidado personal durante una hora después de comer.
- 8.
9. Después de usarla, apague la máquina, desconecte los conductos de aire, retire los conductos de aire y las bolsas de aire, y mantenga los accesorios en buen estado, según las instrucciones. Desinfecte y limpie la ropa y la máquina.

Parámetros técnicos

Voltaje: 110V/120V-220V/240V

Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

Fuerza: ≤40W

Corriente eléctrica: 300mA

Material: ABS

**Tamaño del embalaje:
51*45*41CM**

N.W./G.W:14.5KG/11KG

Lista de piezas

1. Anfitrión	1
2. Línea eléctrica	1
3. Línea eléctrica de globos	2 bolsas
4. globo de mano	2
5. globo de cintura	1
6. Balón de pierna	2
7. Pies de globo	2
8. Instrucción	1