

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE CONTORNO CORPORAL DE PRESOTERAPIA

Modelo: **WL-JMLB1218**



Estimado cliente,
Gracias por comprar nuestro sistema de presoterapia para el contorno corporal.
lea atentamente este manual de usuario y utilice el sistema de forma correcta.


BREVE INTRODUCCIÓN

Este sistema ofrece masaje de presión de aire para todo el cuerpo. La presión del aire también se llama presoterapia. Puede promover eficazmente la circulación sanguínea, eliminar el cansancio de los músculos y mejorar el metabolismo corporal. También puede tensar la piel flácida para adelgazar el cuerpo.

EFECTOS PRINCIPALES

- Quemar grasa, perder peso, moldear el cuerpo y mantenerse en forma.
- Desintoxicación de la transpiración, descarga de metales pesados junto con el sudor.
- Relieve rheumatism and cold, unclog meridian, reduce body fatigue stress.
- Alivia el reumatismo y el frío, desatasca el meridiano, reduce el estrés por fatiga corporal.
- Estimular el sistema de circulación corporal, promover la circulación sanguínea, fortalecer. y cultivar Vísceras.
- Mejora la entrada y absorción de medicación/nutrición.

INTRODUCCIÓN DEL PANEL

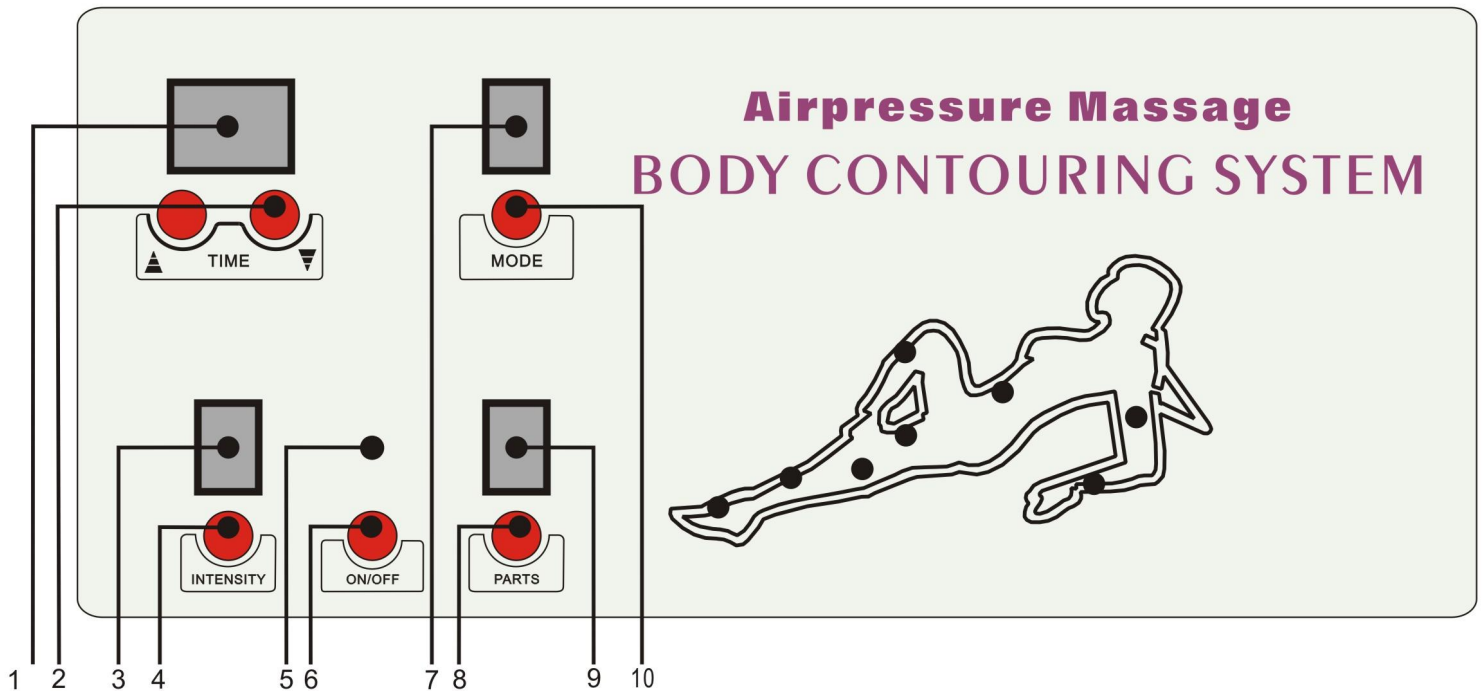

1: Temporizador

2:Tiempo ARRIBA/ABAJO

**3: Pantalla de
INTENSIDAD**

**4:Selección de
INTENSIDAD**

**5: Luz indicadora de
ENCENDIDO/APAGADO 6**

**: Botón de ENCENDIDO/
APAGADO**


7: Pantalla de MODO

8: Selección de PIEZAS

9: Pantalla PIEZAS

10: Selección de MODO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE AIRE

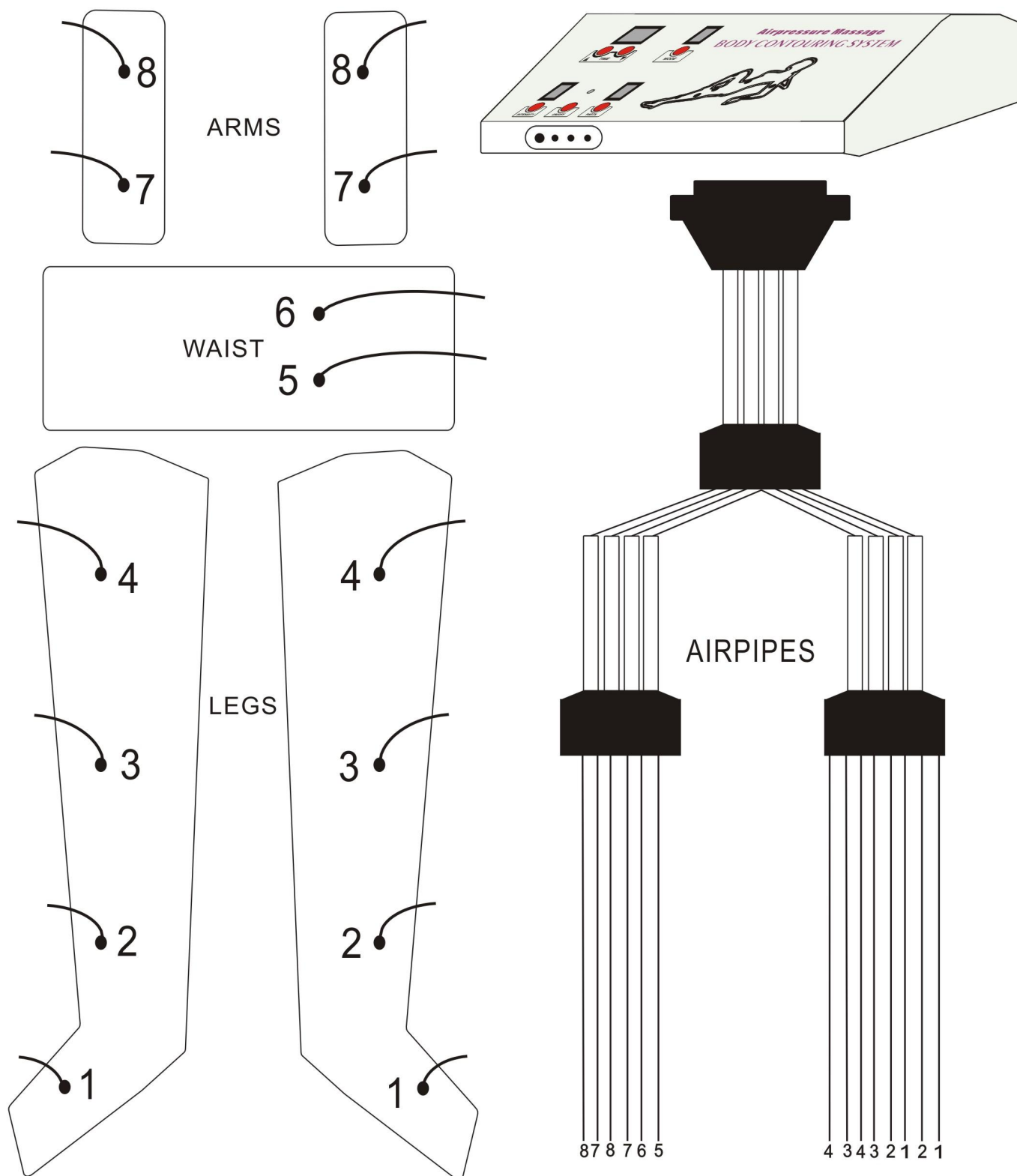


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Instale el disfraz y el instrumento (consulte el diagrama anterior).
2. Conecte el cable de alimentación, presione el interruptor de encendido para encender el instrumento.
3. Configure la HORA usando las flechas ▲ y ▼.
 - Cuando el controlador está encendido, el tiempo predeterminado es 30 minutos.
 - El tiempo máximo ajustable es de 90 minutos.
 - El tiempo recomendado para cada uso es de 35-40 minutos.
 - It is recommended to use it every other day.
4. Configure el MODO de masaje usando el botón de selección de modo.
 - Se pueden seleccionar 6 modos de masaje:


MODO	DESCRIPCIONES
1	Cada inflación dura 2 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.
2	Cada inflación dura 4 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.
3	Cada inflación dura 6 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.
4	Cada inflación dura 8 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.
5	Cada inflación dura 10 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.
6	Cada inflación dura 12 segundos, el tiempo de deflación es de 1 segundo.

5. Seleccione las PIEZAS del masaje


MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE CONTORNO CORPORAL DE PRESOTERAPIA

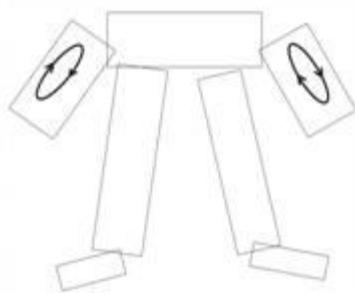


Seleccione 1, masaje **BRAZOS**

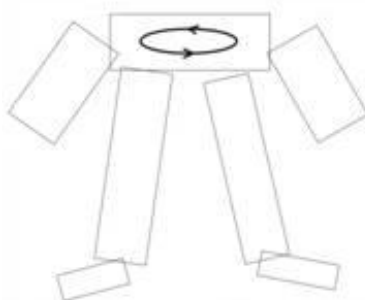


Seleccione 2, masaje **CINTURA**

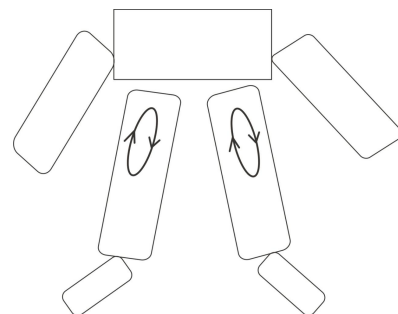


Selecciona 3, masajea **MUSLOS**

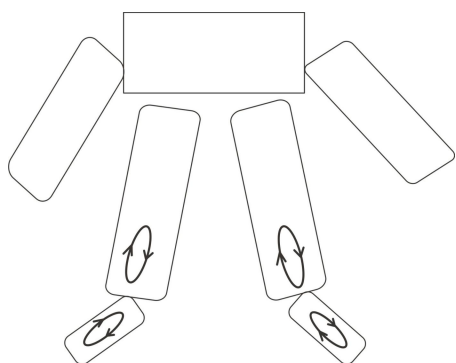


Seleccione 4, masajee **pantorrillas y pies**

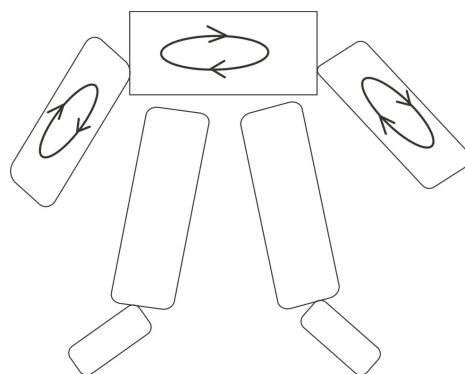


Seleccione 5, masajee **BRAZOS y CINTURA**

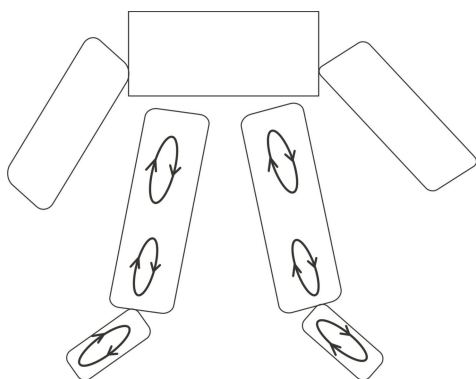


Seleccione 6, masajee **MUSLOS, PANTORRILLAS y PIES**

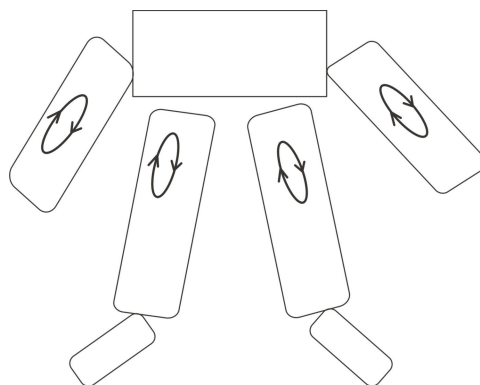

Seleccione 7, masajear **BRAZOS y MUSLOS**

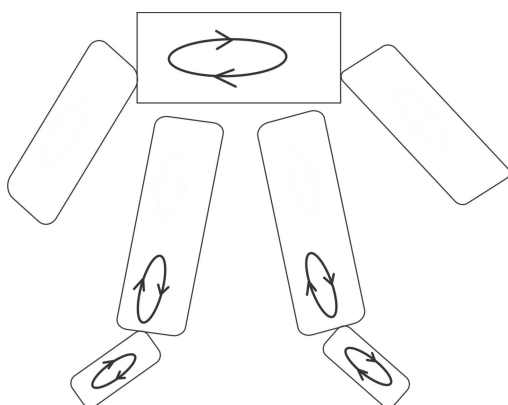

Seleccione 8, masaje **CINTURA-MUSLOS-PIES**

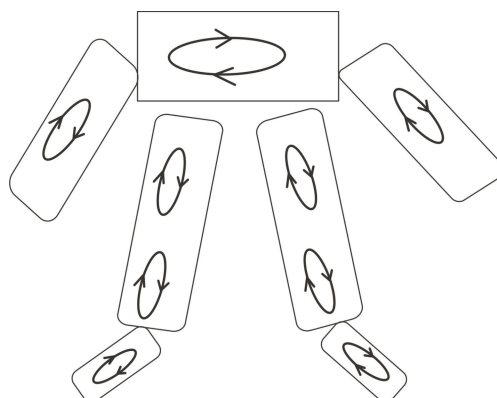

Seleccione 9, masaje **BRAZOS-CINTURA-PIERNAS-PIES**

6. Seleccione el masaje INTENSIDAD

■ Hay 7 niveles de intensidad.

7. Presione ON/OFF para comenzar el masaje de presión de aire.

8. Presione ON/OFF nuevamente para detener el masaje de presión de aire.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Suministro de voltaje	CA 110/60 Hz ~ CA 220/50 Hz
Fuente de alimentación	50W
Tiempo máximo	90 minutos
Modo de masaje	6 unos
Intensidad del masaje	1 a 7 niveles (opcional)
Piezas de masaje	BRAZOS, CINTURA, PIERNAS, PIES
Peso neto	12kg
Peso.bruto	13kg
Dimensión de embalaje	56 cm (largo) x 37 cm (ancho) x 30 cm (alto)

ARTÍCULOS PROHIBIDOS

- Las infecciones graves de las extremidades no se controlaron eficazmente.
- Trombosis venosa profunda reciente de las extremidades inferiores.
- Una gran erupción ulcerosa.
- Tendencia a sangrar.
- Las mujeres embarazadas.
- Las personas tienen enfermedades de la piel, como escaldaduras y enrojecimiento.
- Mujeres en el período menstrual.

LISTA DE EMBALAJE

Nombre del artículo	Cantidad	Observaciones
Controladora	1 (juego)	
Traje	1 (juego)	
Tuberías de aire	1 (juego)	
Cable de alimentación	1 (pieza)	
Fusible de repuesto	2 (pieza)	
Instrucciones del manual en inglés	1 (copia)	