


User Manual

FC-23K5

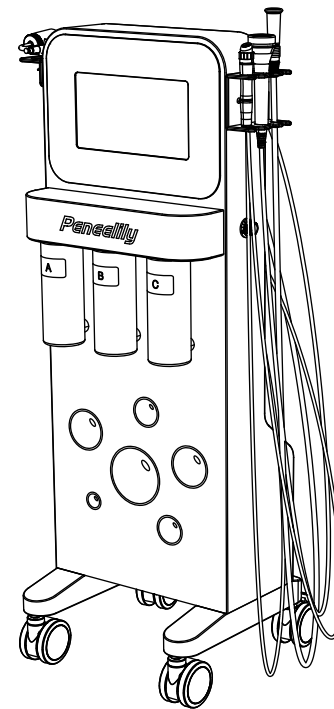

Thank you for choosing the Facial Skincare Device. Please read this user manual carefully before using the instrument!

This device uses microbubble vacuum adsorption to deeply cleanse hair follicles of impurities; a spray gun atomizes moisturizing essence to penetrate the skin's base and repair the skin barrier; a suction device promotes blood circulation and accelerates lymphatic drainage; ultrasonic waves refine the essence for better absorption; EMS microcurrents tighten the skin's contours; and EP electrical pulses enhance permeability. The complete system creates a closed-loop skincare routine, revitalizing the skin's health and vitality from the surface to the core.

Content

1. Benefits	1
2. Use Precautions	1
3. Contraindications	2
4. Technical Specification	2
5. Packing List	3
6. Installation	5
7. User Guide	9
8. Troubleshooting Guide	25
9. FAQ	27
10. Warranty and support	28

Gracias por elegir el equipo integral de gestión cutánea. ¡Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el aparato! Este aparato limpia en profundidad las impurezas de los folículos pilosos mediante la adsorción al vacío con pequeñas burbujas; la pistola pulverizadora atomiza una esencia hidratante que penetra en las capas más profundas de la piel para reparar la barrera cutánea; la succión estimula la circulación sanguínea y acelera la desintoxicación linfática; los ultrasonidos facilitan la absorción de la esencia, mientras que la microcorriente EMS reafirma el contorno y los impulsos eléctricos EP mejoran la permeabilidad. El conjunto de aparatos forma un ciclo cerrado de cuidado de la piel, revitalizando su salud y vitalidad desde la superficie hasta el interior.

Índice

1. Efectos	29
2. Precauciones	29
3. Personas contraindicadas	30
4. Especificaciones del producto	30
5. Detalles del producto	31
6. Instalación	33
7. Guía de uso	37
8. Solución de problemas	53
9. Preguntas frecuentes	55
10. Garantía y servicio posventa	56

1. Benefits

1. Improves hyperpigmentation
2. Removes dead skin cells, excess oil, blackheads, and whiteheads
3. Reduces fine lines and wrinkles
4. Improves enlarged pores
5. Improves facial puffiness and dullness
6. Improves sagging skin

2. Use Precautions


1. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the product's operating instructions and related technical information.
2. Warranty service for this product is provided by the designated after-sales service provider.
3. When using the Hydro function, start at the lowest suction level and gradually increase it once your skin has adjusted.
4. This comprehensive skin care device is a high-precision electronic product and must be handled and stored with care. Do not place it in damp areas, in direct sunlight, or near flammable or explosive materials to prevent damage.
5. Turn off the power switch when the device is not in use, and ensure that the main power supply is turned off before leaving the area to ensure electrical safety.

3. Contraindications


Those with the following symptoms should use this instrument with caution. Please consult a doctor or professional before using it.

1. People with severely sensitive skin and those in the period of allergy
2. Those with implants on their face
3. Those with large areas of facial trauma
4. Patients with skin diseases and infectious diseases
5. Those who have recently undergone injection products, such as hyaluronic acid, water light, anti-wrinkle, or plastic surgery


4. Technical Specification

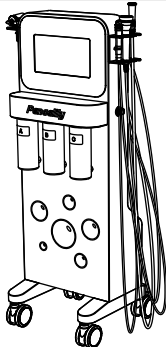	Power supply Input: AC110V-240v 50HZ-60Hz	Net Weight: 21KG
	Power: 32W	Gross Weight: 27KG
	Dimensions: 38*50*108CM	
	Input Power: 32W	

5. Packing list

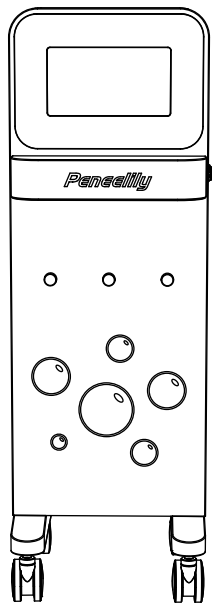

Main unit x1

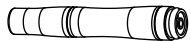


Hydro handle x 1



Hydro Hard Tip x 8



Hydro Silicone Tip x 6

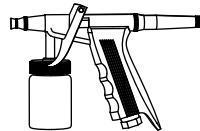

Spray gun x 1



Hydro sanding head x 2



Suction Cup x 2




Hydro sealing head x 1



Suction connector x 1



Airbrush braided air hose x 1

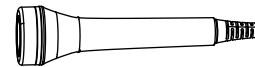


Import Hub handle x 1



Fuse x 4




Filters x 2

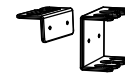


Accessory stand x 2




Waste water bottles x 1

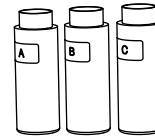

Water purification bottles x 3

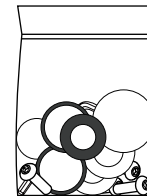

Accessory package x 1

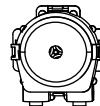

peristaltic pump x 1



Peristaltic pump hose x 1



Power cord x 1




Instruction manual x 1


Before use, please check the instrument and accessories or attachments to ensure they are complete. Then remove all packaging materials.

6. Installation


1. Install all the accessory racks

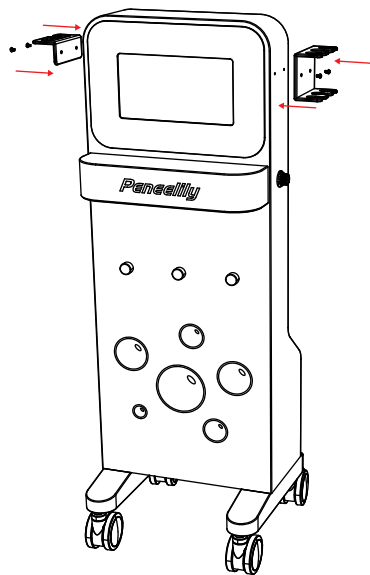


2. Connect the bottle to the Spray Gun handle. Install the Spray Gun's connecting cable, connecting one end of the braided tubing to the main unit and the other end to the Spray Gun.

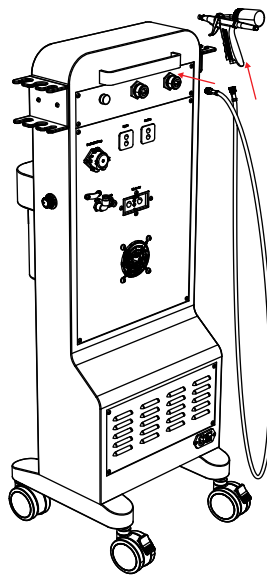


3. Install the connecting tube for the suction cup. First, connect one end of the white rubber tube to the main unit, and the other end to the suction cup.

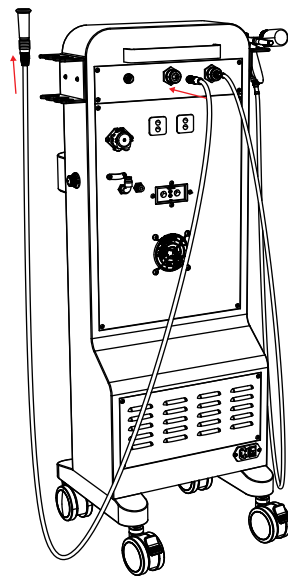


4. Install the Import Hub connection cable.

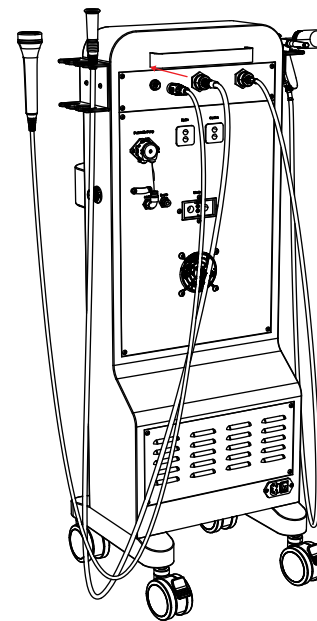



5. Install the Hydro connector: Firmly insert the blue tube into the drain outlet (Tip: When disassembling, press down the white retaining ring on the drain outlet and then pull out the tube); connect the white tube to the inlet on the left side of the peristaltic pump.

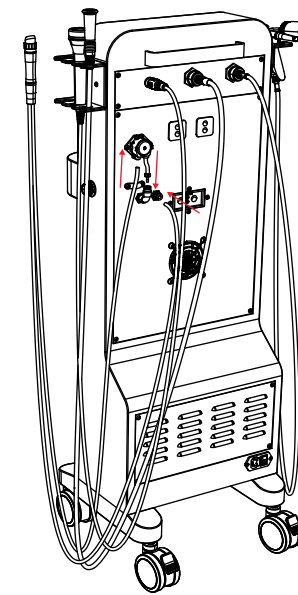

6. Install wastewater bottles and filters.

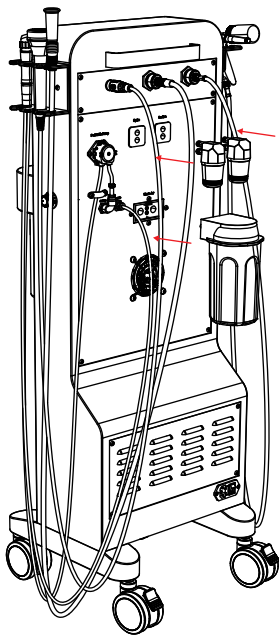

7. Install the solution bottle

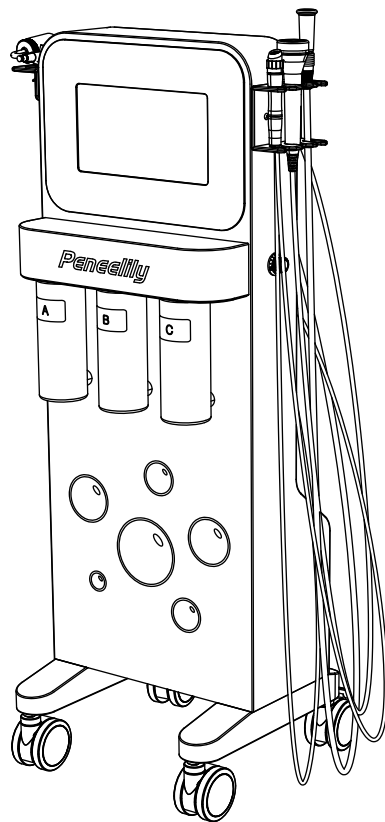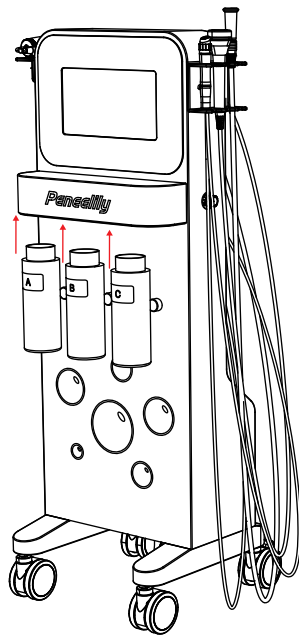


Replace the transparent rubber tubing on the peristaltic pump (only if the silicone tubing is damaged):

1. Press the left and right retaining clips of the peristaltic pump and remove the pump body from the main unit.




2. Press down on the upper and lower clasps of the pump body to open the pump housing.

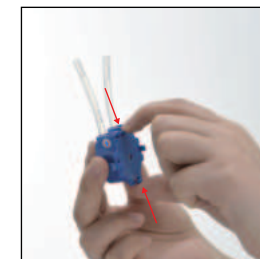


3. Remove the original transparent rubber tube.



4. Insert the new transparent hose into the slot of the pump body.

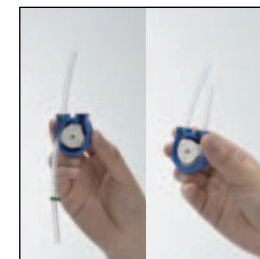



5. Secure the pump body housing and ensure that the snap fastener is properly engaged.

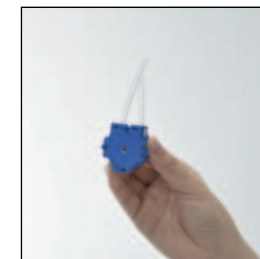

6. Insert the assembled pump body back into the main unit and make sure the connection is secure.



7. User Guide

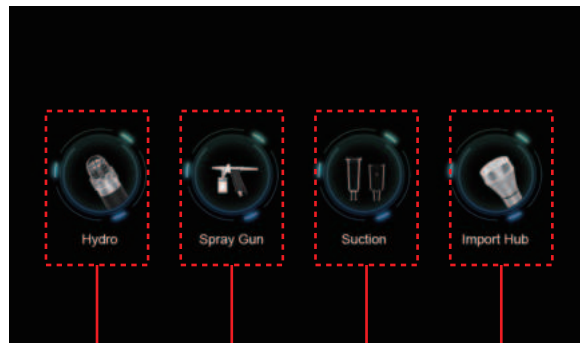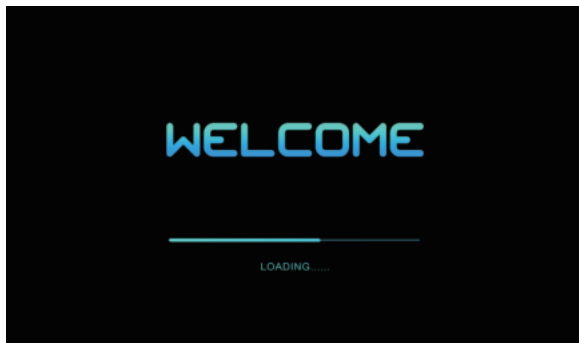

Hydro


Spray Gun

Suction

Import Hub

1. Hydro

1.1 From the main menu, select the "Hydro" icon to enter the function interface.

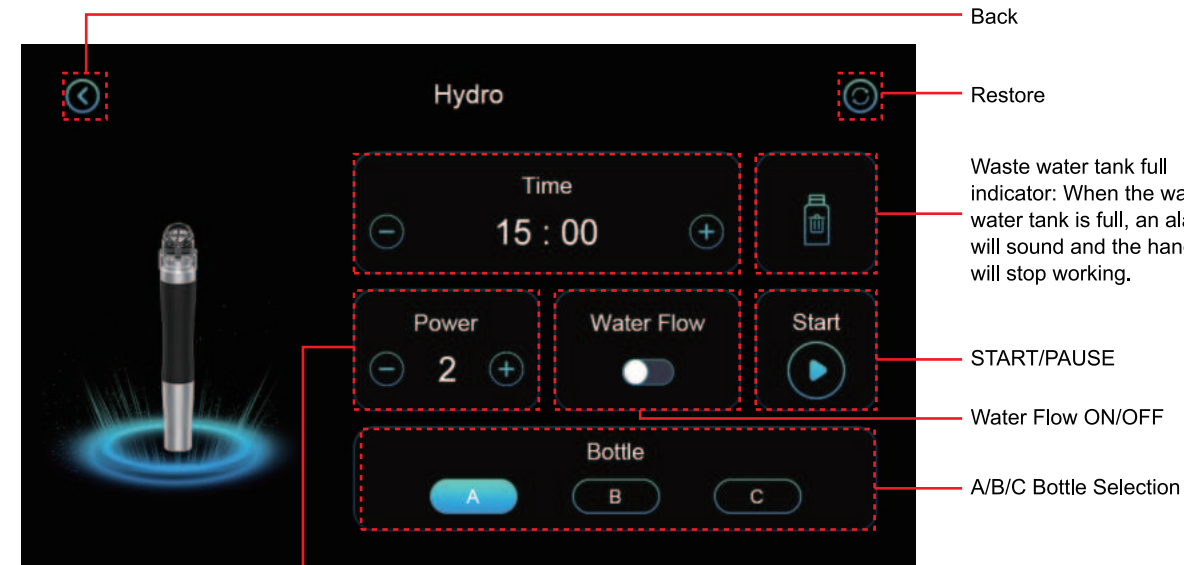

Back

Restore

Waste water tank full indicator: When the waste water tank is full, an alarm will sound and the handle will stop working.




START/PAUSE

Water Flow ON/OFF

A/B/C Bottle Selection

POWER
(water flow and suction force)
display and adjustment 0-5

1.2 How to Choose a Hydro Head

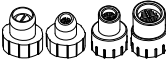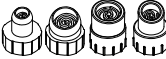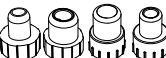
	Flat suction tip: Suitable for cleaning large areas of grease, dust and keratin.
	Straight suction tip: Suitable for cleaning dirt and makeup residue from linear areas of the face (such as the bridge of the nose, philtrum, and around the eyes).
	Spiral suction tip: Suitable for deep cleaning, effectively removing and extracting stubborn dirt, blackheads, and dead skin cells from the pore walls.
	Spot treatment tip: designed for targeted application on problem areas such as spots and blackheads

Note: If your skin is sensitive or you prefer a gentle cleansing method, it is recommended to choose the white soft silicone head. The transparent hard silicone head is suitable for normal skin.


	Note: Before installing a silicone tip, remove the rubber ring from the hydro dermabrasion handle to ensure the tip fits securely in place.
	Sealing head Note: When using the Hydro function for the first time, install the sealing head onto the hydro handle. Wait about 40 seconds after starting the device. Once water flows through the transparent tube, the unit is ready for use.
	Suitable for the cheeks and forehead
	Suitable for small areas around the eyes or nose

1.3 Hydro Installation


① Take a rubber ring and attach it to the handle (the machine you received already has a rubber ring installed).

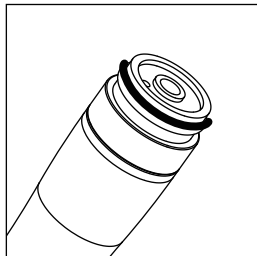

② Select the appropriate tip and attach it to the handle.

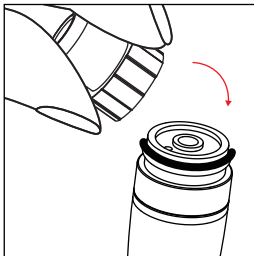


③ Remove the A, B, and C solution bottles.

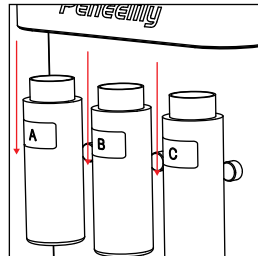

④ Fill the A, B, and C solution bottles with small-bubble solution or purified water.



⑤ Reattach the solution bottles to the main unit.

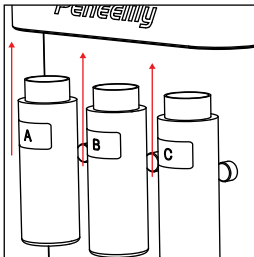

1.4 Guidelines for Use

Recommended medium: Small bubble solution (AS1/AO3/SA2) + Blackhead Extraction Solution

Solution Guide:

AS1: Contains lactic acid, yeast extract, green tea extract, etc. Suitable for normal skin, recommended for full-face use to help deep cleanse and revitalize the skin.

AS2: Contains salicylic acid, lactic acid, sodium lactate, aloe vera and green tea extract, etc. Specially designed for sensitive skin and oily skin. Mainly used on the T-zone to control oil, clean pores and improve skin problems.

- ① Choose the appropriate hydro head and exfoliating product based on your individual needs and skin condition.
- ② Configure Setting: Please configure the device parameters based on your skin's specific needs.
- ③ Start from the chin, perform two to three operations, connect the three points into a line for one operation.

After completing the face treatment, use a circular motion to focus on cleaning the nose area.

Tip: during the process, gently wipe the skin with a damp cotton pad to remove residues as you go.

④ Recommended Frequency:

Oily Skin: Once pre week

Combination Skin: Once every 2 weeks

Normal/Dry Skin: Once every 3 to 4 weeks




1.5 Important Notes for Use ⚠

When using, it is recommended to start with the lowest suction force. Once the skin has adapted, gradually increase the suction force to avoid discomfort caused by excessive pulling of the skin.


1.6 Cleaning and Maintenance

Cleaning the Hydro Dermabrasion Tips:


① Use the included cleaning brush to remove residue from inside the tip under running water.

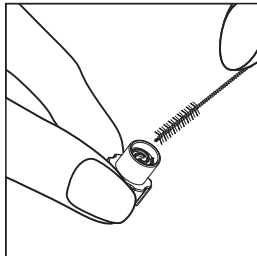

② Soak the tips in saline solution or rubbing alcohol for approximately 5 minutes.

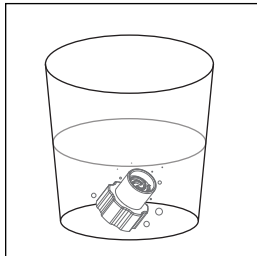


③ Rinse thoroughly with clean water and allow all parts to air dry completely before storing them in the storage case.

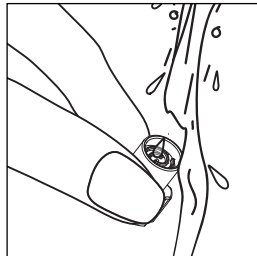


Flushing the Handle & Tube:

① Keep the silicone ring on the handle, then install the white sealing head onto the hydro handle.

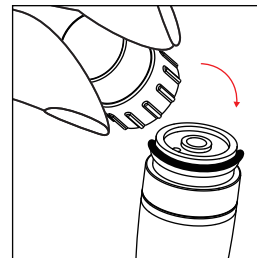


④ The cleaning is finished once all the water has circulated completely.

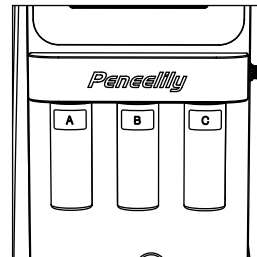

② Pour clean water into any of Bottle A/B/C, and empty the waste water bottle.




③ Turn on the switch of the hydro handle and set the device power to maximum.

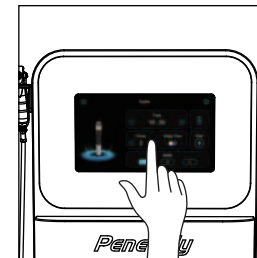

Note: Please clean the pipeline following the steps above after each use of the hydro handle. This can effectively extend the service life of the device.


2. Spray Gun

2.1 From the main menu, select the "Spray Gun" icon to enter the function interface.

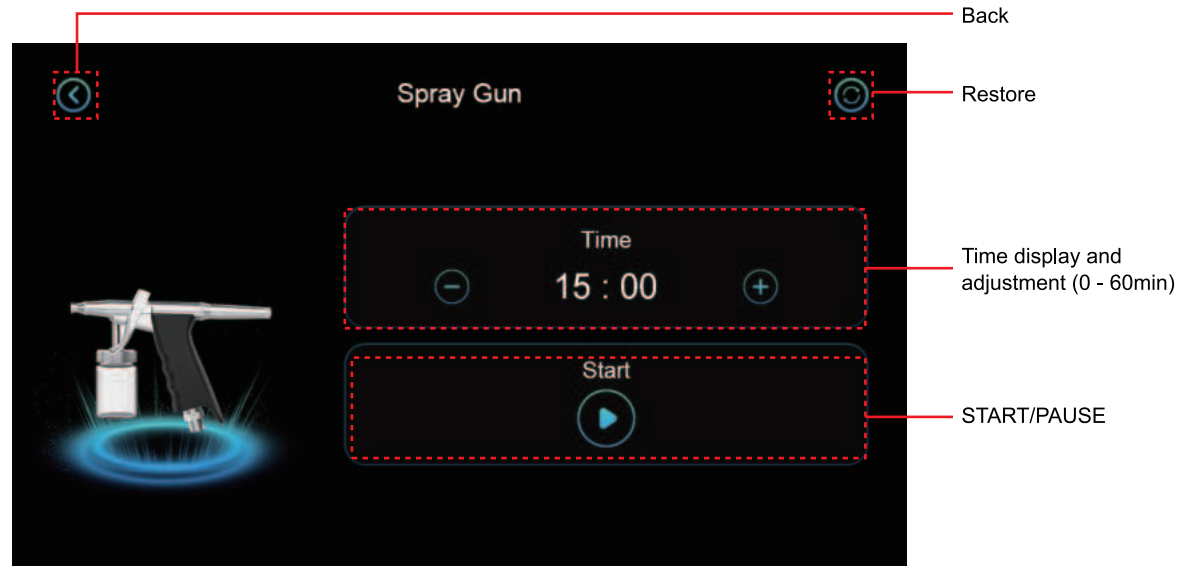


2.2 Spray Function Installation

① Remove the bottle and fill it with water (you can use purified water, serum, toner, saline solution, etc.; for serum, use a 1:10 dilution ratio with water, depending on your skin type).


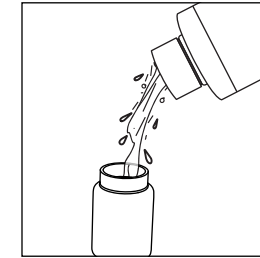


③ Pull the trigger gently to release the mist.

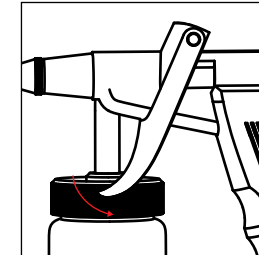

Note: If the trigger feels stuck, rotate the adjustment ring at the rear of the handle counterclockwise 2–3 turns.

② Reattach the bottle to the handle

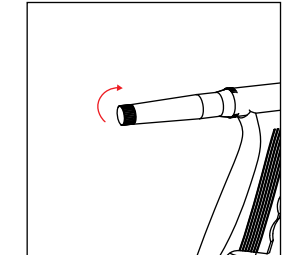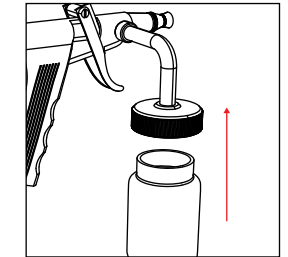

2.3 How to Use

Follow the steps below for an optimal spray application session.


- ① Fill the spray bottle with the desired solution.
- ② Hold the spray handle approximately 15–20 cm (6–8 inches) away from the face.
- ③ Apply the mist using slow, circular motions across the skin.

Recommended Usage Frequency:

Normal Skin: 2-3 times per week

Dry Skin: Once daily

Oily / Combination Skin: 2-3 times per week

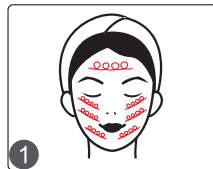

2.4 Cleaning the Spray Handle

- Fill approximately one-third of the bottle with clean water.
- Turn on the device and spray until the bottle is empty to flush the internal tubing.


2.5 Precautions

Avoid using highly concentrated liquids, as they may clog the spray nozzle.

If the spray nozzle becomes clogged, gently clean the opening with a fine needle.

3. Suction

3.1 From the main menu, select the "Suction" icon to enter the function interface.

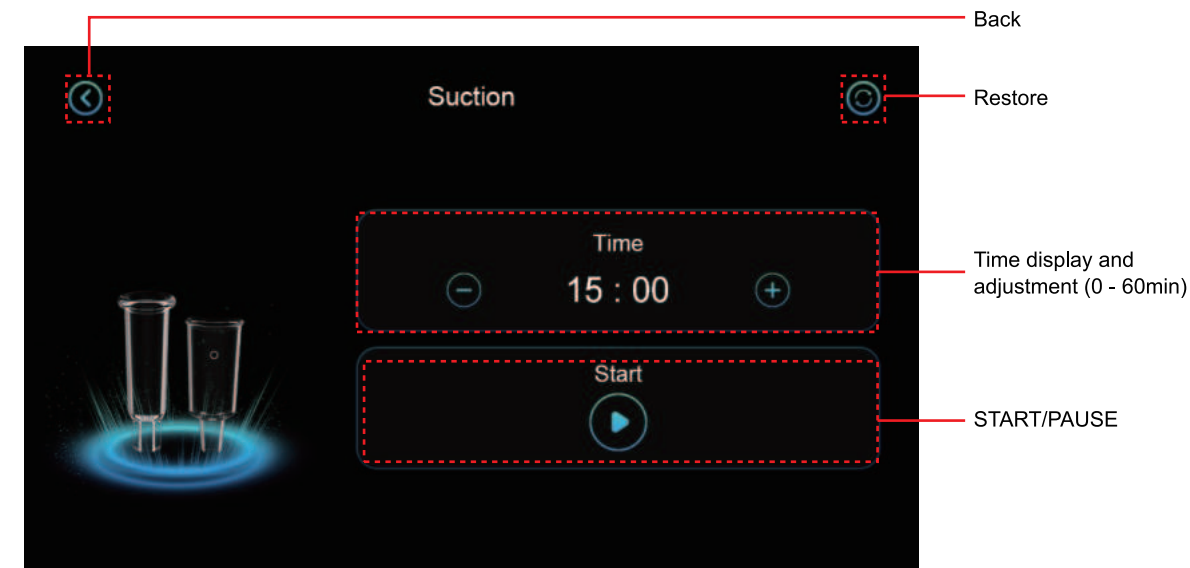


3.2 How to Choose a Cup


	Lymphatic drainage for normal skin.
	Lymphatic drainage suitable for people with sensitive skin (The cup features a small hole; pressing it with your thumb creates suction during use, and releasing it stops the suction.)

3.2 How to Install Suction


① Connect one end of the hose to the cup.

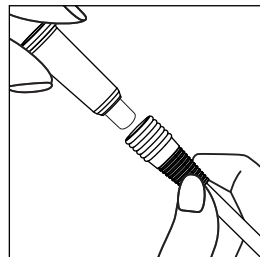

② Connect the other end of the hose to the machine.

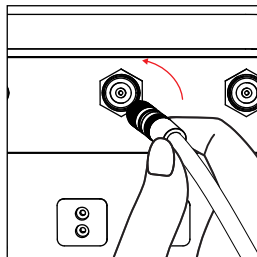

Note: After unscrewing the air intake port counterclockwise, you can see a filter cotton inside the instrument. This filter cotton should be replaced once a week.

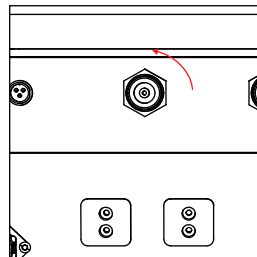

3.3 How to Use

Follow these steps to get the most out of your suction cup.

- ① Set the treatment course: Please adjust the device settings according to your skin's specific needs.
- ② Use the suction adjustment knob to adjust the suction level according to your comfort level.
- ③ Apply facial oil: Apply a generous amount of facial oil to the treatment area to ensure the device glides smoothly.
- ④ Glide from behind the ear down the side of the neck to the collarbone, then push horizontally toward the acromion and drain to the underarm.


Glide along the lower facial contour to behind the ear, then slide down the side of the neck to the collarbone, and push horizontally toward the acromion down to the underarm.

Start from the chin, glide across the mouth corners, nasal wings and lower eyelids up to the eyebrows and Yintang. Slide along the hairline to the sides of the ears, then move from behind the ears down the lateral neck to the collarbone, followed by horizontal pushing toward the acromion and draining down to the underarms.

⑤ Recommended frequency of use:


Oily skin: Twice a week

Dry, normal, or combination skin: 1–2 times a week

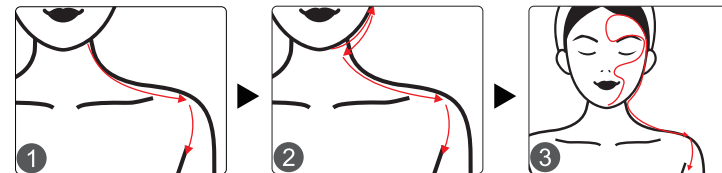


3.4 Precautions

When using this product, it is not recommended to hold it in one spot for too long, as this may cause skin irritation.

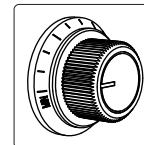

4. Import Hub

4.1 From the main menu, select the "Import Hub" icon to enter the function interface.

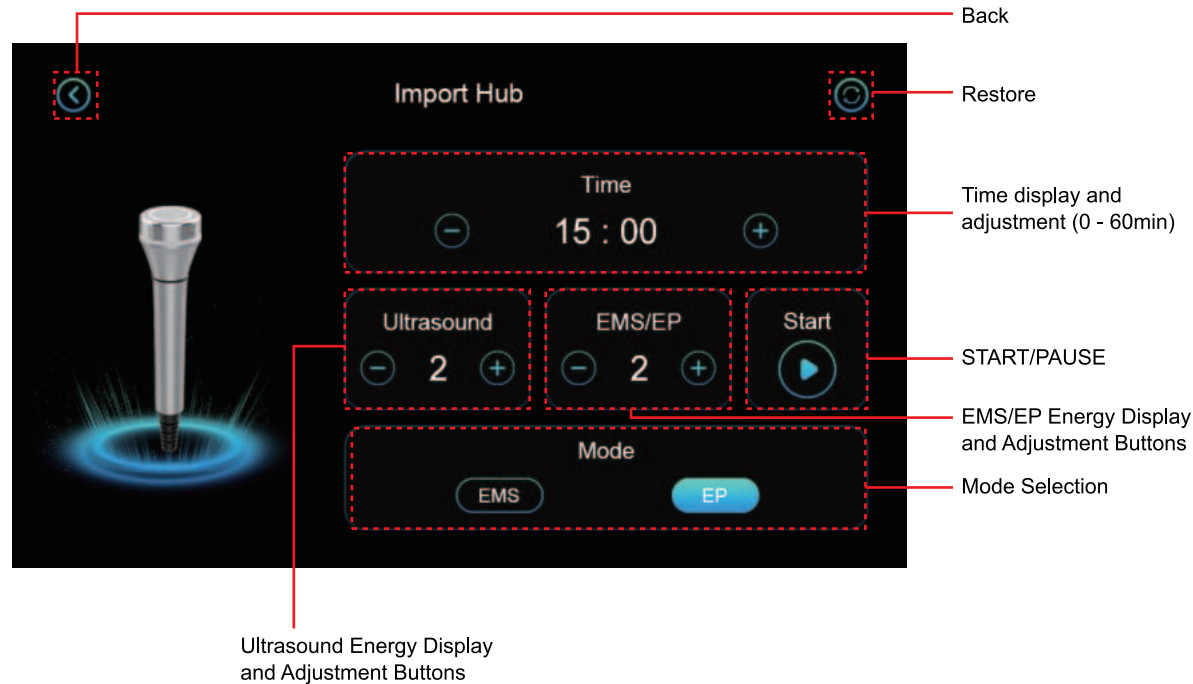

4.2 How to Use

Follow these steps to get the most out of the Import Hub feature.

- ① **Configure Your Session:** Please configure the device parameters based on your skin's specific needs.
- ② **Apply Coupling Medium:** Use a sufficient amount of conductive gel or serum on the treatment area. This ensures smooth gliding of the device and promotes effective product infusion.
- ③ **Recommended Method:** Gently move the device handle across your face using continuous circular motions or upward lifting strokes, as demonstrated in the diagrams. Ensure consistent contact with the skin.

④ **Recommended Usage Frequency:**

Dry Skin: 2-3 times per week

Oily Skin: 2 times per week

Normal / Combination Skin: 1-2 times per week



4.3 Precautions

Keep the Device Moving: Do not hold the device stationary on one spot for an extended period, as this may cause skin discomfort.

Start Low, Go Slow: Always begin at the lowest intensity level. Gradually increase the level only after your skin has acclimated to the sensation.

8. Troubleshooting Guide

This section provides solutions to common operational issues. Please follow the steps below before contacting support.

1. No Suction From the Hydro Dermabrasion Handle

- ① Check that the filter and Waste Water bottle are installed correctly.
- ② Empty the Waste Water bottle if it is full.
- ③ Check if the Hydro handle connection cable is loose, not plugged in properly, or connected in the wrong position.

2. No water flow from the Hydro handle?

- ① The blue tube is not fully inserted. Push it firmly into place.
- ② There is insufficient water in Bottle A/B/C.
- ③ The transparent tube of the peristaltic pump is damaged. Please replace it with a new one.
- ④ Install the sealing head before first use, and wait about 40 seconds for normal water flow.
- ⑤ Check the operation interface and make sure the water flow switch is turned on.

3. Spray Function Not Dispensing Mist

- ① The liquid may be too concentrated and could be clogging the nozzle.

- ② The rear adjustment ring may be tightened too far.
- ③ Clean the nozzle gently using a fine needle if blocked.

4. Why is there no suction?

- ① Check whether the hose is connected to the suction port.
- ② Check whether the hose is securely connected to the handle.
- ③ Check whether the hose is damaged; if so, replace it.
- ④ Check whether the suction dial is set to medium or higher.

5. Need Additional Assistance?

If the issue continues after following the steps above, please contact Customer Support for further assistance.

9. FAQ

Q1: Why does my face turn red after use? Is this normal?

A: Yes, this is a common and temporary reaction. The device works on a vacuum principle. When the handle makes contact, it causes a brief increase in blood flow (capillary congestion) in the area, which may lead to temporary redness. This typically fades within a few hours. We recommend applying a moisturizer immediately after your session to soothe and hydrate the skin.

Q2: How soon can I expect to see results?

A: Many users notice smoother- and cleaner-looking skin after the first use. With regular use, the device may help improve the appearance of dullness, clogged pores, and uneven skin texture.

Q3: Will my skin become thinner or more sensitive with regular use?

A: No. The process is designed to cleanse pores by removing impurities like blackheads and whiteheads. It does not thin the skin's protective barrier. With consistent and correct use, the goal is to promote smoother, clearer-looking skin and should not induce sensitivit

Q4: Will my skin become thinner or more sensitive with regular use?


A: No. The process is designed to cleanse pores by removing impurities like blackheads and whiteheads. It does not thin the skin's protective barrier. With consistent and correct use, the goal is to promote smoother, clearer-looking skin and should not induce sensitivit.

10. Warranty & Support

A one-year warranty will be provided starting from the date of your purchase.

If you have any questions during use or any problems with the product, you can contact our customer service. We can also provide you with more professional skincare guidance.

You can scan the QR code below to watch the video on the installation and operation of the instrument.

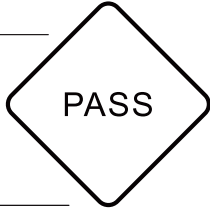Product Name:	Facial Skincare Device	
Product Model:	FC-23K5	
Production Date:		
Quality Inspection:		

1. Efectos

1. Mejorar la hiperpigmentación
2. Eliminar células muertas, exceso de grasa, puntos negros y puntos blancos
3. Reducir las líneas de expresión y las arrugas
4. Mejorar los poros dilatados
5. Mejorar la hinchazón y la palidez del rostro
6. Mejorar la flacidez y la caída de la piel

2. Precauciones


1. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para familiarizarse con su funcionamiento y las técnicas relacionadas.
2. La garantía de este producto la gestiona el servicio técnico autorizado.
3. Cuando utilice la función «Hydro», comience con el nivel de succión más bajo y aumente gradualmente la potencia una vez que la piel se haya adaptado.
4. Este equipo integral para el cuidado de la piel es un producto electrónico de alta precisión, por lo que debe guardarse y almacenarse adecuadamente. No lo coloque en lugares húmedos, expuestos a la luz solar directa o donde haya artículos inflamables o explosivos, para evitar daños.
5. Cuando no utilice el equipo, apague el interruptor de encendido y asegúrese de desconectar la alimentación general del equipo antes de abandonar la sala, para garantizar la seguridad eléctrica.

3. Personas contraindicadas


Las personas que presenten los siguientes síntomas deben utilizar este dispositivo con precaución; antes de utilizarlo, consulte a un médico o a un profesional.

1. Personas con piel muy sensible o que se encuentren en un periodo de alergia
2. Personas con implantes faciales
3. Personas con lesiones faciales extensas
4. Personas con enfermedades cutáneas o infecciosas
5. Personas que se hayan sometido recientemente a tratamientos con inyectables, como: ácido hialurónico, hidratación facial, tratamientos antiarrugas o cirugía estética


4. Especificaciones del producto

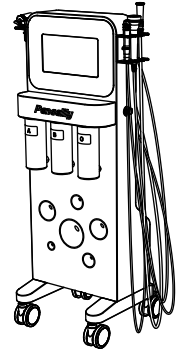	Fuente de alimentación: Entrada: 110-240 V CA, 50-60 Hz	Peso neto: 21KG
	Potencia: 32W	Peso bruto: 27KG
	Dimensiones: 38*50*108CM	
	Potencia de entrada: 32W	

5. Detalles del producto

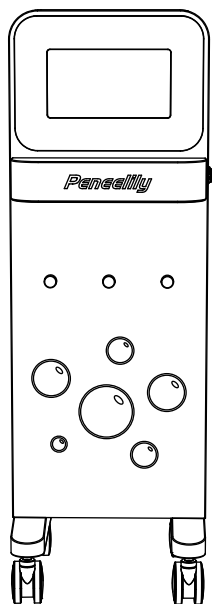

Unidad principal x 1

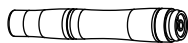

Mango Hidratación x 1



Cabezales mate
Hidratación x 2



Cabezal de sellado
Hidratación x 1



Cabezales transparentes
Hidratación x 8




Ventosas x 2



Tubo de conexión
de succión x 1



Cabezales de silicona
Hidratación x 6

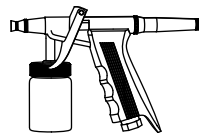

Pistola spray x 1




Manguera trenzada para
pistola pulverizadora x 1



Mango Centro de
Importación x 1



Botella de aguas
residuales x 1

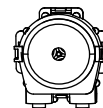


bomba peristáltica x 1




Fusibles x 4




Filtros x 2

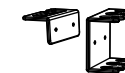

Soporte para
accesorios x 2

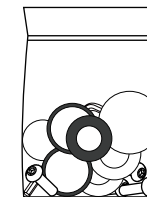

Juego de accesorios x 1

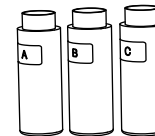

Botellas de agua limpia x 3



Manguera de bomba
peristáltica x 1



Cable de
alimentación x 1




Manual de
instrucciones x 1


Nota: Antes de utilizar el aparato, compruebe que tanto el mismo como sus accesorios o complementos estén completos y, una vez confirmada su integridad, retire todo el material de embalaje.

6. Instalación


1. Instala todos los soportes para accesorios.

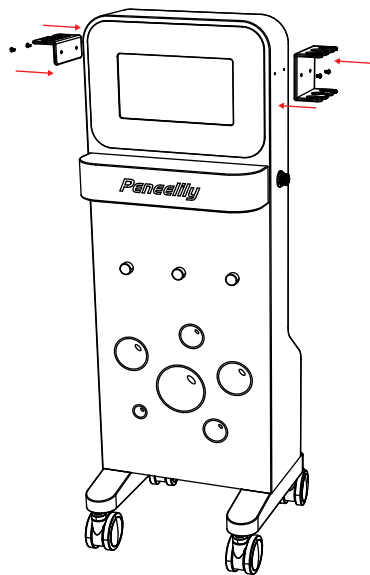


2. Conecte la botella al mango del pulverizador Pistola. Instale el cable del pulverizador Pistola, conectando un extremo del tubo trenzado a la unidad principal y el otro extremo a la boquilla del pulverizador Pistola.

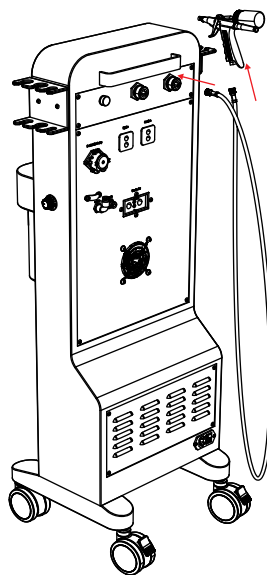


3. Instale el tubo de conexión para la copa de succión. Primero, conecte un extremo del tubo blanco a la unidad principal y el otro extremo a la copa de succión.

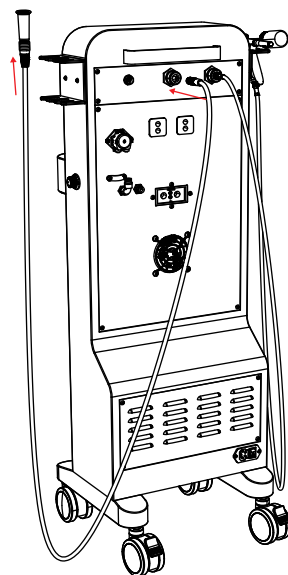


4. Instalar el cable de conexión del mango I Centro de Importación.

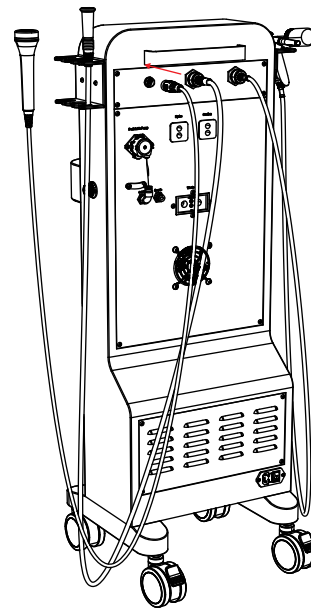



5. Instale el conector de hidratación: Inserte firmemente el tubo azul en la salida de drenaje (Consejo: Al desmontar, presione el anillo de retención blanco en la salida de drenaje y luego tire del tubo); conecte el tubo blanco a la entrada en el lado izquierdo de la bomba peristáltica.

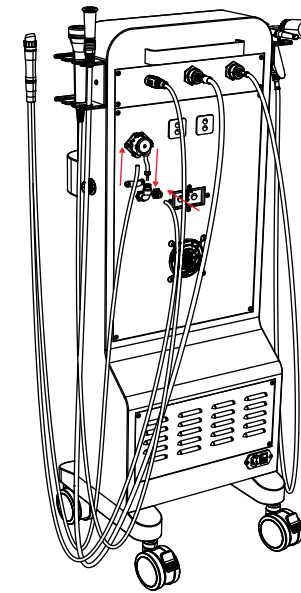

6. Instalar botellas y filtros para aguas residuales.

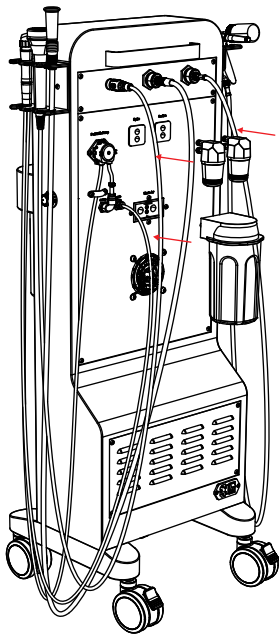

7. Instale el recipiente de solución.

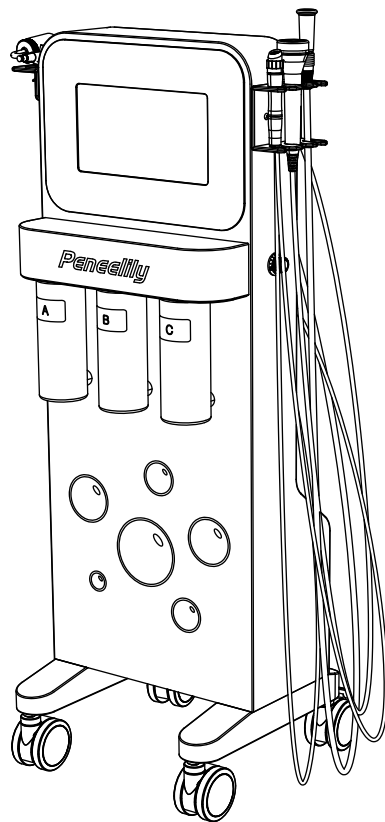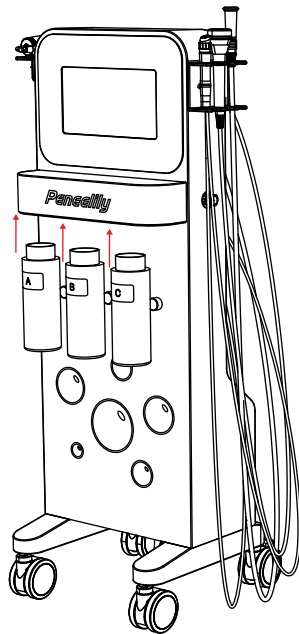


Sustituya el tubo de goma transparente de la bomba peristáltica (solo si el tubo de silicona está dañado):


1. Presione los pestillos de fijación situados a ambos lados de la bomba peristáltica y retire el cuerpo de la bomba de la unidad principal.




2. Presione los pestillos superior e inferior del cuerpo de la bomba para abrir la carcasa.

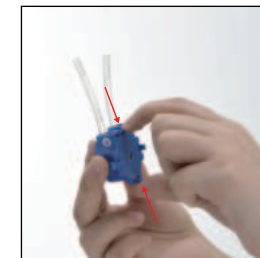


3. Retire el tubo de goma transparente original.

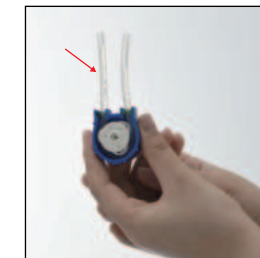

4. Inserte la nueva manguera transparente en la ranura del cuerpo de la bomba.

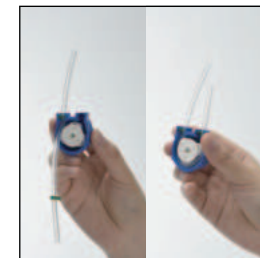


5. Fije bien la carcasa de la bomba y asegúrese de que los cierres a presión estén bien encajados.

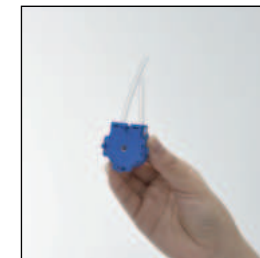

6. Vuelva a colocar el cuerpo de la bomba montado en la unidad principal y asegúrese de que quede bien fijado.



7. Guía de uso

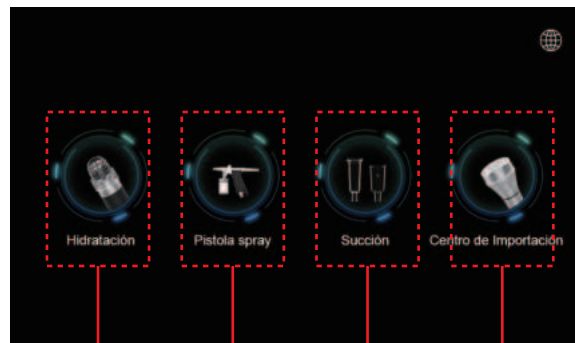

Hidratación


Pistola spray

Succión

Centro de Importación

1. Hidratación

1.1 Selecciona el icono «Hidratación» en el menú principal para acceder a la pantalla de funciones

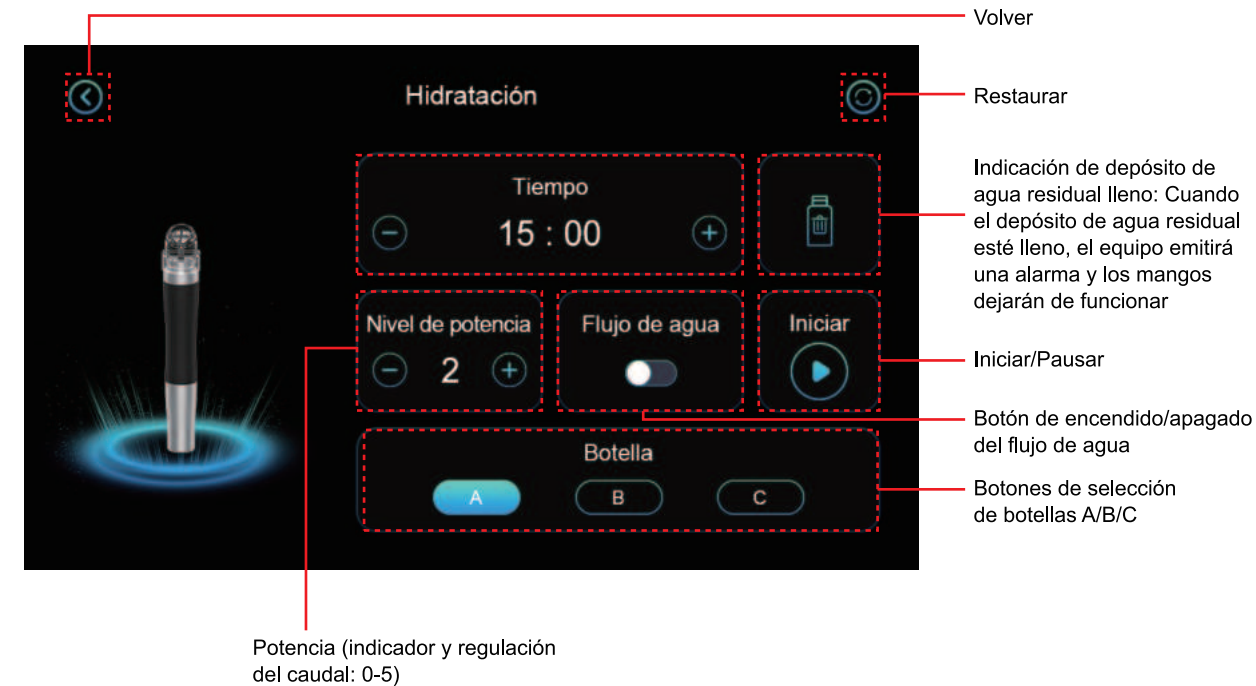

1.2 Cómo elegir un cabezal Hidratación


	Boquilla plana: ideal para limpiar grandes superficies de grasa, polvo y células muertas
	Punta recta: indicada para eliminar la suciedad y los restos de maquillaje de las zonas lineales del rostro (como el puente de la nariz, el surco nasolabial y el contorno de los ojos).
	Boquilla en espiral: ideal para una limpieza profunda, ya que desprende y aspira eficazmente la suciedad rebelde, los puntos negros y las células muertas de las paredes de los poros.
	Boquilla de precisión, indicada para zonas problemáticas localizadas, como las áreas con gran cantidad de granos y espinilla.

Nota: Si tienes la piel sensible o prefieres una limpieza suave, te recomendamos que elijas el cabezal de silicona blanda de color blanco; el cabezal rígido transparente es adecuado para pieles normales.


	Nota: Para utilizar la punta de silicona blanca en el mango de burbujas pequeñas, es necesario retirar la junta de goma del mango para que la punta de silicona quede bien fijada.
	cabezal de sellado Nota: La primera vez que se active la función Hidratación, instale primero el cabezal de sellado en el mango de la amoladora de agua. Una vez que el equipo se haya puesto en marcha, espere unos 40 segundos hasta que observe que el agua circula por el tubo transparente; a partir de ese momento, podrá utilizarlo con normalidad.
	Aplicar en las mejillas y la frente
	Indicado para zonas pequeñas alrededor de los ojos o la nariz

1.3 Cómo instalarlo


① Coloca una junta de goma en el mango (la máquina que has recibido ya la lleva instalada).

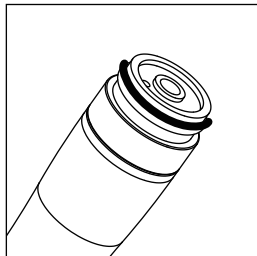

② Elige la boquilla adecuada y colócala en el mango.

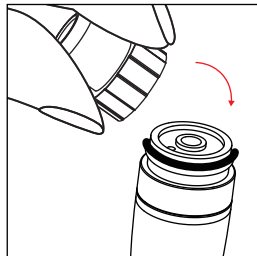


③ Retira los frascos de soluciones A, B y C.

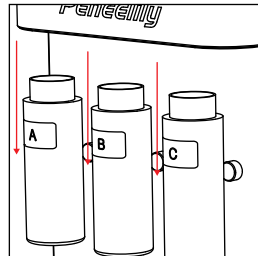

④ Llena los frascos de soluciones A, B y C con solución Hidratación o agua purificada.



⑤ Vuelve a colocar los frascos de soluciones en la unidad principal.

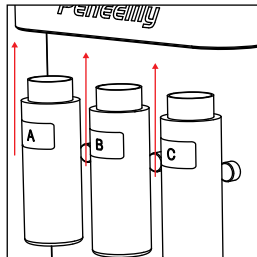

1.4 Cómo utilizarlo

Recomendación de productos complementarios: Solución Hidratación (AS1/AO3/SA2) + líquido para la extracción de puntos negros

Guía de soluciones:

AS1: Contiene ácido láctico, extracto de levadura, extracto de té verde, etc. Es adecuada para pieles neutras; se recomienda su aplicación en todo el rostro, ya que ayuda a limpiar en profundidad y revitalizar la piel.

SA2: Contiene ácido salicílico, ácido láctico, lactato de sodio, aloe vera y extracto de té verde, entre otros. Está diseñada específicamente para pieles sensibles y grasas. Se utiliza principalmente en la zona T para controlar la grasa, limpiar los poros y mejorar los problemas cutáneos.

① Elige el cabezal de exfoliación y el producto exfoliante adecuados según tus necesidades personales y el estado de tu piel.

② Ajustes: configura los parámetros del aparato según las necesidades específicas de tu piel.

③ Comience por la barbilla y, cada dos o tres puntos, una los tres puntos en una línea para realizar una pasada. Una vez completado todo el rostro, limpie la zona de la nariz con movimientos circulares.

Consejos: Durante el tratamiento, utilice un disco de algodón húmedo para limpiar la piel mientras realiza el tratamiento.

④ Frecuencia de uso recomendada:

Piel grasa: una vez a la semana;

Piel mixta: una vez cada dos semanas;

Piel normal/seca: una vez cada tres o cuatro semanas.




1.5 Precauciones ⚠

Se recomienda comenzar con la potencia de succión más baja y aumentarla gradualmente una vez que la piel se haya acostumbrado, para evitar que una succión excesiva tire de la piel y provoque molestias.


1.6 Cómo limpiar

Hidratación limpieza de cabeza:


- ① Limpia la suciedad del interior de la punta con un cepillo para membranas o un cepillo de dientes.

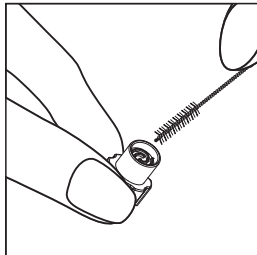

- ② Sumerge la punta en solución salina o alcohol durante 5 minutos.

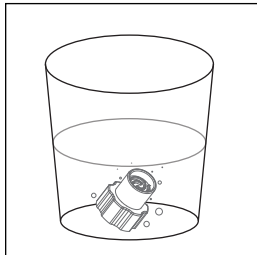


- ③ Enjuágala con agua limpia, déjala secar y guárdala una vez que se haya secado el exceso de humedad.

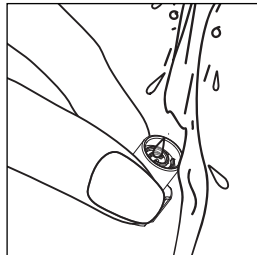

Limpieza de las tuberías de la manija de hidratación::


- ① Mantenga la junta de silicona en el mango y coloque la tapa de sellado blanca en el mango del pulidor de agua.

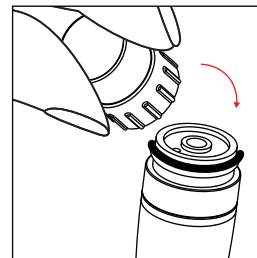


- ② Vierta agua limpia en cualquiera de los frascos A, B o C y vacíe el agua acumulada en el frasco de residuos.



- ④ Una vez que el agua limpia haya circulado por completo por el interior del frasco, la limpieza habrá finalizado.

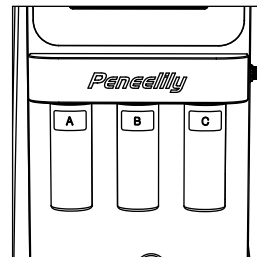


- ③ Encienda el mango del pulidor de agua y ajuste la potencia del equipo al máximo.

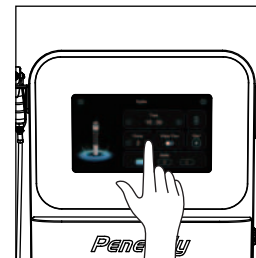

Nota: Después de cada uso del mango del pulidor, es necesario limpiar los conductos siguiendo los pasos anteriores, lo que prolongará eficazmente la vida útil del equipo.


2. Pistola spray

2.1 Selecciona el icono «Pistola spray» en el menú principal para acceder a la pantalla de funciones.

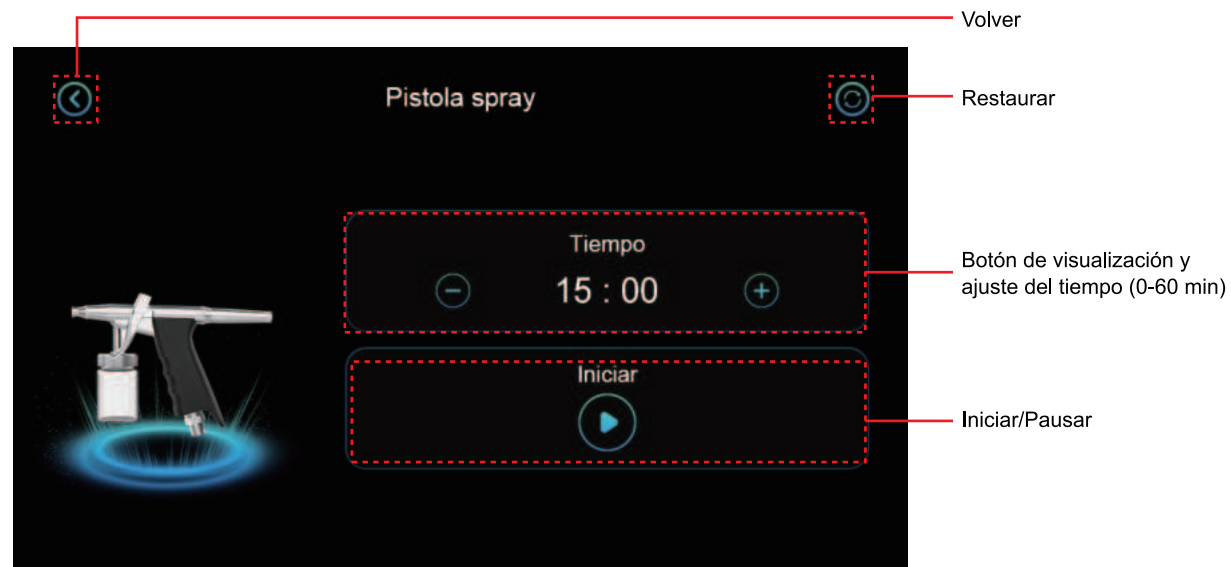


2.2 Cómo instalar Pistola spray

① Retira el frasco y llénalo de agua (puedes utilizar agua purificada, sérum, tónico, solución salina, etc.; la proporción de sérum y agua debe ser de 1 a 10, según el tipo de piel).


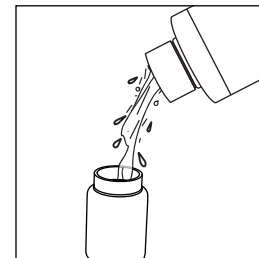


③ Tire de la palanca hacia atrás para iniciar la pulverización.

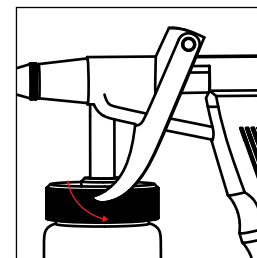

Nota: Si la palanca no se mueve, gire la parte trasera de la pistola pulverizadora 2 o 3 vueltas para solucionar el problema.

② Vuelve a colocar la botella en el asa

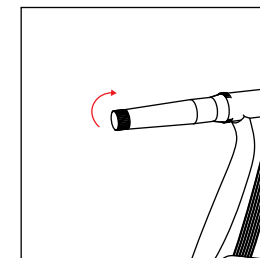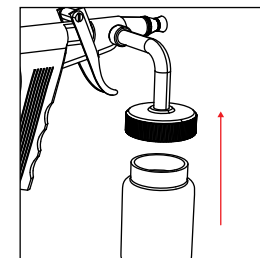

2.3 Cómo utilizarlo

Siga los siguientes pasos para utilizar el spray de la forma más adecuada.


- ① Preparación de la solución: Llene el pulverizador con el producto que haya elegido.
- ② Modo de empleo: mantenga el pulverizador a una distancia de entre 15 y 20 centímetros del rostro. Pulverice el producto sobre la piel con movimientos circulares suaves y continuos.

③ Frecuencia de uso recomendada:

Piel normal: 2-3 veces por semana

Piel seca: 1 vez al día

Piel grasa/mixta: 2-3 veces por semana

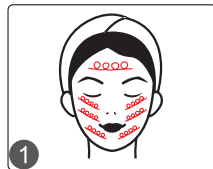

2.4 Cómo limpiarlo


- Llene la botella con un tercio de agua.
- Encienda el aparato y pulverice hasta que se vacíe por completo el agua, con lo que se completará la limpieza.

2.5 Precauciones

No se deben introducir líquidos muy concentrados, ya que podrían obstruir la boquilla; si esto ocurre, será necesario desatascarla con una aguja para que vuelva a funcionar con normalidad.

3. Succión

3.1 Selecciona el icono «Succión» en el menú principal para acceder a la pantalla de funciones.

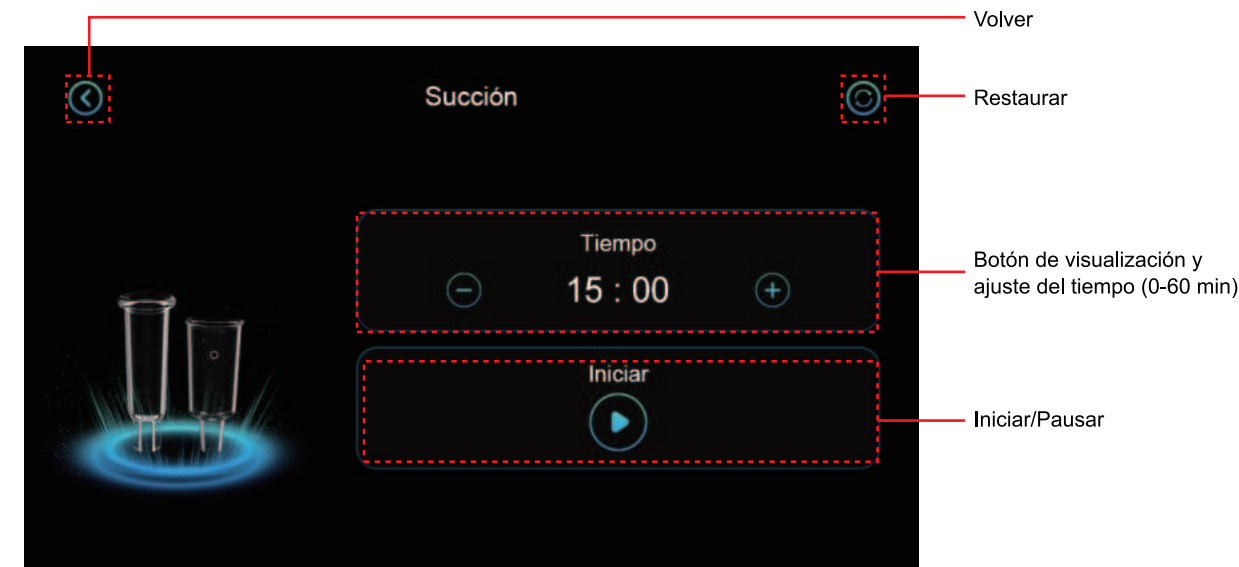


3.2 Cómo elegir una taza


	Drenaje linfático para pieles normales
	Drenaje linfático apto para personas con piel sensible (el vaso cuenta con un pequeño orificio; al presionarlo con el pulgar durante el tratamiento se genera succión, y al soltarlo se detiene el tratamiento).

3.2 Cómo instalarlo


① Conecta un extremo de la manguera al vaso.

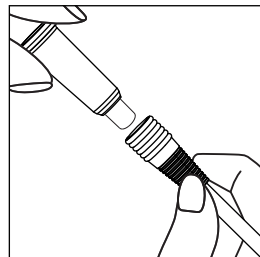

② Conecta el otro extremo de la manguera a la máquina.

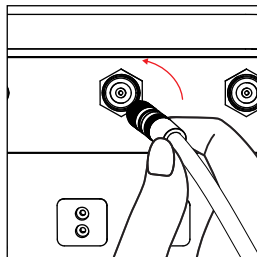

Nota: Al desenroscar el orificio de aspiración en sentido antihorario, se puede ver que el interior del aparato contiene un filtro de algodón, que debe cambiarse una vez a la semana.

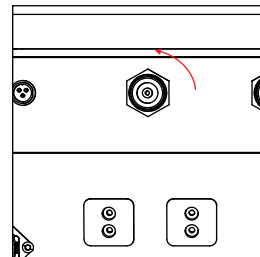

3.3 Cómo utilizarlo

Siga estos pasos para sacar el máximo partido a la

① ventosa. Configuración del tratamiento: configure los parámetros del equipo según las necesidades específicas de su piel.

② Gire el botón de regulación de la succión para ajustar la intensidad según su tolerancia personal.

③ Aplicar aceite facial: Aplica una cantidad suficiente de aceite facial en la zona a tratar; esto garantizará que el aparato se deslice con suavidad.

④ Desliza la mano desde detrás de la oreja por el lado del cuello hasta la clavícula y, a continuación, empuja lateralmente hacia la cresta del hombro hasta la axila.


Desliza el dedo a lo largo del contorno inferior hasta detrás de la oreja, luego deslízalo por el lado del cuello hasta la clavícula y, a continuación, empuja lateralmente hacia la apófisis acromial hasta la axila.

Comenzando desde la barbilla, deslizar por la comisura de los labios, la fosa nasal, el párpado inferior hasta las cejas y la glabella. Luego, deslizar a lo largo de la línea del cabello hasta la oreja, después deslizar por la parte posterior de la oreja y bajar por el lateral del cuello hasta la clavícula, y luego empujar horizontalmente hacia el acromion y hasta bajo el brazo.

⑤ Frecuencia de uso recomendada:


Piel grasa: 2 veces por semana

Piel seca, normal o mixta: 1-2 veces por semana

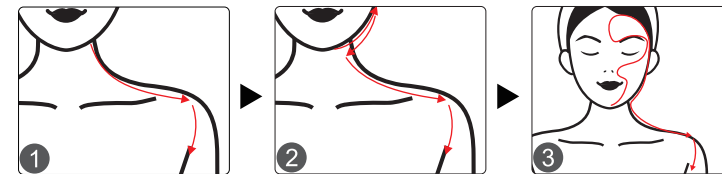


3.4 Precauciones

No se recomienda mantener el producto sobre una misma zona durante demasiado tiempo, ya que podría provocar molestias en la piel.

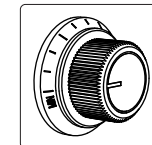

4. Centro de Importación

4.1 Selecciona el icono «Centro de Importación» en el menú principal para acceder a la pantalla de funciones.

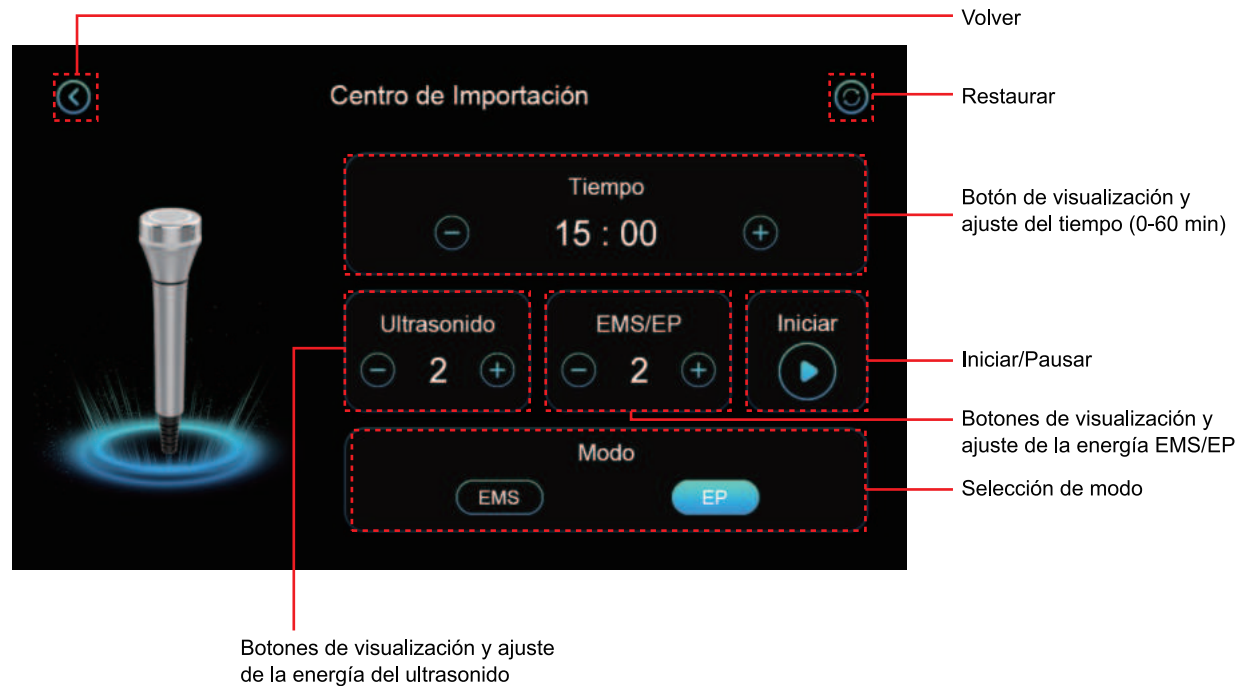

4.2 Cómo utilizarlo

Siga estos pasos para sacar el máximo partido a la función Centro de Importación.

- ① Configuración del tratamiento: configure los parámetros del equipo según las necesidades específicas de su piel.
- ② Aplicar gel conductor o sérum: Aplica una cantidad suficiente de gel conductor o sérum en la zona a tratar. Esto garantiza que el dispositivo se deslice con suavidad y favorece la absorción eficaz del producto.
- ③ Método recomendado: tal y como se muestra en la imagen, mueva suavemente el mango del aparato por el rostro con movimientos circulares continuos o tirando hacia arriba, asegurándose de mantener un contacto constante con la piel.
- ④ Frecuencia de uso recomendada:

Piel seca: 2-3 veces por semana

Piel grasa: 2 veces por semana

Piel normal/mixta: 1-2 veces por semana



4.3 Precauciones

No se recomienda permanecer demasiado tiempo en una misma zona durante el uso, ya que podría provocar molestias en la piel.

Al utilizar los modos EMS y EP, se recomienda comenzar con la intensidad más baja para que la piel se acostumbre poco a poco a la intensidad.

8. Solución de problemas

Solución de problemas En esta sección se ofrecen soluciones a problemas comunes. Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, siga los pasos que se indican a continuación.

1. ¿El mango Hidratación no tiene succión?

- ① Comprueba que el depósito de aguas residuales esté bien colocado.
- ② Comprueba que el depósito de aguas residuales no esté lleno y que no se haya vaciado.
- ③ Compruebe si el cable de conexión del mango de hidratación está suelto, no está insertado correctamente o está conectado en la posición incorrecta.

2. ¿No sale agua por la boquilla Hidratación?

- ① El tubo azul no está bien enchufado; basta con empujarlo con fuerza hasta que quede bien ajustado.
- ② No hay suficiente agua en los frascos A, B o C.
- ③ El tubo transparente de la bomba peristáltica está dañado; es necesario sustituirlo por uno nuevo.
- ④ La primera vez que se utilice, hay que colocar primero la tapa de sellado y esperar unos 40 segundos para que salga agua con normalidad.
- ⑤ Comprueba la pantalla de control y asegúrate de que el interruptor de salida de agua está activado.

3. ¿Por qué el spray Pistola no rocía líquido?

- ① Es posible que la obstrucción se deba a que el líquido que ha introducido en el frasco tiene una concentración demasiado alta.
- ② El ajuste de la parte trasera de la pistola pulverizadora está demasiado apretado.
- ③ El cabezal de pulverización de la pistola está obstruido; utilice una aguja fina para desatascar el orificio de la boquilla.

4. ¿Por qué no tiene succión el aspirador?

- ① Comprueba que la manguera esté conectada a la toma de aspiración.
- ② Comprueba que la manguera esté bien acoplada al mango.
- ③ Comprueba que la manguera no esté rota; si lo está, cámbiala.
- ④ Comprueba que el regulador de potencia de aspiración esté ajustado en un nivel medio o superior.

5. ¿Necesitas más ayuda?

Si el problema persiste después de probar las soluciones anteriores, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

9. Preguntas frecuentes

Q1: ¿Por qué se enrojece la cara después de usar Hidratación?

R: Sí, se trata de una reacción habitual y temporal. El dispositivo funciona según el principio del vacío. Cuando el cabezal entra en contacto con la piel, se produce un aumento momentáneo del flujo sanguíneo en esa zona (congestión capilar), lo que puede provocar un enrojecimiento temporal. Este fenómeno suele desaparecer en unas horas. Le recomendamos que se aplique una crema hidratante inmediatamente después de la sesión para calmar e hidratar la piel.

Q2: ¿Cuándo se notan los resultados?

R: Tras la primera sesión, notará que su piel está más suave y tersa. Tras un uso continuado de entre 8 y 12 semanas, es posible que observe una reducción de las líneas de expresión, las arrugas, las manchas oscuras y la hiperpigmentación.

Q3: ¿Para qué tipos de piel es adecuado este aparato?

R: Es adecuado para todo tipo de pieles, incluidas las normales, secas, grasas y mixtas. No obstante, se recomienda a las personas con piel sensible u otros problemas cutáneos que consulten a un médico o esteticista antes de utilizarlo.

Q4: ¿El tratamiento Hidratación hace que la piel se vuelva más fina y sensible?


R: No. El tratamiento Hydro solo elimina los puntos negros y blancos de la piel durante el proceso, lo que mejora la absorción de los productos; por lo tanto, este tratamiento solo hará que la piel esté cada vez más suave, fina y luminosa, sin provocar síntomas de sensibilidad.

10. Garantía y servicio posventa

Se ofrece un año de garantía a partir de la fecha de compra.

Si tiene alguna duda durante el uso o si el producto presenta algún problema, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. También podemos ofrecerle más consejos sobre el cuidado de la piel.

Puede escanear el código QR que aparece a continuación para ver el vídeo sobre la instalación y el funcionamiento del aparato.

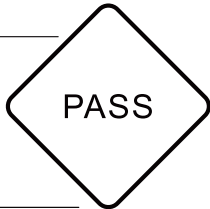Nombre del producto:	Aparato integral para el cuidado de la piel	
Modelo del producto:	FC-23K5	
Fecha de fabricación:		
Control de calidad:		