


Manual del usuario

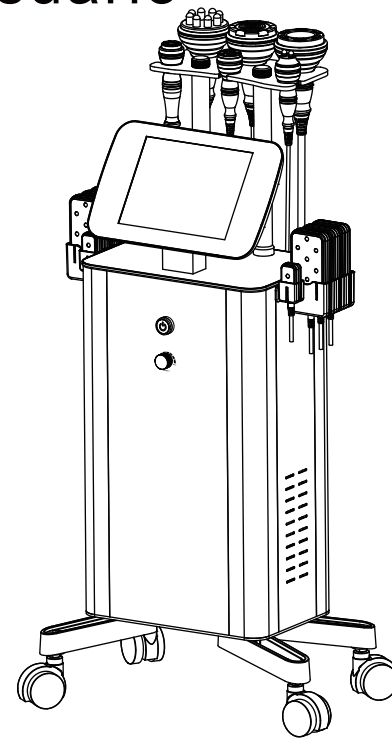

Contenido

1.Precauciones de seguridad	1
2.Contraindicaciones	2
3.Visión general	2
4.Introducción al panel de control	3
5.Especificaciones técnicas	8
6.Precauciones de uso	10
7.Mantenimiento y limpieza	11
8.FAQ	11
9.Preguntas y respuestas	14
10.Guía de funcionamiento	16
11.Garantía y asistencia	23

1.Precauciones de seguridad

- 1.Lea atentamente este manual antes de utilizar el instrumento y familiarícese con su funcionamiento y la tecnología relacionada.
- 2.Como dispositivo electrónico de alta precisión, este instrumento debe almacenarse adecuadamente. Evite las condiciones húmedas, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
- 3.Utilice siempre el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante toda su vida útil.
- 4.No coloque el dispositivo en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente a su vida útil y rendimiento.
- 5.No aplique el dispositivo en ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
- 6.Los pacientes deben consultar a su médico antes de utilizar este aparato.
- 7.Asegúrese de que el instrumento se aplica sobre la piel húmeda y evite la operación sobre la piel seca.
- 8.Apague el instrumento cuando no lo utilice para garantizar su seguridad.
- 9.Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo, esterilícelo con solución salina.

2.Contraindicaciones


Antes de utilizar este instrumento, es imprescindible consultar a su médico o pedir consejo a profesionales. Detalles a continuación:


- 1.Embarazo o lactancia.
- 2.Sensibilidad a las microcorrientes.
- 3.Hipertensión, cardiopatías o con un marcapasos instalado.
- 4.Heridas sin cicatrizar o en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica reciente.
- 5.Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
- 6.Tumores malignos, hemofilia y hemorragias.
- 7.Enfermedades cutáneas o infecciosas.
- 8.Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
- 9.Cirugía plástica reciente (en los últimos tres meses), o presencia de implantes u objetos metálicos en la zona de tratamiento.


3.Visión general

Con la tecnología más popular y segura para combatir el envejecimiento, reafirmar la piel y moldear el cuerpo, este dispositivo de belleza 7 en 1 le garantiza que conseguirá la figura corporal deseada y un cutis radiante. Proporciona una solución ideal para quienes buscan mejoras cutáneas y corporales sin inyecciones, fármacos ni efectos secundarios. Este dispositivo no invasivo proporciona mejoras visibles con cada uso.

4.Introducción al panel de control

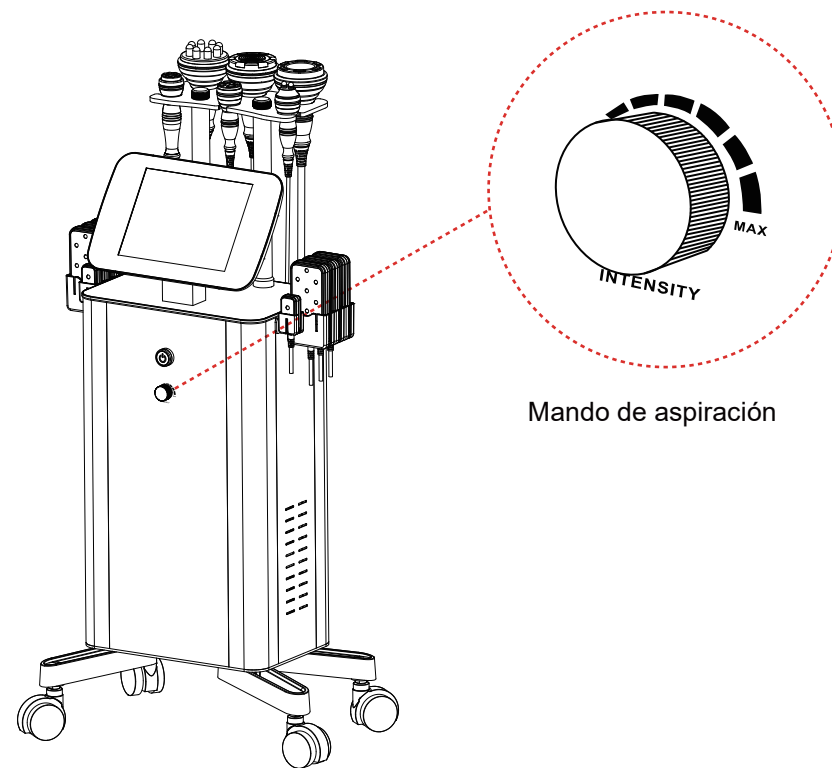

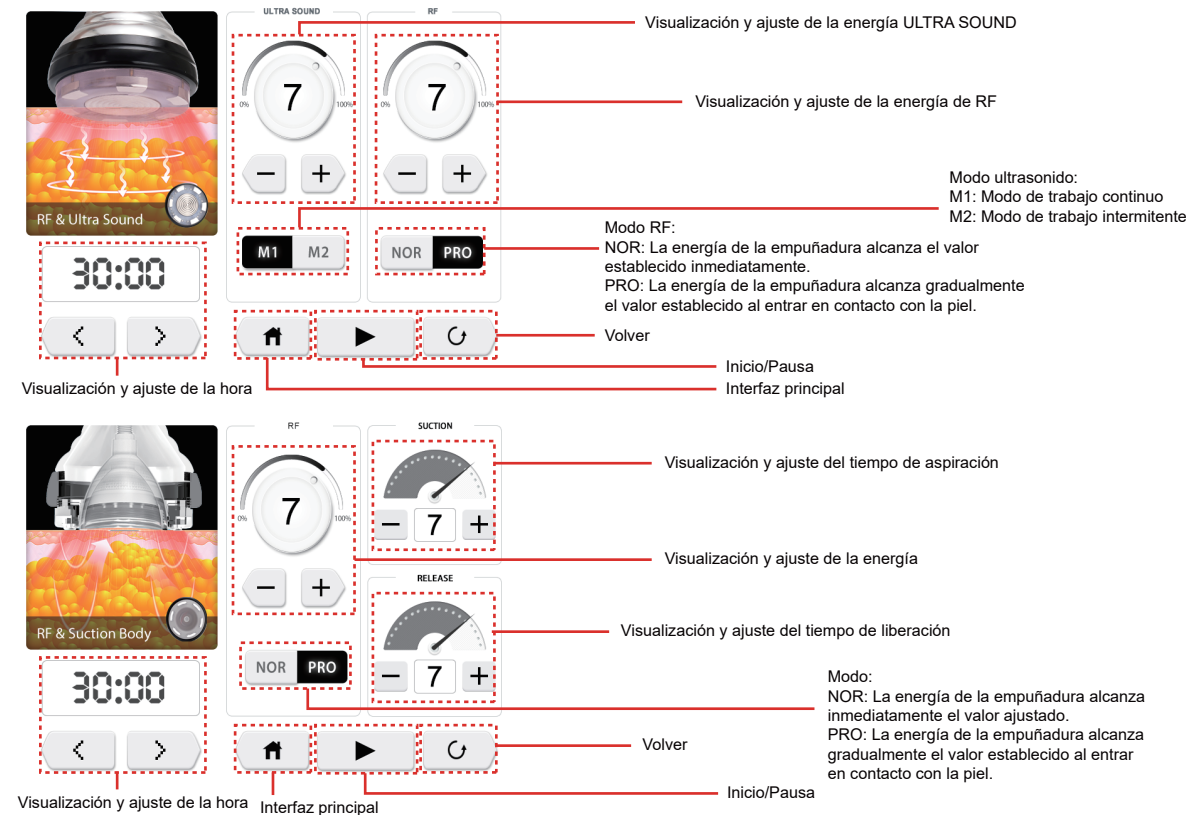

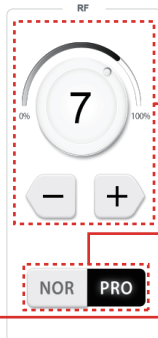

Visualización y ajuste de la energía


Modo:
NOR: La energía de la empuñadura alcanza inmediatamente el valor ajustado.
PRO: La energía de la empuñadura alcanza gradualmente el valor establecido al entrar en contacto con la piel.

Visualización y ajuste de la hora

Interfaz principal

Volver

Inicio/Pausa

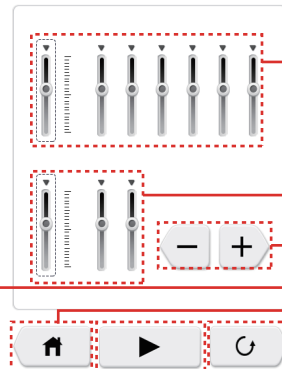

Nivel de energía del Big Laser Pad

Nivel de energía de la pequeña almohadilla láser



Nivel de energía ajustado

Visualización y ajuste de la

Interfaz principal

Volver

Inicio/Pausa

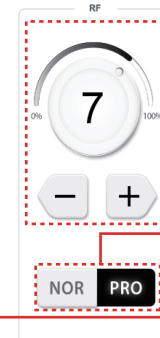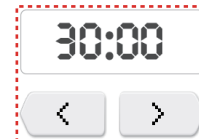

Visualización y ajuste de la energía


Modo:
NOR: La energía de la empuñadura alcanza inmediatamente el valor ajustado.
PRO: La energía de la empuñadura alcanza gradualmente el valor establecido al entrar en contacto con la piel.

Visualización y ajuste de la hora

Interfaz principal

Volver

Inicio/Pausa

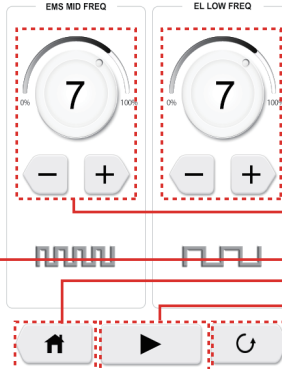

Visualización y ajuste de la energía EL


Visualización y ajuste de la energía EMS

Visualización y ajuste de la hora

Interfaz principal

Inicio/Pausa

Volver

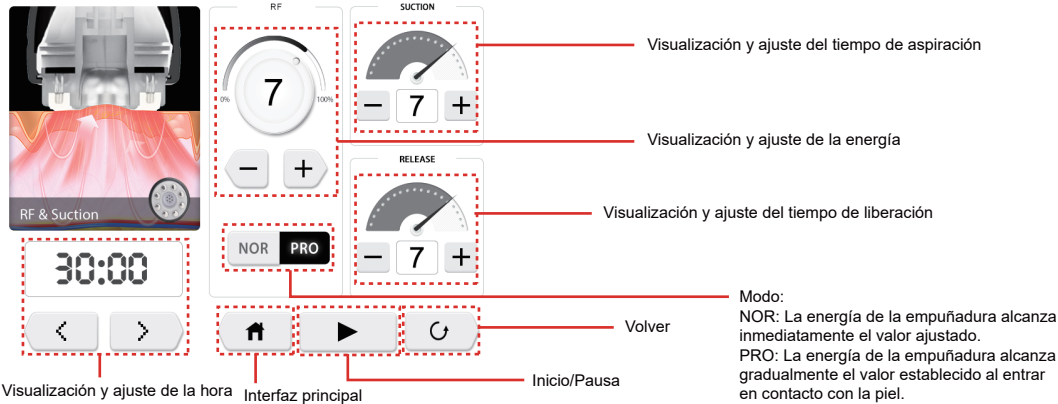

5.Especificaciones técnicas

	Alimentación Entrada: AC110V-220V 50HZ-60HZ	
	Potencia: 85W	Potencia de entrada: 85W
	Dimensiones: 14.5 × 21 × 44inches	
	Peso neto: 20KG	Peso bruto: 22.5KG

	Frecuencia: 1MHz		
	Potencia: 75W		
	Frecuencia: 1MHz		Potencia RF: 26W
	Potencia: 40W		
	Frecuencia RF: 1MHz		Frecuencia EL: 62.5Hz
	30K Frecuencia: 3000Hz		Frecuencia EMS: 5Hz
	Potencia: 85W		Potencia: 15W
	Frecuencia RF: 1MHz	Flujo de aire: 10LPM	
	Potencia: 75W	Nivel de ruido: < 65dB (a 30 cm)	
	Vacío: -75kpa		
	Frecuencia RF: 1MHz	Flujo de aire: 10LPM	
	Potencia: 70W	Nivel de ruido: < 65dB (a 30 cm)	
	Vacío: -75kpa		

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el instrumento y formar al operador.
2. Antes de utilizar el instrumento, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente está conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento es el adecuado. Si la tensión de alimentación local es inestable, recomendamos añadir una fuente de alimentación regulada y adaptada entre la red y el instrumento.
4. Retire todos los objetos metálicos del interior del cuerpo para evitar causar accidentes o afectar a los efectos del tratamiento.
5. No utilice el aparato con el estómago vacío e inicie el tratamiento una hora después de comer.
6. Asegúrese de que la piel está en contacto con el cabezal de tratamiento durante toda la sesión para evitar molestias.
7. Antes del tratamiento EMS/EL, informe al receptor sobre las sensaciones de la microcorriente para evitar preocupaciones o molestias.
8. Absténgase de utilizar el mango de RF&Ultrasonido en zonas como la cabeza, el pecho, los senos, el corazón o la espalda.
9. Comience siempre con la intensidad de succión más baja y aumentela gradualmente.
10. Asegúrese de que el algodón filtrante está instalado en el interior del mango de aspiración, ya que el cuerpo extraño podría bloquear el mango.

7. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el instrumento en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina y, a continuación, séquelo bien con una toalla para asegurarse de que permanece sin humedad.
3. Antes de limpiar el aplicador de vacío y RF, asegúrese de retirar el algodón filtrante para evitar la proliferación de bacterias.
4. Después de limpiar el instrumento, cúbralo con un paño o una envoltura de plástico. Antes de utilizarlo, asegúrese de volver a higienizar el mango por razones de higiene.
5. Queda terminantemente prohibido desmontar el instrumento e intentar limpiar su interior. Esta tarea sólo debe ser realizada por profesionales.

8. FAQ

1. Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del tratamiento de radiofrecuencia?

R: Es posible que experimente tirantez de la piel justo después del tratamiento, ya que la estimulación térmica tensa el tejido colágeno, y la RF estimula el tejido subcutáneo aportando la regeneración continua de colágeno, lo que conduce a resultados más notables en el plazo de una semana.

2. Es segura la RF para la piel?

R: El tratamiento reafirmante y antiarrugas con RF es un método no quirúrgico que estimula la regeneración del colágeno y el metabolismo en las capas más profundas de la piel sin causar ningún daño. Es normal experimentar calor y enrojecimiento temporales en la zona tratada, lo que indica un aumento de la circulación y debería remitir en unas horas. No hay que preocuparse por esta reacción.

3. Cuál es la duración de un tratamiento de escultura corporal?

R: Aproximadamente 60 minutos, nuestras técnicas cualificadas y nuestro avanzado aparato garantizan unos resultados impresionantes.

4. Liposucción o este aparato?

R: La cirugía de liposucción utiliza presión negativa para eliminar las acumulaciones de tejido adiposo de zonas específicas, lo que produce un efecto moldeador del cuerpo. Le proporciona resultados inmediatos, pero también conlleva riesgos, requiere anestesia e implica tiempo de inactividad. Mientras que nuestro dispositivo ofrece una solución sin riesgos ni efectos secundarios. Esculpe su cuerpo, estimula la regeneración de colágeno para levantar la piel y crea la figura ideal para un aspecto general mejorado.

5. Es seguro utilizar ultrasonidos en todo el cuerpo?

R: NO. El ultrasonido altera el tejido adiposo, que luego es absorbido y metabolizado por el cuerpo humano. El poder de los ultrasonidos es bastante fuerte, y el corazón es particularmente sensible a las ondas sonoras debido a ser un órgano hueco. Las ondas sonoras pueden causar vibraciones en el corazón, y puede haber variaciones en la forma en que las ondas sonoras se conducen a través del tejido muscular y la sangre dentro del corazón, dando lugar a reflexiones de ida y vuelta.

Como consecuencia, la válvula puede desprenderse del músculo cardíaco. Ciertamente, el tratamiento con ultrasonidos debe evitarse estrictamente alrededor de la zona ocular para prevenir el riesgo de desprendimiento de retina, así como en zonas como la cintura, la espalda, el pecho y la región que rodea el corazón.

6. Existen efectos secundarios de los ultrasonidos en el cuerpo humano?

R: El tratamiento con ultrasonidos es un procedimiento no quirúrgico y no invasivo que no requiere incisiones ni anestesia. Combina varias tecnologías, como los ultrasonidos (onda mecánica), la cavitación y la focalización de ultrasonidos. Este proceso provoca la descomposición y disolución del tejido adiposo, el estiramiento de la piel y la remodelación corporal. Es importante destacar que se dirige selectivamente al tejido adiposo de baja densidad, al tiempo que protege los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos y los nervios, garantizando que no se produzcan efectos adversos en el organismo. Usted puede notar un ligero ruido en los oídos durante el tratamiento, que es una ocurrencia normal y no requiere ninguna causa de preocupación.

7. Por qué tengo acúfenos durante el tratamiento?

R: Cuando el ultrasonido con energía concentrada vibra fuertemente y tiene una frecuencia superior a 20KHz, puede penetrar en la piel hasta alcanzar la capa adiposa que se encuentra a 20mm de profundidad. La energía provoca fricción a alta velocidad y calor dentro del tejido adiposo, lo que los descompone y emulsiona. Sin embargo, este proceso puede crear ruido que puede ser audible en los oídos.

9.Preguntas y respuestas

Pregunte a	Causa	Respuesta
1.No encienda el instrumento.	→ El cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente.	→ Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado a la toma de corriente y asegúrese de que ésta funciona.
2.La pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error de datos.	→ 1. Apague el instrumento, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto para reiniciarlo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con su distribuidor.
3.La radiofrecuencia no funciona.	→ El mango no está bien conectado.	→ Confirme si el enchufe del asa está bien conectado a la unidad principal.
	→ La presencia de aceite en la zona de tratamiento podría provocar un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	→ Aplicar algunos geles en la zona tratada después de la limpieza.
	→ El mango no está en contacto adecuado con la piel.	→ Asegurar un contacto completo entre el cabezal de tratamiento y la piel.

Pregunte a	Causa	Respuesta
4.El mando RF&Ultra Sound no funciona.	→ Puede suponer erróneamente que la manivela no funciona correctamente debido a su diseño poco ruidoso.	→ Para verificar el funcionamiento de la empuñadura, consulte la prueba de empuñadura RF y ultrasonidos.
	→ Es posible que haya olvidado aplicar el gel o que haya utilizado un producto que no está diseñado para su uso con el instrumento.	→ Use professional gel for RF&Ultra sound treatment.
	→ Presión insuficiente.	→ Aplique más presión durante la operación.

10. Guía de funcionamiento

Cara:

(1) Selección de asas: EMS&EL

Tiempo: 10 minutos

Nivel de energía: 3

Consumibles: Esencia

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(2) Selección de asas: RF&Succión

Tiempo: 10 minutos

Nivel de energía RF: 3

Modo RF: NOR

Duración de la succión: 5

Duración de liberación: 3

Ajuste la intensidad de succión según la resistencia individual.

Consumibles: crema de masaje

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.


(3) Selección de mango: Lipo Láser

Tiempo: 20 minutos.

Nivel de energía: 3

Modo: M1

Ayudas para el tratamiento: correa

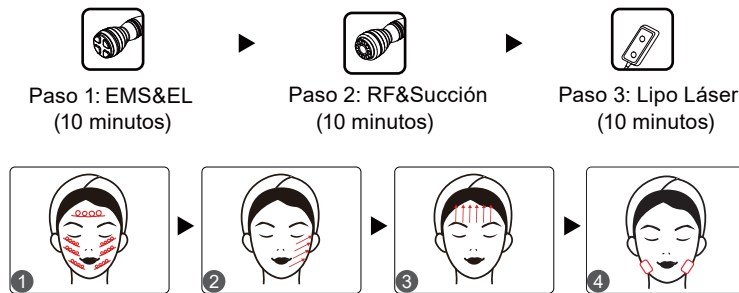

Ojo:

(1) Selección del mango: Ojo&RF

Tiempo: 10 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: NOR

Ayudas para el tratamiento: Suero ocular

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.



Brazo:

(1) Selección de asas: Cuerpo&RF

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía: 3

Modo NOR

Consumibles: Crema RF

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(2) Selección de mango: RF&Ultra Sonido

Duración: 15 minutos

Nivel de energía del ultrasonido: 3

Modo Ultra Sonido: M1

Nivel de energía RF: 3

Modo RF: NOR

Consumibles: gel

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(3) Selección de asas: Cuerpo RF&Succión

Duración: 15 minutos

Nivel de energía RF: 3

Modo RF: NOR

Duración de la succión: 5

Duración de liberación: 3

Ajuste la intensidad de succión en función de la resistencia individual.

Consumibles: aceite esencial

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(4) Selección de mango: Lipo Láser

Tiempo: 20 minutos.

Nivel de energía: 3

Modo: M1

Ayudas para el tratamiento: correa

Frecuencia de tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.






Paso 1: Body&RF
(15 minutos)

Paso 2: RF&Ultra Sonido
(15 minutos)

Paso 3: Cuerpo de RF&Succión
(15 minutos)

Paso 4: Lipo Láser
(20 minutos)

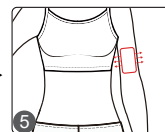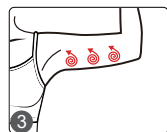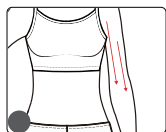

Vientre:

(1) Selección de mango: Body&RF

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: NI

Consumibles: crema RF

Frecuencia del tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(2) Selección de mango: RF y Ultra sonido

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía ultrasónica: 3

Modo de sonido ultra: M1

Nivel de energía RF: 3

Modo RF: NI

Consumibles: gel

Frecuencia del tratamiento: 1 - 2 sesiones por semana.

(3) Selección de mango: RF y succión corporal

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía de RF: 3

Modo de RF: NOR

Duración de succión: 5

Duración de liberación: 3

Establezca la intensidad de succión según la resistencia individual.

Consumibles: aceite esencial

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.

(4) Selección del mango: Láser Lipo

Tiempo: 20 minutos.

Nivel de energía: 3

Modo: M1

Asistencia para el tratamiento: correa

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.



Paso 1: Body&RF
(15 minutos)



Paso 2: RF&Ultra Sonido
(15 minutos)



Paso 3: Cuerpo de RF&Succión
(15 minutos)



Paso 4: Lipo Láser
(20 minutos)



Espalda:

(1) Selección de tratamiento: Body&RF

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: NOR

Consumibles: Crema RF

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.

(2) Selección de mango: RF y cuerpo de succión

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía de RF: 3

Modo de RF: NOR

Duración de succión: 5

Duración de liberación: 3

Establezca la intensidad de succión según la resistencia individual.

Consumibles: aceite esencial


Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.



Paso 1: Body RF
(15 minutos)



Paso 2: Cuerpo de RF&Succión
(15 minutos)

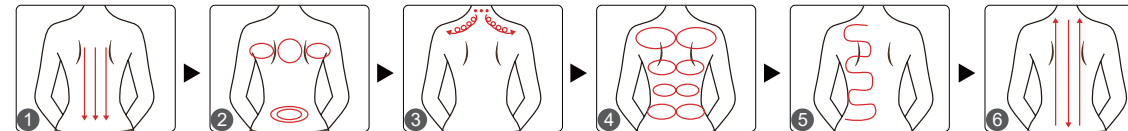

Pierna:

(1) Selección de tratamiento: Body&RF

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: NOR

Consumibles: Crema RF

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.

(2) Selección de mango: RF y Ultra Sound

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía de Ultra Sound: 3

Modo de Ultra Sound: M1

Nivel de energía de RF: 3

Modo de RF: NOR

Consumibles: gel

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.

(3) Selección de mango: RF y succión corporal

Tiempo: 15 minutos

Nivel de energía de RF: 3

Modo de RF: NOR

Duración de succión: 5

Duración de liberación: 3

Establezca la intensidad de succión según la resistencia individual.

Consumibles: aceite esencial

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.

(4) Selección del mango: Láser Lipo

Tiempo: 20 minutos.

Nivel de energía: 3

Modo: M1

Asistencia para el tratamiento: correa

Frecuencia del tratamiento: 1 a 2 sesiones por semana.



Paso 1: Body&RF
(15 minutos)




Paso 2: RF&Ultra Sonido
(15 minutos)



Paso 3: Cuerpo de RF&Succión
(15 minutos)



Paso 4: Lipo Láser
(20 minutos)

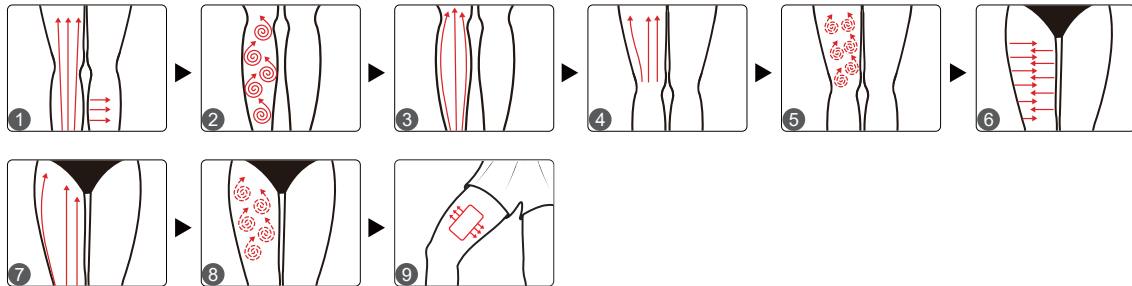

11.Garantía y asistencia

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Producto
Nombre: Potenciador de belleza versátil

Producto
Modelo: MS-65F8

Producción
Fecha: _____

Inspección
de calidad: _____

