


User Manual

MS-76D6S8

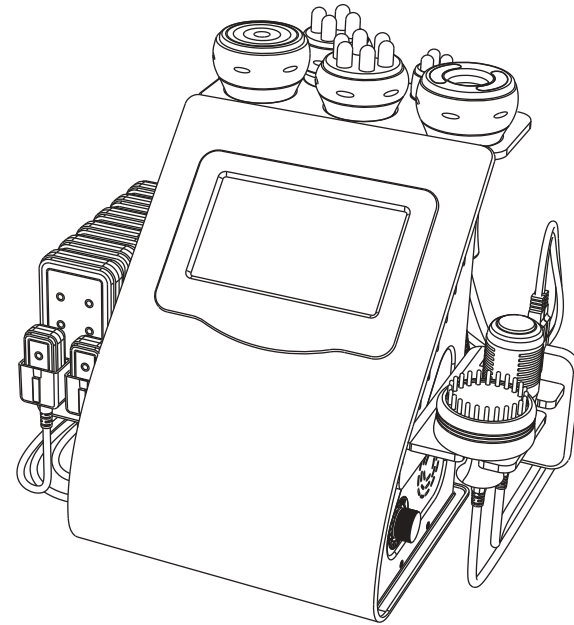

Content

1.Safety Precautions	1
2.Contraindications	1
3.Overview	2
4.Control Panel Introduction.....	3
5.Technical Specification	10
6.Use Precautions	11
7.Maintenance & Cleaning.....	12
8.FAQ	13
9.Ask & Answer	16
10.Operation Guide	18
11.Warranty & Support	22

1.Safety Precautions

- 1.Please read this manual carefully before use and familiarize yourself with the operation of this instrument and related technology.
- 2.This instrument is a high-precision electronic device that requires proper storage. Please avoid storing it in humid conditions, direct sunlight, or near flammables and explosives to prevent damage.
- 3.Always use the designated accessory provided or recommended by the manufacturer to ensure performance throughout its service life.
- 4.Do not place the instrument in high-temperature conditions, as this may negatively impact its service life and performance.
- 5.Do not apply the instrument on eyes, thyroid, parathyroid, testicles, pregnant women's abdomen, pacemakers, etc.
- 6.Patients should refrain from using this instrument unless they have obtained permission from their doctor.
- 7.Ensure that the instrument is applied on moist skin and avoid the operation on dry skin.
- 8.Power off the instrument when not in use to ensure its safety.
- 9.If you are currently taking anti-adiposity drugs, please discontinue their use for 1 - 2 months before using this instrument. Failure to do so may result in an extended course of treatment.
- 10.To maintain hygiene and extend the instrument's service life, sterilize it with saline.

2.Contraindications



Before using this instrument, it is essential to consult your doctor or seek advice from professionals. Details below:

- 1.Pregnancy or lactation.
- 2.Hypertension, heart disease, or with a pacemaker installed.
- 3.Unhealed wounds or during the recovery phase of surgery.
- 4.Individuals who are sensitive to the micro-current.
- 5.Epilepsy, severe diabetes, and hyperthyroidism.
- 6.Malignant tumors, hemophilia, and hemorrhage.
- 7.Skin disease or infectious disease.
- 8.Cesarean section within the last six months, a miscarriage within the last three months, or a natural birth within the last two months.
- 9.Had plastic surgery within 3 months or with implants or metal objects in the treatment area.

3.Overview

Harnessing the most favored and safest technology, this 9-in-1 Versatile beauty instrument offers holistic enhancements, encompassing skin tightening and body sculpting, guaranteeing a radiant metamorphosis for your body. It provides the perfect solution for people seeking improvements in skin appearance and body figures without injections, drugs, or side effects. Its external application yields immediate results.

4.Control Panel Introduction

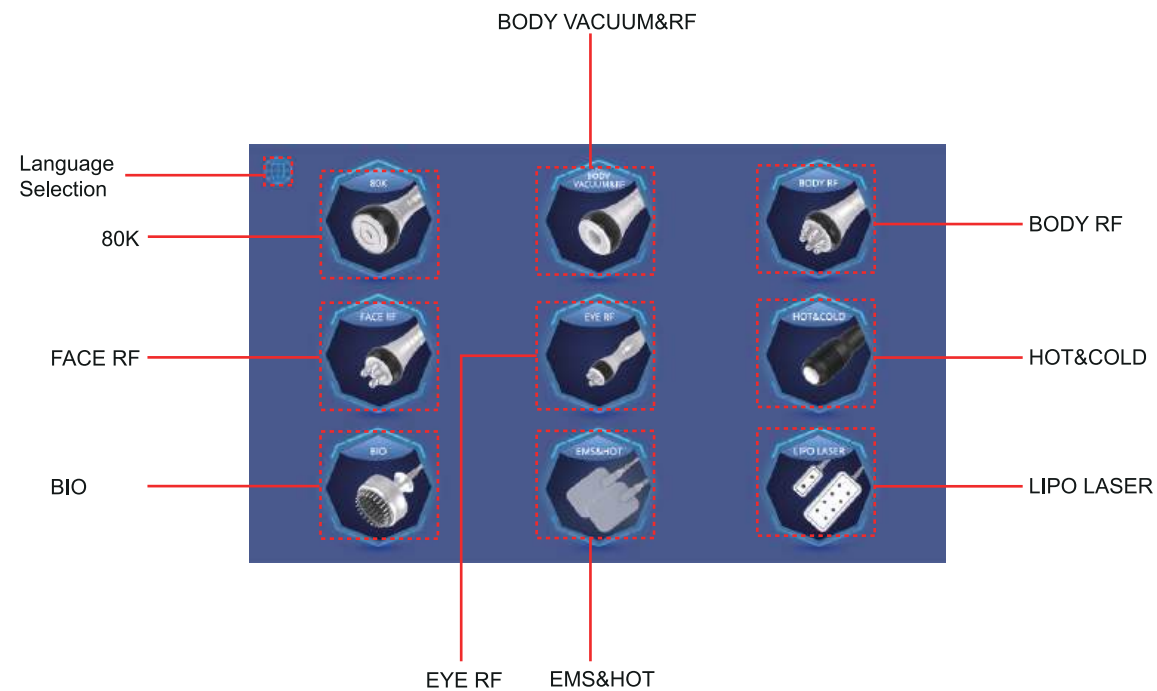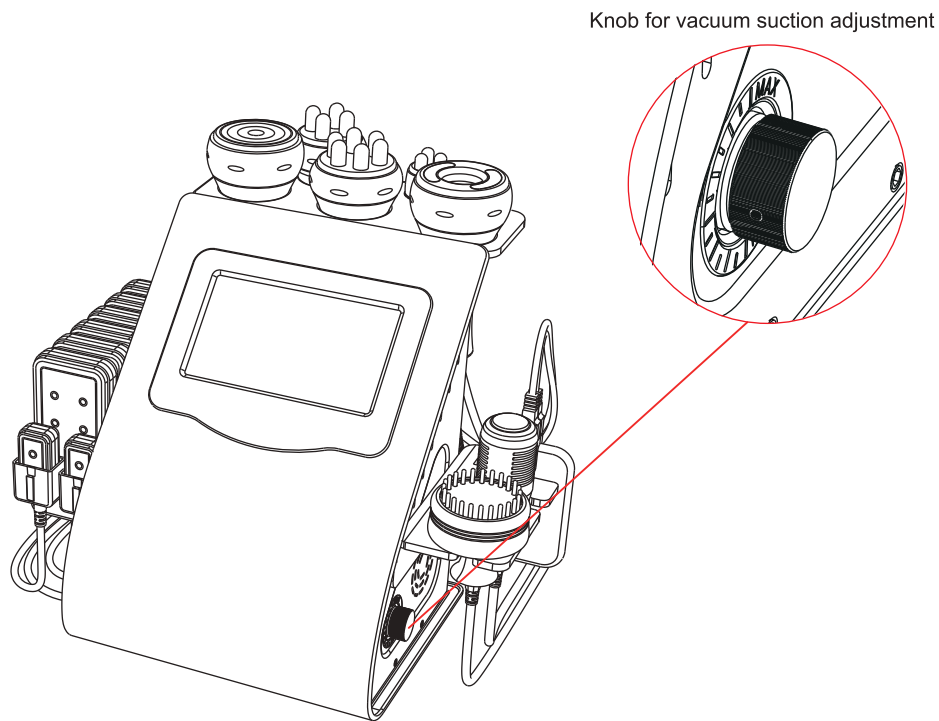

Mode selection:
 M1: 1.5s active, 1.2s idle
 M2: 1.2s active, 1.0s idle
 M3: 0.8s active, 0.6s idle
 M4: 0.5s active, 0.3s idle



Time display and set buttons
 (0 - 60 minutes)

Energy level display and set buttons
 (0 - 10)

Main menu

Reset

Start/Pause



Time display and set buttons
 (0 - 60 minutes)

Energy level display and set buttons
 (0 - 10)

Suction duration display and set

Release duration display and set

Main menu

Reset

Start/Pause

Time display and set buttons
 (0 - 60 minutes)



Energy level display and set buttons
 (0 - 10)

Main menu

Reset

Start/Pause

Time display and set buttons
 (0 - 60 minutes)



Energy level display and set buttons
 (0 - 10)

Main menu

Reset

Start/Pause




Light Selection and Cycle Mode:

- **Red Light:** Warms deep skin layers, activates collagen, enhances elasticity.
- **Blue Light:** Reduces inflammation, treats acne, kills bacteria.
- **Green Light:** Calms, relieves pain, and repairs skin.
- **Purple Light:** Combines red and blue, treats acne, fades marks.
- **Yellow Light:** Repairs red marks, erythema, relieves redness, swelling, pigmentation; brightens skin.
- **White Light:** Decomposes spots, improves fine lines, tightens skin.
- **Cyanine Light:** Boosts metabolism, increases cell activity, smooths skin, reduces wrinkles.

Time display and set buttons
(0 - 60 minutes)

Display of the LIPO LASER energy

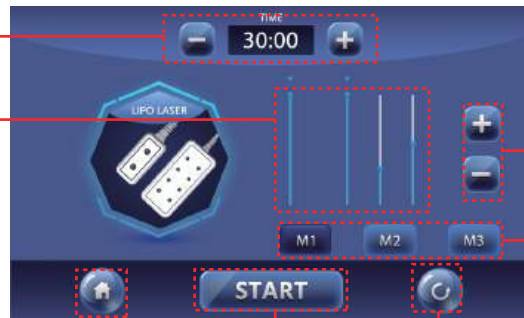

Main menu

Start/Pause

Reset

Energy level set buttons (0 - 10)

Mode selection:
M1: The lights are continuously illuminated.
M2: The lights blink at a slow pace.
M3: The lights flash quickly.

Time display and set buttons
(0 - 60 minutes)

Hot level display and set (0 - 10)



Main menu


Start/Pause


Reset

Energy level display and set buttons
(0 - 10)

Modeselection:
M1:1.5sactive,1.0sidle
M2:0.2sactive,0.2sidle
M3:0.4sactive,0.3sidle
M4:0.6sactive,0.6sidle

5. Technical Specification

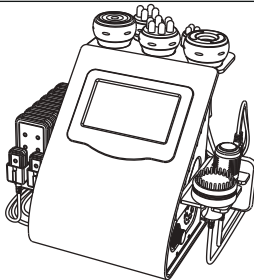	Power supply Input: AC110V-2 2 0v 50HZ / 60Hz		Net Weight: 7.45 KG		
	Power: 86 W		Gross Weight: 9KG		
	Dimensions: 16.5 ×16. 3 ×14.9inches				
	Input Power: 86 W				
	Frequency: 80KHz			Frequency: 1MHz	
	Power: 25 W			Power: 76 W	
	Frequency: 1MHz			Frequency: 1MHz	
	Power: 68 W			Power: 50 W	
	RF Frequency: 1MHz		Air flow: 6 LPM		
	Power: 86 W		Noise level: <6 0 db(30cm away)		
	Vacuum: - 63 KPa				
	Wavelength: 5mw			Frequency: 63 Hz	
	Power: 12 W			Power: 12 W	

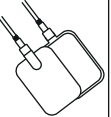	Power: 21 W		Frequency: 27 Hz
	COLD: 32-39.2°F		
	HOT: 113°F		

6. Use Precautions

1. Strictly follow the instructions in the manual to use the instrument and train operator.
2. Before using the instrument, use a plug with a grounding pin and ensure the power socket is grounded.
3. Make sure the voltage of the instrument is adapted. If the local power supply voltage is unstable, we recommend adding a power-matched regulated power supply between the mains and the instrument.
4. Remove all the metal objects inside the body to avoid causing accidents or affecting treatment effects.
5. Stop the intake of anti-adiposity drugs 1 - 2 months before the treatment, or extend the treatment course if you want to take the treatment immediately.
6. Refrain from using the instrument on an empty stomach, and initiate the treatment one hour after a meal.
7. Ensure full skin contact with the treatment head throughout the session to avoid uneven heat distribution.
8. Refrain from using the 80K handle on areas such as the head, chest, breast, heart, or back.
9. Always start with the lowest suction intensity, and increase it gradually.
10. Ensure the filter cotton is installed inside the vacuum handle, as the foreign body may block the handle.

11. Fix the laser pads on the treated individual first, then switch on the instrument, and gradually adjust the energy intensity from low to high to ensure a warm and comfortable experience for the user.
12. Maintain complete contact between the laser pad surface and skin, avoiding partial contact.
13. The combination of the laser pad with massage or other beauty devices contributes to better results. Alternatively, you can use the laser pads alone. Simply fix them in the treatment area and wait for 20 minutes.
14. Before BIO or EMS treatment, inform the recipient about microcurrent sensations to prevent concerns or discomfort.

7. Maintenance & Cleaning

1. Disconnect the power cord when not in use and store the instrument in a dry, cool, and well-ventilated place.
2. Clean and sanitize the applicator with a damp cloth or saline, and then dry it thoroughly with a dry towel to ensure it remains dry.
3. Before cleaning the Vacuum & RF applicator, ensure to remove the filter cotton to prevent the growth of bacteria.
4. After cleaning the instrument, cover it with a dustcloth or plastic wrap. Before use, ensure to sanitize the handle again for hygienic reasons.
5. Disassembling the instrument and attempting to clean the inside is strictly prohibited. This task should only be performed by professionals.

8.FAQ

1.How long does it take to see the results of RF treatment?

A: You might experience skin tightness right after the treatment, as the heat stimulation tightens the collagen tissue, and the RF stimulates the subcutaneous tissue bringing the continuous regeneration of collagen, leading to more noticeable results within one week.

2.Is RF safe for the skin?

A: RF firming and anti-wrinkle treatment is a non-surgical method that stimulates collagen regeneration and metabolism in the deeper layers of the skin without causing any harm. It's normal to experience temporary heat and redness in the treated area, which indicates increased circulation and should subside within a few hours. There's no need to be concerned about this reaction.

3.What is the duration of a body sculpting treatment?

A: Approximately 60 minutes, our skilled techniques and advanced instrument guarantee impressive results.

4.Liposuction or this device?

A: Liposuction surgery utilizes negative pressure to remove adipose tissue accumulations from specific areas, resulting in a body-shaping effect. It provides you with immediate results, but it also carries risks, requires anesthesia, and involves downtime. While our device offers a risk-free solution with no side effects. It sculpts your body, stimulates collagen regeneration for lifted skin, and creates the ideal figure for an overall improved appearance.

5.Is it safe to use ultrasound on the entire body?

A: NO. Ultrasound disrupts adipose tissue, which is then absorbed and metabolized by the human body. The power of ultrasound is quite strong, and the heart is particularly sensitive to sound waves due to being a hollow organ. Sound waves can cause vibrations in the heart, and there can be variations in how sound waves are conducted through muscle tissue and blood within the heart, resulting in back-and-forth reflections. As a consequence, the valve may become dislodged from the heart muscle. Certainly, ultrasound treatment should be strictly avoided around the eye area to prevent the risk of retinal detachment, as well as areas such as the waist, back, chest, and the region around the heart.

6.Are there any side effects of ultrasound on the human body?

A: Ultrasound treatment is a non-surgical, non-invasive procedure that requires no incisions or anesthesia. It combines various technologies, including ultrasound (mechanical wave), cavitation, and ultrasound focusing. This process results in adipose tissue breakdown, dissolution, skin tightening, and body shaping. Importantly, it selectively targets low-density adipose tissue while safeguarding high-density tissues like blood vessels and nerves, ensuring no adverse effects on the body. You may notice a slight noise in your ears during the treatment, which is a normal occurrence and requires no cause for concern.

7.Why do I get tinnitus during the treatment?

A: When the ultrasound with concentrated energy vibrates strongly and has a frequency higher than 20KHz, it can penetrate the skin to reach the adipose layer that is 20mm deep. The energy causes high-speed friction and heat within the adipose tissue, which breaks them down and emulsifies them. However, this process can create noise that may be audible in your ears.

8.What is collagen?

A: Collagen is a biological polymer substance, a white opaque fibrous protein without branched chains, which can replenish essential nutrients needed by all layers of the skin and enhance the collagen activity in the skin, with the effects of locking moisture, moisturizing the skin, delaying aging, improving facial laxity and hair care. Collagen is an essential nutrient for promoting anti-aging effects. As you age, the gradual loss of collagen in your skin becomes evident. Typically, a woman's skin starts showing signs of aging around the age of 20 due to collagen depletion, and the rate of loss peaks at 25.

Research suggests that by the age of 40, collagen levels are only about half of what they were at 18.

The reduction in collagen and moisture content can contribute to the development of facial folds and wrinkles. This is primarily due to the breakdown of collagen fibers and elastic networks that support the skin. This loss also leads to oxidation, atrophy, and collapse of skin tissue, resulting in various signs of aging such as dehydration, wrinkles, looseness, and lack of elasticity.

9.Ask & Answer

Ask		Cause		Answer
1.Fail to turn on the instrument.	→	The power cord is disconnected from the outlet.	→	Check if the power cord is securely connected to the outlet and ensure that the outlet is functional.
	→	The fuse is loose or burned.	→	Replace the fuse on the back of the instrument and restart it.
2. The instrument is not working and can't be restarted.	→	The fuse may have burned out due to unstable voltage or prolonged use.	→	Please replace the fuse and restart the instrument 5 minutes later.
3.The screen shows an error message.	→	Data error.	→	1. Turn off the instrument, disconnect the power cord, and wait for 1 minute to restart the instrument. 2. If the above method doesn't resolve the problem, please contact your dealer.

Ask	Cause	Answer
4.The RF is not functioning.	→ The handle is not properly connected.	→ Please confirm if the handle plug is well connected to the main unit.
	→ Oil in the treatment area could result in insufficient contact between the handle and the body.	→ Apply some gels to the treatment area after cleaning.
	→ The handle is not in proper contact with the skin.	→ Ensure complete contact between the treatment head and the skin.
5.The 80K handle is not functioning.	→ You might mistakenly assume that the handle is not functioning properly because of its low-noise design.	→ To check if the handle is functioning, please refer to the 80K handle test.
	→ You may have forgotten to apply the gel or have used a product that is not designed for use with the instrument.	→ Please use the specific gel designed for the 80K treatment.
	→ Insufficient pressure.	→ Apply more pressure during the operation.

10.Operation Guide

Face:




Step 1: (10 minutes)




Step 2: (10 minutes)



Step 3: (10 minutes)

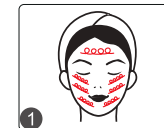


Step 4: (20 minutes)

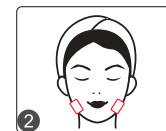

Eye:



Step 1: (10 minutes)

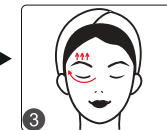

Arm:







Step 1: (15 minutes)




Step 2: (15 minutes)



Step 3: (15 minutes)

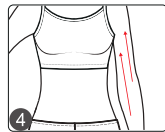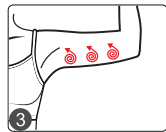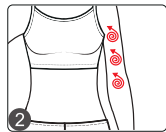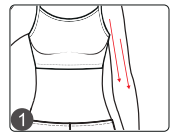

Step 4: (20 minutes)

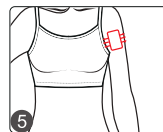

Belly:





Step 1: (15 minutes)




Step 2: (15 minutes)



Step 3: (15 minutes)

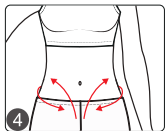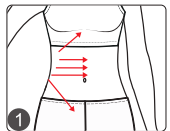

Step 4: (20 minutes)

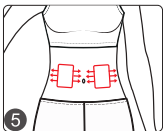







Back:



Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)

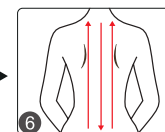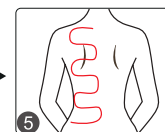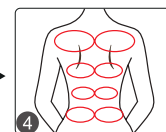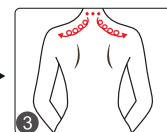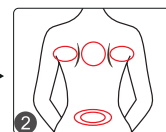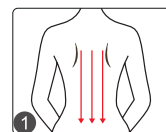

Leg:










Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)



Step 3: (15 minutes)

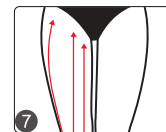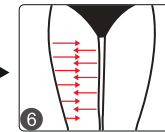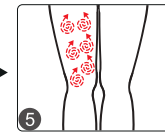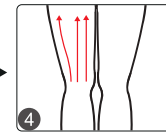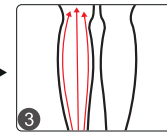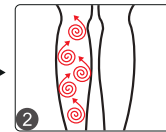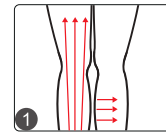


Step 4: (20 minutes)



Arm:




Step 1: (20 minutes)

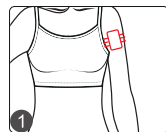

Leg:




Step 1: (20 minutes)

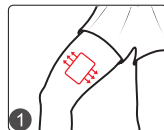

Belly:



Step 1: (20 minutes)

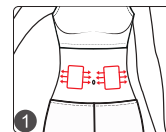

11. Warranty & Support

We offer a comprehensive one-year warranty and a one-month return and replacement policy starting from the date of purchase.

Product Name: Versatile Beauty Enhancer

Product Model: MS-76D6S8


Production Date: _____

Quality Inspection: _____

PASS

Manual de usuario

MS-76D6S8

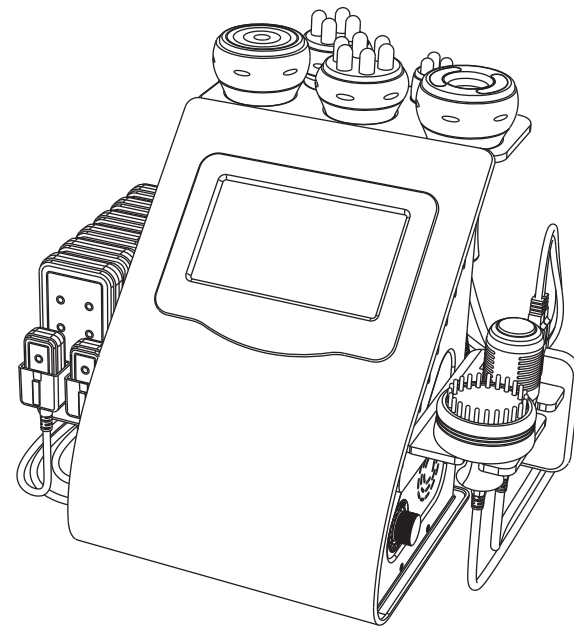

Contenido

1.Precauciones de Seguridad	23
2.Contraindicaciones	23
3.Resumen	24
4.Introducción al Panel de Control	25
5.Especificaciones Técnicas	32
6.Precauciones de Uso	33
7.Mantenimiento y Limpieza	34
8.Preguntas Frecuentes	35
9.Preguntar y Responder	38
10.Guía de Operación	40
11.Garantía y Soporte	44

1. Precauciones de Seguridad

1. Por favor, lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. Este instrumento es un dispositivo electrónico de alta precisión que requiere un almacenamiento adecuado. Evite almacenarlo en condiciones húmedas, a la luz solar directa o cerca de materiales inflamables y explosivos para evitar daños.
3. Siempre utilice el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante toda su vida útil.
4. No coloque el instrumento en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el instrumento en ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben abstenerse de usar este instrumento a menos que hayan obtenido permiso de su médico.
7. Asegúrese de que el instrumento se aplique sobre la piel húmeda y evite la operación sobre la piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Si está tomando medicamentos antiadiposidad actualmente, por favor, suspenda su uso durante 1 a 2 meses antes de usar este instrumento. De lo contrario, puede resultar en un tratamiento prolongado.
10. Para mantener la higiene y extender la vida útil del instrumento, esterilícelo con solución salina.

2. Contraindicaciones

Antes de usar este instrumento, es esencial consultar a su médico o buscar el consejo de profesionales. Detalles a continuación:



1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, enfermedad cardíaca o con marcapasos instalado.
3. Heridas no cicatrizadas o en fase de recuperación post-quirúrgica.
4. Personas sensibles a la microcorriente.
5. Epilepsia, diabetes severa e hipertiroidismo.
6. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
7. Enfermedades de la piel o enfermedades infecciosas.
8. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
9. Cirugía plástica en los últimos tres meses o con implantes u objetos metálicos en el área de tratamiento.

3. Resumen

Aprovechando la tecnología más favorecida y segura, este instrumento de belleza versátil 9 en 1 ofrece mejoras holísticas, que abarcan el estiramiento de la piel y la escultura corporal, garantizando una metamorfosis radiante para su cuerpo. Proporciona la solución perfecta para personas que buscan mejoras en la apariencia de la piel y la figura corporal sin inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Su aplicación externa ofrece resultados inmediatos.

4.Introducción al Panel de Control

perilla para el ajuste de succión de vacío

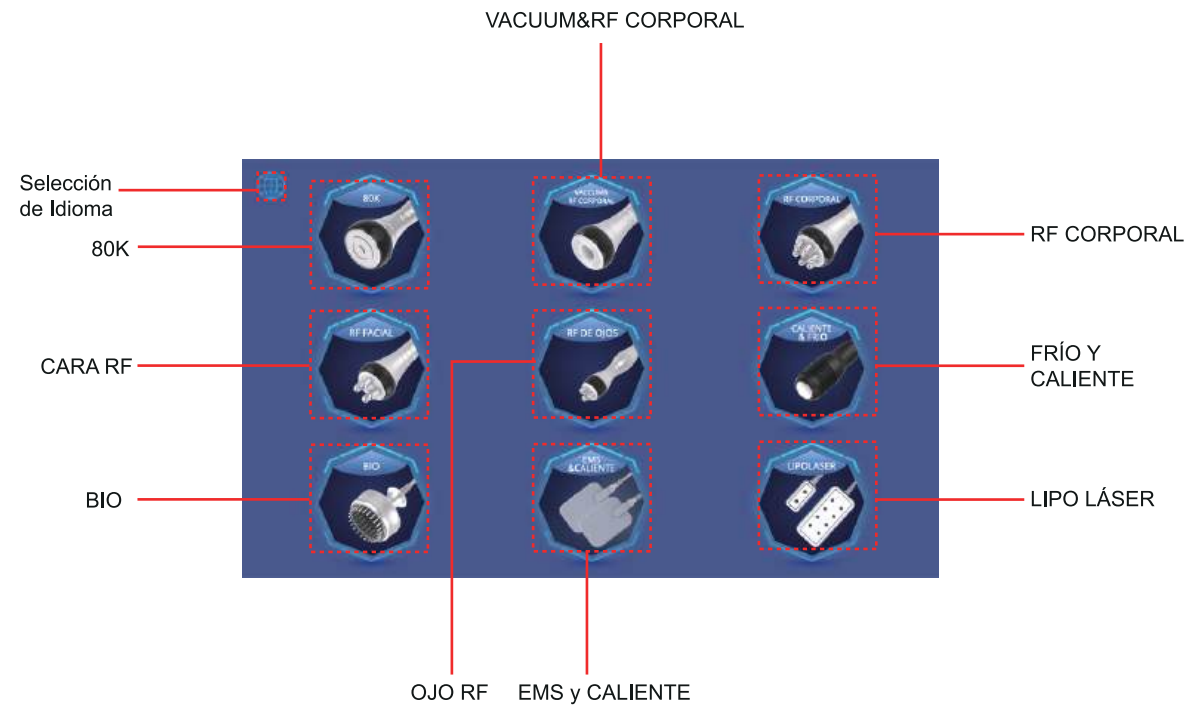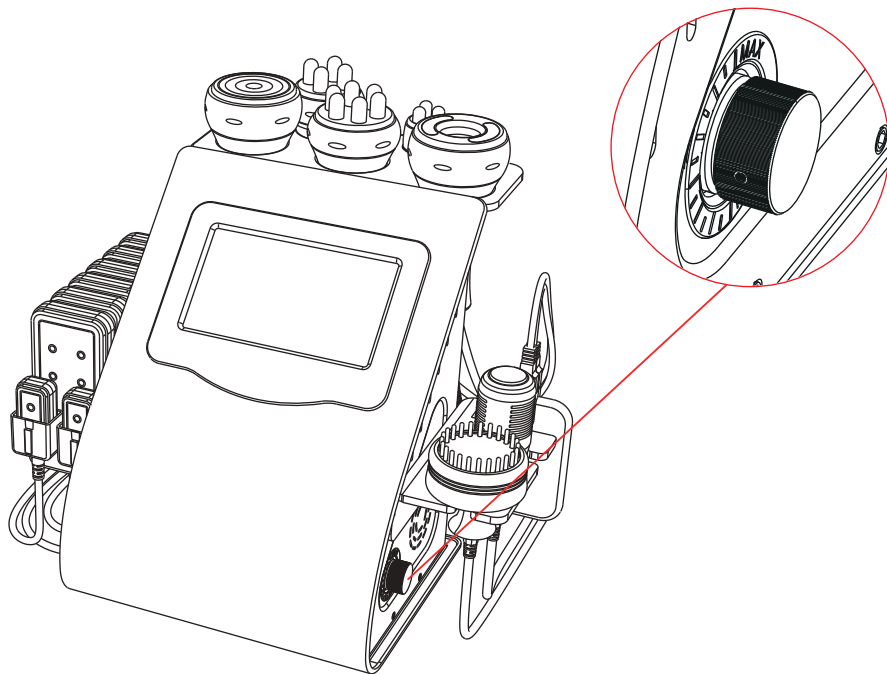

Selección de modo:

M1: 1.5 s activo, 1.2 s inactivo

M2: 1.2 s activo, 1.0 s inactivo

M3: 0.8 s activo, 0.6 s inactivo

M4: 0.5 s activo, 0.3 s inactivo



Pantalla de tiempo y botones de ajuste (0 - 60 minutos)

Pantalla de nivel de energía y botones de ajuste (0 - 10)

Menú principal

Restablecer

Inicio/Pausa



Pantalla y ajuste de duración de succión

Pantalla y ajuste de duración de liberación

Menú principal

Pantalla de tiempo y botones de ajuste (0 - 60 minutos)

Pantalla de nivel de energía y botones de ajuste (0 - 10)

Restablecer

Inicio/Pausa

Pantalla de tiempo y botones de ajuste (0 - 60 minutos)



Pantalla de nivel de energía y botones de ajuste (0 - 10)

Menú principal

Restablecer

Inicio/Pausa

Pantalla de tiempo y botones de ajuste (0 - 60 minutos)



Pantalla de nivel de energía y botones de ajuste (0 - 10)

Menú principal


Restablecer

Inicio/Pausa





Selección de luz y modo de ciclo:

- **Luz roja:** calienta las capas profundas de la piel, activa el colágeno y mejora la elasticidad.
- **Luz azul:** reduce la inflamación, trata el acné y elimina las bacterias.
- **Luz verde:** calma, alivia el dolor y repara la piel.
- **Luz violeta:** combina el rojo y el azul, trata el acné y atenúa las marcas.
- **Luz amarilla:** repara las marcas rojas y el eritema, alivia el enrojecimiento, la hinchazón y la pigmentación; ilumina la piel.
- **Luz blanca:** descompone las manchas, mejora las líneas finas y tensa la piel.
- **Luz de cianina:** estimula el metabolismo, aumenta la actividad celular, suaviza la piel y reduce las arrugas.

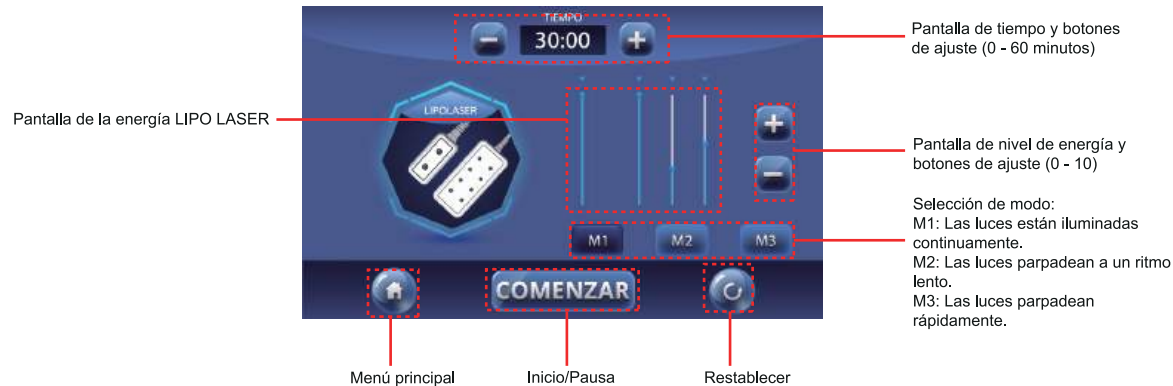

5. Especificaciones Técnicas

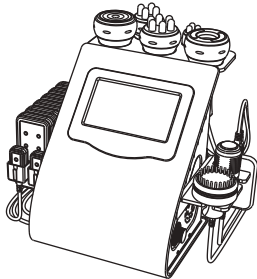	Alimentación Entrada: AC110V-2 2 0v 50HZ / 60HZ		Peso neto: 7.45 KG	
	Potencia: 86 W		Peso bruto: 9 KG	
	Dimensiones: 16.5 ×16. 3 ×14.9inches			
	Potencia de entrada: 86 W			
	Frecuencia: 80 KHz			Frecuencia: 1 MHz
	Potencia: 25 W			Potencia: 76 W
	Frecuencia: 1 MHz			Frecuencia: 1 MHz
	Potencia: 68 W			Potencia: 50 W
	RF Frecuencia: 1 MHz		Flujo de aire: 6 LPM	
	Potencia: 86 W		Nivel de ruido: <60 db (30cm de distancia)	
	Vacío: - 63 KPa			
	Longitud de onda: 5 mw			Frecuencia: 63 Hz
	Potencia: 12 W			Potencia: 12 W

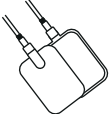	Potencia: 21 W		Frecuencia: 27 Hz
	FRÍO: 32-39.2°F		
	CALIENTE: 113°F		

6.Precauciones de Uso

- 1.Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el instrumento y capacitar al operador.
- 2.Antes de usar el instrumento, utilice un enchufe con clavija de tierra y asegúrese de que el tomacorriente esté conectado a tierra.
- 3.Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea el adecuado. Si el voltaje de la red local es inestable, se recomienda agregar una fuente de alimentación regulada adecuada entre la red y el instrumento.
- 4.Retire todos los objetos metálicos dentro del cuerpo para evitar accidentes o afectar los efectos del tratamiento.
- 5.Suspenda el uso de medicamentos antiadiposidad 1 a 2 meses antes del tratamiento, o extienda el curso del tratamiento si desea tomarlo de inmediato.
- 6.Absténgase de usar el instrumento con el estómago vacío e inicie el tratamiento una hora después de una comida.
- 7.Asegúrese de que haya contacto completo de la piel con el cabezal de tratamiento durante toda la sesión para evitar una distribución desigual del calor.
- 8.Absténgase de usar el mango de 80K en áreas como la cabeza, el pecho, los senos, el corazón o la espalda.
- 9.Siempre comience con la intensidad de succión más baja y aumente gradualmente.

- 10.Asegúrese de que el algodón filtrante esté instalado dentro del mango de vacío, ya que un cuerpo extraño podría obstruir el mango.
- 11.Coloque primero las almohadillas láser en la persona tratada, luego encienda el instrumento y ajuste gradualmente la intensidad de energía de baja a alta para garantizar una experiencia cálida y cómoda para el usuario.
- 12.Mantenga un contacto completo entre la superficie de la almohadilla láser y la piel, evitando el contacto parcial.
- 13.La combinación de la almohadilla láser con masaje u otros dispositivos de belleza contribuye a mejores resultados. Alternativamente, puede usar las almohadillas láser solas. Simplemente colóquelas en el área de tratamiento y espere 20 minutos.
- 14.Antes del tratamiento BIO o EMS, informe al destinatario sobre las sensaciones de microcorriente para evitar preocupaciones o molestias.

7.Mantenimiento y Limpieza

- 1.Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso y guarde el instrumento en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- 2.Limpie y desinfecte el aplicador con un paño húmedo o solución salina, y luego séquelo completamente con una toalla seca para asegurarse de que quede seco.
- 3.Antes de limpiar el aplicador de Vacío & RF, asegúrese de retirar el algodón filtrante para evitar el crecimiento de bacterias.
- 4.Después de limpiar el instrumento, cúbralo con un paño antipolvo o envoltura plástica. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar nuevamente el mango por razones higiénicas.

5. Está estrictamente prohibido desarmar el instrumento e intentar limpiar el interior. Esta tarea debe ser realizada únicamente por profesionales.

8. Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo tarda en verse los resultados del tratamiento con RF?

R: Puede experimentar una sensación de firmeza en la piel justo después del tratamiento, ya que la estimulación por calor tensa el tejido de colágeno, y la RF estimula el tejido subcutáneo, promoviendo la regeneración continua del colágeno, lo que lleva a resultados más notables en una semana.

2. ¿Es segura la RF para la piel?

R: El tratamiento de reafirmación y antiarrugas con RF es un método no quirúrgico que estimula la regeneración del colágeno y el metabolismo en las capas más profundas de la piel sin causar daño. Es normal experimentar calor y enrojecimiento temporales en el área tratada, lo que indica un aumento en la circulación y debería disminuir en unas pocas horas. No hay necesidad de preocuparse por esta reacción.

3. ¿Cuál es la duración de un tratamiento de escultura corporal?

R: Aproximadamente 60 minutos; nuestras técnicas especializadas y el instrumento avanzado garantizan resultados impresionantes.

4. ¿Liposucción o este dispositivo?

R: La cirugía de liposucción utiliza presión negativa para eliminar acumulaciones de tejido adiposo de

áreas específicas, resultando en un efecto de modelado corporal. Ofrece resultados inmediatos, pero también conlleva riesgos, requiere anestesia e involucra un tiempo de recuperación. Mientras que nuestro dispositivo ofrece una solución sin riesgos y sin efectos secundarios. Esculpe su cuerpo, estimula la regeneración de colágeno para una piel más firme y crea la figura ideal para una apariencia general mejorada.

5. ¿Es seguro usar ultrasonido en todo el cuerpo?

R: NO. El ultrasonido interrumpe el tejido adiposo, que luego es absorbido y metabolizado por el cuerpo humano. La potencia del ultrasonido es bastante fuerte, y el corazón es particularmente sensible a las ondas sonoras debido a ser un órgano hueco. Las ondas sonoras pueden causar vibraciones en el corazón, y pueden haber variaciones en cómo se conducen las ondas sonoras a través del tejido muscular y la sangre en el corazón, resultando en reflexiones de ida y vuelta. Como consecuencia, la válvula puede desplazarse del músculo cardíaco. Ciertamente, el tratamiento con ultrasonido debe evitarse estrictamente en el área de los ojos para prevenir el riesgo de desprendimiento de retina, así como en áreas como la cintura, la espalda, el pecho y la región alrededor del corazón.

6. ¿Existen efectos secundarios del ultrasonido en el cuerpo humano?

R: El tratamiento con ultrasonido es un procedimiento no quirúrgico y no invasivo que no requiere incisiones ni anestesia. Combina varias tecnologías, incluido el ultrasonido (onda mecánica), la cavitación y el enfoque de ultrasonido. Este proceso resulta en la descomposición del tejido adiposo, disolución, tensado de la piel y modelado corporal. Importante, se dirige selectivamente al tejido adiposo de baja densidad mientras protege los tejidos de alta densidad como los vasos sanguíneos y nervios, asegurando que no haya efectos adversos en el cuerpo. Puede notar un ligero ruido en los oídos durante el tratamiento, lo cual es una ocurrencia normal y no requiere preocupación.

7. ¿Por qué tengo tinnitus durante el tratamiento?

R: Cuando el ultrasonido con energía concentrada vibra fuertemente y tiene una frecuencia superior a 20KHz, puede penetrar la piel hasta llegar a la capa adiposa de 20 mm de profundidad. La energía causa fricción y calor a alta velocidad dentro del tejido adiposo, lo que los descompone y emulsiona. Sin embargo, este proceso puede crear un ruido que puede ser audible en sus oídos.

8. ¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es una sustancia biológica polimérica, una proteína fibrosa blanca y opaca sin cadenas ramificadas, que puede reponer los nutrientes esenciales necesarios para todas las capas de la piel y mejorar la actividad del colágeno en la piel, con efectos de retención de humedad, hidratación de la piel, retraso del envejecimiento, mejora de la laxitud facial y cuidado del cabello. El colágeno es un nutriente esencial para promover efectos anti-envejecimiento. A medida que envejece, la pérdida gradual de colágeno en su piel se hace evidente. Típicamente, la piel de una mujer comienza a mostrar signos de envejecimiento alrededor de los 20 años debido a la disminución del colágeno, y la tasa de pérdida alcanza su punto máximo a los 25 años. Las investigaciones sugieren que a los 40 años, los niveles de colágeno son solo alrededor de la mitad de lo que eran a los 18. La reducción en el colágeno y el contenido de humedad puede contribuir al desarrollo de pliegues y arrugas faciales. Esto se debe principalmente a la ruptura de las fibras de colágeno y las redes elásticas que soportan la piel. Esta pérdida también lleva a la oxidación, atrofia y colapso del tejido cutáneo, resultando en varios signos de envejecimiento como deshidratación, arrugas, flacidez y falta de elasticidad.

9. Preguntar y Responder

Pregunta	Causa	Respuesta
1. No enciende el instrumento.	→ El cable de alimentación está desconectado del enchufe.	→ Verifique si el cable de alimentación está conectado de manera segura al enchufe y asegúrese de que el enchufe esté en funcionamiento.
	→ El fusible está suelto o quemado.	→ Reemplace el fusible en la parte trasera del instrumento y reinicielo.
2. El instrumento no funciona y no se puede reiniciar.	→ El fusible puede haberse quemado debido a un voltaje inestable o uso prolongado.	→ Reemplace el fusible y reinicie el instrumento después de 5 minutos.
3. La pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error de datos.	→ 1. Apague el instrumento, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto antes de reiniciarlo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, comuníquese con su distribuidor.

Pregunta	Causa	Respuesta
4. El RF no está funcionando.	El mango no está correctamente conectado.	Confirme si el conector del mango está bien conectado a la unidad principal.
	El aceite en el área de tratamiento puede resultar en un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	Aplique geles en el área de tratamiento después de limpiar.
	El mango no está en contacto adecuado con la piel.	Asegúrese de que haya un contacto completo entre la cabeza de tratamiento y la piel.
5. El mango de 80K no está funcionando.	Puede haber asumido erróneamente que el mango no funciona debido a su diseño de bajo ruido.	Para verificar si el mango está funcionando, consulte la prueba del mango de 80K.
	Puede haber olvidado aplicar el gel o utilizado un producto que no está diseñado para el uso con el instrumento.	Utilice el gel específico diseñado para el tratamiento de 80K.
	Presión insuficiente.	Aplique más presión durante la operación.

10. Guía de Operación

Cara:




Paso 1: (10 minutos)




Paso 2: (10 minutos)



Paso 3: (10 minutos)

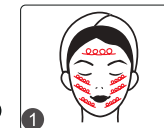


Paso 4: (20 minutos)

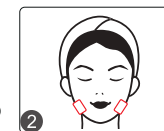

Ojo:



Paso 1: (10 minutos)

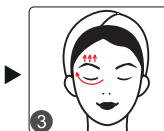



Brazo:




Paso 1: (15 minutos)

Paso 2: (15 minutos)

Paso 3: (15 minutos)

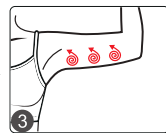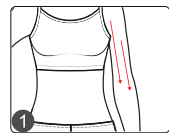

Paso 4: (20 minutos)

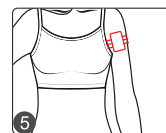



Ventre:




Paso 1: (15 minutos)

Paso 2: (15 minutos)

Paso 3: (15 minutos)

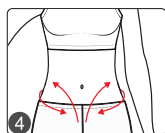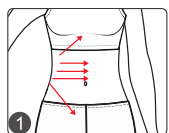

Paso 4: (20 minutos)






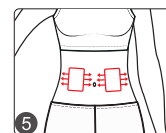


Espalda:



Paso 1: (15 minutos)

Paso 2: (15 minutos)

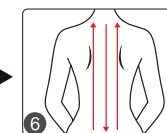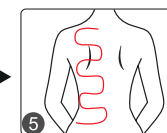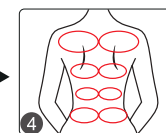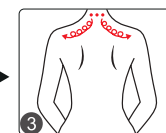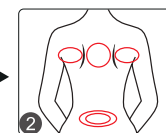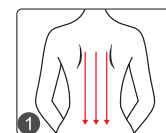








Pierna:



Paso 1: (15 minutos)


Paso 2: (15 minutos)

Paso 3: (15 minutos)

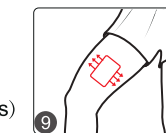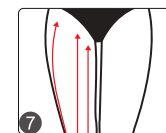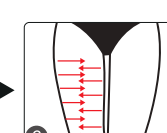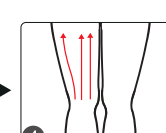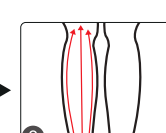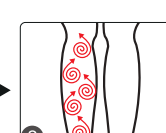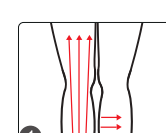


Paso 4: (20 minutos)


Armar:

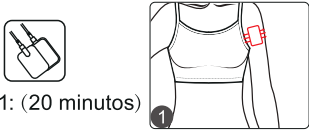

Pierna:

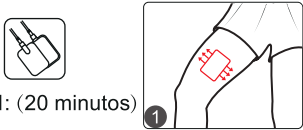

Vientre:

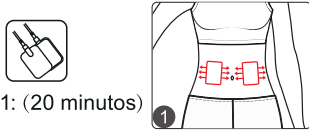

11.Garantía y Soporte

Ofrecemos una garantía integral de un año y una política de devolución y reemplazo de un mes a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto: Potenciador de belleza versátil
Modelo del producto: MS-76D6S8
Fecha de fabricación: _____
Inspección de calidad: _____

