


Manual del usuario

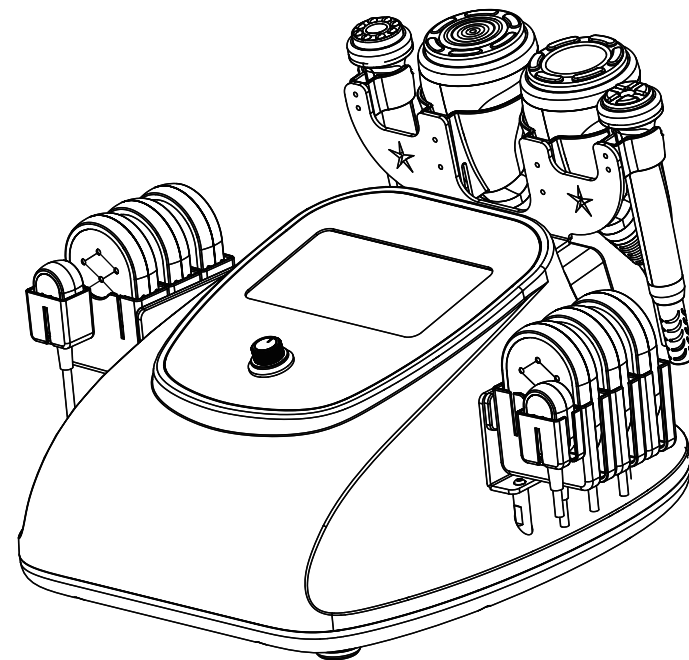

Contenido

1. Precauciones de seguridad	1
2. Contraindicaciones	2
3. Descripción general	2
4. Función de la interfaz	3
5. Especificaciones técnicas	7
6. Precauciones de uso	8
7. Mantenimiento y limpieza	9
8. Preguntas frecuentes	10
9. Preguntas y respuestas	13
10. Guía de funcionamiento	15
11. Garantía y soporte	18

1. Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. Este instrumento es un dispositivo electrónico de alta precisión que requiere un almacenamiento adecuado. Evite almacenarlo en condiciones de humedad, luz solar directa o cerca de materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado o recomendado por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.
4. No exponga el instrumento a altas temperaturas, ya que esto podría afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el instrumento sobre los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben abstenerse de utilizar este instrumento a menos que cuenten con la autorización de su médico.
7. Asegúrese de aplicar el instrumento sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente toma medicamentos para bajar de peso, suspenda su uso 1 o 2 meses antes de usar este instrumento. De lo contrario, el tratamiento podría prolongarse.
10. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del instrumento, esterilícelo con solución salina.

2.Contraindicaciones

Antes de usar este instrumento, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:


1. Mujeres embarazadas o lactantes.
2. Personas con hipertensión, cardiopatías o marcapasos.
3. Personas con heridas sin cicatrizar o en recuperación de una cirugía.
4. Personas sensibles a la microcorriente.
5. Personas con epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
6. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragias.
7. Personas con enfermedades de la piel o infecciosas.
8. Personas que hayan tenido una cesárea en los últimos seis meses, un aborto espontáneo en los últimos tres meses o un parto natural en los últimos dos meses.
9. Por su seguridad, evite usar este producto si se ha sometido a cirugía plástica o tiene implantes u objetos metálicos cerca de la zona de tratamiento en los últimos tres meses.

3.Descripción general

Con la tecnología más popular y segura para el antienvjecimiento, la reafirmación de la piel y la remodelación corporal, este instrumento de belleza 5 en 1 le garantiza la figura y el rostro radiante que desea. Ofrece la solución perfecta para quienes buscan mejorar la apariencia de la piel y la figura sin inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Para uso externo con efectos inmediatos.

4.Función de la interfaz

Perilla para control de succión

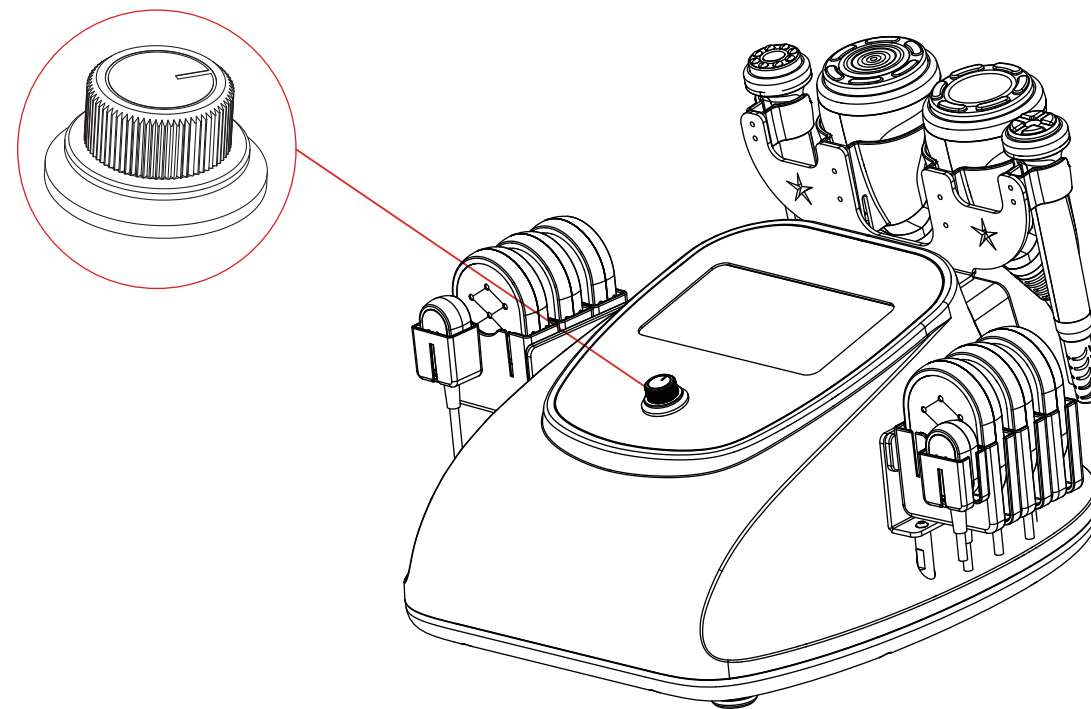

RF y ULTRASONIDO



LIPO LÁSER

CUERPO DE
RF Y SUCCIÓN

RF y SUCCIÓN

EMS & EL

Menú principal

Pantalla de energía ULTRA
SOUND y botones de
configuración (niveles 0-10)

Modo de trabajo continuo

Modo de trabajo intermitente



Botón de inicio/parada

Botón de reinicio

Visualización de tiempo y botones
de configuración (0 - 60 minutos)

Pantalla de energía de RF y botón
de configuración (niveles 0-10)

Selección de modo
NOR: La energía del mango alcanza
el valor establecido inmediatamente.
PRO: La energía del mango alcanza
gradualmente el valor establecido al
entrar en contacto con la piel.

Menú principal

Pantalla de energía de RF y botón
de configuración (niveles 0 a 10)

NOR: La energía del mango alcanza
el valor establecido inmediatamente.
PRO: La energía del mango alcanza
gradualmente el valor establecido al
entrar en contacto con la piel.



Botón de inicio/parada

Botón de reinicio

Visualización del tiempo de succión
y botones de configuración (rango:
0,0 - 2,0)

Visualización de tiempo y botones
de configuración (0 - 60 minutos)

Visualización del tiempo de
liberación y botones de
configuración (rango: 0,0 - 2,0)

Menú principal

Pantalla de energía de RF y botón
de configuración (niveles 0 a 10)

NOR: La energía del mango alcanza
el valor establecido inmediatamente.
PRO: La energía del mango alcanza
gradualmente el valor establecido al
entrar en contacto con la piel.




Botón de inicio/parada

Botón de reinicio


Visualización del tiempo de succión
y botones de configuración (rango:
0,0 - 2,0)

Visualización de tiempo y botones
de configuración (0 - 60 minutos)

Visualización del tiempo de
liberación y botones de
configuración (rango: 0,0 - 2,0)

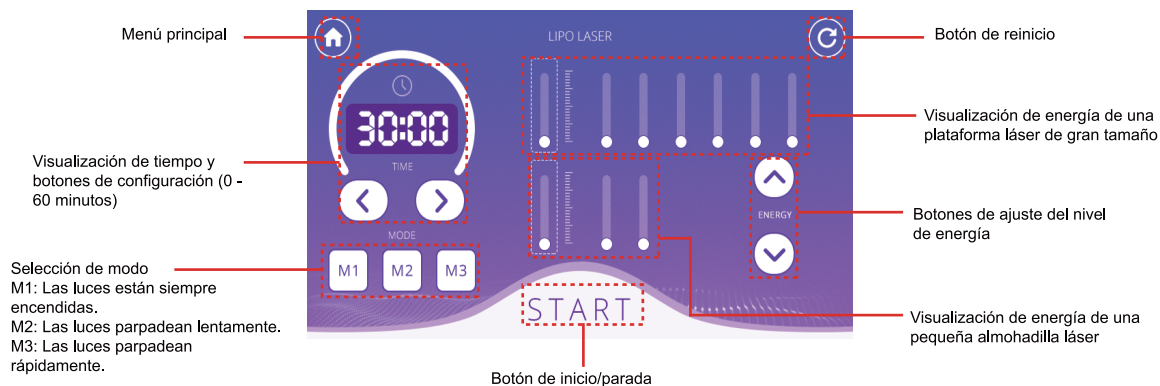

5. Especificaciones técnicas

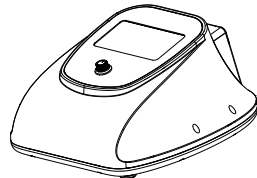	Entrada de alimentación: CA 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz		Peso neto: 7,8 kg	
	Potencia: 90 W		Peso bruto: 9,1 kg	
	Dimensiones: 18,3 x 18,5 x 11,2 pulgadas			Potencia: 16W
	Potencia de entrada: 90 W			

	Frecuencia de ultrasonido: 30 KHz			Frecuencia EL: 4 KHz	
	Frecuencia de RF: 5 MHz			Frecuencia EMS: 62,5 Hz	
	Potencia: 90W			Potencia: 10W	

	Frecuencia: 5 MHz		Flujo de aire: 10 LPM	
	Potencia: 90 W		Nivel de ruido: <65db (a 30 cm de distancia)	
	Vacío: -73 KPa			

	Frecuencia: 5 MHz		Flujo de aire: 10 LPM	
	Potencia: 70W		Nivel de ruido: <65db (a 30 cm de distancia)	
	Vacío: -73 KPa			

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para usar el instrumento y capacitar al operador.
2. Antes de usar el instrumento, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea el adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y compatible entre la red eléctrica y el instrumento.
4. Retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar accidentes o afectar los efectos del tratamiento.
5. Suspenda la toma de medicamentos para bajar de peso 1 o 2 meses antes del tratamiento o prolongue el tratamiento si desea iniciarlo inmediatamente.
6. No utilice el instrumento con el abdomen vacío y comience el tratamiento 1 hora después de comer.
7. Asegúrese de que el cabezal de tratamiento esté en contacto completo con la piel durante toda la sesión para evitar una distribución desigual del calor.
8. Evite utilizar el mango de RF y ULTRASONIDO en zonas como la cabeza, el pecho, el pecho, el corazón o la espalda.
9. Asegúrese de que el filtro de algodón esté instalado dentro del mango del CUERPO DE SUCCIÓN Y RF, ya que un cuerpo extraño podría bloquear el mango.

7. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el instrumento en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina, y luego séquelo bien con una toalla seca para asegurar que permanezca seco.
3. Antes de limpiar el mango del dispositivo de RF y SUCCIÓN, asegúrese de retirar el filtro de algodón para evitar la proliferación de bacterias.
4. Después de limpiar el instrumento, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango de nuevo por razones de higiene.
5. Está estrictamente prohibido desmontar el instrumento e intentar limpiar el interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

8. Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del tratamiento de RF?

R: Es posible que experimente tirantez en la piel inmediatamente después del tratamiento, ya que la estimulación térmica tensa el tejido de colágeno y la RF estimula el tejido subcutáneo, lo que genera una regeneración continua del colágeno, lo que genera resultados más notables en una semana.

2. ¿Es la radiofrecuencia segura para la piel?

R: El tratamiento reafirmante y antiarrugas con radiofrecuencia es un método no quirúrgico que estimula la regeneración y el metabolismo del colágeno en las capas más profundas de la piel sin causar daño alguno. Es normal experimentar calor y enrojecimiento temporales en la zona tratada, lo cual indica un aumento de la circulación sanguínea y debería desaparecer en pocas horas. No hay necesidad de preocuparse por esta reacción.

3. ¿Cuál es la duración de un tratamiento de remodelación corporal?

R: Aproximadamente 60 minutos, nuestras técnicas especializadas y nuestro instrumento avanzado garantizan resultados impresionantes.

4. ¿Liposucción o este aparato?

R: La liposucción utiliza presión negativa para eliminar el exceso de grasa de zonas específicas, lo que produce un efecto adelgazante. Ofrece resultados inmediatos, pero también conlleva riesgos, requiere anestesia y tiempo de recuperación. Nuestro dispositivo ofrece una solución sin riesgos ni efectos secundarios. Modela el cuerpo, estimula la regeneración de colágeno para una piel más firme y crea la figura ideal para una mejor apariencia general.

5. ¿Es seguro utilizar ultrasonido en todo el cuerpo?

R: NO. El ultrasonido puede descomponer las células grasas, provocando la ruptura de las paredes celulares y la liberación de grasa, que posteriormente es absorbida y metabolizada por el sistema linfático. El ultrasonido es muy potente, y el corazón es particularmente sensible a las ondas sonoras debido a su cavidad. Las ondas sonoras pueden causar vibraciones en el corazón, y puede haber variaciones en la forma en que se transmiten a través del tejido muscular y la sangre dentro del corazón, lo que resulta en reflexiones de ida y vuelta. Como consecuencia, la válvula puede desprenderse del músculo cardíaco. Ciertamente, el tratamiento con ultrasonido debe evitarse estrictamente en la zona de los ojos para prevenir el riesgo de desprendimiento de retina, así como en zonas como la cintura, la espalda, el pecho y la región que rodea el corazón.

6. ¿Existen efectos secundarios del ultrasonido en el cuerpo humano?

R: Las ondas sonoras de alta frecuencia son un procedimiento no quirúrgico y no invasivo que no requiere incisión ni anestesia. ¿Cómo funciona el ultrasonido? Ultrasonido (onda mecánica) - cavitación - enfoque ultrasónico. El efecto: desintegración y disolución de la grasa, reafirmación de la piel y modelado corporal. Por lo tanto, se enfoca únicamente en el tejido adiposo de baja densidad y protege el tejido de alta densidad, como los vasos sanguíneos y los nervios, garantizando así la ausencia de efectos adversos en el cuerpo. Es posible que note un ligero ruido en los oídos durante la sesión, lo cual es normal y no debe preocuparse.

7. ¿Por qué tengo tinnitus durante el tratamiento?

R: Cuando el ultrasonido con energía concentrada vibra con fuerza y tiene una frecuencia superior a 20 kHz, puede penetrar la piel hasta alcanzar la capa de grasa de 20 mm de profundidad. La energía genera fricción y calor a alta velocidad entre las células grasas, lo que las descompone y las

emulsiona. Sin embargo, este proceso puede generar ruidos audibles.

8.¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es una sustancia polimérica biológica, una proteína fibrosa blanca opaca sin cadenas ramificadas, que puede reponer los nutrientes esenciales que necesitan todas las capas de la piel y mejorar la actividad del colágeno en la piel, con los efectos de retener la humedad, hidratar la piel, retrasar el envejecimiento, mejorar la flacidez facial y el cuidado del cabello. El colágeno es un nutriente esencial para promover los efectos antienvjecimiento. A medida que envejecemos, la pérdida gradual de colágeno en la piel se hace evidente. Por lo general, la piel de una mujer comienza a mostrar signos de envejecimiento alrededor de los 20 años debido al agotamiento del colágeno, y la tasa de pérdida alcanza su punto máximo a los 25. Las investigaciones sugieren que a los 40 años, los niveles de colágeno son solo la mitad de lo que eran a los 18. La reducción del contenido de colágeno y humedad puede contribuir a la aparición de pliegues y arrugas faciales. Esto se debe principalmente a la degradación de las fibras de colágeno y las redes elásticas que sostienen la piel. Esta pérdida también conduce a la oxidación, atrofia y colapso del tejido cutáneo, lo que da lugar a diversos signos de envejecimiento, como deshidratación, arrugas, flacidez y falta de elasticidad.

9.¿La grasa reducida volverá después del tratamiento con láser lipo?

R: El número de células adiposas en un adulto se mantiene constante, y el aumento de peso generalmente se debe a un aumento en el tamaño de estas células. Este tratamiento emplea un láser específico para estimular las células adiposas, lo que provoca que liberen los ácidos grasos y triglicéridos almacenados, reduciendo así el volumen celular. Por lo tanto, la reaparición de la grasa es muy improbable. Además, mantener una dieta saludable contribuiría en gran medida a prevenirla.

9.Preguntas y respuestas

Preguntar	Cause	Respuesta
1.No se enciende el instrumento.	→ El cable de alimentación está desconectado de la toma de pared.	→ Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado a la toma de pared y asegúrese de que la toma funciona.
	→ El fusible está suelto o quemado.	→ Reemplace el fusible en la parte posterior del instrumento y reinicielo.
2. El instrumento no funciona y no se puede reiniciar.	→ Es posible que el fusible se haya quemado debido a un voltaje inestable o un uso prolongado.	→ Reemplace el fusible y reinicie el instrumento 5 minutos después.
3.La pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error de datos.	→ 1. Apague el instrumento, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto para reiniciarlo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con su distribuidor para obtener un reemplazo.


Preguntar	Cause	Respuesta
4.La RF no está funcionando.	→ El mango no está conectado correctamente.	→ Confirme si el enchufe del mango está bien conectado a la unidad principal.
	→ La presencia de aceite en el área de tratamiento podría provocar un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	→ Asegúrese de que haya contacto completo entre el cabezal de tratamiento y la piel.
	→ El mango no está en contacto correcto con el cuerpo.	→ Aplique algunos geles en el área a tratar después de limpiarla.
5. El mango de RF y ULTRASONIDO no funciona.	→ Se podría suponer erróneamente que el mango no funciona correctamente debido a su diseño de bajo ruido.	→ Para comprobar si el mango funciona, consulte la prueba previa del mango de RF y ULTRASONIDO.
	→ Es posible que haya olvidado aplicar el gel o haya utilizado un producto que no está diseñado para usarse con el instrumento.	→ Utilice el gel profesional para el gel RF y ULTRA SONIDO.
	→ Presión insuficiente.	→ Presione más fuerte durante la aplicación del mango de RF y ULTRASONIDO.

10.Guía de funcionamiento


Rostro:




Paso 1: (10 minutos)

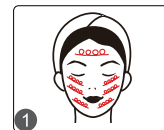

Paso 2: (10 minutos)

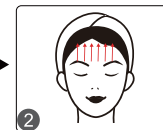

Paso 3: (20 minutos)

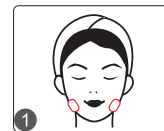

Brazo:





Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Paso 3: (20 minutos)

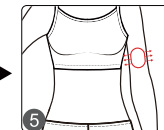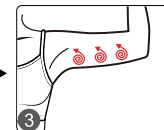

Barriga:



Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)




Paso 3: (20 minutos)



Atrás:



Paso 1: (15 minutos)

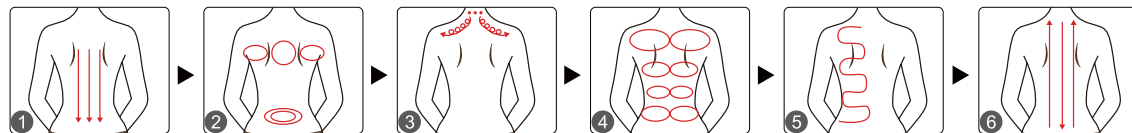

Pierna:




Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Paso 3: (20 minutos)

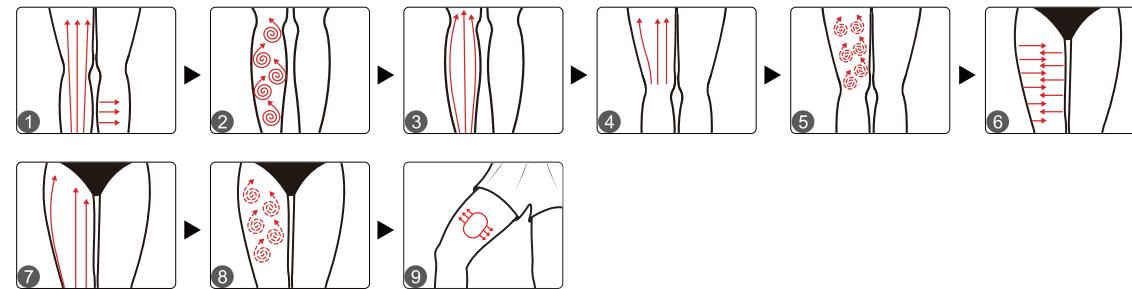

11. Garantía y soporte

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Nombre del producto: Potenciador de belleza versátil

Producto Modelo: SD-45S2SB

Fecha de producción: _____

Inspección de calidad: _____

