


LED User's Manual

CL-81K1

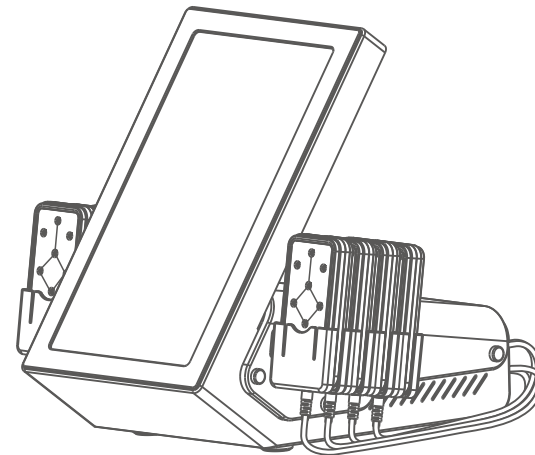

Foreword

Dear User:

Welcome to use our LED body shaping device, it is an efficacious LED beauty device for body shaping.

It should be operated by the professional, as the improper operation may cause adverse results to the human body.

Please read this manual carefully before operation, and follow the instructions in the manual during operation.

We believe our high-quality product will bring you excellent returns, and our perfect after-sales service will free your worries.

Thank you!

Content EN

1. Introduction	1
2. Precautions	1
3. Contraindications	2
4. Technical parameters	3
5. Packing list	3
6. User guide	4
7. Interface Introduction	7
8. Troubleshooting	9
9. FAQ	9
10. Treatments Introduction	10
Waist and Abdomen Sculpting	10
Arms Sculpting	12
Legs Sculpting	13
Back Sculpting	15
Buttocks Sculpting	16
11. Recommended frequency	18
12. After treatment	18
13. Warranty and support	18

Contenido ES

1. Introducción	21
2. Precauciones	21
3. Contraindicaciones	22
4. Parámetros técnicos	23
5. Lista de embalaje	23
6. Guía del usuario	24
7. Introducción a la interfaz	27
8. Solución de problemas	29
9. Preguntas frecuentes	29
10. Tratamiento y Aplicación	30
Esculpir Cintura y Abdomen	30
Esculpir Brazos	32
Esculpir Piernas	33
Esculpir la Espalda	35
Esculpir los Glúteos	36
11. Frecuencia de tratamiento recomendada	38
12. Después del tratamiento	38
13. Garantía y soporte	38

1. Introduction

LED body shaping device is the most popular beauty device for body shaping, with easy, convenient and fast operation, providing body shaping solution for you. No needles, no medicines, no surgeries, no side effects. With strong penetration, LED can penetrate epidermis and dermis to dissolve the subcutaneous fat by heat, the treatment is safe and non-invasive, which is popular among consumers.

2. Precautions

1. Strictly follow the instructions in the manual to use the instrument.
2. Before using the instrument, you must use a plug with a grounding pin and ensure that the power socket of the instrument is grounded.
3. Make sure the voltage of the instrument is adapted. If the local power supply voltage is unstable, we advise you to add a power-matched regulated power supply between the mains and the instrument.
4. Please use the designed accessories provided or advised by original manufacturer to sustain normal service life of the instrument and treatment effect.
5. Do not place the instrument in a wet place or near water, nor expose the instrument to direct sunlight.
6. Do not place the instrument near strong heat, as this may affect its service life and performance.
7. Remove off all the metal objects from your body to avoid unpredictable situation and affect the treatment.
8. Do not use the instrument on the eyes, thyroid, parathyroid, testicles, abdomen of pregnant women and pacemaker.
9. The instrument is not intended for use by patients, unless they have the permission of a doctor.

10. Please turn off the power of the instrument when not in use, and make sure to turn off the general power of the instrument before leaving after daily use to ensure the safety of instrument.

11. In case that you are taking other weight loss drugs, it is recommended to stop the drugs for 1 to 2 months before treatment. If you want to take the LED treatment immediately, the course of treatment should be extended.

12. Do not use the instrument on empty stomach, and take the LED treatment 1 hour later after the meal.

13. Fix the LED pads on clients first, then switch on the instrument, slowly adjust the intensity from low to high to ensure warmth and comfort of the client.

14. Make sure the light-emitting surface of LED pad is in full contact with the skin during procedure, and avoid partly contact.

15. Clean the instrument with saline after operation to ensure the hygiene.

3. Contraindications


1. People who had plastic surgery, with implants or metal objects at the treatment area in 3 months.
2. People who had injections in 3 months (hyaluronic acid, mesotherapy and botulinum).
3. People suffering from heart disease, epilepsy, severe diabetes, hyperthyroidism, malignant tumor, hemophilia, severe bleeding, or wearing pacemaker.
4. People who are experiencing skin irritation, with severe sensitive skin.
5. People with wound on skin.
6. Excessive aging group.
7. People in period of pregnancy, menstruation, lactation.
8. People with skin diseases and infectious diseases.
9. People who have unrealistic illusions about results.

4. Technical parameters


Product name	Magic Light Body Shaping
Product model	CL-81K1
Main unit material	Metal plate
Handle material	ABS
Input voltage	110V/220V 50~60Hz
Rated power	25W

Screen size	15.6 inches
Product dimensions	400*274*390mm
Packing dimensions	475*410*470mm
Product weight	8kg
Packing weight	10kg


5. Packing list

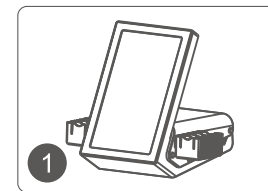


Main unit * 1

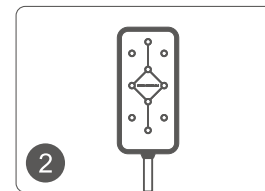

LED pad * 8

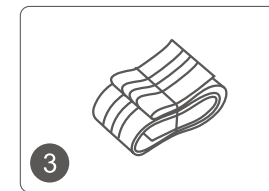

Strap * 1 set


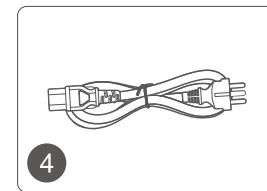


Power cord * 1


Note: Please check the instrument and its accessories or attachments before use, and remove all packaging materials after confirming that they are complete.

6. User guide

1. How to install.

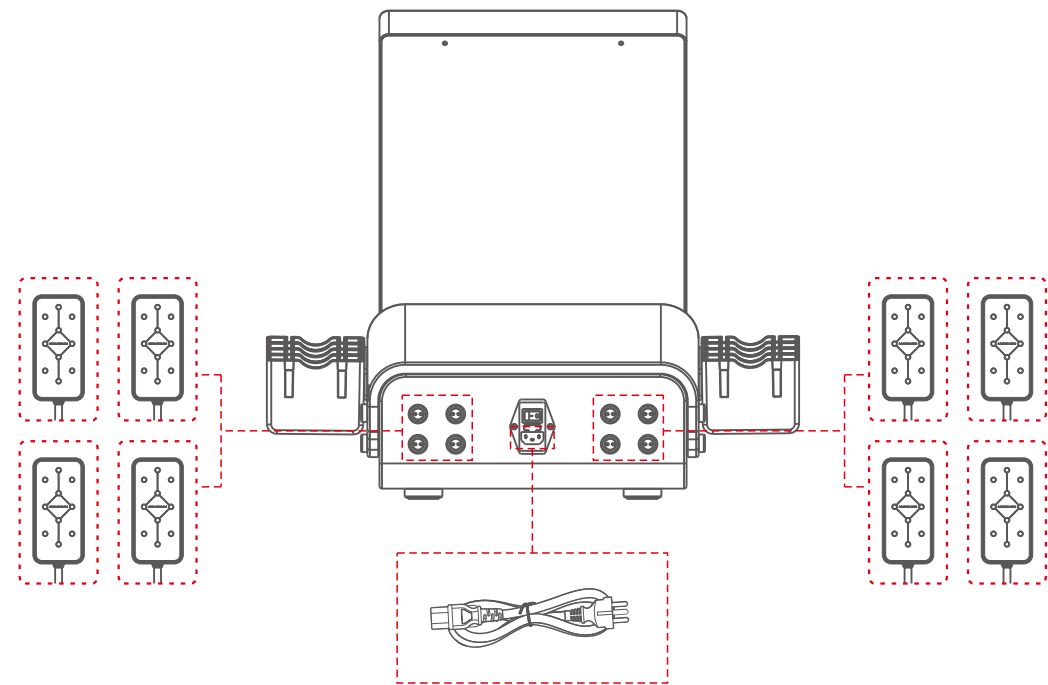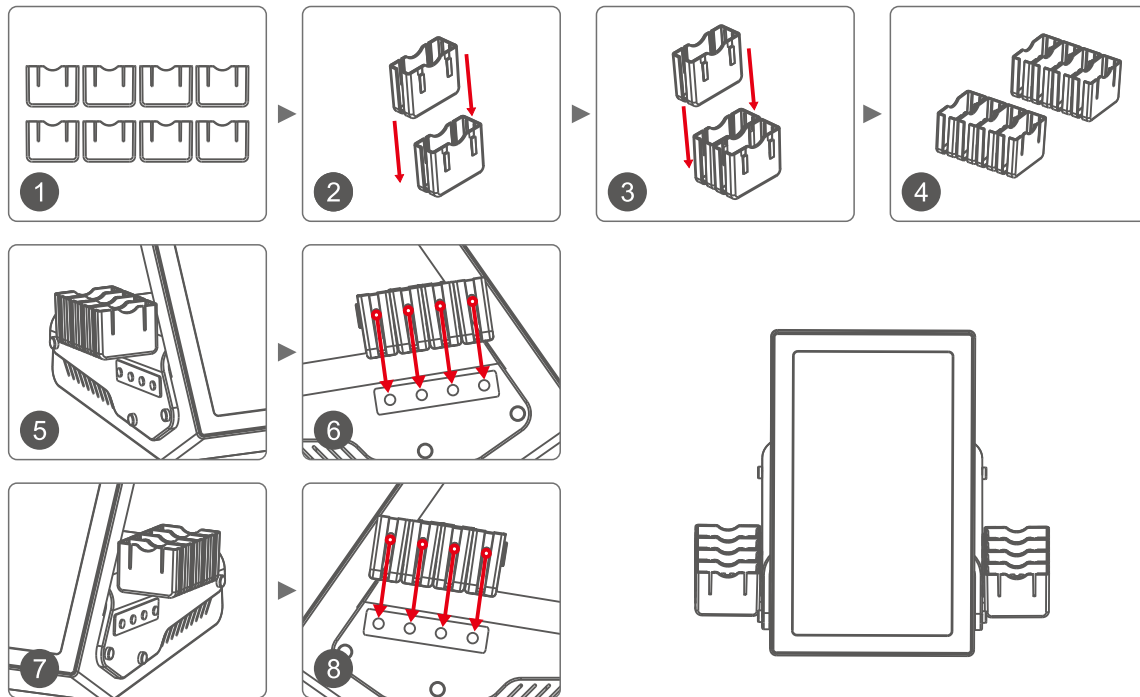

2. Please replace the fuse at the back of the machine when the machine is short-circuited or cannot be started.

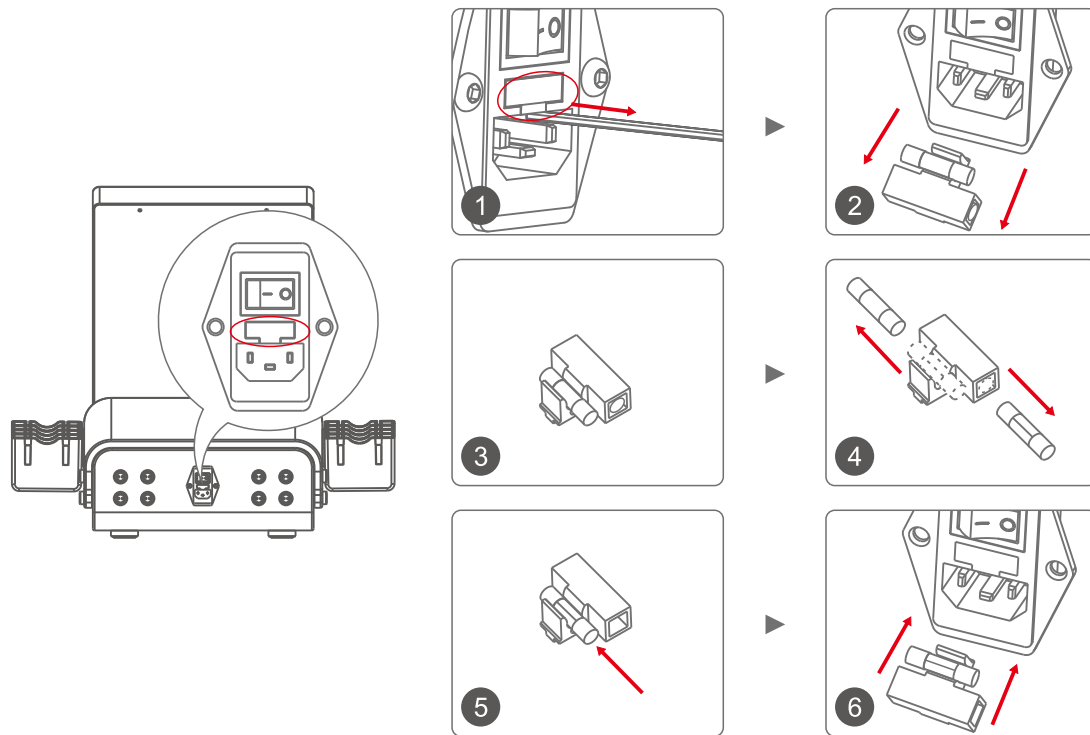


7. Interface Introduction


Welcome interface



Parameter setting interface

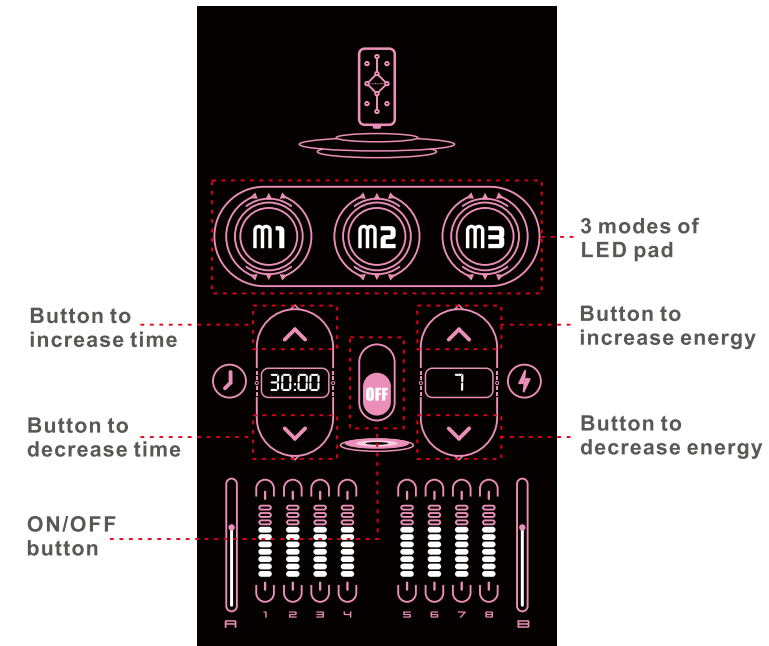

Parameter setting interface

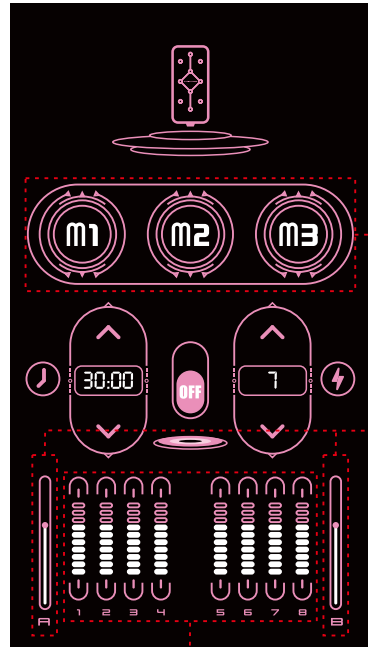**3 modes of LED pad**

M1: Continuous working mode


(lights on pad are always on, used for people who need strong weight loss)

M2: Intermittent working mode


(lights on pad flash slowly, used for result maintenance)

M3: Fast intermittent working mode

(lights on pad flash fast, used for first-time user or the beginning of treatment)

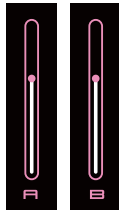

(1) Tap to set energy of all the LED pads uniformly.

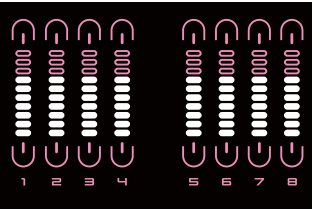

(2) Set energy of single LED pad, tap single LED pad, then tap energy set & display button to set.

8. Troubleshooting

Problem	Possible causes and solutions
1. Instrument fails to turn on and the button indicator is off?	→ A. Make sure the power cable is connected to a valid wall socket. → B. Check if the fuse is loose or burned.
2. No energy output from the LED pad?	→ A. Check if the pad cable is well connected with the main unit. → B. If the above method doesn't work, please contact with the dealer for assistance.
3. The instrument succeeded in starting up, but an error message appeared on the screen?	→ A. Please unplug the power cord, and wait for 1 minute before plugging in the power cord again and restart the instrument. → B. If the above method doesn't work, please contact with the dealer for assistance.

9. FAQ

1. LED body shaping treatment or liposuction surgery?

A: Compared to traditional liposuction, LED body shaping is the irradiation of fat by LED energy, without causing unevenness in the skin, and conversely, leaving the skin smooth and tight without sagging. In addition, the LED energy used in LED body shaping only works on the set fat layer, not hurting the surface skin while accelerating the self-repair of skin elastic fibers, leaving the skin of the treatment area tight and smooth.

2. Will I regain weight after LED body shaping treatment?

A: The number of fat cells in the body is fixed and remains constant as the age grows to adulthood. The increase in body weight is due to the increase in the volume of fat cells. LED body shaping treatment removes the local fat structure and reduces the volume of fat. The fact that there is little rebound case after LED body shaping treatment does not mean that there will be absolutely no rebound. Usually, it will not rebound if you keep a healthy diet.

3. Do I need to keep diet and take exercise during LED body shaping treatment?

A: The effect of LED body shaping treatment is remarkable, but we cannot only rely on it, if you don't keep a healthy diet after achieving idea weight after treatment, you are likely to regain the lost weight. It is important to know that there is no weight loss product in the world guarantees permanent effect. So, this treatment is an auxiliary weight loss method, and you need to stop the treatment after achieving the ideal weight. Please keep a healthy diet and take regular exercise.

10. Treatment & Application

Waist and Abdomen Sculpting

1. Efficacy


- (1) Improve cold limbs and irregular menstruation of females.
- (2) Improve the sagging skin and cellulites on waist and abdomen.
- (3) Tighten skin, improve stretches, increase skin elasticity.
- (4) Accelerate the metabolism and promote blood circulation.

2. Indications

- (1) People with cold limbs and irregular menstruation.
- (2) People with waist fat, belly fat, and sagging skin after delivery.
- (3) People with unattractive waist line due to a sedentary lifestyle.
- (4) People with stretch marks.

3. Recommended Application


Preparation: hot towel, essential oil, strap.

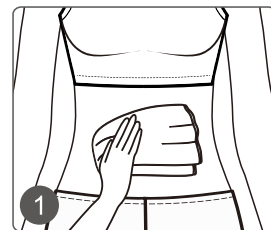


1. Clean the abdomen and waist (better with a hot towel).




2. Massage and relax abdomen and waist with the massage oil. (15 minutes)

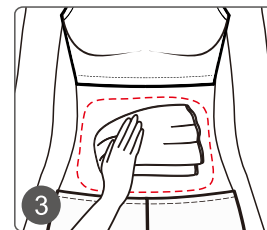


3. Clean the massage area.

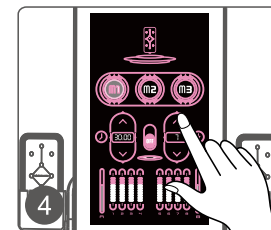


4. Set parameters on the main unit.
(1) Choose M1 mode.
(2) Set Time to 30 minutes.
(3) Set energy to 3-7.

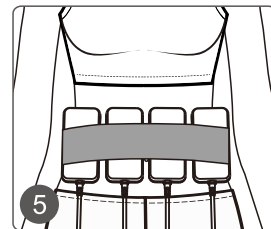

5. Fix the LED pads on waist and abdomen with the strap.

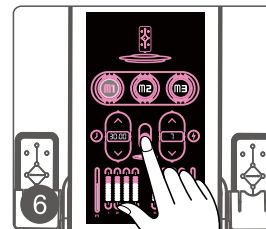

6. Tap ON/OFF button to start (30 minutes).

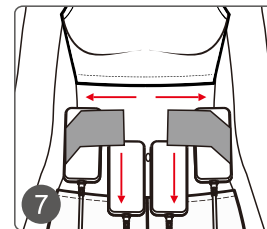

7. When the time is up, remove the LED pads, untie the strap.

Arms Sculpting

1. Efficacy

- (1) Stimulate the bottom layer of skin to regenerate collagen.
- (2) Improve the sagging skin on arms.
- (3) Slim the fat arms.
- (4) Accelerate blood circulation in arms, promote metabolism.

2. Indications


- (1) People with fat arms.
- (2) People with sagging and flabby skin on arms.
- (3) People with frequent soreness and numbness in the arms.

3. Recommended Application


Preparation: hot towel, essential oil, strap.




1. Clean the arms
(better with a hot towel).

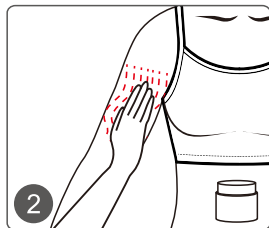


2. Massage and relax arms
with the massage oil.
(15 minutes)

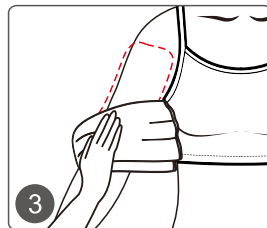


3. Clean the massage area.

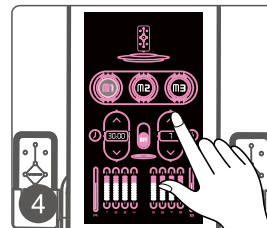


4. Set parameters on the main unit.
(1) Choose M1 mode.
(2) Set Time to 30 minutes.
(3) Set energy to 3-7.

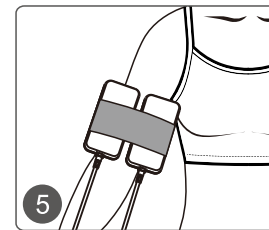

5. Fix the LED pads on arms
with the strap.

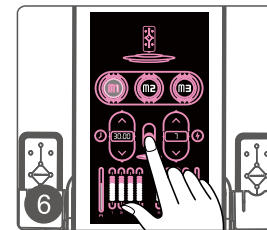

6. Tap ON/OFF button to start
(30 minutes).

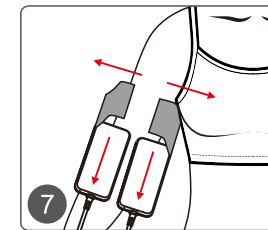

7. When the time is up, remove
the LED pads, untie the strap.

Legs Sculpting

1. Efficacy


- (1) Tighten skin, prevent skin sagging.
- (2) Stimulate collagen regeneration and smooth stretch marks.
- (3) Accelerate blood circulation and metabolism.
- (4) Prevents varicose veins.
- (5) Tighten excess leg fat and get rid of fat legs.

2. Indications

- (1) People with poor blood circulation in legs and metabolism.
- (2) People with rough and sagging skin on legs.
- (3) People with cellulite on legs or with bad leg proportions.

3. Recommended Application


Preparation: hot towel, essential oil, strap.

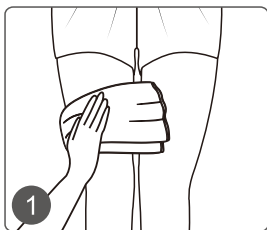


1. Clean the legs (better with a hot towel).




2. Massage and relax legs with the massage oil. (15 minutes)

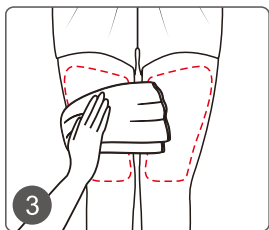


3. Clean the massage area.

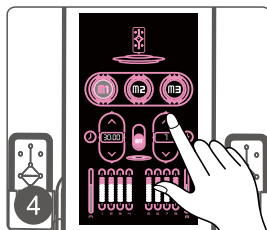


4. Set parameters on the main unit.
(1) Choose M1 mode.
(2) Set Time to 30 minutes.
(3) Set energy to 3-7.

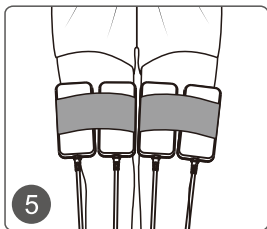

5. Fix the LED pads on legs with the strap.

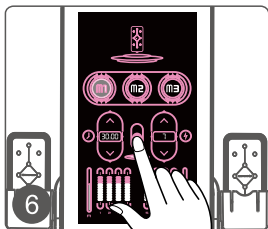

6. Tap ON/OFF button to start (30 minutes).

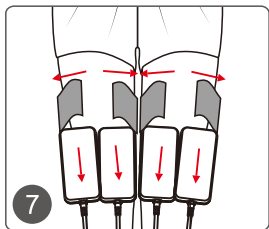

7. When the time is up, remove the LED pads, untie the strap.

Back Sculpting

1. Efficacy

- (1) Relieve back and shoulder tension.
- (2) Accelerate blood circulation in back, promote metabolism.
- (3) Improve blood supply to the head and improve sleep.
- (4) Improve fat deposits on back and clear back contour.

2. Indications


- (1) People suffering from shoulders and back soreness and neck pain.
- (2) People with insomnia and dreaminess, hypomnesia.
- (3) People with continue fatigue and sleepiness.
- (4) People with fat back.

3. Recommended Application


Preparation: hot towel, essential oil, strap.




1. Clean the back (better with a hot towel).

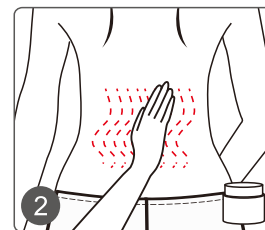


2. Massage and relax back with the massage oil. (15 minutes)

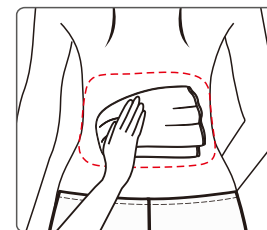


3. Clean the massage area.

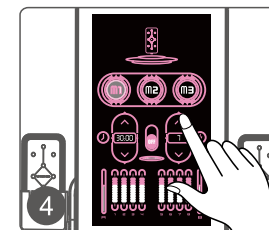


4. Set parameters on the main unit.
(1) Choose M1 mode.
(2) Set Time to 30 minutes.
(3) Set energy to 3-7.

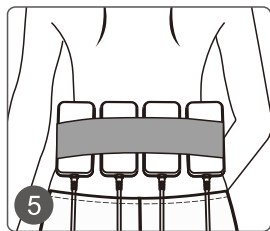

5. Fix the LED pads on back with the strap.

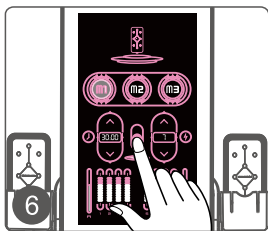

6. Tap ON/OFF button to start (30 minutes).

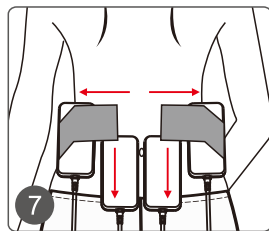

7. When the time is up, remove the LED pads, untie the strap.

Buttocks Sculpting

1. Efficacy


- (1) Improve blood circulation in buttocks, promote metabolism.
- (2) Improve painful menstruation, irregular menstruation, abnormal leucorrhea and other female disorders.
- (3) Improves sleep and female sexual function.
- (4) Activate ovarian function, stimulate glandular secretion, and increase conjugal affection.
- (5) Improve sagging butt, tighten skin and increase skin elasticity.

2. Indications

- (1) People with flabby buttocks or fat deposits on the buttocks.
- (2) People with unattractive buttocks shape or with flat buttocks.
- (3) People with cold buttocks.
- (4) People with dysmenorrhea, irregular menstruation, gynecological inflammation and other disorders.

3. Recommended Application


Preparation: hot towel, essential oil, strap.

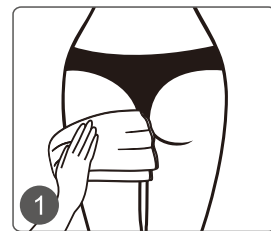


1. Clean the buttocks (better with a hot towel).




2. Massage and relax buttocks with the massage oil. (15 minutes)

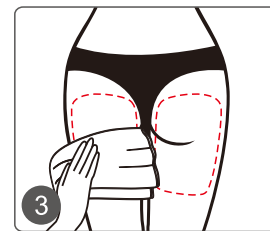


3. Clean the massage area.

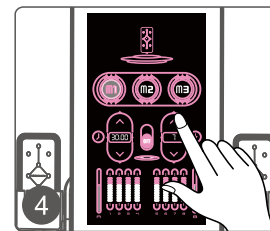


4. Set parameters on the main unit.
(1) Choose M1 mode.
(2) Set Time to 30 minutes.
(3) Set energy to 3-7.

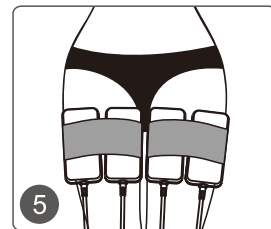

5. Fix the LED pads on buttocks with the strap.

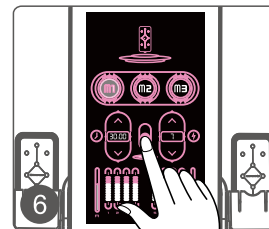

6. Tap ON/OFF button to start (30 minutes).

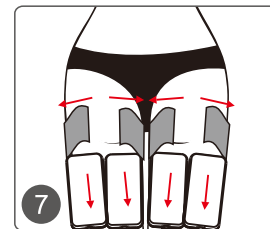

7. When the time is up, remove the LED pads, untie the strap.

11. Recommended treatment frequency

A course of treatment is made up of 12 sessions, take 2 sessions a week, and 30 minutes for each treatment area. You can notice a visible effect after 1 - 2 courses, and 3 - 4 courses will achieve the best result. After 3 - 4 courses, it is recommended to take 1 course every 15 - 30 days.

12. After treatment

1. Keep warm, avoid cold food, or catch a cold after treatment.
2. Take a shower 4 - 6 hours later after treatment.
3. Drink more warm water to keep yourself hydrated.
4. Do not overeat or stay up late.
5. Avoid sauna, hot springs or strenuous exercise for 7 days after treatment.

13. Warranty and support


A one-year warranty is provided from the date of purchase.

Product Name: Magic light Body Shaping
 Product Model: CL-81K1
 Production Date: _____
 Quality Inspection: _____

PASS

Manual de Usuario del Magic Light eliminación de grasa

CL-81K1

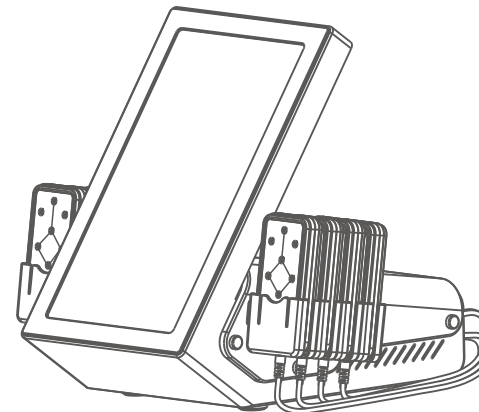

Prefacio

Estimado usuario:

Bienvenido/a al uso de nuestro dispositivo LED para modelado corporal. Es un eficaz dispositivo de belleza LED para el modelado del cuerpo. Es importante que sea operado por profesionales, ya que una operación incorrecta puede ocasionar resultados adversos en el cuerpo humano. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y siga las instrucciones proporcionadas durante la operación.

Creemos que nuestro producto de alta calidad le brindará excelentes resultados y nuestro servicio de atención al cliente completo eliminará cualquier preocupación que pueda tener.

¡Gracias!

Content EN

1. Introduction 1

2. Precautions 1

3. Contraindications 2

4. Technical parameters 3

5. Packing list 3

6. User guide 4

7. Interface Introduction 7

8. Troubleshooting 9

9. FAQ 9

10. Treatments Introduction 10

 Waist and Abdomen Sculpting 10

 Arms Sculpting 12

 Legs Sculpting 13

 Back Sculpting 15

 Buttocks Sculpting 16

11. Recommended frequency 18

12. After treatment 18

13. Warranty and support 18

Contenido ES

1. Introducción 21

2. Precauciones 21

3. Contraindicaciones 22

4. Parámetros técnicos 23

5. Lista de embalaje 23

6. Guía del usuario 24

7. Introducción a la interfaz 27

8. Solución de problemas 29

9. Preguntas frecuentes 29

10. Tratamiento y Aplicación 30

 Esculpir Cintura y Abdomen 30

 Esculpir Brazos 32

 Esculpir Piernas 33

 Esculpir la Espalda 35

 Esculpir los Glúteos 36

11. Frecuencia de tratamiento recomendada 38

12. Después del tratamiento 38

13. Garantía y soporte 38

1. Introducción

El dispositivo de modelado corporal con LED es el dispositivo de belleza más popular para el modelado corporal, con una operación fácil, conveniente y rápida, proporcionando una solución de remodelación corporal para ti. Sin agujas, sin medicamentos, sin cirugías, sin efectos secundarios. Con una penetración fuerte, el LED puede penetrar la epidermis y la dermis para disolver la grasa subcutánea mediante calor, el tratamiento es seguro y no invasivo, lo cual es popular entre los consumidores.

2. Precauciones ⚠

- 1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el instrumento.
- 2. Antes de utilizar el instrumento, asegúrese de utilizar un enchufe con clavija de conexión a tierra y de que el enchufe del instrumento esté conectado a tierra.
- 3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento esté adaptado. Si el voltaje de suministro local es inestable, le recomendamos que añada una fuente de alimentación regulada compatible entre la red eléctrica y el instrumento.
- 4. Utilice los accesorios diseñados proporcionados o recomendados por el fabricante original para mantener la vida útil normal del instrumento y el efecto del tratamiento.
- 5. No coloque el instrumento en un lugar húmedo o cerca del agua, ni lo exponga a la luz solar directa.
- 6. No coloque el instrumento cerca de fuentes de calor fuertes, ya que esto puede afectar su vida útil y rendimiento.
- 7. Retire todos los objetos metálicos de su cuerpo para evitar situaciones imprevistas y afectar el tratamiento.
- 8. No utilice el instrumento en los ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas y marcapasos.
- 9. El instrumento no está destinado a ser utilizado por pacientes, a menos que tengan el permiso de un médico.

- 10. Apague la alimentación del instrumento cuando no esté en uso y asegúrese de apagar la alimentación general del instrumento antes de salir después del uso diario para garantizar la seguridad del instrumento.
- 11. En caso de que esté tomando otros medicamentos para la pérdida de peso, se recomienda suspender los medicamentos durante 1 a 2 meses antes del tratamiento. Si desea realizar el tratamiento con LED de inmediato, el curso de tratamiento debe prolongarse.
- 12. No utilice el instrumento con el estómago vacío y realice el tratamiento con LED 1 hora después de la comida.
- 13. Fije las almohadillas de LED en los clientes primero y luego encienda el instrumento, ajuste lentamente la intensidad de baja a alta para garantizar el calor y la comodidad del cliente.
- 14. Asegúrese de que la superficie emisora de luz de la almohadilla de LED esté en contacto completo con la piel durante el procedimiento y evite el contacto parcial.
- 15. Limpie el instrumento con solución salina después de la operación para garantizar la higiene.

3. Contraindicaciones


- 1. Personas que se hayan sometido a cirugía plástica, tengan implantes u objetos metálicos en el área de tratamiento en los últimos 3 meses.
- 2. Personas que se hayan realizado inyecciones en los últimos 3 meses (ácido hialurónico, mesoterapia y toxina botulínica).
- 3. Personas que sufran de enfermedades del corazón, epilepsia, diabetes grave, hipertiroidismo, tumor maligno, hemofilia, sangrado grave o que lleven marcapasos.
- 4. Personas que presenten irritación en la piel o tengan una piel extremadamente sensible.
- 5. Personas con heridas en la piel.
- 6. Personas de edad avanzada en exceso.
- 7. Personas en periodo de embarazo, menstruación o lactancia.

- 8. Personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
- 9. Personas que tengan ilusiones irreales sobre los resultados.

4. Parámetros técnicos


Nombre del producto	Modelado Corporal con Luz Mágica	Tamaño de la pantalla	15.6 pulgadas
Modelo del producto	CL-81K1	Dimensiones del producto	400*274*390mm
Material de la unidad principal	Placa de metal	Dimensiones del embalaje	475*410*470mm
Material del mango	ABS	Peso del producto	8kg
Voltaje de entrada	110V/220V 50~60Hz	Peso del embalaje	10kg
Potencia nominal	25W		

5. Lista de embalaje

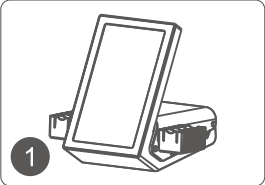


1

Unidad principal * 1

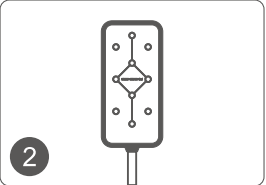


2

Parche LED * 8

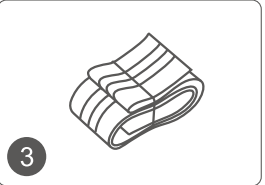

3

Correa * 1 juego

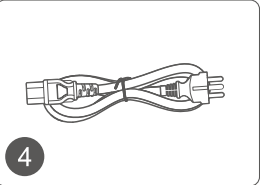



4

Cable de alimentación * 1


Nota: asegúrese de que el embalaje esté completo antes de usarlo, luego retire todos los materiales de embalaje y confirme que todos los accesorios del aparato estén completos.

6. Guía del usuario

1. Cómo instalar.

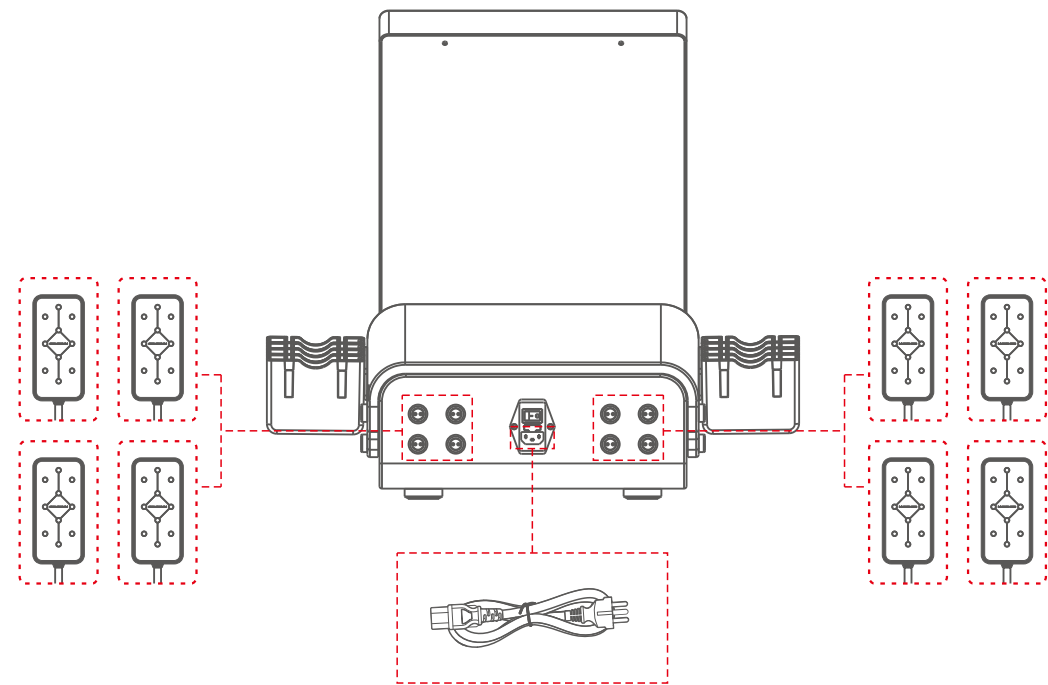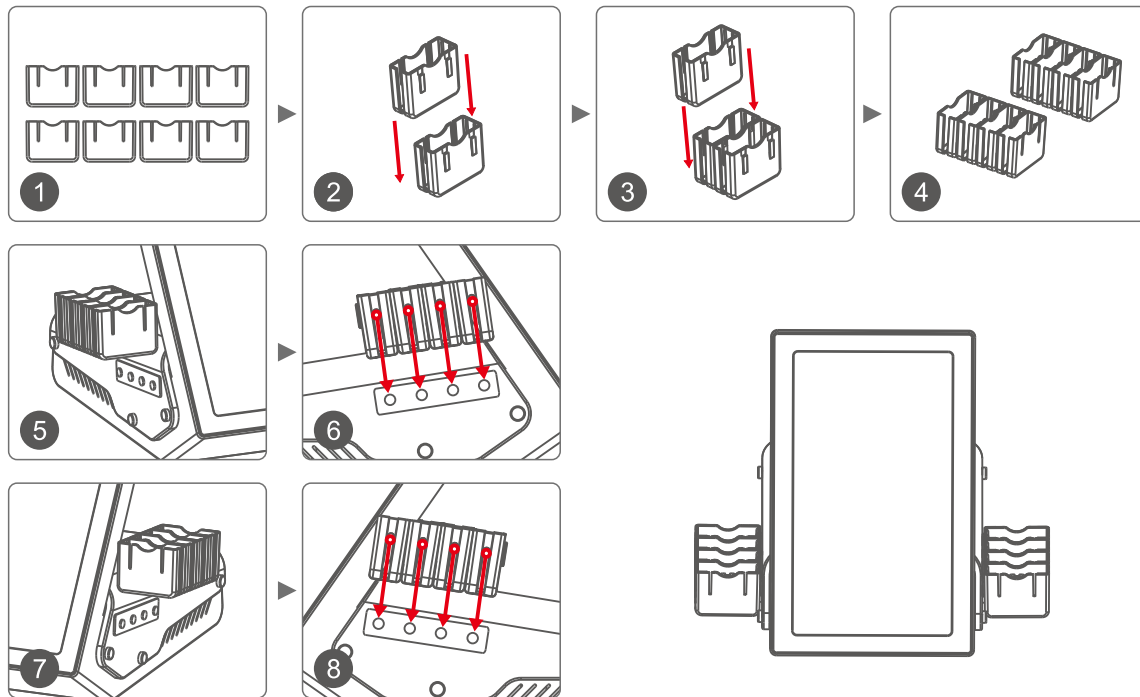

2. Sustituya el fusible situado en la parte posterior de la máquina cuando ésta sufra un cortocircuito o no pueda ponerse en marcha.

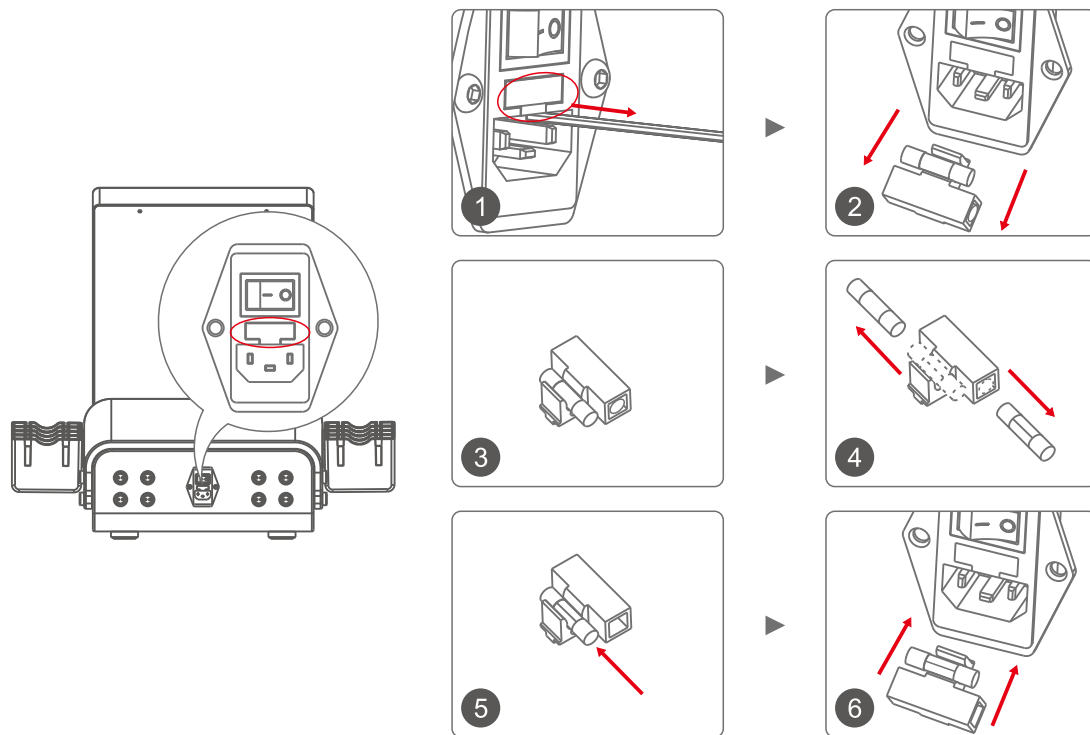


7. Introducción a la interfaz


Interfaz de bienvenida



Interfaz de configuración de parámetros

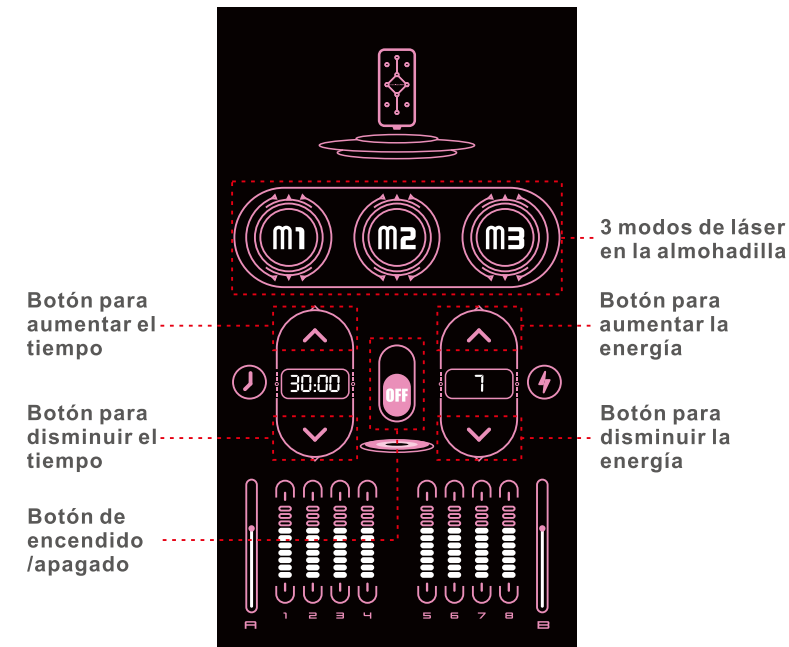


Interfaz de configuración de parámetros

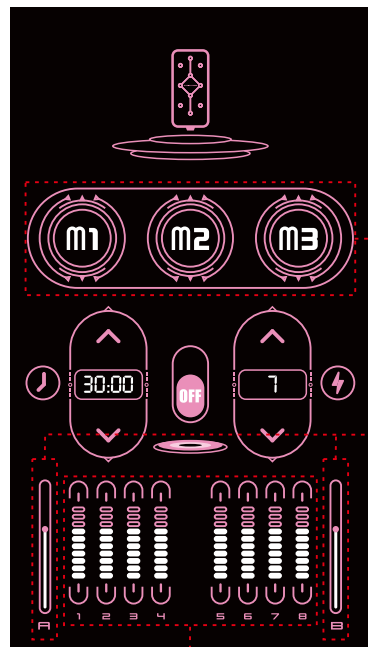


3 modos de láser en la almohadilla

M1: Modo de trabajo continuo (las luces de la almohadilla están siempre encendidas, se utiliza para personas que necesitan una pérdida de peso intensa).
M2: Modo de trabajo intermitente (las luces de la almohadilla parpadean lentamente, se utiliza para el mantenimiento de resultados).
M3: Modo de trabajo intermitente rápido (las luces de la almohadilla parpadean rápidamente, se utiliza para usuarios nuevos o al comienzo del tratamiento).

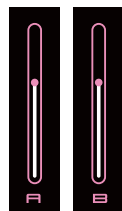

(1) Toque para establecer la energía de todas las almohadillas LED de manera uniforme.

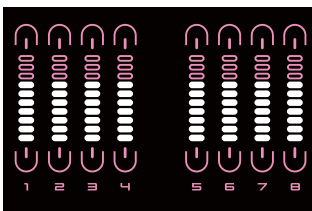

(2) Establezca la energía de una sola almohadilla LED, toque la almohadilla LED individual y luego toque el botón de configuración y visualización de energía para establecerla.

8. Solución de problemas

Problema	Posibles causas y soluciones
1. ¿El instrumento no se enciende y el indicador del botón está apagado?	→ A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un enchufe de pared válido. → B. Verifique si el fusible está suelto o quemado.
2. ¿No hay salida de energía desde la almohadilla LED?	→ A. Verifique si el cable de la almohadilla está bien conectado con el equipo principal. → B. Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con el distribuidor para obtener ayuda.
3. ¿El instrumento se inició correctamente, pero apareció un mensaje de error en la pantalla?	→ A. Desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto antes de volver a conectarlo y reiniciar el instrumento. → B. Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con el distribuidor para obtener ayuda.

9. Preguntas frecuentes

1. ¿Tratamiento de modelado corporal con luz LED o cirugía de liposucción?

R: En comparación con la liposucción tradicional, el modelado corporal con luz LED consiste en la irradiación de energía LED sobre la grasa, sin causar irregularidades en la piel. Al contrario, deja la piel suave y firme sin flacidez. Además, La energía LED utilizada en el modelado corporal con luz LED solo actúa en la capa de grasa específica establecida, sin dañar la piel superficial mientras acelera la autorreparación de las fibras elásticas de la piel, dejando la piel del área de tratamiento tersa y suave.

2. ¿Recuperaré peso después del tratamiento de modelado corporal con LED?

R: El número de células de grasa en el cuerpo es fijo y permanece constante a medida que se crece hasta la edad adulta. El aumento de peso corporal se debe al aumento en el volumen de las células de grasa. El tratamiento de modelado corporal con LED elimina la estructura de grasa local y reduce el volumen de grasa. El hecho de que haya pocos casos de recuperación peso después del tratamiento de modelado corporal con LED no significa que no haya posibilidad de recuperación peso absoluta. Por lo general, no habrá rebote si se mantiene una dieta saludable.

3. ¿Necesito seguir una dieta y hacer ejercicio durante el tratamiento de modelado corporal con LED?

R: El efecto del tratamiento de modelado corporal con LED es notable. Si no mantiene una dieta saludable después de alcanzar el peso ideal después del tratamiento, es probable que recupere el peso perdido. Es importante saber que no hay ningún producto para bajar de peso en el mundo que garantice un efecto permanente. Por lo tanto, este tratamiento es un método de pérdida de peso auxiliar, y debe dejar de recibir el tratamiento después de alcanzar el peso ideal. Por favor, mantenga una dieta saludable y haga ejercicio regularmente.

10. Tratamiento y Aplicación

Esculpir Cintura y Abdomen

1. Eficacia


- (1) Mejora de extremidades frías y menstruación irregular en mujeres.
- (2) Mejora de la piel flácida y la celulitis en la cintura y el abdomen.
- (3) Reafirma la piel, mejora las estrías y aumenta la elasticidad de la piel.
- (4) Acelera el metabolismo y promueve la circulación sanguínea.

2. Indicaciones

- (1) Personas con extremidades frías y menstruación irregular.
- (2) Personas con grasa en la cintura, grasa abdominal y piel flácida después del parto.
- (3) Personas con una línea de cintura poco atractiva debido a un estilo de vida sedentario.
- (4) Personas con estrías.

3. Aplicación Recomendada


Preparación: toalla caliente, aceite esencial, correa.

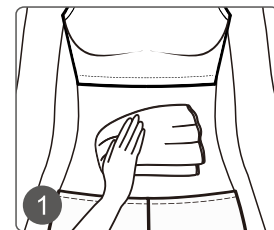


1. Limpiar el abdomen y la cintura (preferiblemente con una toalla caliente).




2. Masajear y relajar el abdomen y la cintura con el aceite de masaje (15 minutos).

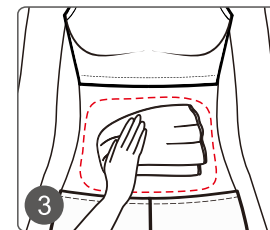


3. Limpiar el área de masaje.

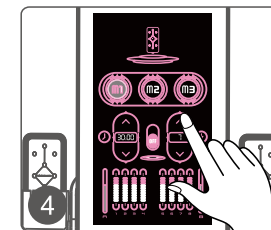


4. Configurar los parámetros en la unidad principal.
(1) Elegir el modo M1.
(2) Configurar el tiempo en 30 minutos.
(3) Configurar la energía en 3-7.

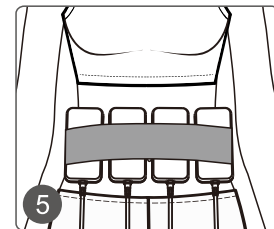

5. Fijar las almohadillas LED en la cintura y el abdomen con la correa.

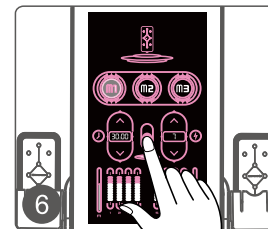

6. Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el tratamiento (30 minutos).

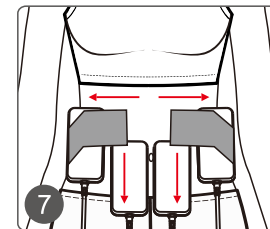

7. Cuando finalice el tiempo, quitar las almohadillas LED y desatar la correa.

Esculpir Brazos

1. Eficacia


- (1) Estimula la regeneración de colágeno en la capa inferior de la piel.
- (2) Mejora la flacidez de la piel en los brazos.
- (3) Adelgaza los brazos grasos.
- (4) Acelera la circulación sanguínea en los brazos y promueve el metabolismo.

2. Indicaciones


- (1) Personas con brazos grasos.
- (2) Personas con piel flácida y floja en los brazos.
- (3) Personas con frecuente dolor y entumecimiento en los brazos.

3. Aplicación Recomendada


Preparación: toalla caliente, aceite esencial, correa.

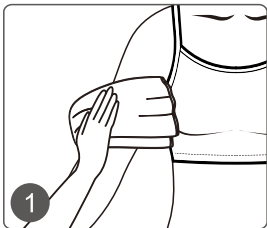


1. Limpiar los brazos (preferiblemente con una toalla caliente).

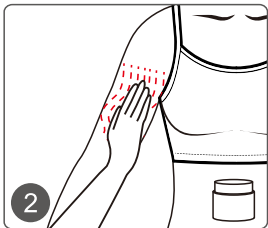


2. Masajear y relajar los brazos con el aceite de masaje (15 minutos).

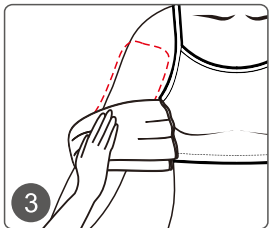


3. Limpiar el área de masaje.

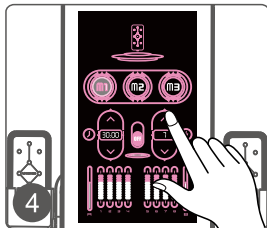


4. Configurar los parámetros en la unidad principal.
 (1) Elegir el modo M1.
 (2) Configurar el tiempo en 30 minutos.
 (3) Configurar la energía en 3-7.

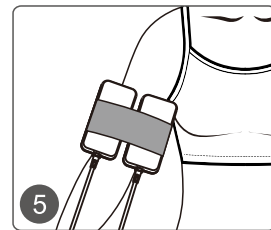

5. Fijar las almohadillas LED en los brazos con la correa.

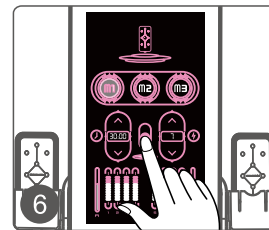

6. Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el tratamiento (30 minutos).

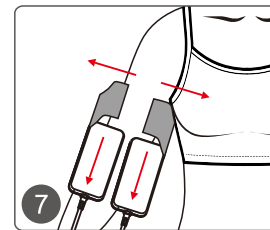

7. Cuando finalice el tiempo, quitar las almohadillas LED y desatar la correa.

Esculpir Piernas

1. Eficacia


- (1) Tonificar la piel y prevenir la flacidez.
- (2) Estimular la regeneración de colágeno y suavizar las estrías.
- (3) Acelerar la circulación sanguínea y el metabolismo.
- (4) Prevenir las venas varicosas.
- (5) Reducir el exceso de grasa en las piernas y eliminar las piernas gruesas.

2. Indicaciones

- (1) Personas con mala circulación sanguínea en las piernas y un metabolismo lento.
- (2) Personas con piel áspera y flácida en las piernas.
- (3) Personas con celulitis en las piernas o con proporciones desfavorables en las piernas.

3. Aplicación Recomendada


Preparación: toalla caliente, aceite esencial, correa.

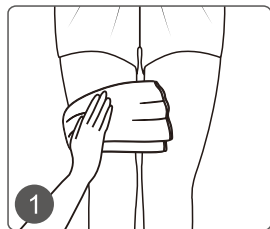


1. Limpiar las piernas (preferiblemente con una toalla caliente).




2. Masajear y relajar las piernas con el aceite de masaje (15 minutos).

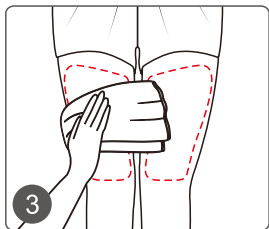


3. Limpiar el área de masaje.

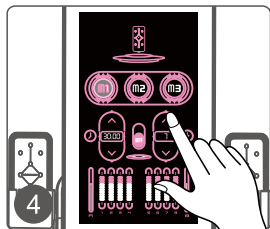


4. Configurar los parámetros en la unidad principal.
(1) Elegir el modo M1.
(2) Configurar el tiempo en 30 minutos.
(3) Configurar la energía en 3-7.

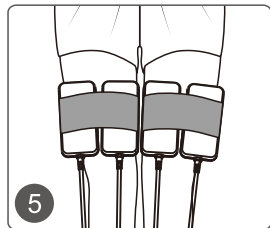

5. Fijar las almohadillas LED en las piernas con la correa.

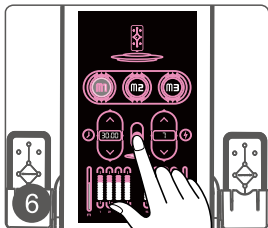

6. Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el tratamiento (30 minutos).

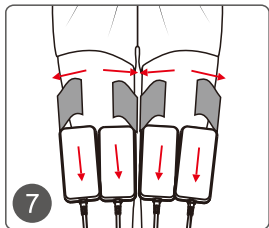

7. Cuando finalice el tiempo, quitar las almohadillas LED y desatar la correa.

Esculpir la Espalda

1. Eficacia


- (1) Aliviar la tensión en la espalda y los hombros.
- (2) Acelerar la circulación sanguínea en la espalda y promover el metabolismo.
- (3) Mejorar el flujo sanguíneo hacia la cabeza y mejorar el sueño.
- (4) Mejorar los depósitos de grasa en la espalda y definir el contorno de la espalda.

2. Indicaciones


- (1) Personas que sufren dolor en los hombros y la espalda y dolor de cuello.
- (2) Personas con insomnio, somnolencia y problemas de memoria.
- (3) Personas con fatiga continua y somnolencia durante el día.
- (4) Personas con grasa en la espalda.

3. Aplicación Recomendada


Preparación: toalla caliente, aceite esencial, correa.

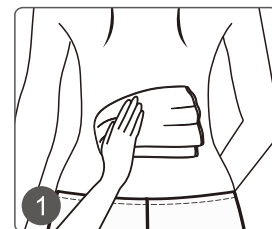


1. Limpiar la espalda (preferiblemente con una toalla caliente).

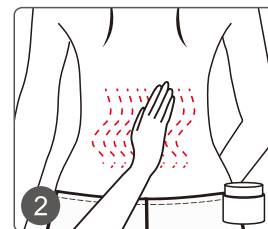


2. Masajear y relajar la espalda con el aceite de masaje (15 minutos).

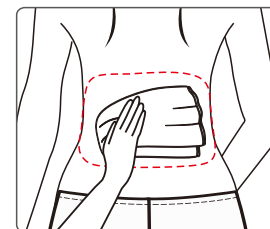


3. Limpiar el área de masaje.

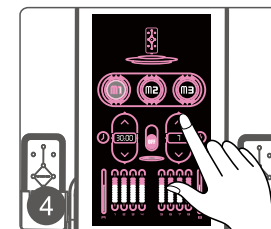


4. Configurar los parámetros en la unidad principal.
(1) Elegir el modo M1.
(2) Configurar el tiempo en 30 minutos.
(3) Configurar la energía en 3-7.

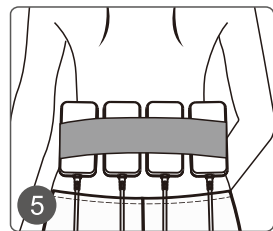

5. Fijar las almohadillas LED en la parte posterior con la correa.

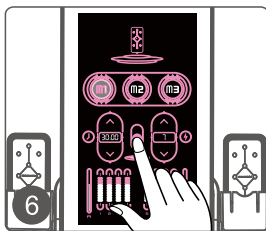

6. Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el tratamiento (30 minutos).

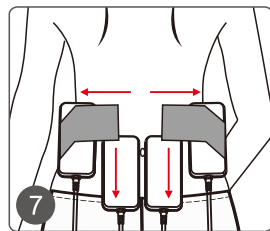

7. Cuando finalice el tiempo, quitar las almohadillas LED y desatar la correa.

Esculpir los Glúteos

1. Eficacia


- (1) Mejorar la circulación sanguínea en los glúteos y promover el metabolismo.
- (2) Mejorar el dolor menstrual, menstruación irregular, flujo vaginal anormal y otros trastornos femeninos.
- (3) Mejorar el sueño y la función sexual femenina.
- (4) Activar la función ovárica, estimular la secreción glandular y aumentar el afecto conyugal.
- (5) Mejorar el aspecto de los glúteos flácidos, reafirmar la piel y aumentar la elasticidad de la piel.

2. Indicaciones

- (1) Personas con glúteos flácidos o depósitos de grasa en los glúteos.
- (2) Personas con una forma de glúteos poco atractiva o glúteos planos.
- (3) Personas con glúteos fríos.
- (4) Personas con dismenorrea, menstruación irregular, inflamación ginecológica y otros trastornos.

3. Aplicación Recomendada

Preparación: toalla caliente, aceite esencial, correa.

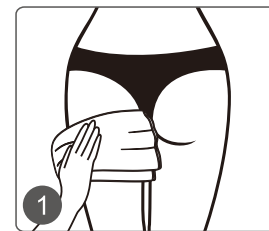


1. Limpiar los glúteos (preferiblemente con una toalla caliente).




2. Masajear y relajar los glúteos con el aceite de masaje (15 minutos).




3. Limpiar el área de masaje.

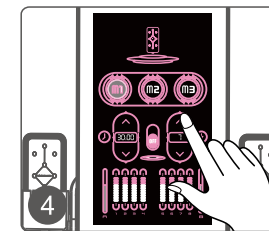


4. Configurar los parámetros en la unidad principal.
(1) Elegir el modo M1.
(2) Configurar el tiempo en 30 minutos.
(3) Configurar la energía en 3-7.

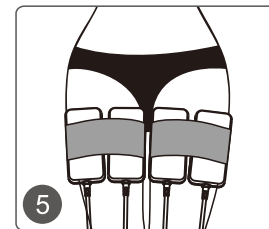

5. Fijar las almohadillas LED en las nalgas con la correa.

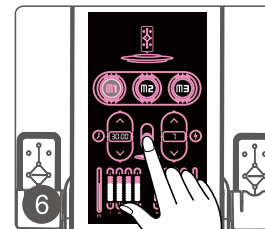

6. Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el tratamiento (30 minutos).

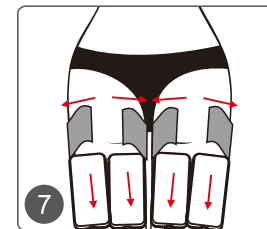

7. Cuando finalice el tiempo, quitar las almohadillas LED y desatar la correa.

11. Frecuencia de tratamiento recomendada

Un curso de tratamiento consta de 12 sesiones, realizadas 2 veces por semana, con una duración de 30 minutos para cada área de tratamiento. Podrás notar un efecto visible después de 1 a 2 cursos, y se obtendrá el mejor resultado después de 3 a 4 cursos. Después de 3 a 4 cursos, se recomienda realizar 1 curso cada 15 a 30 días.

12. Después del tratamiento

1. Mantente abrigado y evita alimentos fríos o resfriados después del tratamiento.
2. Puedes ducharte 4 a 6 horas después del tratamiento.
3. Bebe más agua tibia para mantener una buena hidratación.
4. No comas en exceso ni te acuestes tarde.
5. Evita saunas, aguas termales o ejercicios intensos durante 7 días después del tratamiento.

13. Garantía y soporte

Se ofrece una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Nombre del
producto: Modelado Corporal
con Luz Mágica

Número de
producto: CL-81K1

Fecha de
manufactura:

Control de
calidad:

