


MS-45T2SEPRO

User Manual

EN ES

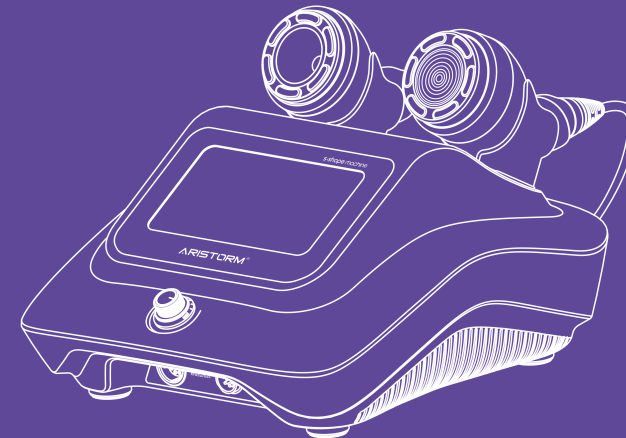

Thank you for choosing MS-45T2SEPRO, please read this manual carefully before use. By integrating RF&30K/50K and RF&Suction technologies, this latest beauty instrument for skin tightening and body shaping provides perfect solutions for individuals seeking improved body appearance.

Table of Contents EN

Packing List	1
Technical Parameters	1
Precautions	2
Contraindications	3
Interface Function	4
CAVI 30K Handle Pretest	15
CAVI 50K Handle Pretest	16
HOUSEHOLD Application	17
Contact Us	23

Catalogacion ES

Lista de empaque	24
Parámetros técnicos	24
Precauciones	25
Contraindicaciones	26
Función de la interfaz	27
CAVI 30K prueba previa	38
CAVI 50K pre prueba	39
Aplicación para el HOGAR	40
Contáctenos	46

Packing List

- ① 1 x Aristorm S shape Main Machine
- ② 1 x RF & Suction Body Handle
- ③ 1 x RF & 30K/50K Pro Body Handle
- ④ 1 x Dropper
- ⑤ 1 x Power Cord



Technical Parameters

Gross Weight: 14.3 lbs
 Net Weight: 10.4 lbs
 Power: 90W
 Input voltage: AC110V-220V
 Product Dimension: 11.8*16.1*9.4 inches




RF&30K/50K Pro

Power: 90W
 30K Frequency: 30KHZ
 50K Frequency: 50KHZ
 RF Frequency: 1MHz



RF&Suction

Power: 75W
 RF Frequency: 1MHz
 Suction Intensity: -73KPa
 Airflow (l/min): 10LPM
 Noise Level (30cm away): ≤60dB

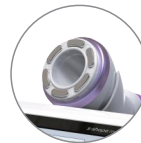

Precautions


- 1.This product is guaranteed by the designated after-sales service unit.
- 2.Use the instrument at a temperature between 16 ℃ - 35 ℃.
- 3.Clean the instrument after use and store it properly to extend its service life.
- 4.Always use the designated accessories provided or recommended by the original manufacturer to ensure the performance of the instrument and sustain its lifetime.
- 5.Do not place the instrument near strong heat, as this may affect its service life and performance.
- 6.Do not use the instrument on the eyes, head, chest, back, thyroid, parathyroid, testicles, abdomen of pregnant women and pacemaker.
- 7.Remove off all the metal objects from your body to avoid unpredictable situation and affect the treatment.
- 8.Please turn off the power of the instrument when not in use to ensure the safety of instrument.
- 9.People with metal stents in the body (excluding IUD) or with implants in breast should not use the instrument.
- 10.This instrument is not intended for use by woman in menstruation, pregnancy or lactation.
- 11.Do not use the instrument within 6 months after surgery or cesarean section, within 3 months after miscarriage, and within 2 months after normal delivery.
- 12.Start the treatment at lowest level of energy intensity and increase level after you get used to the treatment.
- 13.Make sure the treatment area skin is applied with gel, do not operate on dry skin.
- 14.Strictly follow the instructions in the manual to use the instrument and train operator.

Contraindications

- 1.People suffer from severe diseases: diabetes, heart disease, history of scarring, hyperthyroidism.
- 2.People who recently had surgery or are recovering from a surgery.
- 3.Patients with malignant tumors, hemophilia or severe bleeding.
- 4.People wearing pacemaker (heart rate devices and other in vivo electronic devices), vascular stent or metal implants.
- 5.People suffer from skin disease or infectious diseases.
- 6.People who are experiencing skin irritation, with severe sensitive skin, or are allergic to metal.
- 7.People who have recently had plastic surgery, with implants or metal objects at the treatment area.
- 8.People have had injection treatment recently including hyaluronic acid, mesotherapy, botulinum, or plastic surgery (do not use on face or neck).
- 9.Women in menstruation, pregnancy and lactation.
- 10.This product is not intended for use by persons (including children) with reduced sensory or mental capabilities.

Interface Function

Connect the instrument with power supply, turn on the instrument, then the following start-up interface will appear.

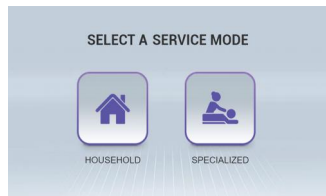

1.HOUSEHOLD


Click “” to enter the following interface.



 Back to previous step


1.1 ARMS SLIMMING

1 Click “” to enter the following interface.

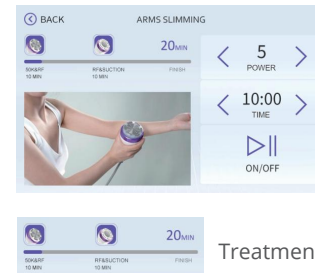

Treatment process display

2 Click on/off button to start CAVI 50K & RF treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.

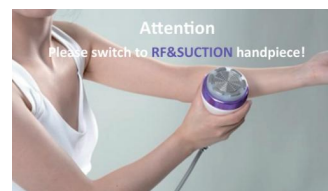

3 This screen prompts CAVI 50K&RF operation time is over, and will enter RF&SUCTION operation soon, please change CAVI 50K&RF handle to RF&SUCTION handle for further operation. Prompt time: 30s.

4 When the prompt time is over, the interface will automatically enter RF&SUCTION operation interface.




5



Tap ON/OFF button to start RF&SUCTION treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.

6

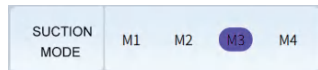



Suction Mode (the default mode is M3, you may switch to other mode manually)

M1: Only suction mode


M2: With the fastest intermittent frequency

M3: With the fast intermittent frequency

M4: With the slow intermittent frequency

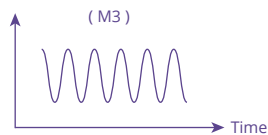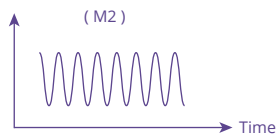

7

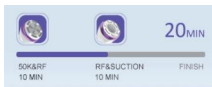


Treatment process display

8



Click this icon to enter the RF&SUCTION operation interface in advance, and then click the on/off button to start.

9

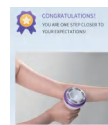


This congratulation interface indicates that you have completed the whole ARMS SLIMMING treatment.

1.2 WAIST SLIMMING

1


Click “” to enter the following interface.

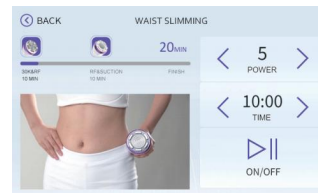

2



Click on/off button to start CAVI 30K & RF treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.

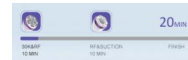

Treatment process display



3

This screen prompts CAVI 30K&RF operation time is over, and will enter RF&SUCTION operation soon, please change CAVI 30K&RF handle to RF&SUCTION handle for further operation. Prompt time: 30s.

4 When the prompt time is over, the interface will automatically enter RF&SUCTION operation interface.




5



Tap ON/OFF button to start RF&SUCTION treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.

6

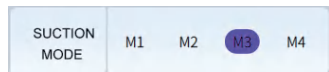



Suction Mode (the default mode is M3, you may switch to other mode manually)

M1: Only suction mode

M2: With the fastest intermittent frequency

M3: With the fast intermittent frequency

M4: With the slow intermittent frequency

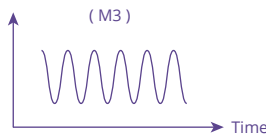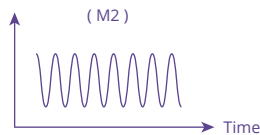

7




Treatment process display

8



Click this icon to enter the RF&SUCTION operation interface in advance, and then click the on/off button to start.

9

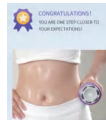


This congratulation interface indicates that you have completed the whole WAIST SLIMMING treatment.

1.3 LEGS SLIMMINGS

1

Click "LEGS SLIMMING" to enter the following interface.

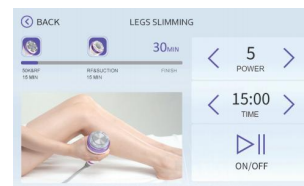

Treatment process display

2




Click on/off button to start CAVI 50K & RF treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.



3

This screen prompts CAVI 50K&RF operation time is over, and will enter RF&SUCTION operation soon, please change CAVI 50K&RF handle to RF&SUCTION handle for further operation. Prompt time: 30s.

4 When the prompt time is over, the interface will automatically enter RF&SUCTION operation interface.

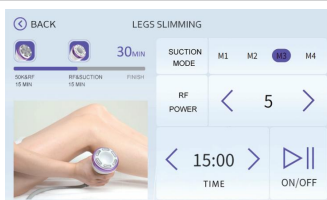


5



Tap ON/OFF button to start RF&SUCTION treatment, the parameters are default values, you may set energy intensity/time manually according to individual endurance.

6

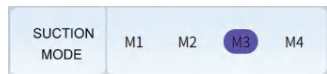




Suction Mode (the default mode is M3, you may switch to other mode manually)

M1: Only suction mode

M2: With the fastest intermittent frequency

M3: With the fast intermittent frequency

M4: With the slow intermittent frequency

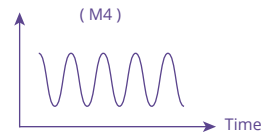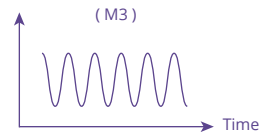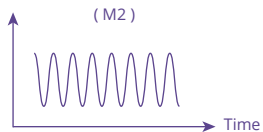

7




Treatment process display

8




Click this icon to enter the RF&SUCTION operation interface in advance, and then click the on/off button to start.



9

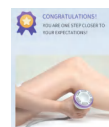

This congratulation interface indicates that you have completed the whole LEGS SLIMMING treatment.



2.SPECIALIZED

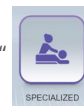Click “” to enter the following interface.

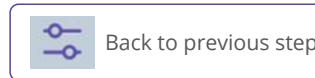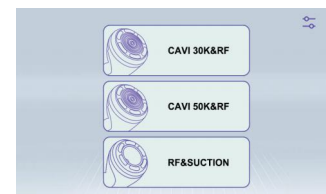



2.1 CAVI 30K&RF

Click “” to enter the following interface.

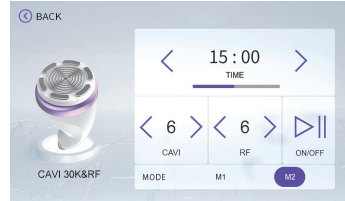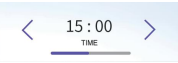	 Time display and adjustment button  CAVI energy display and set buttons (range 0-10, 5-8 recommended)  RF energy display and set buttons (range 0-10, 3-7 recommended)
 ON/OFF	 Back to previous step
MODE M1 M2	CAVI working mode M1: Continuous working mode, for people with fat accumulation and thicker fat. M2: Intermittent working mode, for local obesity.


2.2 CAVI 50K&RF

Click “” to enter the following interface.

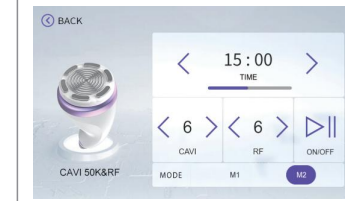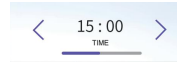	 Time display and adjustment button  CAVI energy display and set buttons (range 0-10, 5-8 recommended)  RF energy display and set buttons (range 0-10, 3-7 recommended)
 ON/OFF	 Back to previous step
MODE M1 M2	CAVI working mode M1: Continuous working mode, for people with fat accumulation and thicker fat. M2: Intermittent working mode, for local obesity.

2.3 RF&SUCTION

Click “” to enter the following interface.

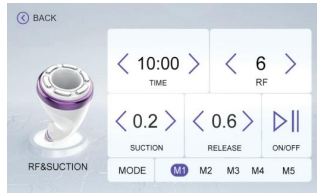


< 10:00 > TIME Time display and set buttons

< 6 > RF RF energy display and set buttons (range 0-10, 3-7 recommended)

< 0.2 > SUCTION Suction time display and set buttons (range 0.0-2.0, 0.2-1.0 recommended)

< 0.6 > RELEASE Release time display and set buttons (range 0.0-2.0, 0.0-0.5 recommended)
Note: Suction time should be longer than release time; When release time is 0, it means only suction works.

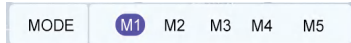

Fixed mode of suction and release (in fixed mode, you don't need to set the suction and release time manually)





M1: Only suction mode

M2: With the fastest intermittent frequency

M3: With the faster intermittent frequency

M4: With the slightly faster intermittent frequency

M5: With the slow intermittent frequency

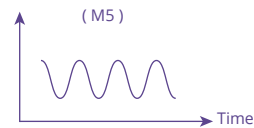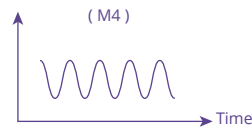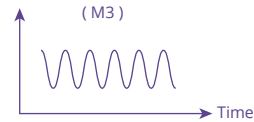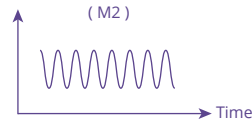

ON/OFF





Back to previous step



Rotary knob for adjusting suction intensity (turn left to decrease intensity, turn right to increase intensity)


CAVI 30K Handle Pretest

- (1) Connect the power supply and turn on the power switch.
- (2) Select “HOUSEHOLD” on the main interface.
- (3) Choose “WAIST SLIMMING” and adjust the energy intensity to 10 gear.
- (4) Tap “ON” button and use the equipped dropper to drop 3 drops of water onto the treatment head to test if the CAVI 30K is working properly.
- (5) Observe whether the water on the treatment head is atomizing, if yes, then the CAVI 30K is working properly; if there is no change with the water, please contact with the seller on Message.

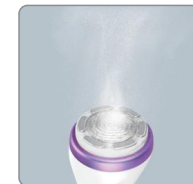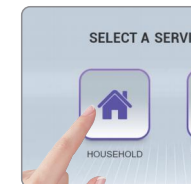

CAVI 50K Handle Pretest

- (1) Connect the power supply and turn on the power switch.
- (2) Select "HOUSEHOLD" on the main interface.
- (3) Choose "ARMS SLIMMING" or "LEGS SLIMMING" and adjust the energy intensity to 10 gear.
- (4) Tap "ON" button and use the equipped dropper to apply 2ML of water onto the treatment head to test if the CAVI 50K is working properly.
- (5) Observe whether the water on the treatment head is vibrating, if yes, then the CAVI 50K is working properly; if there is no change with the water, please contact with the seller on Message.

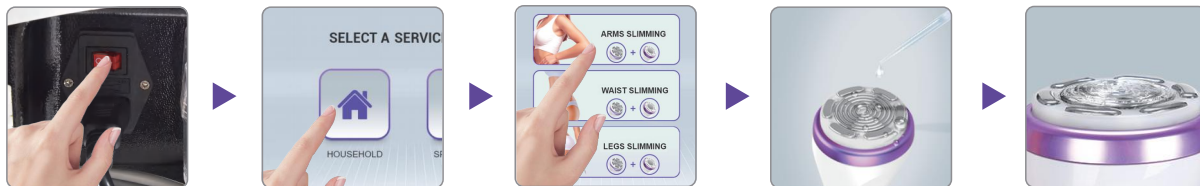

Tip: Due to different frequencies, when testing the treatment head with water, the 30K frequency will produce noticeable misting effects, while the 50K frequency will create visible water ripples.

HOUSEHOLD Application

Arms Slimming

Time: 20 minutes.


Efficacy

1. Improve arms cellulite.
2. Improve sagging skin.
3. Promote blood circulation.

Product needed: gel, essential oil.


Steps

1. Wipe arms with a towel.
2. Measure the arm circumference of both arms and record.
3. Apply gel to the treatment area evenly.
4. Turn on the instrument, select HOUSEHOLD-Arms slimming - tap on/off button to start.
5. 50K&RF (10 minutes)
 - (1) Push from the wrist towards the elbow with the handle, 1 minute.
 - (2) Move the handle in small circles on the fat site of lower arm, 1 minute.
 - (3) Push from the elbow towards the armpit with the handle, 1 minute.
 - (4) Move the handle in circles on the upper arm from the elbow towards the armpit with the handle, 2 minutes.
 - (5) Repeat the same on the other arm, 5 minutes.
 - (6) Wipe arms with a towel.

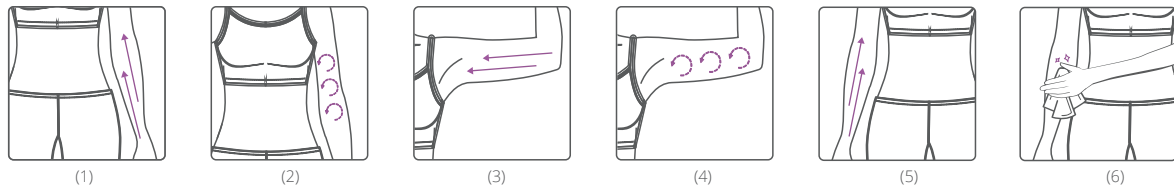

6.RF+SUCTION (10 minutes)

- (1)Apply essential oil to the treatment area evenly.
- (2)Push from the wrist towards the elbow with the handle, 1 minute.
- (3)Move the handle in small circles on the fat site of lower arm, 1 minute.
- (4)Push from the elbow towards the armpit with the handle, 1 minute.
- (5)Move the handle in circles on the upper arm from the elbow towards the armpit with the handle, 2 minutes.
- (6)Repeat the same on the other arm, 5 minutes.
- (7)Wipe arms with a towel.

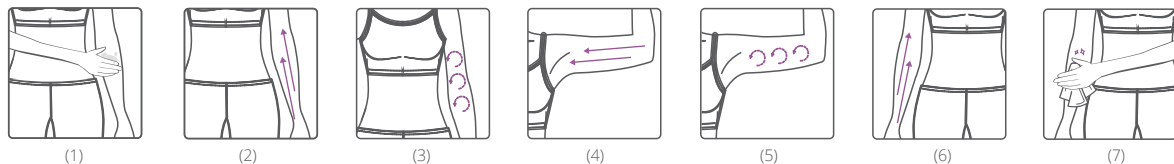

7.Measure the arm circumference of arms again, and compare with the data before treatment.

Recommended Frequency:

It is recommended to take 2 sessions a week, after 4 weeks of consistent treatment you will notice that the arm circumference is significantly reduced and the skin is getting firmer and plumper; Continuing the treatment for 8 weeks will lead to slimmer arms, firmer and more elastic skin; 12 weeks of treatment will bring better and more stabler result for arms.

Waist Slimming

Time: 20 minutes.

Efficacy

- 1.Strong fat removal, improve cellulite on waist and abdomen.
- 2.Tighten skin and increase skin elasticity.
- 3.Improve sagging skin on abdomen and waist.
- 4.Improve stretch marks and cellulite.

Product needed: gel, essential oil.

Steps:

- 1.Wipe the abdomen and waist with a towel.
- 2.Measure waist and record.
- 3.Apply gel to the treatment area evenly.
- 4.Turn on the instrument, select HOUSEHOLD-Waist slimming - tap on/off button to start.


5.30&RF (10 minutes)

- (1)Move the handle from the side of waist towards the navel, 2 minutes.
- (2)Repeat the same on the opposite side, 2 minutes.
- (3)Move the handle in small circles around the navel, 2 minutes.

(4) Move the handle in big circles around the navel, 2 minutes.

(5) Move the handle up and down on the waist, 2 minutes.

(6) Wipe abdomen with a towel.

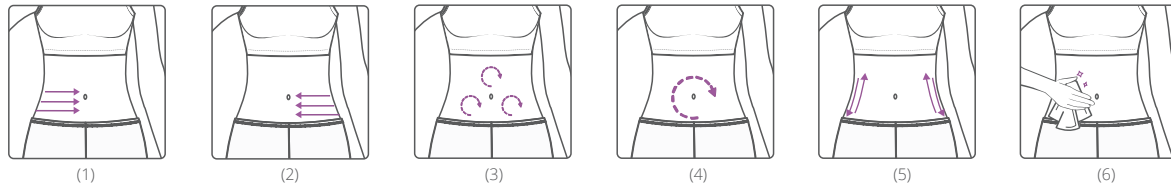

6.RF+SUCTION (10 minutes)

(1) Apply essential oil to the treatment area evenly.

(2) Move the handle from the side of waist towards the navel, 2 minutes.


(3) Repeat the same on the opposite side, 2 minutes.

(4) Move the handle in small circles around the navel, 2 minutes.

(5) Move the handle in big circles around the navel, 2 minutes.

(6) Move the handle up and down on the waist, 2 minutes.

(7) Wipe abdomen with a towel.

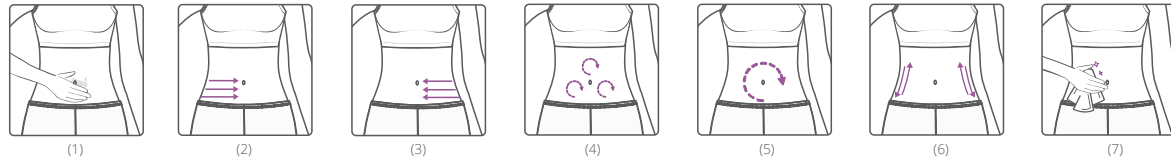

7. Measure waist again and compare with the data before treatment.

Recommended Frequency:

It is recommended to take 2 sessions a week, after 4 weeks of consistent treatment, you will notice a slimmer waistline with reduced cellulite, as well as a noticeable improvement in reducing stretch marks and tightening the skin. Continuing the treatment for 8 weeks will result in a clearer waist curve. 12 weeks of treatment bring more obvious result.

Legs Slimming

Time: 30 minutes.

Efficacy

1. Tighten skin, prevent skin sagging.
2. Stimulate collagen regeneration and smooth stretch marks.
3. Increases circulation in the legs and removes edema.
4. Activate blood stasis, prevent varicose veins.
5. Tighten leg and remove cellulite.

Product needed: gel, essential oil.

Steps:

1. Wipe the leg with a towel.
2. Measure lower leg and upper leg, and record.
3. Apply gel to the treatment area evenly.
4. Turn on the instrument, select HOUSEHOLD-Legs Slimming - tap on/off button to start.

5.50K&RF (15 minutes)

(1) Move the handle in small circles on calf, 1 minute.

(2) Move the handle back and forth between knee and root of thigh, 1 minute.


(3) Circle around thigh from the knee to the root of the thigh with the handle, 2 minutes.

(4) Push from the outer side of thigh towards the middle of thigh, 2 minutes.

(5) Push from the inner side of thigh towards the middle of thigh, 1.5 minutes.

(6) Repeat the same on the other leg, 7.5 minutes.

(7) Wipe the leg with a towel.

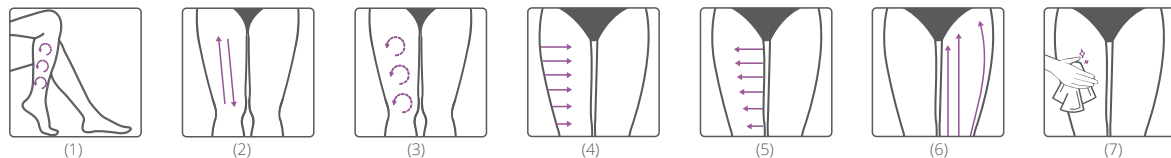

6. RF+SUCTION (15 minutes)

(1) Apply essential oil to the treatment area evenly.

(2) Move the handle in small circles on calf, 1 minute.

(3) Move the handle back and forth between knee and root of thigh, 1 minute.


(4) Circle around thigh from the knee to the root of the thigh with the handle, 2 minutes.

(5) Push from the outer side of thigh towards the middle of thigh, 2 minutes.

(6) Push from the inner side of thigh towards the middle of thigh, 1.5 minutes.

(7) Repeat the same on the other leg, 7.5 minutes.

(8) Wipe the leg with a towel.

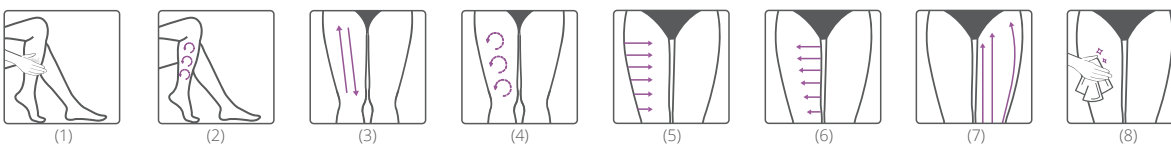

7. Measure the lower leg and upper leg again, and compare with the data before treatment.

Recommended Frequency:

It is recommended to take 2 sessions a week at least, after 4 weeks of consistent treatment you will notice significant improvements such as slimmer legs, reduced stretch marks, and firmer skin; continuing the treatment for 8 weeks will effectively eliminate leg cellulite; 12 weeks of treatment bring slim and firm legs and stable result.

After Treatment

1. Avoid overeating, staying up late, drinking alcohol.

2. The treated individual will reach the optimum result with moderate exercise.

3. Drink plenty of water to accelerate metabolism (drink 250-300ml right after treatment, and another 250-300ml 1 hour later after treatment, ensure 2500-3000ml for a day).

4. Keep a low-fat, low-salt diet, have more meals a day but less food at each, avoid high calorie foods, reduce carbohydrate intake while increase protein intake.

Contact Us



Aristormofficial

Tel: +18929332902

Lista de empaque

- 1 x Máquina Principal Aristorm S shape
- 1 x Mango RF & Succión para el cuerpo
- 1 x Mango RF & 30K/50K Pro para el cuerpo
- 1 x Cuentagotas
- 1 x Cable de alimentación



Parámetros técnicos

Peso Bruto: 14.3 lbs Peso Neto: 10.4 lbs Potencia: 90W Voltaje de entrada: AC110V-220V Dimensión del Producto: 11.8*16.1*9.4 inches	RF&30K/50K Pro Fuerza: 90W Frecuencia de 30K: 30KHZ Frecuencia de 50K: 50KHZ Frecuencia de RF: 1MHz	RF y succión Fuerza: 75W Frecuencia de RF: 1MHz Intensidad de succión: -73KPa Flujo de aire (l/min): 10LPM Nivel de ruido (a 30 cm de distancia): ≤60dB
--	--	--

Precauciones


- Este producto cuenta con garantía por parte de la unidad de servicio postventa designada.
- Utiliza el instrumento a una temperatura entre 16 °C - 35 °C .
- Limpia el instrumento después de usarlo y guárdalo adecuadamente para prolongar su vida útil.
- Utiliza siempre los accesorios designados proporcionados o recomendados por el fabricante original para asegurar el rendimiento del instrumento y prolongar su vida útil.
- No coloques el instrumento cerca de fuentes de calor intenso, ya que esto puede afectar su vida útil y rendimiento.
- No utilices el instrumento en los ojos, cabeza, pecho, espalda, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas y marcapasos.
- Retira todos los objetos metálicos de tu cuerpo para evitar situaciones impredecibles y que afecten el tratamiento.
- Apaga el instrumento cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
- Las personas con stents metálicos en el cuerpo (excluyendo DIU) o con implantes en el pecho no deben usar el instrumento.
- Este instrumento no está destinado al uso de mujeres durante la menstruación, embarazo o lactancia.
- No uses el instrumento dentro de los 6 meses posteriores a una cirugía o cesárea, dentro de los 3 meses posteriores a un aborto espontáneo y dentro de los 2 meses posteriores a un parto normal.
- Comienza el tratamiento con el nivel de intensidad de energía más bajo y aumenta el nivel gradualmente una vez que te hayas acostumbrado al tratamiento.
- Asegúrate de aplicar gel en la piel del área de tratamiento, no lo utilices en piel seca.
- Sigue estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el instrumento y capacitar al operador.

Contraindicaciones

1. Personas que sufren enfermedades graves: diabetes, enfermedades cardíacas, historial de cicatrización anormal, hipertiroidismo.
2. Personas que han tenido recientemente una cirugía o están en proceso de recuperación.
3. Pacientes con tumores malignos, hemofilia o sangrado severo.
4. Personas que llevan marcapasos (dispositivos para el ritmo cardíaco y otros dispositivos electrónicos internos), stents vasculares o implantes metálicos.
5. Personas que sufren enfermedades cutáneas o enfermedades infecciosas.
6. Personas que tienen irritación cutánea, piel extremadamente sensible o alergia al metal.
7. Personas que han tenido recientemente cirugía plástica, con implantes u objetos metálicos en el área de tratamiento.
8. Personas que se hayan sometido recientemente a tratamientos con inyecciones, incluyendo ácido hialurónico, mesoterapia, toxina botulínica o cirugía plástica (no utilizar en el rostro o el cuello).
9. Mujeres durante la menstruación, el embarazo y la lactancia.
10. Este producto no está destinado al uso de personas (incluyendo niños) con capacidades sensoriales o mentales reducidas.


Función de la interfaz

Conecta el instrumento a la fuente de alimentación, enciéndelo y aparecerá la siguiente interfaz de inicio.

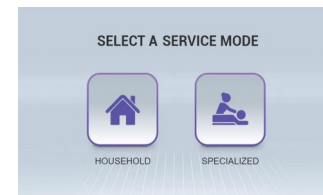

1.HOGAR

Haz clic en “” para ingresar a la siguiente interfaz.

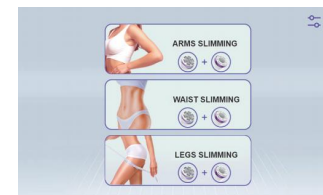


 Volver al paso anterior.

1.1 REDUCCIÓN DE BRAZOS

1

Haz clic en “” para ingresar a la siguiente interfaz.

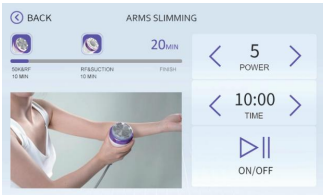


Mostrar proceso de tratamiento

2



Haz clic en el botón de encendido/apagado para iniciar el tratamiento de CAVI 50K y RF. Los parámetros son los valores predeterminados, pero puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.

4

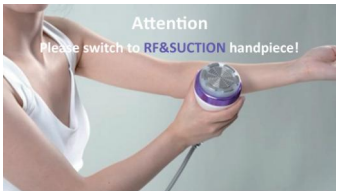


Cuando el tiempo de aviso haya terminado, la interfaz entrará automáticamente en la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN.

3


Esta pantalla indica que el tiempo de operación de CAVI 50K y RF ha terminado, y pronto pasará a la operación de RF y SUCCIÓN. Por favor, cambia el mango de CAVI 50K y RF por el mango de RF y SUCCIÓN para continuar la operación. Tiempo de aviso: 30 segundos.

5

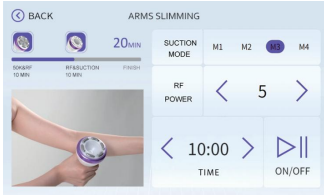

Presiona el botón de ON/OFF para comenzar el tratamiento de RF y SUCCIÓN, los parámetros son los valores predeterminados, puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.


6

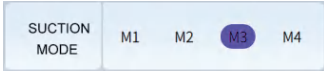

Modo de succión (el modo predeterminado es M3, puede cambiar manualmente a otro modo)


M1: Modo solo de succión.
M2: Con la frecuencia intermitente más rápida.
M3: Con la frecuencia intermitente rápida.
M4: Con la frecuencia intermitente lenta.

(M2)

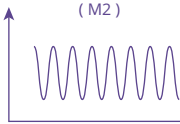


Tiempo

(M3)

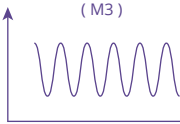

Tiempo

(M4)

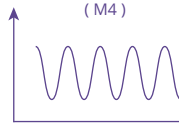

Tiempo

7




Visualización del proceso de tratamiento

8



Haz clic en este ícono para ingresar a la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN de manera anticipada, y luego haz clic en el botón de encendido/apagado para comenzar.

9

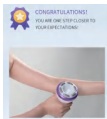


Esta interfaz de felicitación indica que has completado todo el tratamiento de REDUCCIÓN DE BRAZOS. ¡Felicidades.

1.2 REDUCCIÓN DE CINTURA

1

Haz clic en “” para ingresar a la siguiente interfaz.

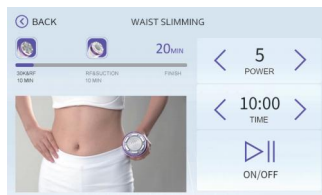

Mostrar proceso de tratamiento

2



Haz clic en el botón de encendido/apagado para iniciar el tratamiento de CAVI 30K y RF. Los parámetros son los valores predeterminados, pero puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.



3

Esta pantalla indica que el tiempo de operación de CAVI 30K y RF ha terminado, y pronto pasará a la operación de RF y SUCCIÓN. Por favor, cambia el mango de CAVI 30K y RF por el mango de RF y SUCCIÓN para continuar la operación. Tiempo de aviso: 30 segundos.

4

Cuando el tiempo de aviso haya terminado, la interfaz entrará automáticamente en la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN.




5



Presiona el botón de ON/OFF para comenzar el tratamiento de RF y SUCCIÓN, los parámetros son los valores predeterminados, puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.

6

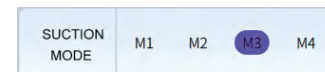




Modo de succión (el modo predeterminado es M3, puede cambiar manualmente a otro modo)

M1: Modo solo de succión.

M2: Con la frecuencia intermitente más rápida.

M3: Con la frecuencia intermitente rápida.

M4: Con la frecuencia intermitente lenta.

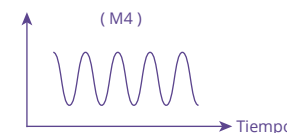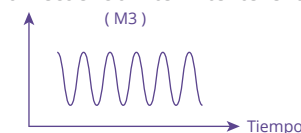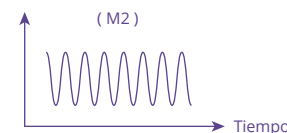

7

Visualización del proceso de tratamiento

8

Haz clic en este ícono para ingresar a la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN de manera anticipada, y luego haz clic en el botón de encendido/apagado para comenzar.

9

This congratulation interface indicates that you have completed the whole WAIST SLIMMING treatment.


1.3 REDUCCIÓN DE PIERNAS

1

Haz clic en “**LEGS SLIMMING**” para ingresar a la siguiente interfaz.

2


Haz clic en el botón de encendido/apagado para iniciar el tratamiento de CAVI 50K y RF. Los parámetros son los valores predeterminados, pero puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.

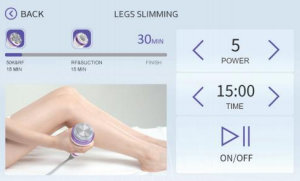

Mostrar proceso de tratamiento





3


Esta pantalla indica que el tiempo de operación de CAVI 50K y RF ha terminado, y pronto pasará a la operación de RF y SUCCIÓN. Por favor, cambia el mango de CAVI 50K y RF por el mango de RF y SUCCIÓN para continuar la operación. Tiempo de aviso: 30 segundos.

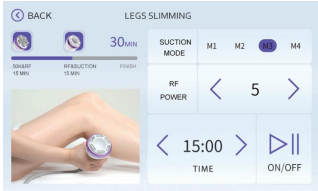4

Cuando el tiempo de aviso haya terminado, la interfaz entrará automáticamente en la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN.

5

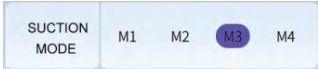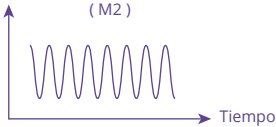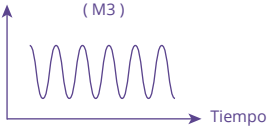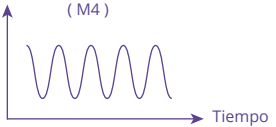
Presiona el botón de ON/OFF para comenzar el tratamiento de RF y SUCCIÓN, los parámetros son los valores predeterminados, puedes ajustar la intensidad de energía y el tiempo manualmente según tu resistencia individual.

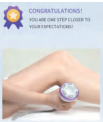6




Modo de succión (el modo predeterminado es M3, puede cambiar manualmente a otro modo)
M1: Modo solo de succión.
M2: Con la frecuencia intermitente más rápida.
M3: Con la frecuencia intermitente rápida.
M4: Con la frecuencia intermitente lenta.

7	 Visualización del proceso de tratamiento	8	 Haz clic en este ícono para ingresar a la interfaz de operación de RF y SUCCIÓN de manera anticipada, y luego haz clic en el botón de encendido/apagado para comenzar.
9	 Esta interfaz de felicitación indica que has completado todo el tratamiento de REDUCCIÓN DE PIERNAS. ¡Felicidades!		

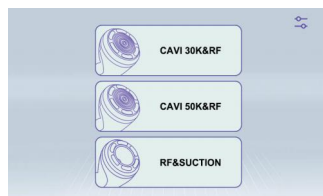2.ESPECIALIZADO


Haz clic en “” para ingresar a la siguiente interfaz.



 Volver al paso anterior


2.1 CAVI 30K y RF

Haz clic en “” para ingresar a la siguiente interfaz.

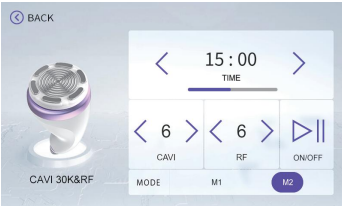	< 15:00 > Visualización y botón de ajuste de tiempo
	< 6 > Visualización de energía CAVI y botones de ajuste (rango 0-10, se recomienda 5-8)
	< 6 > Visualización de energía RF y botones de ajuste (rango 0-10, se recomienda 3-7)
 ENCENDIDO/APAGADO	 Volver al paso anterior
MODE M1 M2	Modo de trabajo CAVI M1: Modo de trabajo continuo, para personas con acumulación de grasa y grasa más espesa. M2: Modo de trabajo intermitente, para obesidad localizada.



2.2 CAVI 50K y RF a

Haz clic en “  ” para ingresar a la siguiente interfaz.

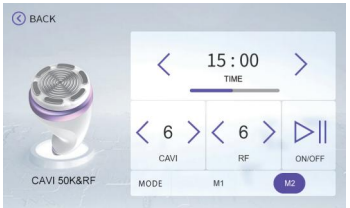	< 15:00 > TIME Visualización y botón de ajuste de tiempo
	< 6 > CAVI Visualización de energía CAVI y botones de ajuste (rango 0-10, se recomienda 5-8)
	< 6 > RF Visualización de energía RF y botones de ajuste (rango 0-10, se recomienda 3-7)
 ENCENDIDO/APAGADO	 Volver al paso anterior
MODE M1 M2	Modo de trabajo CAVI M1: Modo de trabajo continuo, para personas con acumulación de grasa y grasa más espesa. M2: Modo de trabajo intermitente, para obesidad localizada.

2.3 RF y SUCCIÓN

Haz clic en “  ” para ingresar a la siguiente interfaz.

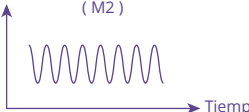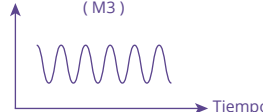	< 10:00 > TIME Visualización y botones de ajuste de tiempo
	< 6 > RF Visualización de energía RF y botones de ajuste (rango 0-10, se recomienda 3-7)
	< 0.2 > SUCTION Visualización de tiempo de succión y botones de ajuste (rango 0.0-2.0, se recomienda 0.2-1.0)
< 0.6 > RELEASE Visualización de tiempo de liberación y botones de ajuste (rango 0.0-2.0, se recomienda 0.0-0.5) Nota: El tiempo de succión debe ser más largo que el tiempo de liberación; cuando el tiempo de liberación es 0, significa que solo funciona la succión.	
MODE M1 M2 M3 M4 M5 Modo fijo de succión y liberación (en modo fijo, no necesitas ajustar manualmente el tiempo de succión y liberación) M1: Modo solo de succión M2: Con la frecuencia intermitente más rápida M3: Con una frecuencia intermitente más rápida M4: Con una frecuencia intermitente ligeramente más rápida M5: Con una frecuencia intermitente lenta (M2)  Tiempo (M3)  Tiempo (M4)  Tiempo (M5)  Tiempo	



ENCENDIDO/APAGADO



BACK Volver al paso anterior



Perilla giratoria para ajustar la intensidad de succión (girar a la izquierda para disminuir la intensidad, girar a la derecha para aumentar la intensidad)


CAVI 30K prueba previa

- (1) Conecta el suministro de energía y enciende el interruptor de encendido.
- (2) Elige "HOUSEHOLD" en la interfaz principal.
- (3) Seleccione "WAIST SLIMMING" y ajuste la intensidad de energía al nivel 10.
- (4) Presione el botón "ON" y use el gotero suministrado para colocar 3 gotas de agua en la cabeza de tratamiento para verificar si el CAVI 30K está funcionando correctamente.
- (5) Observa si el agua en el tratamiento se atomiza. Si es así, significa que el CAVI 30K está funcionando correctamente. Si no hay cambios en el agua, por favor, ponte en contacto con el vendedor a través del mensaje.



CAVI 50K pre prueba

- (1) Conecta el suministro de energía y enciende el interruptor de encendido.
- (2) Elige "HOUSEHOLD" en la interfaz principal.
- (3) Seleccione "ARMS SLIMMING" o "LEGS SLIMMING" ajuste la intensidad de energía al nivel 10.
- (4) Presione el botón "ENCENDIDO" y use el cuentagotas provisto para colocar 3 gotas de agua sobre la cabeza de tratamiento para comprobar si el CAVI 30K está funcionando correctamente.
- (5) Observa si el agua en la cabeza de tratamiento está vibrando. Si es así, significa que el CAVI 50K está funcionando correctamente. Si no hay cambios en el agua, por favor, ponte en contacto con el vendedor a través del mensaje.

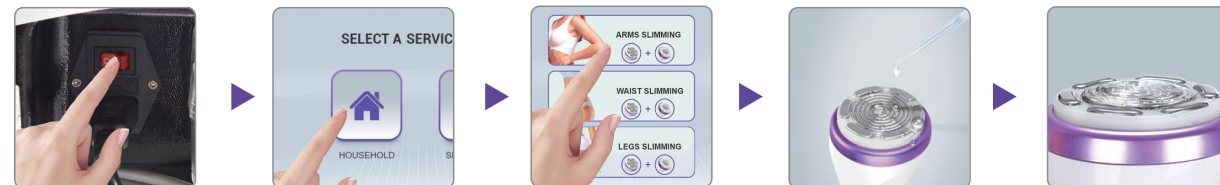

Consejo: los cambios en el agua en la cabeza de tratamiento varían según la frecuencia. El agua se atomiza a una frecuencia de 30K, mientras que el agua vibra con ondulaciones notables a una frecuencia de 50K.

Aplicación para el HOGAR

Reducción de brazos

Tiempo: 20 minutos.

Eficacia


1. Mejora la celulitis en los brazos.
2. Mejora la flacidez de la piel.
3. Promueve la circulación sanguínea.

Productos necesarios: gel, aceite esencial.

Pasos


1. Limpiar los brazos con una toalla.
2. Medir la circunferencia de los brazos en ambos brazos y anotar.
3. Aplicar gel en la zona de tratamiento de manera uniforme.
4. Encender el instrumento, seleccionar HOGAR-Reducción de brazos y pulsar el botón de encendido/apagado para iniciar.
5. 50K&RF (10 minutos)

- (1) Empuja desde la muñeca hacia el codo con el mango, durante 1 minuto.
- (2) Mueve el mango en pequeños círculos sobre la zona grasa del antebrazo, durante 1 minuto.
- (3) Empuja desde el codo hacia la axila con el mango, durante 1 minuto.
- (4) Mueve el mango en círculos en el brazo superior desde el codo hacia la axila con el mango, durante 2 minutos.
- (5) Repite lo mismo en el otro brazo, durante 5 minutos.
- (6) Limpia los brazos con una toalla.

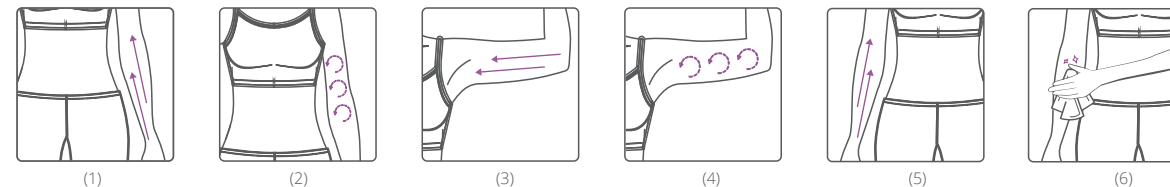

6. RF+SUCTION (10 minutos)

- (1) Aplica aceite esencial en la zona de tratamiento de manera uniforme.
- (2) Empuja desde la muñeca hacia el codo con el mango, durante 1 minuto.
- (3) Mueve el mango en pequeños círculos sobre la zona grasa del antebrazo, durante 1 minuto.
- (4) Empuja desde el codo hacia la axila con el mango, durante 1 minuto.
- (5) Mueve el mango en círculos en el brazo superior desde el codo hacia la axila con el mango, durante 2 minutos.
- (6) Repite lo mismo en el otro brazo, durante 5 minutos.
- (7) Limpia los brazos con una toalla.

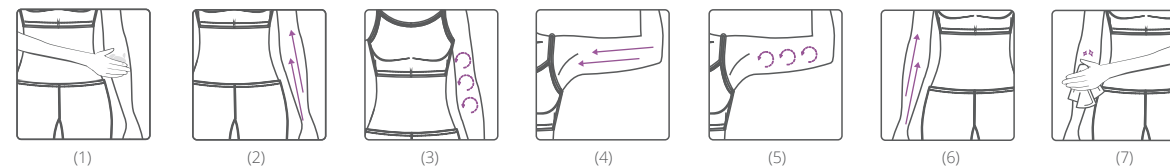

7. Mide nuevamente la circunferencia de los brazos y compárala con los datos antes del tratamiento.

Frecuencia recomendada:

Se recomienda realizar 2 sesiones por semana. Después de 4 semanas de tratamiento constante, notarás una reducción significativa en la circunferencia de los brazos y una piel más firme y tersa. Continuar el tratamiento durante 8 semanas resultará en brazos más delgados y una piel más firme y elástica. Realizar el tratamiento durante 12 semanas brindará mejores resultados y una mayor estabilidad en los brazos.

Adelgazamiento de la cintura

1.Tiempo: 20 minutos.

Eficacia

- 1.Remoción efectiva de grasa, mejora de la celulitis en la cintura y abdomen.
- 2.Reafirmación de la piel y aumento de la elasticidad cutánea.
- 3.Mejora de la flacidez en la piel del abdomen y la cintura.
- 4.Mejora de las estrías y la celulitis.

Productos necesarios: gel, aceite esencial.


Pasos:

- 1.Limpiar el abdomen y la cintura con una toalla.
- 2.Medir la cintura y anotar.
- 3.Aplicar gel en el área de tratamiento de manera uniforme.
- 4.Encender el instrumento, seleccionar HOUSEHOLD-Waist slimming - pulsar el botón de encendido/apagado para comenzar.
- 5.CAVI 30K&RF (10 minutos)
 - (1)Mover el aplicador desde el costado de la cintura hacia el ombligo, 2 minutos.
 - (2)Repetir lo mismo desde el otro lado (Repetir lo mismo en el lado opuesto), 2 minutos.
 - (3)Mover el aplicador en pequeños círculos alrededor del ombligo, 2 minutos.

(4)Mover el aplicador en grandes círculos alrededor del ombligo, 2 minutos.


(5)Mover el aplicador arriba y abajo en la cintura, 2 minutos.

(6)Limpiar el abdomen con una toalla.

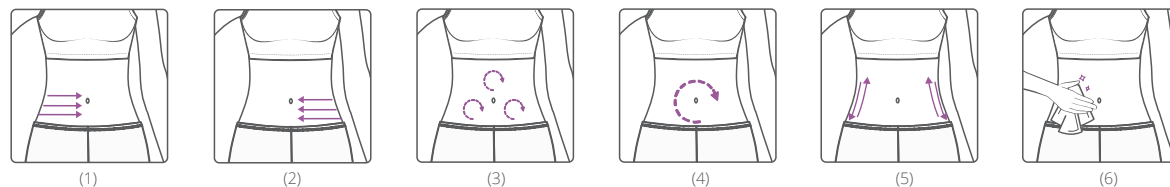

6.RF+SUCTION (10 minutos)t

- (1)Aplicar aceite esencial en el área de tratamiento de manera uniforme.
- (2)Mover el aplicador desde el costado de la cintura hacia el ombligo, 2 minutos.
- (3)Repetir lo mismo desde el otro lado (Repetir lo mismo en el lado opuesto), 2 minutos.
- (4)Mover el aplicador en pequeños círculos alrededor del ombligo, 2 minutos.
- (5)Mover el aplicador en grandes círculos alrededor del ombligo, 2 minutos.
- (6)Mover el aplicador arriba y abajo en la cintura, 2 minutos.
- (7)Limpiar el abdomen con una toalla.

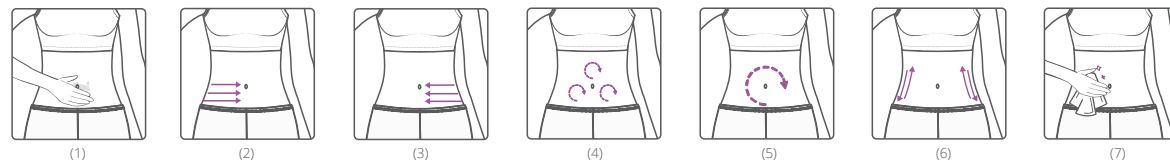

7.Medir la cintura nuevamente y comparar con los datos antes del tratamiento.

Frecuencia recomendada:

Se recomienda realizar 2 sesiones por semana. Después de 4 semanas de tratamiento constante, notarás una cintura más delgada con menos celulitis, así como una mejora notable en la reducción de las estrías y el endurecimiento de la piel. Continuar el tratamiento durante 8 semanas resultará en una curva de cintura más definida. 12 semanas de tratamiento brindarán resultados más evidentes.

Reducción de Piernas

Tiempo: 30 minutos

Eficacia


- 1.Reafirmar la piel, prevenir la flacidez cutánea.
- 2.Estimular la regeneración del colágeno y suavizar las estrías.
- 3.Mejorar la circulación en las piernas y reducir la hinchazón.
- 4.Activar la circulación sanguínea, prevenir las várices.
- 5.Tonificar las piernas y reducir la celulitis.

3.Productos necesarios: gel, aceite esencial.

Pasos


- 1.Limpiar la pierna con una toalla.
- 2.Medir la parte inferior y superior de la pierna, y tomar nota.
- 3.Aplicar gel en la zona de tratamiento de manera uniforme.
- 4.Encender el instrumento, seleccionar "Reducción de Piernas" en el modo "HOGAR" y presionar el botón de encendido/apagado para comenzar.
- 5.CAVI 50K y RF (15 minutos)
 - (1)Mover el aplicador en pequeños círculos en la pantorrilla, durante 1 minuto.

- (2)Mover el aplicador de adelante hacia atrás entre la rodilla y la raíz del muslo, durante 1 minuto.
- (3)Realizar círculos alrededor del muslo, desde la rodilla hasta la raíz del muslo, con el aplicador, durante 2 minutos.
- (4)Presionar desde el lado externo del muslo hacia el centro del muslo, durante 2 minutos.
- (5)Presionar desde el lado interno del muslo hacia el centro del muslo, durante 1.5 minutos.
- (6)Repetir lo mismo en la otra pierna, durante 7.5 minutos.
- (7)Limpiar la pierna con una toalla.

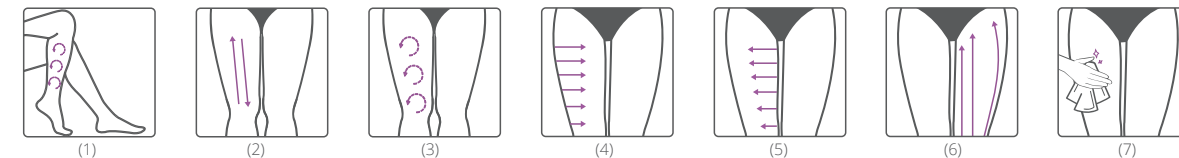

6.RF+SUCTION (15 minutos)

- (1)Aplicar aceite esencial en la zona de tratamiento de manera uniforme.
- (2)Mover el aplicador en pequeños círculos en la pantorrilla, durante 1 minuto.
- (3)Mover el aplicador de adelante hacia atrás entre la rodilla y la raíz del muslo, durante 1 minuto.
- (4)Realizar círculos alrededor del muslo, desde la rodilla hasta la raíz del muslo, con el aplicador, durante 2 minutos.
- (5)Presionar desde el lado externo del muslo hacia el centro del muslo, durante 2 minutos.
- (6)Presionar desde el lado interno del muslo hacia el centro del muslo, durante 1.5 minutos.
- (7)Repetir lo mismo en la otra pierna, durante 7.5 minutos.
- (8)Limpiar la pierna con una toalla.

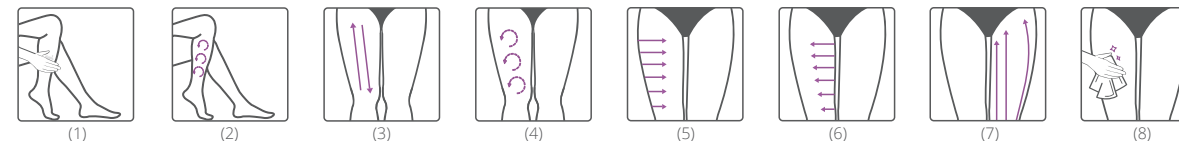

7.Medir nuevamente la circunferencia de la pantorrilla y el muslo y comparar con los datos antes del tratamiento.

Frecuencia recomendada:

Se recomienda realizar al menos 2 sesiones por semana. Después de 4 semanas de tratamiento constante, notarás mejoras significativas como piernas más delgadas, reducción de las estrías y una piel más firme. Continuar el tratamiento durante 8 semanas eliminará de manera efectiva la celulitis en las piernas. Después de 12 semanas de tratamiento, obtendrás piernas delgadas y firmes con resultados estables.

Después del tratamiento

- 1.Evita comer en exceso, trasnuchar y beber alcohol.
- 2.El individuo tratado alcanzará los mejores resultados con ejercicio moderado.
- 3.Bebe mucha agua para acelerar el metabolismo (bebe de 250 a 300 ml inmediatamente después del tratamiento, y otros 250 a 300 ml una hora después del tratamiento; asegúrate de consumir entre 2500 y 3000 ml de agua al día).
- 4.Mantén una dieta baja en grasas y baja en sal. Realiza comidas más frecuentes pero en porciones más pequeñas. Evita alimentos altos en calorías y reduce la ingesta de carbohidratos mientras aumentas la ingesta de proteínas.

Contáctenos



Aristormofficial

Tel: +18929332902