


Manual del usuario

SR-AF1323

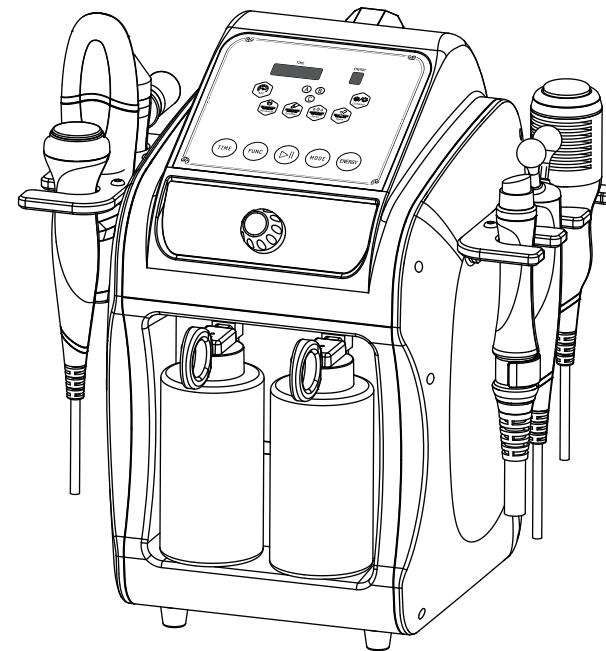

Contenido

1. Precauciones de seguridad	1
2. Contraindicaciones	2
3. Resumen	2
4. Instrucciones de instalación	3
5. Introducción al panel de control	10
6. Especificaciones técnicas	13
7. Precauciones de uso	14
8. Mantenimiento y limpieza	14
9. Preguntas frecuentes	15
10. Solución de problemas	16
11. Guía de funcionamiento	18
12. Garantía y soporte técnico	21

1. Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este dispositivo y la tecnología relacionada.
2. Al ser un dispositivo electrónico de alta precisión, este dispositivo debe almacenarse correctamente. Evite la humedad, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado o recomendado por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.
4. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, ya que esto podría afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el dispositivo sobre los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben consultar a su médico antes de usar este dispositivo.
7. Asegúrese de que el mango esté sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el dispositivo cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente toma medicamentos para la adiposidad, suspenda su uso durante 1 o 2 meses antes de usar este dispositivo. De lo contrario, podría prolongarse el tratamiento.
10. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo, esterilícelo con solución salina.

2. Contraindicaciones

Antes de usar este dispositivo, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:

1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, cardiopatía o marcapasos.
3. Heridas sin cicatrizar o en proceso de recuperación de una cirugía reciente.
4. Sensibilidad a las microcorrientes.
5. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
6. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
7. Enfermedades cutáneas o infecciosas.
8. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
9. Cirugía plástica reciente (en los últimos tres meses) o presencia de implantes u objetos metálicos en la zona tratada.

3. Descripción general


Esta máquina de belleza 6 en 1 utiliza la tecnología más avanzada para una limpieza profunda y una tez más luminosa, garantizando un rostro radiante y radiante. Es la solución ideal para quienes buscan mejorar su piel sin necesidad de inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Este dispositivo no invasivo ofrece resultados visibles con cada uso.

4. Instrucciones de instalación


Lista de embalaje



Unidad principal x 1

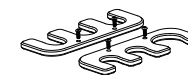


Portamangos x 2

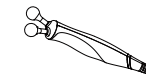

Mango BIO x 1



Mango de ultrasonido x 1

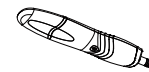

Mango del fregador x 1



Mango hidráulico x 1



Consejos de hidroterapia x 8



Mango frío y caliente x 1



Mango de pulverización de oxígeno x 1



Vaso de solución en aerosol x 1



Filtrar x 1



Botellas limpias x 2



Botella de idesechos x 1



Aguja de limpieza en aerosol con tubo protector x 1




Kit de accesorios x 1 paquete



Cable de alimentación x 1

1.Instalación de los soportes


Monte los soportes en los lados de la unidad principal.

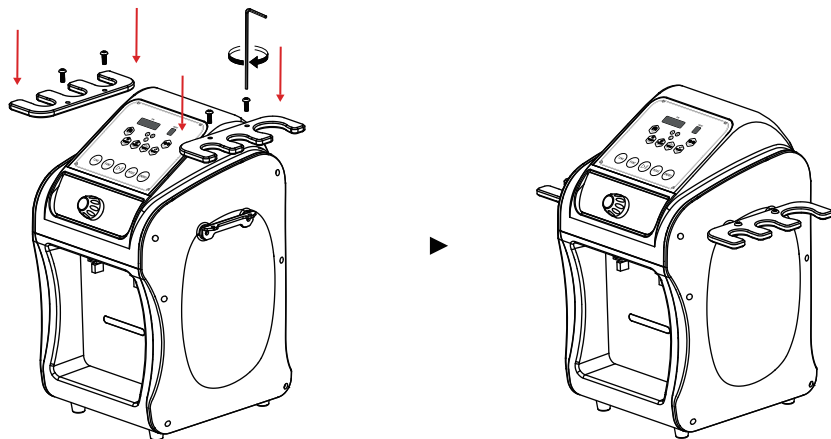


2.Instalación del filtro

Hay cuatro pequeñas juntas de goma en las clavijas de conexión. Al desenroscar el filtro, encontrará otras dos juntas más grandes en el cuello de la botella. Puede sustituir cualquiera de estas juntas por las de repuesto incluidas en el paquete de accesorios en caso de daños.

Para instalar el filtro, asegúrese de que esté completamente insertado en la ranura de la unidad principal, sin dejar huecos.


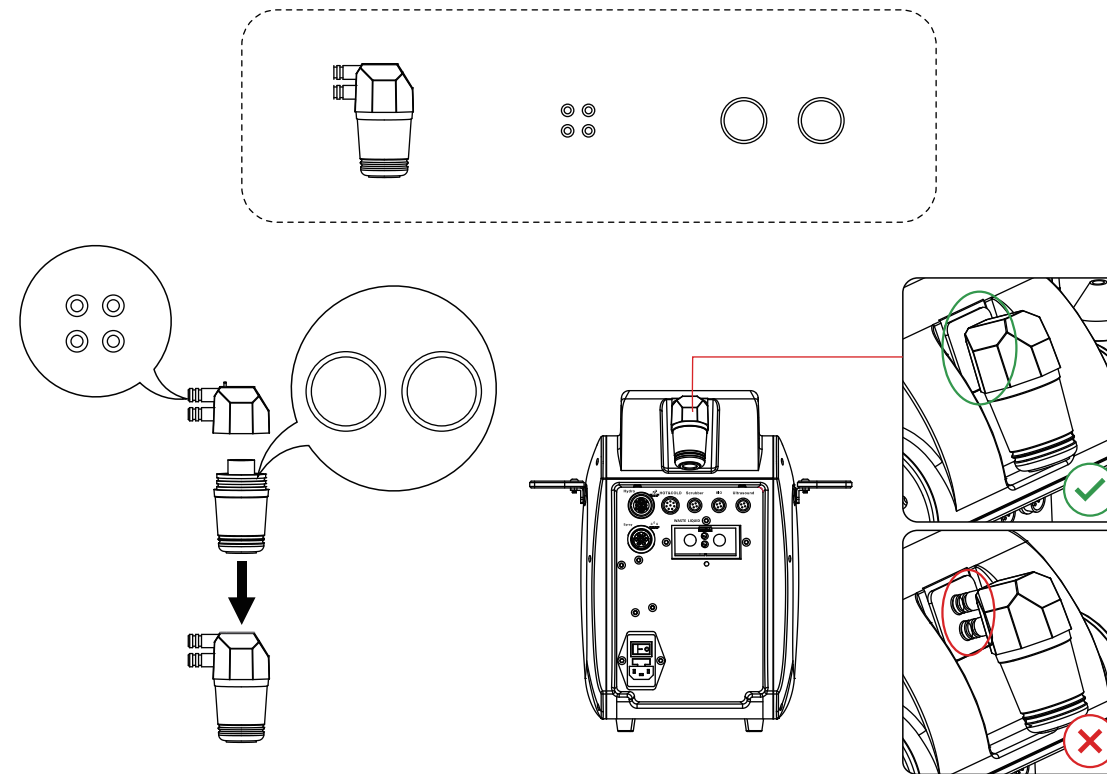


3.Handle Connection

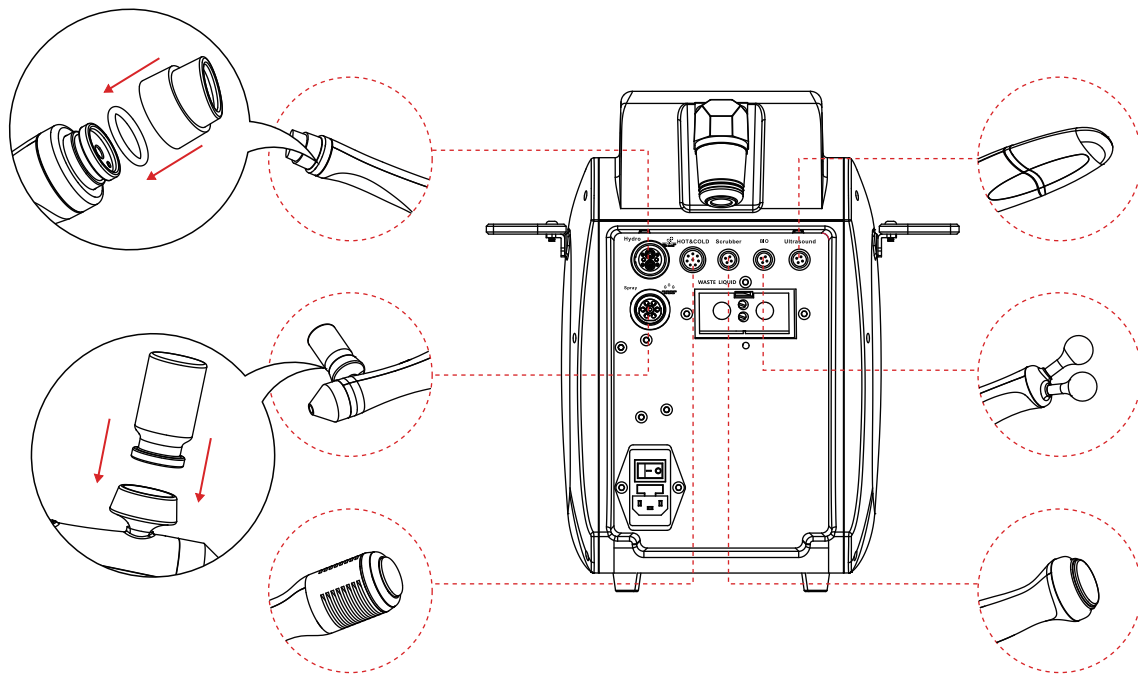


Precaución con la conexión del mango

Hidro/Pulverizador: Alinee la parte convexa del enchufe con la parte cóncava del enchufe (como lo indican las flechas) para evitar una succión débil o fugas de líquido.

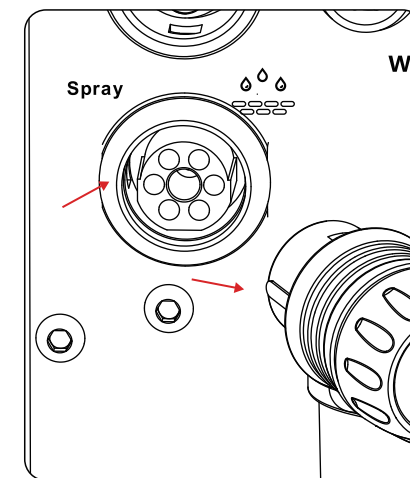
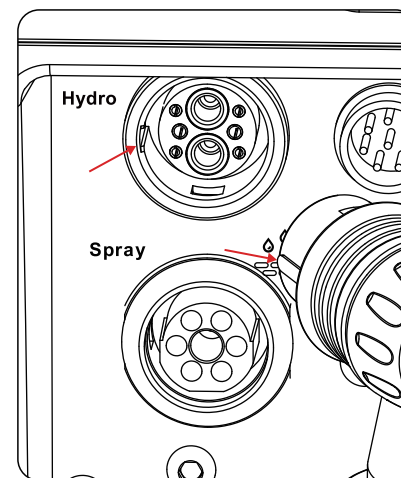


4. Instalación de las botellas limpias

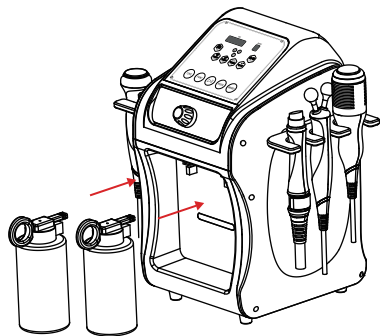








6. ¡Felicitaciones!
Has completado todos los pasos.

5. Instalación de la botella de desechos

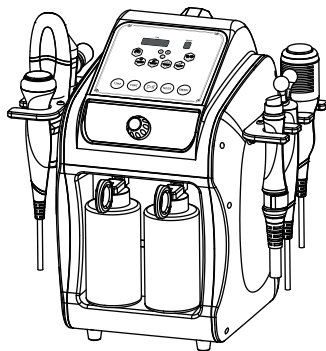
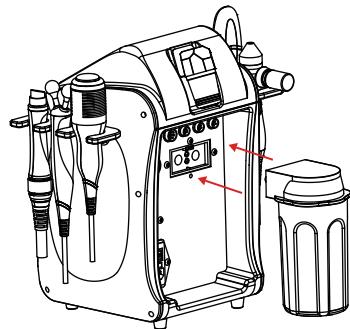


Reemplazo de las piezas consumibles



Reemplace el fusible en la parte posterior de la máquina cuando esta sufra un cortocircuito o no pueda arrancarse.

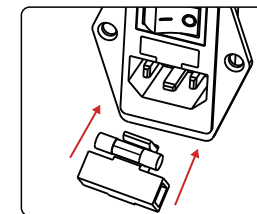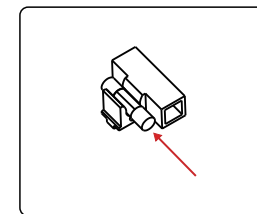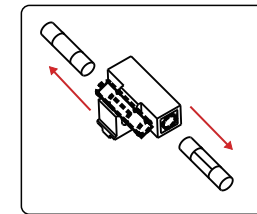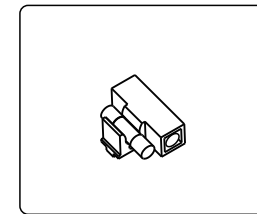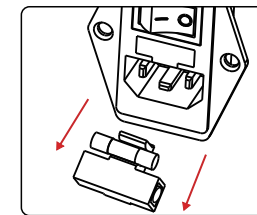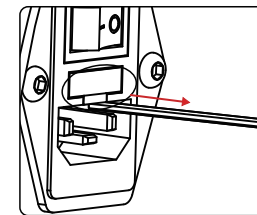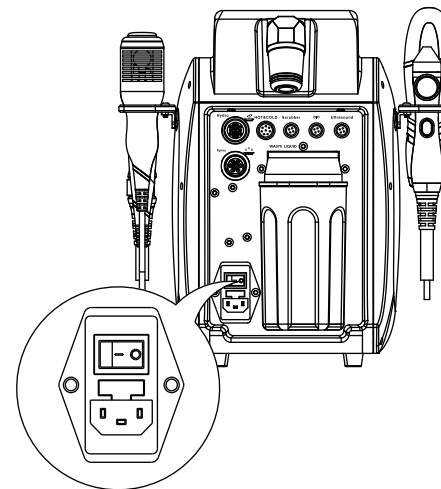


Reemplazo de anillos de goma para el mango del hidro y del pulverizador

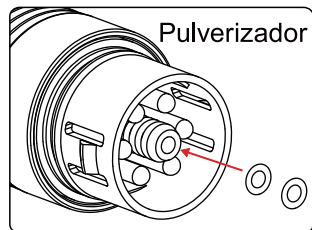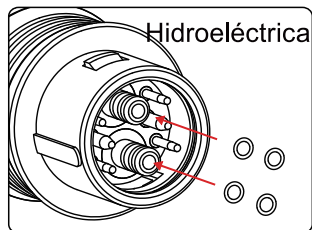

5. Introducción al panel de control

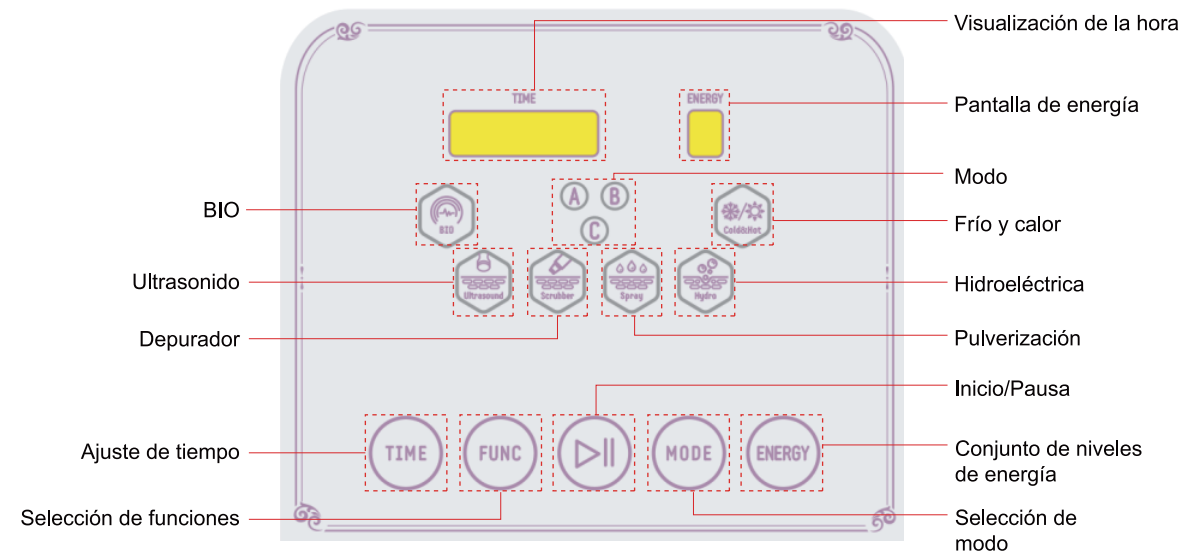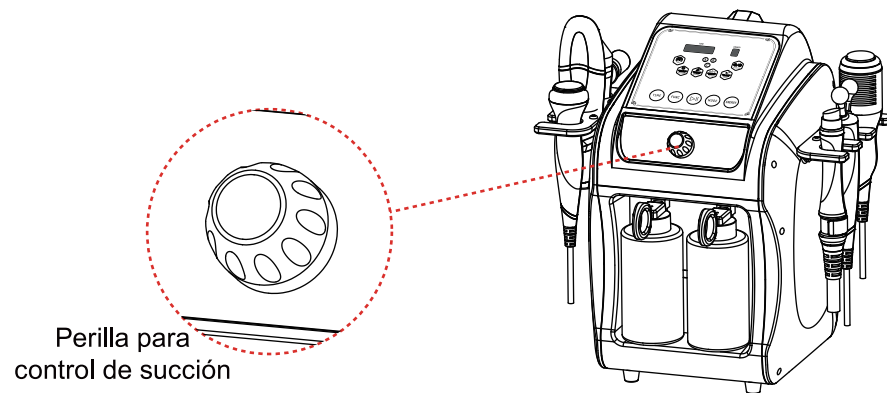

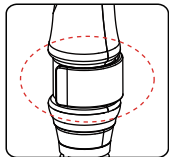


Controle el flujo de agua girando la manija Hydro: gírela a MIN para reducir el flujo y a MAX para aumentarlo.

Configuración de modo					
A	Modo de limpieza	Modo de trabajo continuo	Martillo frío	Modo de trabajo continuo	Una botella seleccionada
B	Modo de infusión	Frecuencia rápida	Martillo caliente	Modo de trabajo intermitente	Botella B seleccionada
C	/	Frecuencia lenta	/	/	/

Botellas A/B para Hydro	
A	B
Exfoliación	Elimina las impurezas y destapa los poros.

6. Especificación técnica

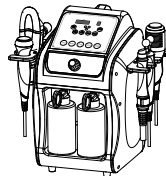	Entrada de fuente de alimentación: CA 110 V-240 V, 50 Hz-60 Hz			
	Potencia: 21W		Potencia de entrada: 21 W	
	Peso bruto: 4,9 kg		Peso neto: 5,7 kg	
	Dimensions: 13.3×11.8×14.9inches			
	Frecuencia: 1MHz			Frecuencia: 24KHz
	Fuerza: 12W			Fuerza: 3W
	Fuerza: Frío: 17W/Caliente: 6W			Frecuencia: 62.5Hz
	FRÍO: 32-39.2°F CALIENTE: 113°F			Fuerza: 2W
	Fuerza: 21W			
	Succión (KPa): 55 KPa			
	Caudal de vacío L/min: 7L/min			
	Fuerza: 11W			

7. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para usar el dispositivo y capacitar al operador.
2. Antes de usar el dispositivo, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y adecuada entre la red eléctrica y el dispositivo.
4. Mantenga el cabezal de tratamiento en contacto directo con la piel para evitar un calor desigual.
5. Asegúrese de que la piel de la zona a tratar esté húmeda; no lo utilice sobre piel seca.
6. No toque la salida de aire durante la sesión de calor y frío para evitar quemaduras.

8. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo use y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpieza de la punta Hydro: Después de usar, enjuague la punta con solución salina, límpiela con un cepillo, séquela al aire y guárdela en un lugar seco.
3. Limpieza del mango Hydro: Llene la botella limpia con agua, ajuste la configuración, active el tratamiento Hydro, cubra la punta con el pulgar y retírela. Repita durante 2 minutos.
4. Limpieza del mango con rociador: Llene el vaso de solución con agua pura y rocíe el agua.
5. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina, y séquelo bien con una toalla seca para asegurar que permanezca seco.
6. Después de limpiar el dispositivo, cúbralo con un paño para polvo o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango nuevamente por razones de higiene.

7. Está estrictamente prohibido desmontar el dispositivo e intentar limpiar su interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

9. Preguntas frecuentes

1. ¿La piel se volverá más fina y sensible después del tratamiento Hydro?

R: No, el tratamiento Hydro se enfoca exclusivamente en los poros obstruidos, mejorando la absorción de nutrientes para una piel más suave, fina y translúcida sin causar sensibilidad.

2. ¿Por qué necesito una exfoliación?

R: El estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, consta de 15 a 20 capas de componentes cutáneos que varían según la zona del cuerpo. El ciclo de renovación de la piel también cambia con la edad: normalmente, 28 días en adolescentes y 10 días más la edad de la persona en adultos. Sin embargo, diversos factores pueden alterar este proceso, provocando la acumulación de tejido en el estrato córneo, lo que produce una tez apagada y un metabolismo cutáneo lento. En estos casos, la exfoliación es esencial para promover una renovación cutánea saludable.

3. ¿Puedo aplicar maquillaje inmediatamente después de usar este dispositivo?

R: Sí, el tratamiento mejora la hidratación y el volumen de la piel, garantizando una aplicación de maquillaje suave y bien difuminada. Este método no invasivo ofrece resultados rápidos, seguros y saludables.

4. ¿Cuándo puedo esperar ver resultados?

Notará una piel más luminosa y luminosa inmediatamente después de la primera sesión. Los múltiples tratamientos mejoran la hidratación, iluminan la tez, reducen las líneas de expresión y ayudan a retrasar el envejecimiento.

10. Solución de problemas

Preguntar	Posible causa y solución
El mango hidráulico no funciona.	<p>1. No hay succión del Hydro Handle. Posibles causas: (1) La bomba de agua no funciona (cuando funciona, el sonido del dispositivo cambia y se observa una ligera vibración del agua en la botella de desechos). (2) La perilla de succión hidráulica de la unidad principal no está bien ajustada. (3) Falta el filtro o sus anillos de goma están dañados. (4) Instalación incorrecta del filtro. (5) Mala conexión entre el mango y la unidad principal. (6) El anillo de goma en el extremo del mango está roto o falta. (7) La botella de desechos no está instalada correctamente.</p> <p>Soluciones: (1) Vuelva a colocar la unidad principal. (2) Gire la perilla de succión hidráulica hacia la posición MÁX. (3) Instale el filtro o reemplace las gomas. (4) Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado. (5) Fije firmemente el tapón del mango a la unidad principal, asegurándose de que no queden huecos. (6) Vuelva a colocar la junta de goma en el extremo del mango. (7) Instale correctamente la botella de desechos.</p>

Preguntar	Posible causa y solución
El mango hidráulico no funciona.	<p>2. No sale agua del mango hidráulico Posibles causas: (1) La botella limpia está vacía. (2) El tubo dentro de la botella no está completamente sumergido en la solución. (3) El flujo de agua Hydro no está correctamente ajustado. (4) La junta de goma de la botella limpia está dañada o falta.</p> <p>Soluciones: (1) Rellene la botella nueva con solución. (2) Asegúrese de que el extremo del tubo esté completamente sumergido en la solución. (3) Gire la perilla del mango Hydro hacia la posición MÁX. (4) Instale o reemplace el anillo de goma en la botella limpia.</p>
El mango rociador no funciona.	<p>1. El aspersor no responde Posibles causas: (1) El interruptor del asa pulverizadora no está activado. (2) La bomba de aire no funciona (el sonido del dispositivo cambia al funcionar). (3) La solución es demasiado espesa para pulverizarla. (4) Mala conexión entre el asa pulverizadora y la unidad principal.</p> <p>Soluciones: (1) Active el interruptor del asa del pulverizador. (2) Reemplace la unidad principal si la bomba no funciona. (3) Diluya la solución a una proporción de suero/solución salina de 1:10. Si el problema persiste, destape la boquilla del pulverizador con una aguja. (4) Fije el tapón del asa a la unidad principal, asegurándose de que no queden huecos.</p>

11. Guía de funcionamiento

Rostro

Preparación: Lavabo, bolsa desechable, desmaquillador, limpiador facial, toallita, suavizante de cutículas, tónico, discos de algodón, mascarilla facial, gel, esencia, loción, crema y FPS.


1. Retire el maquillaje y limpie la piel.



2. Aplicar tónico sobre la piel.



3. Aplique el suavizante de cutículas uniformemente en la frente, la nariz, el mentón y las mejillas.

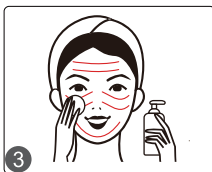

4. Configuración:

4.1 Pulse "FUNC" y seleccione "Hydro".


Tiempo: 3 minutos

Botella: Botella A

Flujo de agua: Moderado

Succión: Ajustar según la resistencia individual.

Materiales auxiliares: Disco de algodón húmedo

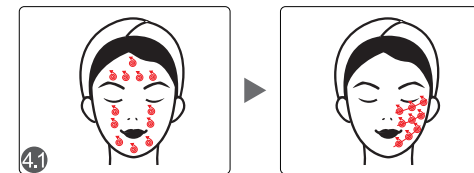

4.2 Pulse "FUNC" y seleccione "Fregador".

Tiempo: 2 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: A

Ingredientes auxiliares: Disco de algodón húmedo



4.3 Pulse "FUNC" y seleccione "Spray".

Tiempo: 10 minutos

Suministros: Suero + Solución Salina (1:10)



4.4 Pulse "FUNCION" y seleccione "Caliente y frío".

Tiempo: 5 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: Frío

Suministros: Esencia



4.5 Pulse "FUNC" y seleccione "Ultrasonido".

Tiempo: 5 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: A

Suministros: Gel



4.6 Pulse "FUNC" y seleccione "BIO".

Tiempo: 5 minutos

Nivel de energía: 3

Modo: A

Suministros: Esencia



5. Aplicar una mascarilla facial durante 15 minutos.



6. Retire la mascarilla y continúe con su rutina diaria de cuidado de la piel después de la limpieza.



12. Garantía y soporte

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Nombre del producto: Dispositivo HydraClean

Producto Modelo: SR-AF1323

Fecha de producción: _____

Inspección de calidad: _____

